



INNER POWER. BETTER LIFE.

SOMMAIRE


- Démarrer l'application **p 3**
- Créer une fiche client **p 4**
- Réaliser une évaluation et créer un programme de soins corps **p 9**
- Réaliser une évaluation et créer un programme de soins visage **p 19**
- Réaliser un bilan photos **p 36**
- Comparer des bilans photos **p 40**
- Envoyer un programme de soins à sa/son client(e) **p 43**
- Lancement d'un programme de soins sur votre CELLU M6 ALLIANCE® **p 46**
- Séances Libres **p 51**
- Sauvegarde **p 53**
- Mises à jour **p 56**
- Importation des données de votre ancienne tablette LPG® SCAN **p 60**
- Exportation des données **P 62**



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

DÉMARRER L'APPLICATION

Cliquez sur l'icône **endermoscan™** présent sur l'écran de votre tablette pour lancer l'application.

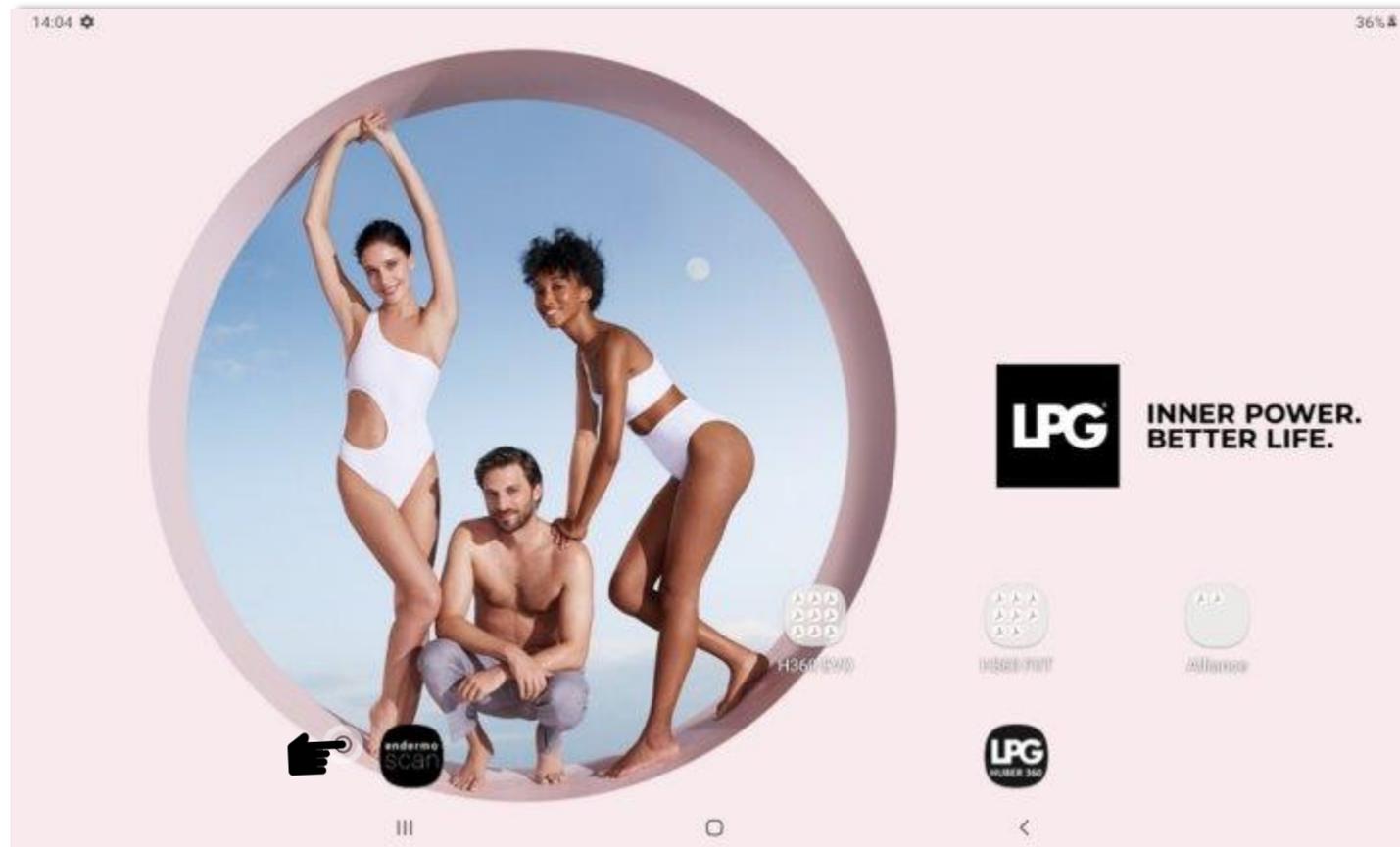




CRÉER UNE FICHE CLIENT



INNER POWER.
BETTER LIFE.

CRÉER UNE FICHE CLIENT

Une fois l'application lancée, cliquez sur **NOUVEAU CLIENT** sur l'écran d'accueil.

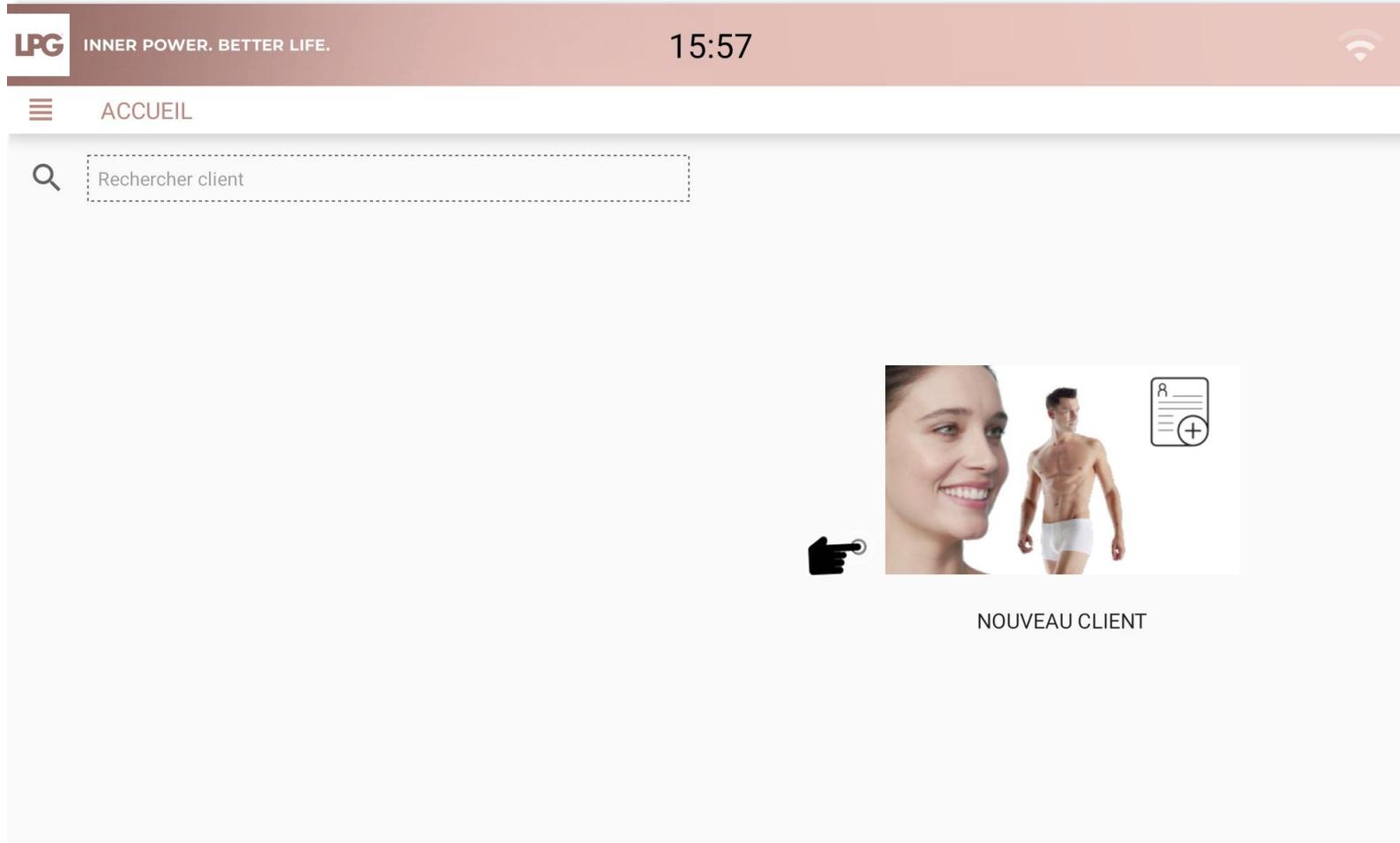

INNER POWER.
BETTER LIFE.

CRÉER UNE FICHE CLIENT

Une fois que vous avez parcouru les contre-indications avec votre client(e), cochez la case « **Les contre-indications aux soins endermologie® ont été abordées lors de l'évaluation** » pour démarrer le renseignement de la fiche.

LPG INNER POWER. BETTER LIFE. 15:58

ACCUEIL > CRÉATION DE COMPTE > CONTRE INDICATIONS

INFORMATIONS SUR LES SOINS ENDERMOLOGIE®

Contre-indications générales strictes : <ul style="list-style-type: none">- Cancer en cours d'évolution (sauf avis médical écrit)- Traitement anticoagulant- Maladie du sang- Maladie en période de poussée inflammatoire- Infections, éruptions cutanées	Contre-indications locales : <ul style="list-style-type: none">- Couperose- Varicosités et varices- Chirurgie des veines (pendant 2 mois)- Zones opérées en chirurgie esthétique (pendant 6 mois)- Plaie et lésion cutanée- Cicatrice récente, hypertrophique ou chéloïde- Hernies abdominales ou inguinales- Lipome- Grains de beauté en relief- Injections de produit de comblement (pendant 2 semaines)- Injections de Botox® (pendant 2 semaines)- Piercing- Angiome- Implants sous cutanés- Fils d'or et fils crantés- Lésion ostéo-articulaire ou musculaire au stade aigu
Contre-indications endermologie® corps : <ul style="list-style-type: none">- Grossesse (hormis traitement des membres inférieurs)- Phlébite- Greffe d'organe- Insuffisance rénale	
Contre-indications endermologie® visage : <ul style="list-style-type: none">- Vitiligo- Acné inflammatoire et infectieux- Herpès	

En cas de doute, demander un avis médical écrit.

Les contre-indications aux soins endermologie® ont été abordées lors de l'évaluation.


CRÉER UNE FICHE CLIENT

Complétez les informations relatives à votre client(e). Vous avez la possibilité d'ajouter une photo. L'IMC se calcule automatiquement après avoir renseigné la taille et le poids.

The screenshot shows the LPG mobile application interface for creating a client profile. The top status bar displays the LPG logo, the slogan "INNER POWER. BETTER LIFE.", the time "15:58", and a Wi-Fi signal icon. Below the status bar, a navigation bar shows a hamburger menu icon and the breadcrumb "ACCUEIL > CRÉATION DE COMPTE > INFORMATIONS PERSONNELLES". The main content area is a form with the following fields: a gender selection with radio buttons for "Femme" (selected) and "Homme"; "Nom *" and "Prénom *" text input fields; a "Date de naissance *" text input field; "Adresse", "Ville", and "Code postal" text input fields; "Téléphone" and "Email" text input fields; "Taille (en cm)" and "Poids (en kg)" text input fields; a "suivi médical" text input field; and an "interventions chirurgicales" text input field. A large grey button at the bottom of the form is labeled "CRÉER CETTE FICHE CLIENT". A back arrow is visible on the left side of the form area. A placeholder for a profile picture is shown on the right side of the form.

CRÉER UNE FICHE CLIENT

- Pour consulter ou modifier une fiche client, cliquez sur le nom de votre client(e) puis cliquez sur 
- Pour rechercher un client dans la base existante, il vous suffit de rentrer son nom dans **RECHERCHER CLIENT**.
- Pour archiver une fiche client, il vous suffit de cliquer sur 

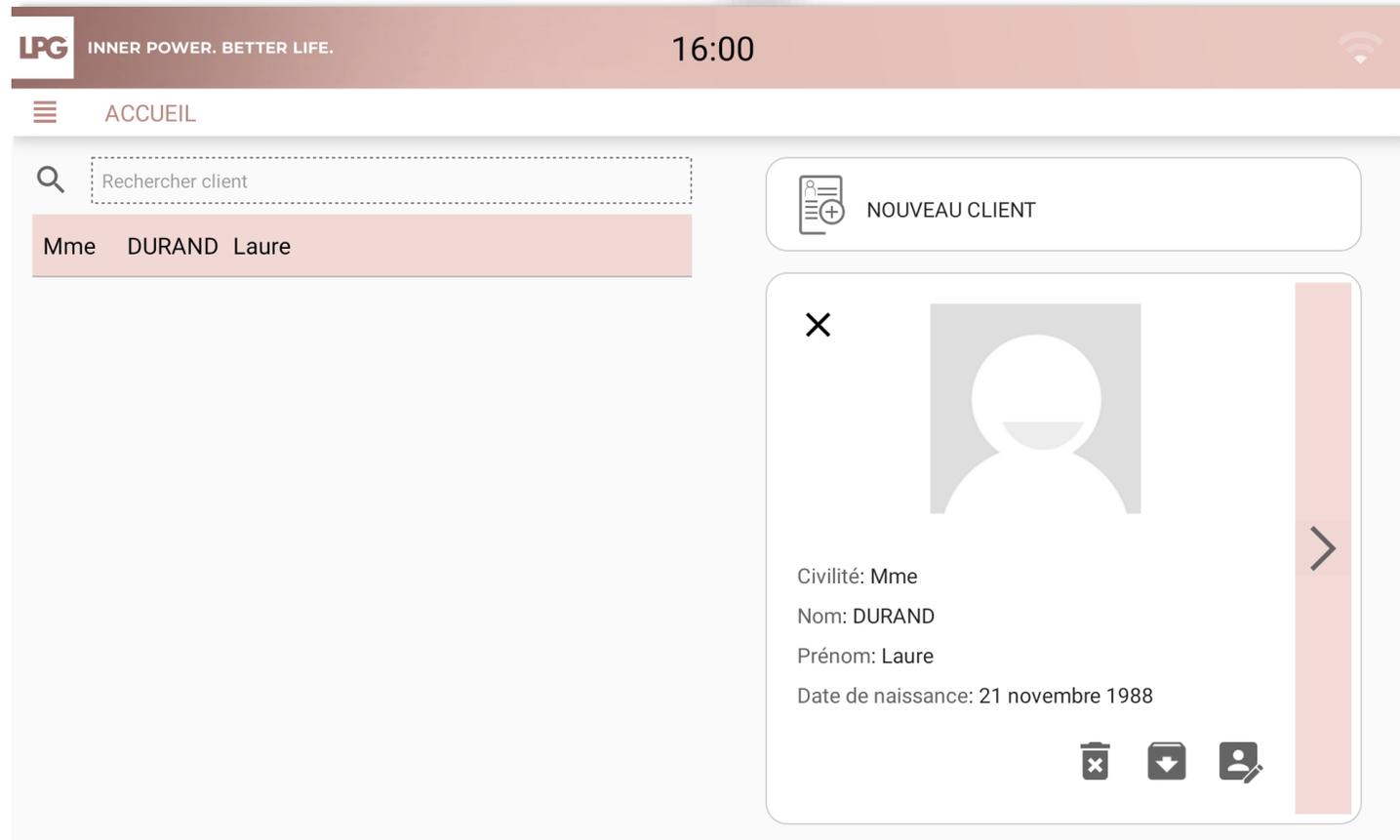




RÉALISER UNE ÉVALUATION ET CRÉER UN PROGRAMME DE SOINS CORPS



INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS

Une fois la fiche client créée, choisissez de réaliser une **évaluation corps** en cliquant sur la zone concernée.

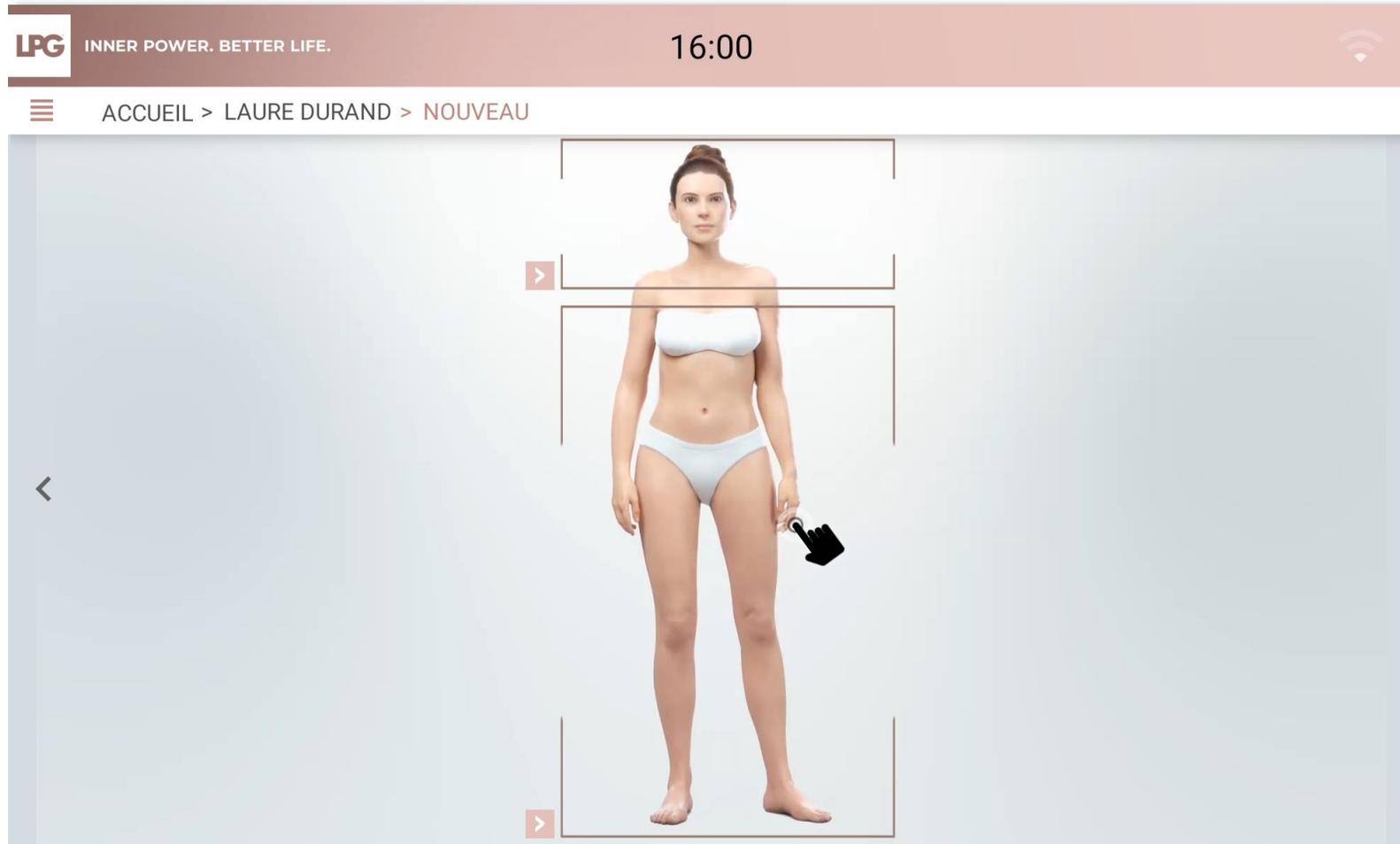

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS

Il est important de sensibiliser votre client(e) sur les différents leviers de réussite d'un programme endermologie®.

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a header with the LPG logo and the tagline 'INNER POWER. BETTER LIFE.' on the left, the time '16:00' in the center, and a Wi-Fi signal icon on the right. Below the header is a navigation bar with a hamburger menu icon on the left and the text 'ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU'. The main content area is a slide titled 'LE TRIO GAGNANT'. The slide text reads: 'Les résultats dépendront de sa capacité à combiner les soins endermologie® à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière.' Below this, there are two sections: 'UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE' and 'UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE', each with a list of bullet points. The slide is flanked by left and right navigation arrows.

LPG INNER POWER. BETTER LIFE. 16:00

ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU

LE TRIO GAGNANT

Les résultats dépendront de sa capacité à combiner les soins endermologie® à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière.

UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

- 5 fruits et légumes par jour, protéines, féculents et produits variés à chaque repas, limitation des aliments gras, salés, sucrés.
- Il est recommandé de boire régulièrement pour maintenir une bonne hydratation du corps (idéalement en dehors des repas).

UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE

- L'équivalent d'au moins 30 minutes de marche par jour est recommandé.
- Pour des résultats sur le déstockage, il est conseillé de pratiquer une activité physique après la séance endermologie® corps.

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS

Il est important de sensibiliser votre client(e) sur les différents leviers de réussite d'un programme endermologie®.
(A savoir : Les résultats d'un programme peuvent varier en fonction de la stabilité hormonale)


The screenshot shows a mobile application interface for a body evaluation form. At the top, there is a header bar with the LPG logo and the tagline "INNER POWER. BETTER LIFE." on the left, the time "16:01" in the center, and a Wi-Fi signal icon on the right. Below the header, a navigation bar shows a hamburger menu icon followed by the text "ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU". The main content area is titled "ÉVÉNEMENTS FÉMININS" and contains three sections: "GROSSESSE" with radio buttons for "aucune", "1", "2", "3", and "+ de 3"; "CONTRACEPTION" with radio buttons for "non" and "oui"; and "MENOPAUSE" with radio buttons for "non" and "oui". Below these sections is a "COMMENTAIRES" section. Navigation arrows are visible on the left and right sides of the form area.



INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS


- Renseignez le ou les objectif(s) de votre client(e)
- Sélectionnez le type de soin souhaité selon les objectifs de votre client(e) :
 - MINCEUR (*Soins endermologie® ID*)
 - BIEN-ÊTRE : Vitalité-Stress-Sommeil, Detox, Relaxation ou Endermopuncture (*Les soins bien-être ne nécessitent pas une évaluation*)

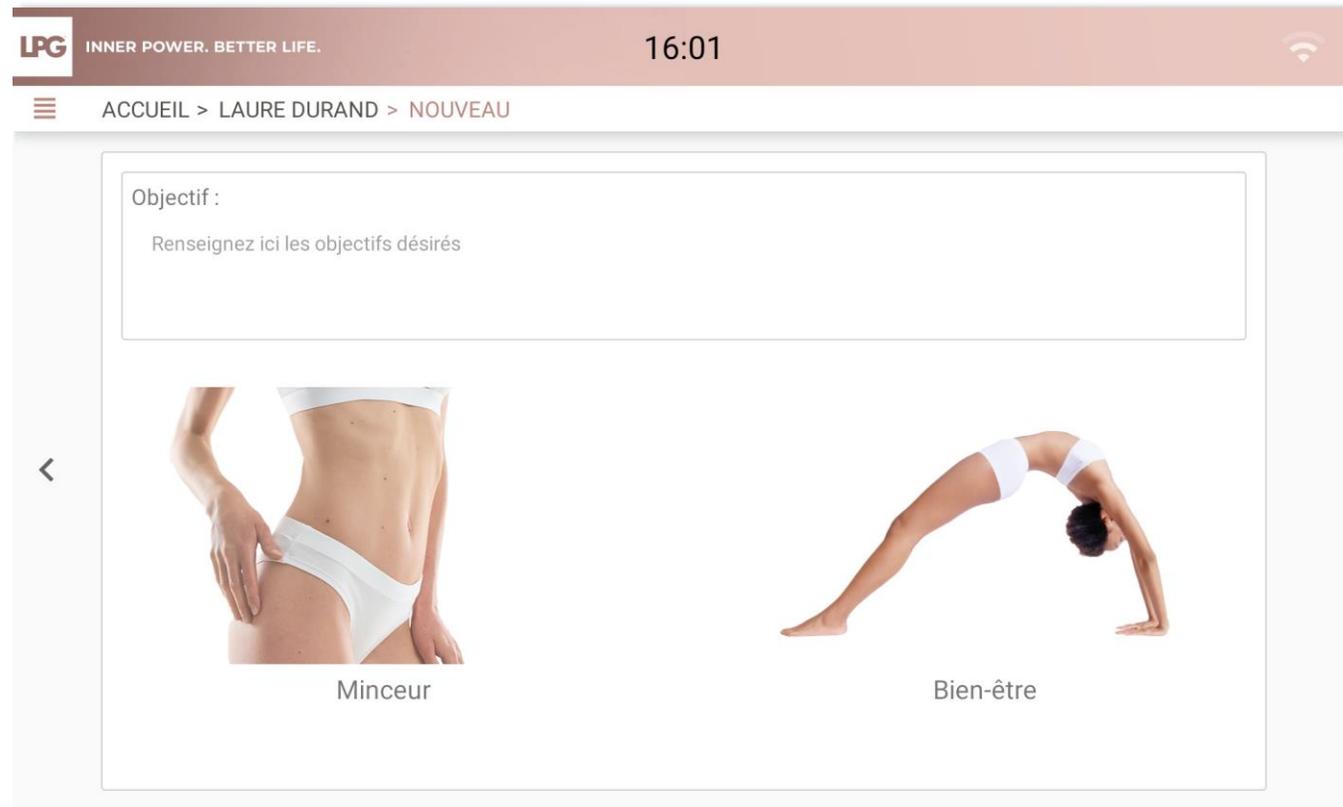

The screenshot shows the LPG mobile application interface. At the top, there is a header with the LPG logo, the slogan "INNER POWER. BETTER LIFE.", the time "16:01", and a Wi-Fi icon. Below the header, a navigation bar shows "ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU". The main content area features a text input field labeled "Objectif :" with the placeholder text "Renseignez ici les objectifs désirés". Below this field, there are two selectable options: "Minceur" (represented by an image of a woman's waist) and "Bien-être" (represented by an image of a woman performing a backbend yoga pose).

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS

- Réalisez 4 photos (face, profil droit, profil gauche, dos). Tenez votre tablette en format portrait. La photo ne doit être prise que lorsque les capteurs sont verts. Aidez-vous des repères intégrés pour bien positionner votre client(e). A chaque prise, cliquez sur **ENREGISTRER** ou **ANNULER** si vous souhaitez prendre une nouvelle photo.
- Si vous souhaitez prendre d'autres photos, cliquez sur **AJOUTER PHOTO COMPLÉMENTAIRE** et nommez-la.

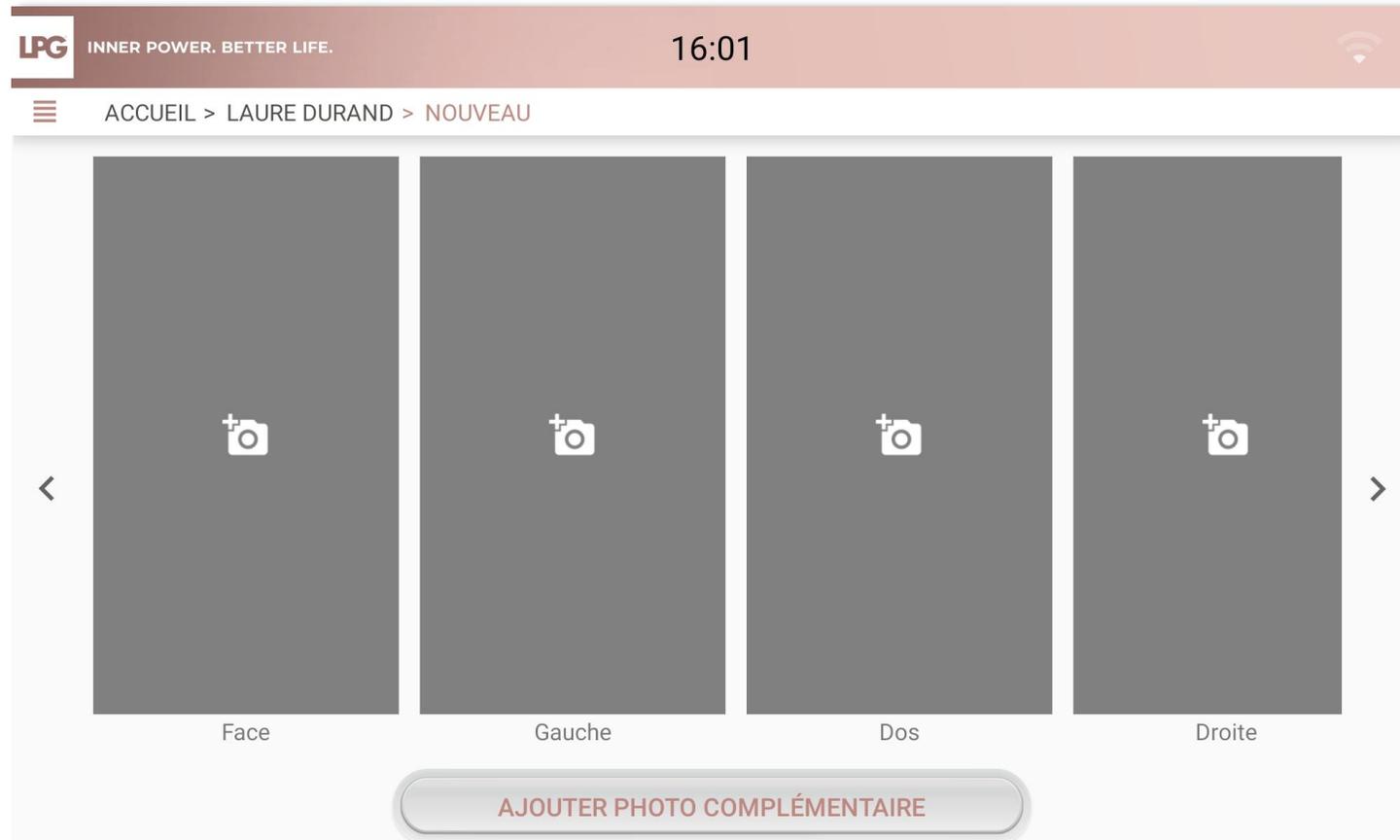

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS

Questionnaire rétention d'eau

A remplir si votre cliente est concernée par cette problématique pour déterminer le programme de soins le plus adapté à ses besoins.

LPG INNER POWER. BETTER LIFE. 16:02

ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU

Questionnaire rétention d'eau

1 - Votre cellulite est présente :

- de façon diffuse
- sur une seule région

2 - Votre poids peut-il varier de 1kg à 3kg en moins de 48h ?

- oui
- non

3 - Comment ressentez-vous vos jambes ?

- lourdes et douloureuses uniquement en fin de journée
- gonflées dès le matin et cela s'accroît en fin de journée
- gonflées uniquement en période prémenstruelle
- pas de problème au niveau des jambes

4 - Décrivez vos chevilles :


- elles sont gonflées après une station assise prolongée (voyage en avion par exemple)
- elles sont tout le temps gonflées avec œdème autour des malléoles
- rien de particulier au niveau de mes chevilles

5 - Avez-vous en ce moment ?

- les pieds et les mains gonflées ?
- les jambes en forme de poteau ?
- constaté une prise de volume variable d'une semaine à l'autre ?
- un traitement médical à base de cortisone ?

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS

- Sélectionner les zones que vous souhaitez cibler en cliquant dessus.
- Sélectionner ensuite le type de tissu (souple, dense, fibreux) correspondant à chaque zone sélectionnée.
- Ajustez le temps correspondant à chaque zone.

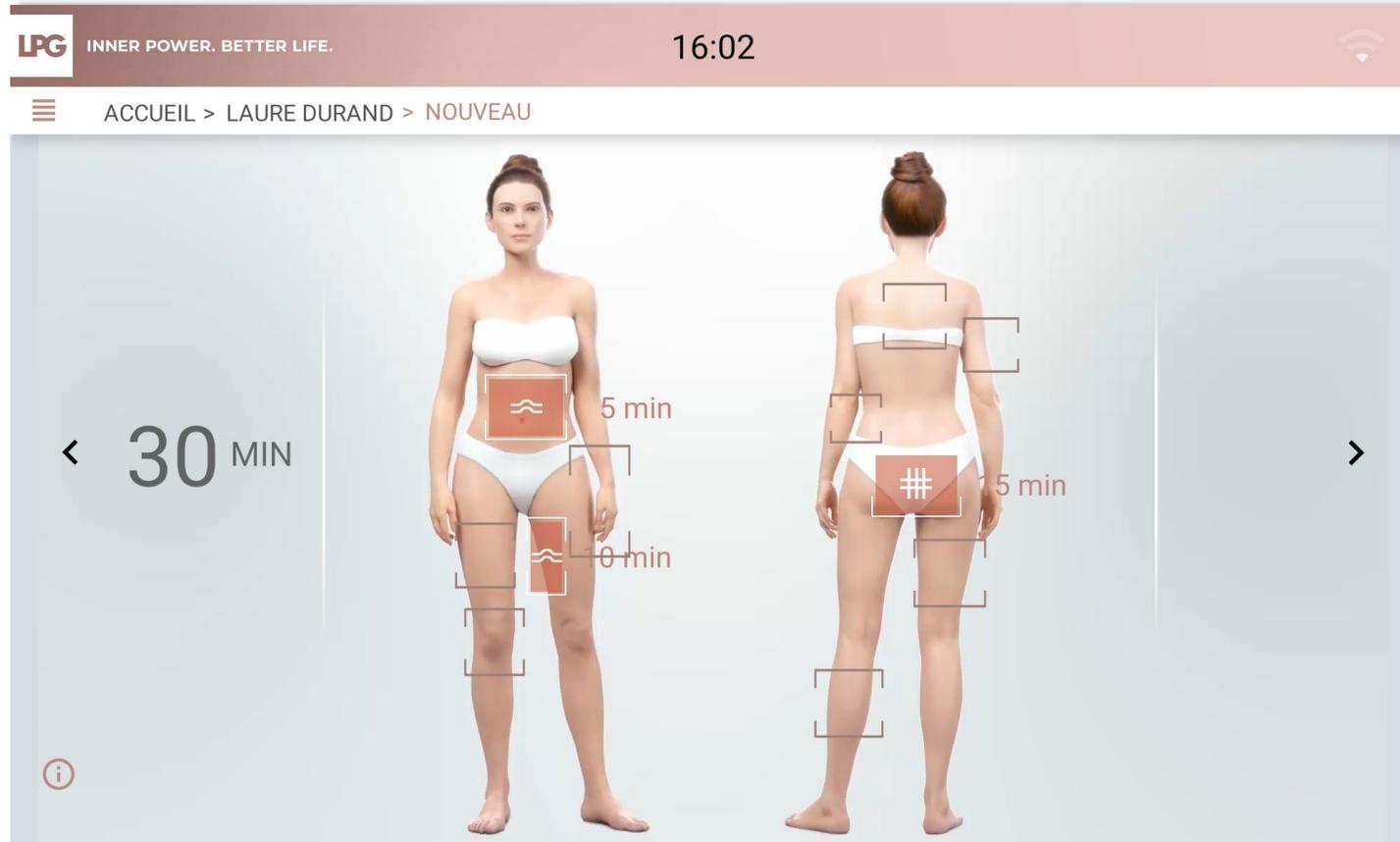

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS

Protocoles endermologie® recommandés

Les soins endermologie ID précédemment sélectionnés sont automatiquement cochés.

Selon les objectifs de votre client(e), vous avez la possibilité d'ajouter un soin bien-être parmi la liste proposée.

Protocoles endermologie® recommandés

Soin(s) endermologie® ID

- Ventre
- Fesses
- Intérieur cuisses

Soin(s) spécifique(s)

- Jeune maman


Soin(s) bien-être

- Relaxation
- Detox
- Endermopuncture
- Vitalité - Stress - Sommeil (V2S)

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS

Evaluation finale et recommandation de protocoles et cosmétiques

- Renseignez le nombre de séances recommandées.
- Pour valider l'évaluation et la création du programme, cliquez sur **VALIDER**.
- Le programme de votre client(e) est ensuite enregistré sous le bandeau ci-dessous.

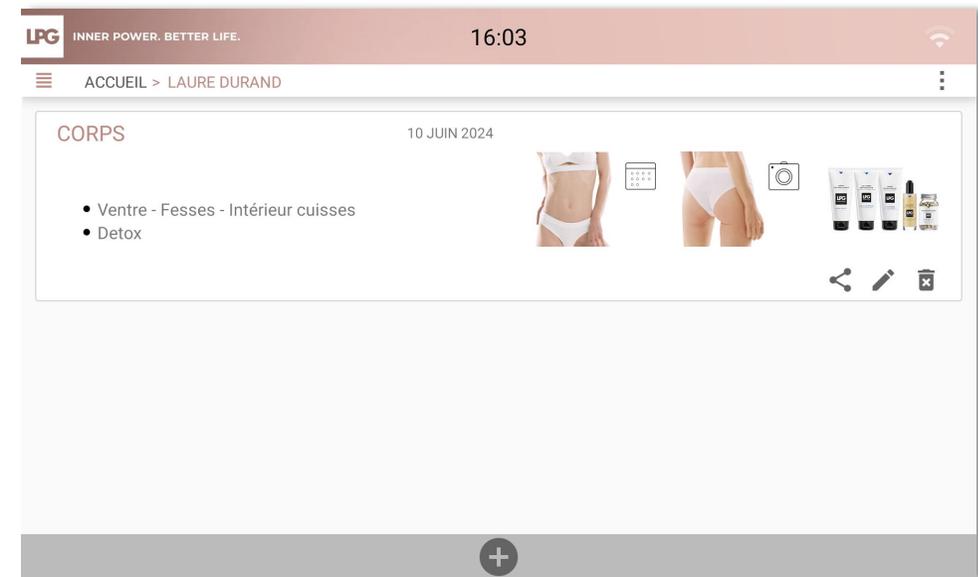

INNER POWER.
BETTER LIFE.




RÉALISER UNE
ÉVALUATION ET
CRÉER UN PROGRAMME
DE SOINS VISAGE



INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE


Pour réaliser une nouvelle évaluation, cliquez sur  en bas de l'écran.

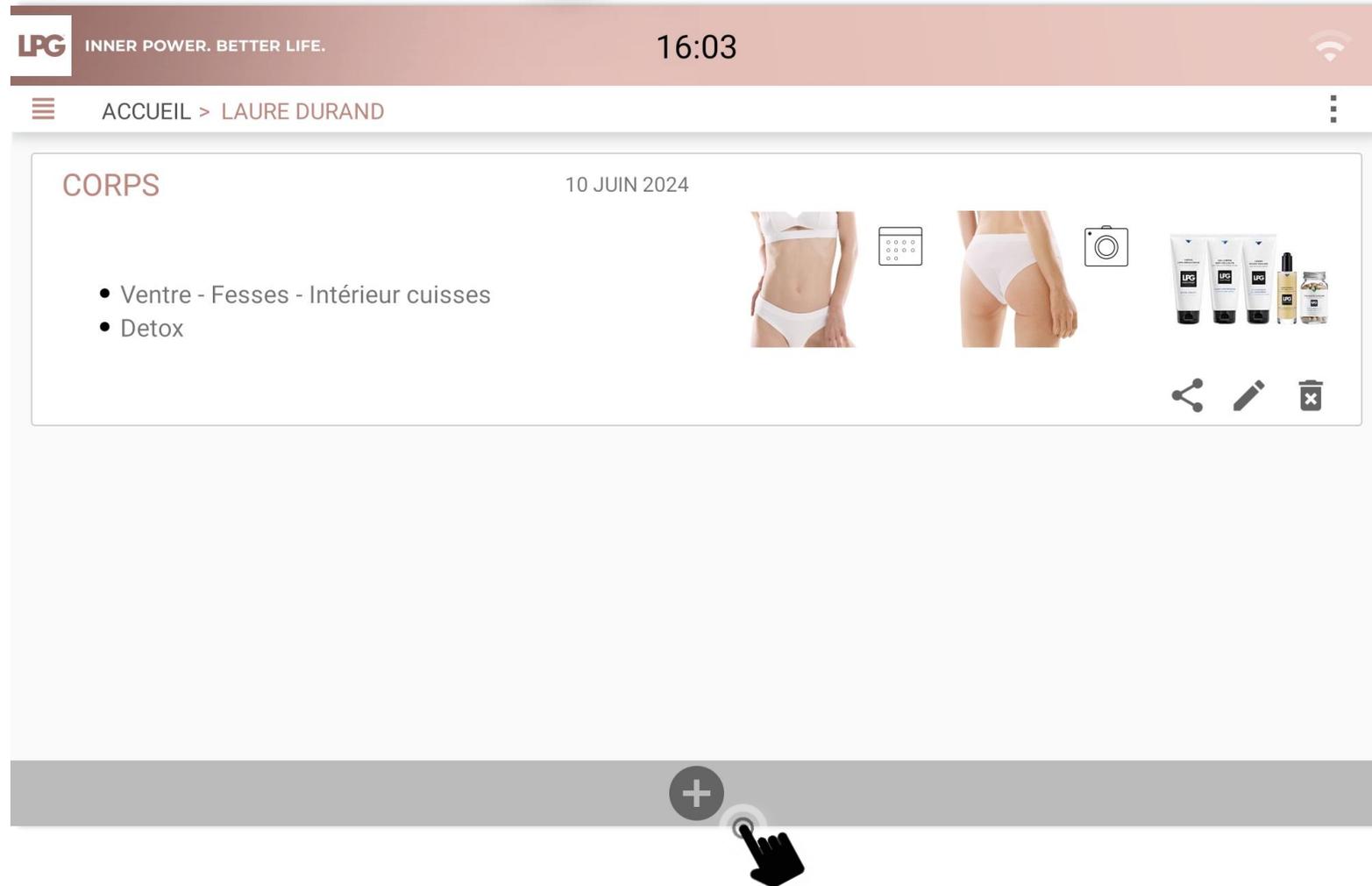

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Pour réaliser une **évaluation visage**, cliquez sur le visage de l'avatar.

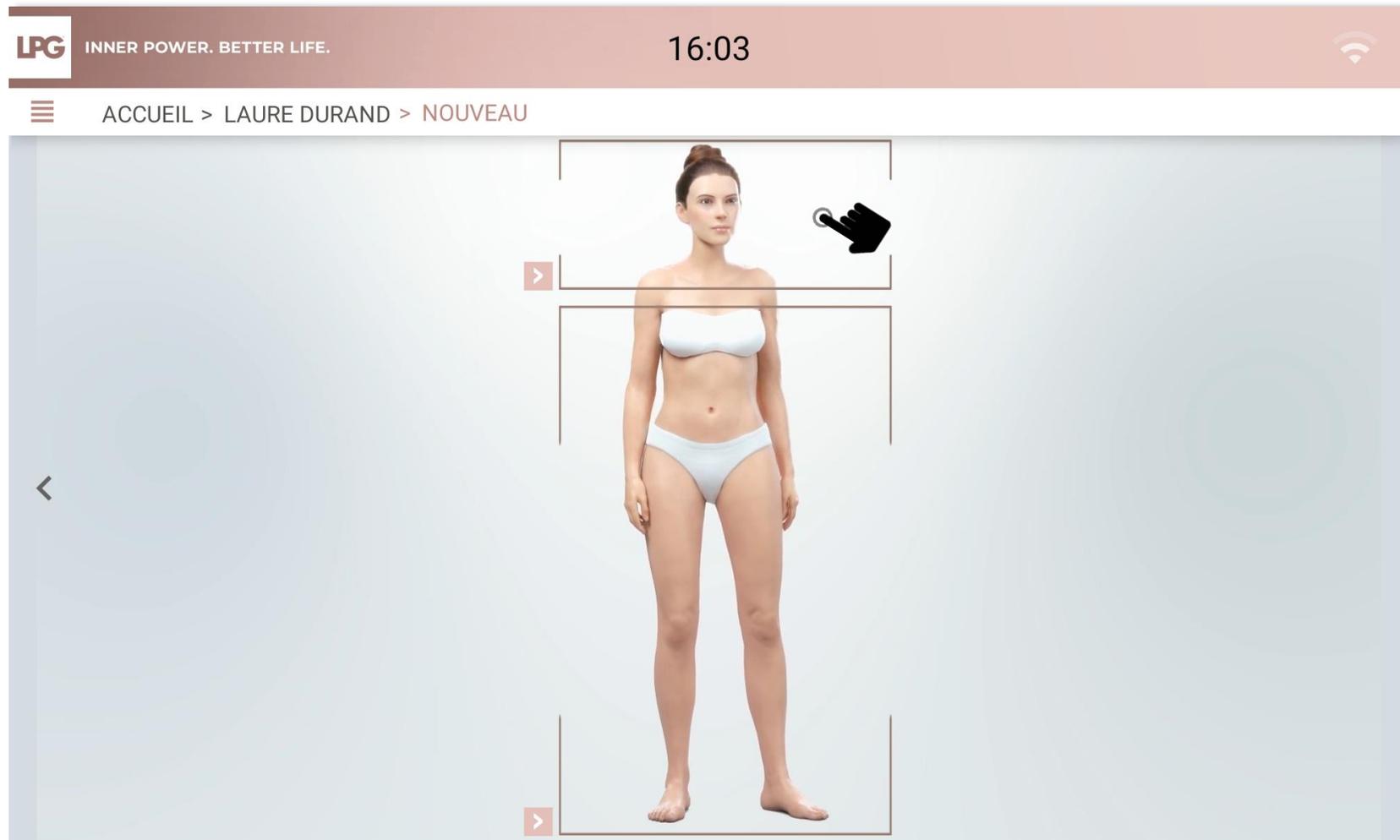

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Renseignez le ou les objectif(s) de votre client(e).




The screenshot shows a mobile application interface with a dark red header. On the left is the LPG logo and the text "INNER POWER. BETTER LIFE.". On the right is the time "16:03" and a Wi-Fi icon. Below the header is a navigation bar with a hamburger menu icon and the text "ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU". The main content area is a large white box with a thin border. At the top left of this box is the label "Objectif :". Below it is a large, empty text input field with the placeholder text "Renseignez ici les objectifs désirés". On the left and right sides of the bottom of this box are navigation arrows: a left-pointing chevron on the left and a right-pointing chevron on the right.



INNER POWER.
BETTER LIFE.


RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

- Réalisez trois photos (profil droit, face, profil gauche). Tenez votre tablette en format portrait. La photo ne doit être prise que lorsque les capteurs sont verts. Aidez-vous des repères intégrés pour bien positionner votre client(e). A chaque prise, cliquez sur **ENREGISTRER** ou **ANNULER** si vous souhaitez prendre une nouvelle photo.
- Si vous souhaitez prendre d'autres photos, cliquez sur **AJOUTER PHOTO COMPLÉMENTAIRE** et nommez-la.

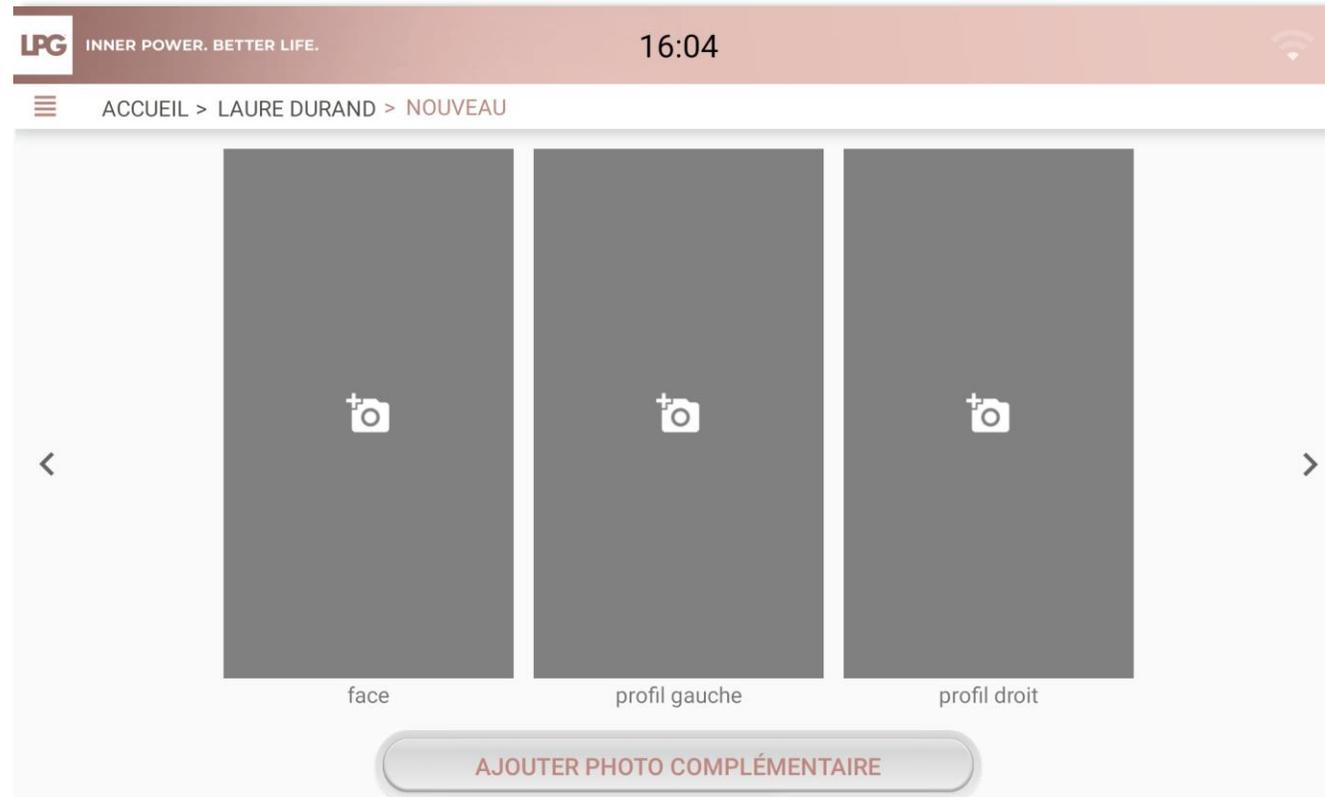

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Sélectionnez le type de vieillissement cutané correspondant.

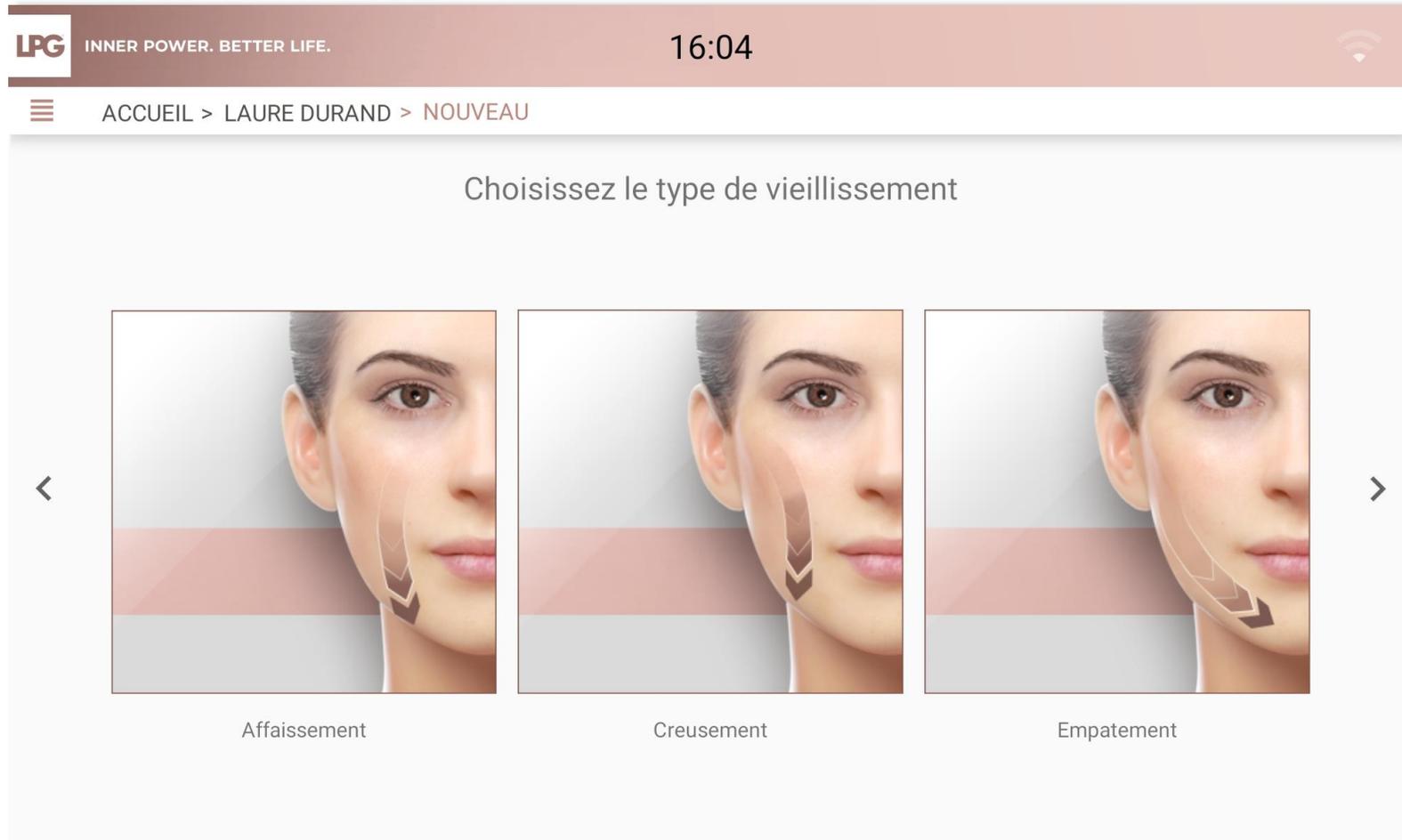

The screenshot shows a mobile application interface for skin aging evaluation. At the top, there is a header with the LPG logo and the tagline "INNER POWER. BETTER LIFE." on the left, the time "16:04" in the center, and a Wi-Fi icon on the right. Below the header is a navigation bar with a menu icon and the text "ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU". The main content area is titled "Choisissez le type de vieillissement" and features three side-by-side images of a woman's face, each illustrating a different type of skin aging: "Affaissement" (sagging), "Creusement" (wrinkling), and "Empatement" (swelling). Each image has a red horizontal bar at the bottom and a dark arrow pointing downwards on the right side of the face. Navigation arrows are visible on the left and right sides of the image row.

LPG INNER POWER. BETTER LIFE. 16:04

ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU

Choisissez le type de vieillissement

< >

Affaissement Creusement Empatement




INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Sélectionnez les zones à traiter en priorité.


Pour chaque zone sélectionnée, veuillez choisir une problématique principale.

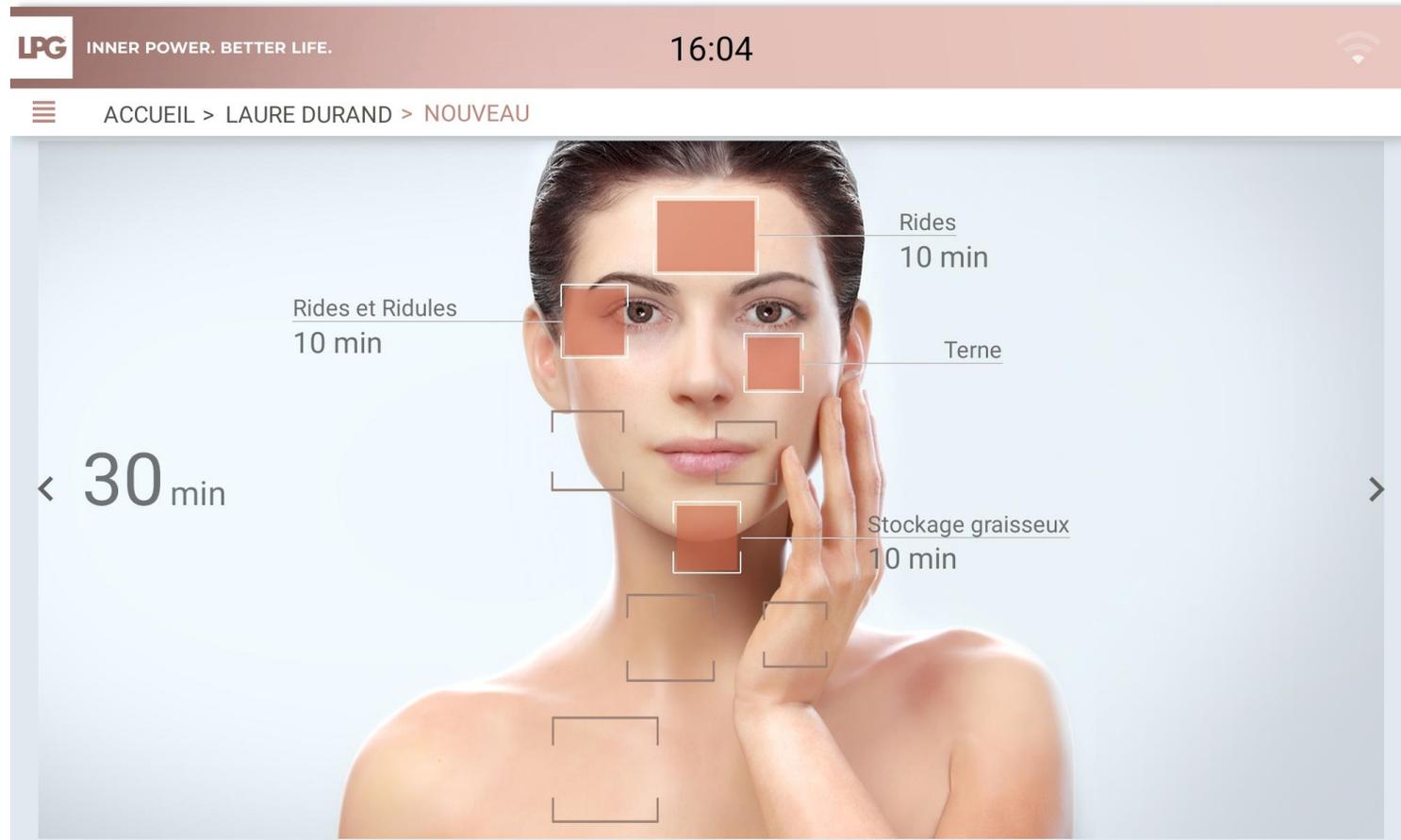

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE


Déplacez le curseur pour sélectionner le grade correspondant.

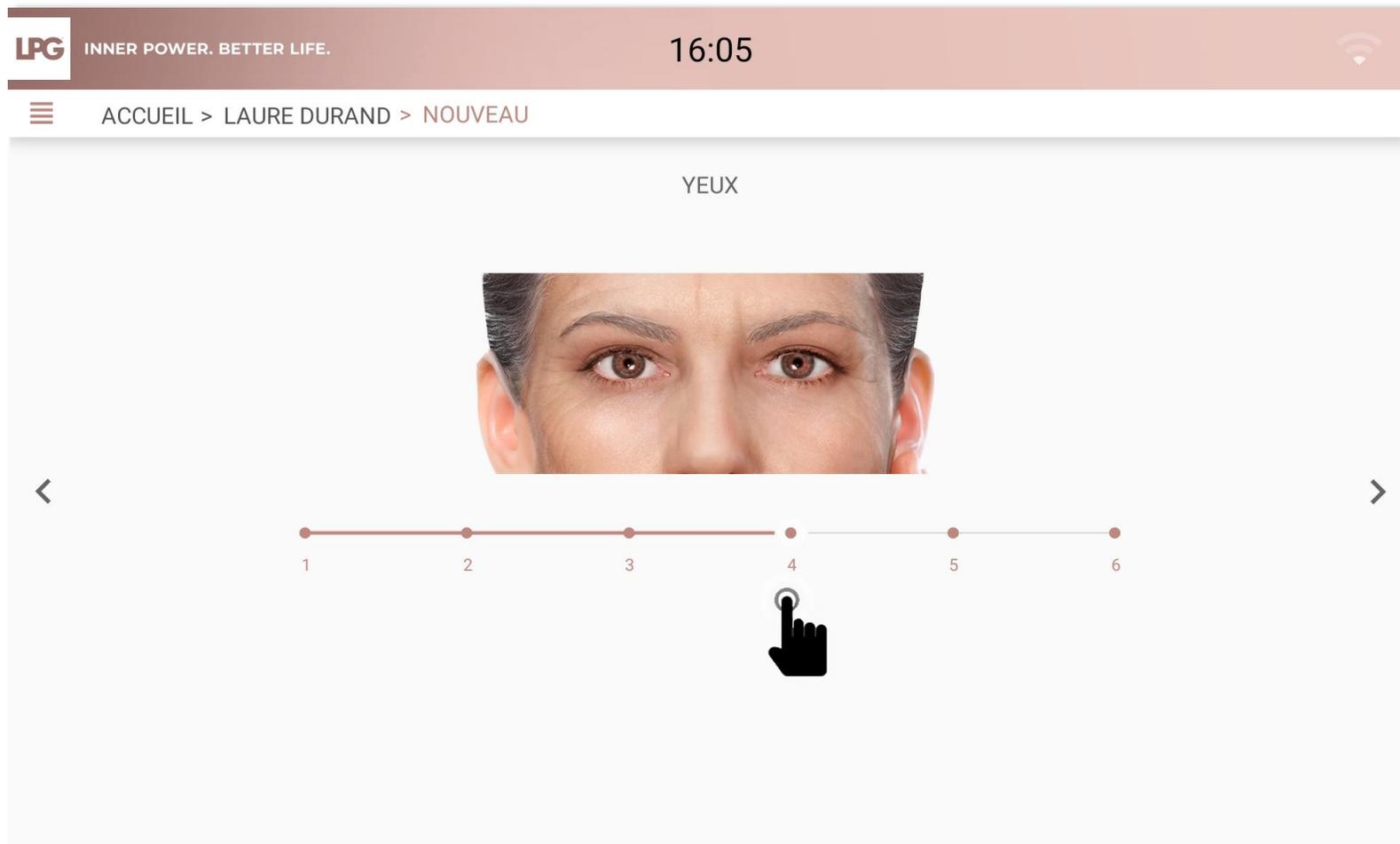

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE


Déplacez le curseur pour sélectionner le grade correspondant.

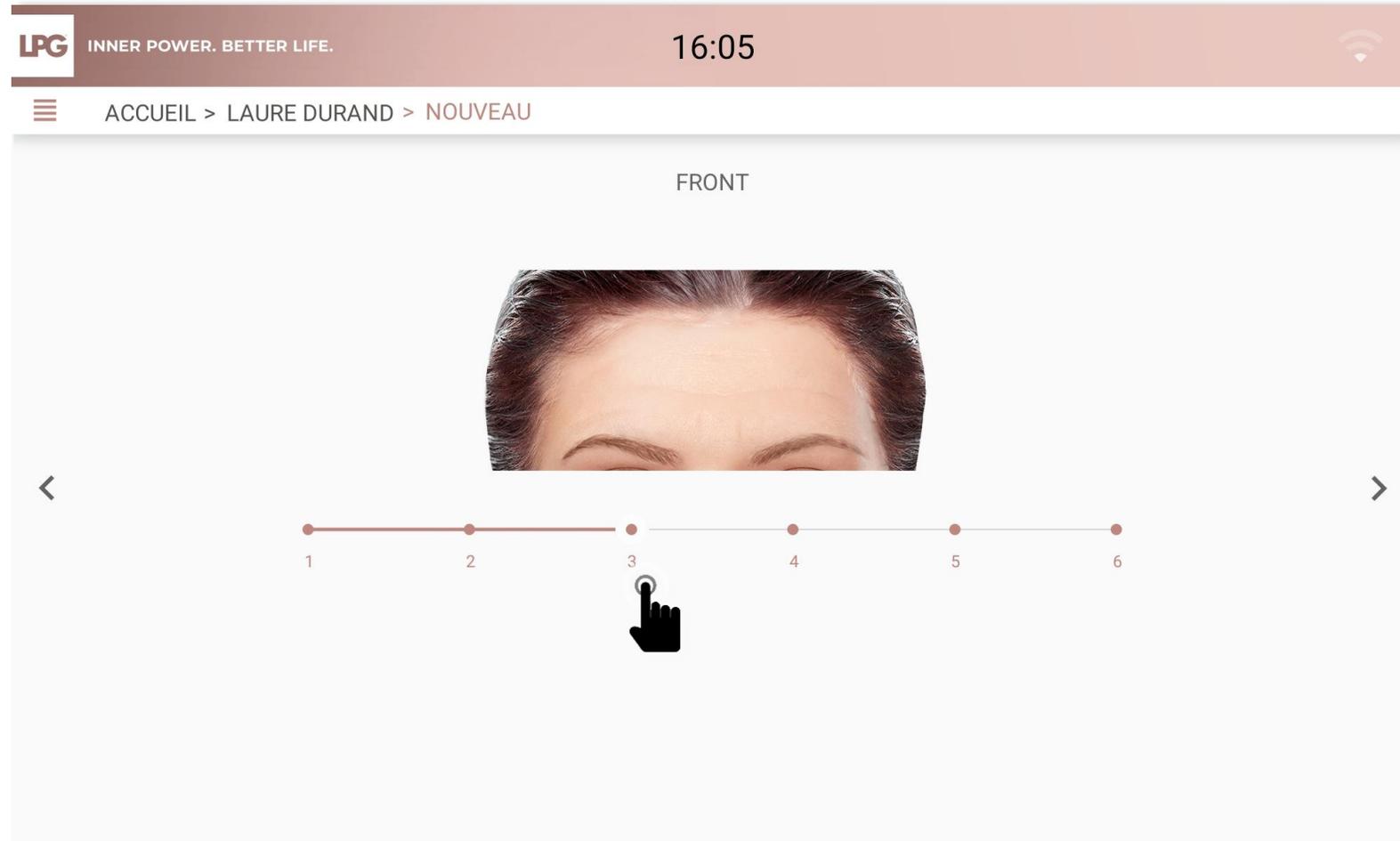

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Déplacez le curseur pour sélectionner le grade correspondant.

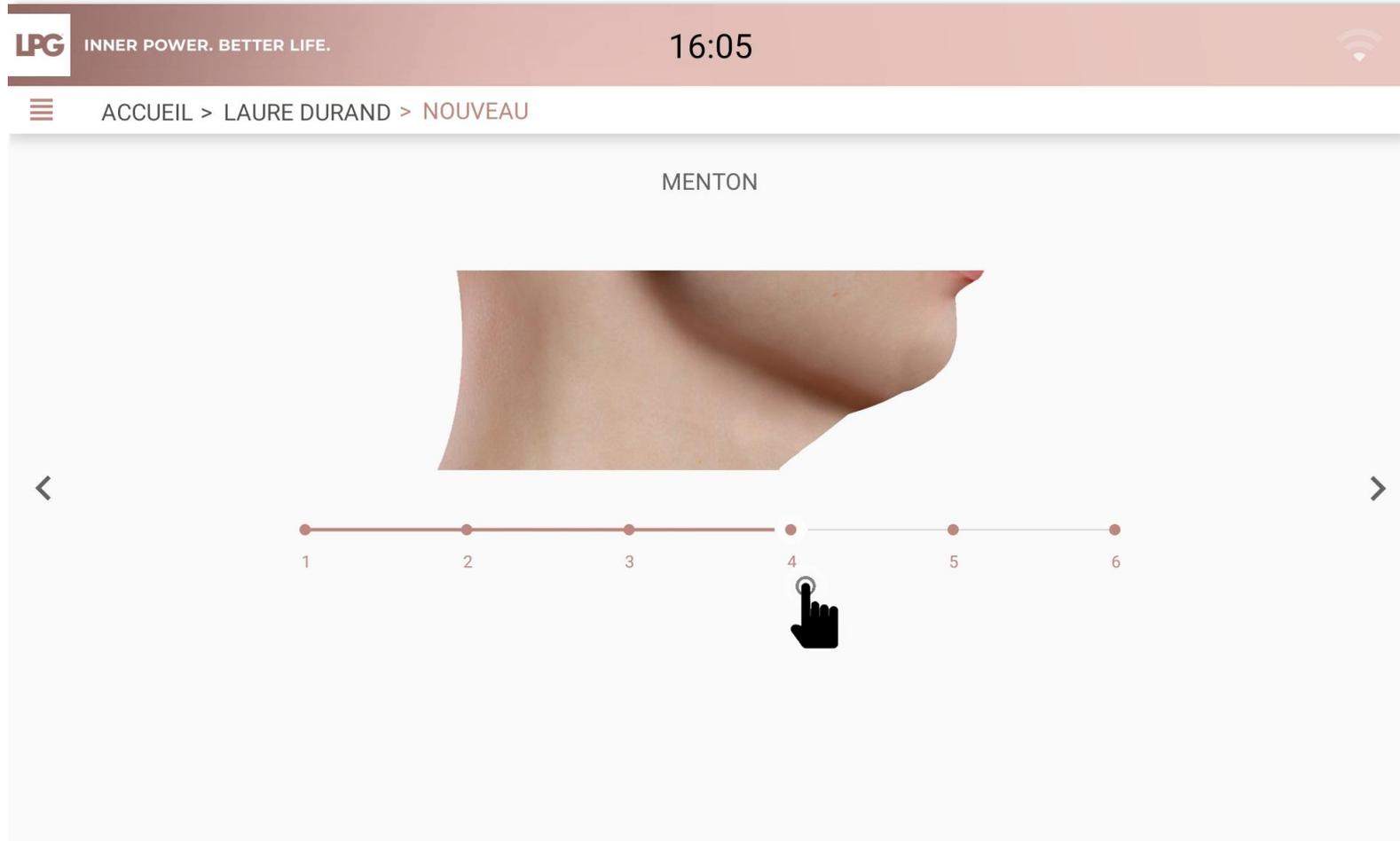

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Sélectionnez le(s) protocole(s) le(s) plus adapté(s) selon les objectifs de votre client(e).

LPG INNER POWER. BETTER LIFE. 16:06

ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU

Soin(s) zone

- Regard Anti-rides
- Zone Frontale
- Double-menton

Soin(s) classique

- Anti-âge Repulpant
- Anti-âge Fermeté
- Éclat
- Anti-âge Affinant

Soin(s) signature

- Sublime Regard & Lèvres
- Hydratation Booster
- Rénovateur Anti-âge

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Evaluation finale et recommandation de protocoles, cosmétiques et endermonutri.

- Renseignez le nombre de séances recommandées.
- Cliquez ensuite sur **VALIDER**.

The screenshot shows the LPG mobile application interface. At the top, the LPG logo and tagline 'INNER POWER. BETTER LIFE.' are displayed, along with the time '16:07'. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads 'ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU'. The main content area is split into two columns: 'MON PROGRAMME' and 'MA ROUTINE BEAUTÉ'. The 'MON PROGRAMME' section lists three treatment types with their durations and session counts:

Soin(s) zone	Regard Anti-rides	Zone Frontale	Double-menton
10 min	10 min	10 min	10 min

Number of sessions: 6 (with minus and plus buttons)

Soin(s) classique	Éclat
15 min	15 min

Number of sessions: 8 (with minus and plus buttons)

Soin(s) signature	Rénovateur Anti-âge
50 min	50 min

The 'MA ROUTINE BEAUTÉ' section lists several skincare products, each with an information icon (i):

- Eau Micellaire Préparatrice
- Crème Yeux
- Crème Lissante Repulpante
- Gel-Crème Lissant Repulpant
- Soin fermeté affinant
- Sérum Huile-en-eau Réhydratant
- Masque Collagène Post-traitement Visage et Cou
- Baume Yeux

A 'VALIDER' button is located at the bottom center of the screen, with a hand icon pointing to it.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Le programme de votre client(e) est ensuite enregistré sous le bandeau suivant :

The screenshot shows a mobile application interface for LPG skincare. At the top, there is a header with the LPG logo and the slogan "INNER POWER. BETTER LIFE." on the left, the time "16:07" in the center, and a Wi-Fi signal icon on the right. Below the header, a navigation bar shows "ACCUEIL > LAURE DURAND" with a menu icon on the left and a vertical ellipsis on the right. The main content is divided into two sections: "VISAGE" and "CORPS", both dated "10 JUIN 2024".

VISAGE (10 JUIN 2024)

- Regard Anti-rides - Zone Frontale - Double-menton
- Éclat
- Rénovateur Anti-âge

The "VISAGE" section includes two photos of a woman's face (frontal and profile), a calendar icon, a camera icon, and a collection of LPG skincare products. Below the photos are icons for sharing, editing, and deleting.

CORPS (10 JUIN 2024)

- Ventre - Fesses - Intérieur cuisses
- Detox

The "CORPS" section includes two photos of a woman's body (front and back), a calendar icon, a camera icon, and a collection of LPG body care products. Below the photos are icons for sharing, editing, and deleting.

At the bottom of the application, there is a large grey button with a white plus sign (+).

VISUALISATION DES PROGRAMMES DE VOTRE CLIENT(E)

BILAN PHOTOS

Cette rubrique vous permet de réaliser des bilans photos au cours du programme de votre client(e), de consulter les bilans photos réalisés, de comparer les bilans photos.

MES COSMÉTIQUES

Cette rubrique vous permet de visualiser les cosmétiques associés aux programmes de soins de votre client(e).

MES SÉANCES

Cette rubrique vous permet de visualiser les séances endermologie® corps ou visage réalisées (protocole effectué, date). Vous pouvez ainsi suivre précisément le programme de soins de votre client(e).

The screenshot displays the LPG mobile application interface for a client named Laure Durand. At the top, the LPG logo and tagline 'INNER POWER. BETTER LIFE.' are visible, along with the time 16:07. Below the header, the navigation bar shows 'ACCUEIL > LAURE DURAND'. The main content area is divided into two sections: 'VISAGE' and 'CORPS', both dated '10 JUIN 2024'. The 'VISAGE' section lists treatments: 'Regard Anti-rides - Zone Frontale - Double-menton', 'Éclat', and 'Rénovateur Anti-âge'. It includes two photos of the client's face (front and profile), a calendar icon, a camera icon, and a product image of skincare items. The 'CORPS' section lists treatments: 'Ventre - Fesses - Intérieur cuisses' and 'Detox'. It includes two photos of the client's body (front and side), a calendar icon, a camera icon, and a product image of body care items. At the bottom of the screen, there is a grey bar with a white plus sign icon, indicating the option to create a new program.

MES ENDERMONUTRI

Cette rubrique vous permet de visualiser les compléments alimentaires associés aux programmes de soins de votre client(e).

**DATE DE
L'ÉVALUATION
INITIALE**

**CRÉATION NOUVEAU PROGRAMME
DE SOIN (CORPS OU VISAGE)**



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

VISUALISATION DES SÉANCES

 : Pour valider la séance réalisée en cas de perte de connexion avec votre CELLU M6 ALLIANCE®

 : Pour commenter la séance réalisée (paramètres de traitement utilisés...)

 : Pour supprimer une séance

 : Pour ajouter une séance



The screenshot shows the LPG mobile application interface. At the top, the LPG logo and slogan 'INNER POWER. BETTER LIFE.' are visible, along with the time '16:07'. Below this is a navigation bar with 'ACCUEIL > LAURE DURAND > MES SÉANCES'. The main content area displays a session titled 'REGARD ANTI-RIDES - ZONE FRONTALE - DOUBLE-MENTON' with a progress indicator '0/6 30 min' and an add icon. The session is broken down into four rows, each representing a step:

Step	Activity	Duration	Actions
1/6	Regard Anti-rides Zone Frontale Double-menton	10 min 10 min 10 min	Calendar, Comments, Trash
2/6	Regard Anti-rides Zone Frontale Double-menton	10 min 10 min 10 min	Calendar, Comments, Trash
3/6	Regard Anti-rides Zone Frontale Double-menton	10 min 10 min 10 min	Calendar, Comments, Trash
4/6	Regard Anti-rides Zone Frontale Double-menton	10 min 10 min 10 min	Calendar, Comments, Trash

EN MODE EXPERT

- o Possibilité de sauvegarder les paramètres de traitement utilisés pour les séances suivantes.
- o Possibilité de sauvegarder le temps passé sur chaque étape.

VISUALISATION DES COSMÉTIQUES

Pour chaque programme de soin, retrouvez les cosmétiques à associer et à recommander à votre client(e).

LPG INNER POWER. BETTER LIFE. 11:34

ACCUEIL > LAURE DURAND > MA ROUTINE BEAUTÉ

REGARD ANTI-RIDES - DOUBLE-MENTON - COU

SUBLIME REGARD & LÈVRES

EAU MICELLAIRE PRÉPARATRICE

MASQUE CONTOUR YEUX POST-TRAITEMENT

SOIN CONTOUR YEUX ET LÈVRES

SÉRUM ANTI-ÂGE RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE

SOIN ANTI-ÂGE RÉGÉNÉRATION CELLULAIRE

EAU MICELLAIRE PRÉPARATRICE



- Démaquille et nettoie les impuretés
- Hydrate et apaise

Imbibez un coton et nettoyez le visage, les yeux et le cou, matin et soir. Séchez la peau délicatement sans rincer.

VISUALISATION DES ENDERMONUTRI

Pour chaque programme de soin, retrouvez les compléments alimentaires à associer et à recommander à votre client(e).

LPG INNER POWER. BETTER LIFE. 15:56

ACCUEIL > LAURE DURAND > MA ROUTINE BEAUTÉ

BOOSTER DE VITALITÉ

- Augmente les performances physiques et mentales
- Détoxifie le corps
- Booste les défenses naturelles

2 gélules par jour.
À consommer de préférence le matin et avant 15 heures pour éviter toute difficulté d'endormissement.
Pour des résultats optimaux, suivez ce traitement pendant au moins 2 mois d'affilée. Cure réalisable 2 à 3 fois par an ou à chaque début de cure minceur.

REGARD ANTI-RIDES - DOUBLE-MENTON - COU

BOOSTER DE VITALITÉ

ACIDE HYALURONIQUE

COLLAGÈNE

OMÉGA

HYDRATATION ECLAT





RÉALISER UN BILAN PHOTOS

LPG

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UN BILAN PHOTOS CORPS

Après avoir cliqué sur la vignette concernée, cliquez sur  en bas de l'écran pour réaliser un nouveau bilan photos. Les photos prises lors de l'évaluation initiale apparaissent automatiquement à cet emplacement.

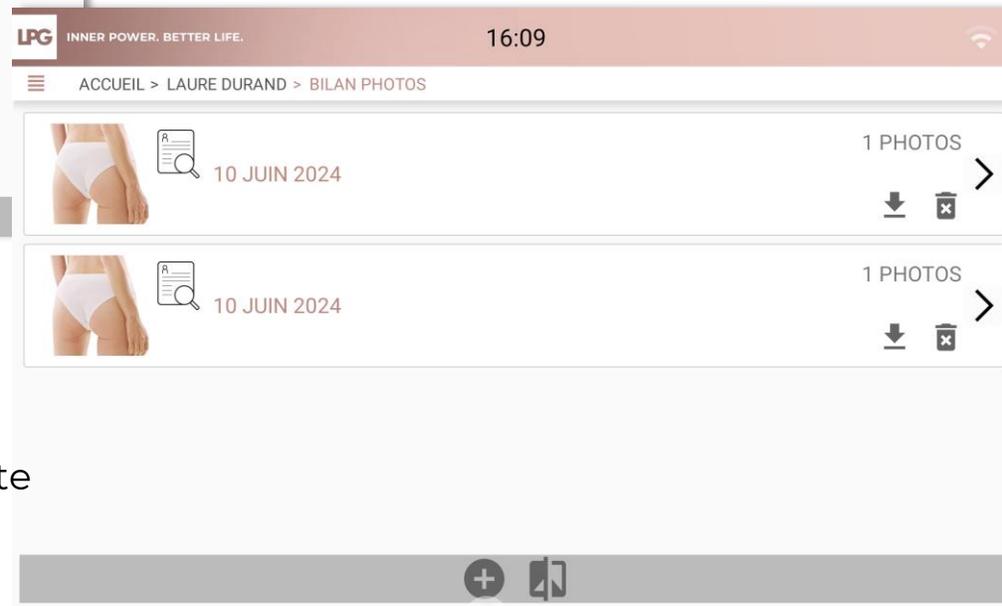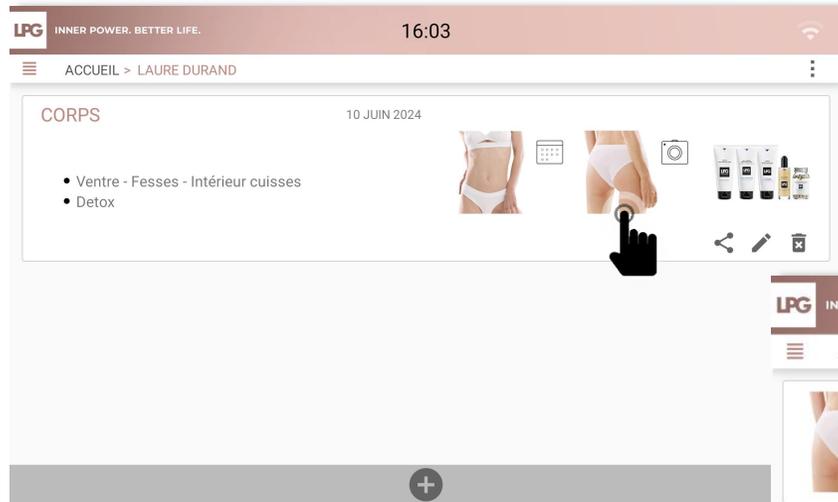

 : Suppression du bilan photos

 : Sauvegarde du bilan photos sur votre tablette



INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UN BILAN PHOTOS CORPS

Les objectifs de l'évaluation initiale sont volontairement affichés (rappel).

Vous êtes libre d'ajouter les commentaires que vous souhaitez (nombre de séances effectuées, résultats constatés...)


The screenshot shows a mobile application interface with a dark red header. On the left is the LPG logo and the text "INNER POWER. BETTER LIFE.". In the center is the time "16:09". On the right is a Wi-Fi signal icon. Below the header is a navigation bar with a hamburger menu icon on the left and the text "ACCUEIL > LAURE DURAND > BILAN PHOTOS". The main content area has a light gray background and contains two input fields. The first is a text box labeled "Objectif :". The second is a larger text area labeled "Ajouter votre commentaire ici" with left and right arrow navigation icons. The bottom of the screen shows a dark red bar with the LPG logo and the text "INNER POWER. BETTER LIFE.".



INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UN BILAN PHOTOS CORPS

- Réalisez trois photos (profil droit, face, profil gauche). Tenez votre tablette en format portrait. La photo ne doit être prise que lorsque les capteurs sont verts. Aidez-vous des repères intégrés pour bien positionner votre client(e). A chaque prise, cliquez sur **ENREGISTRER** ou **ANNULER** si vous souhaitez prendre une nouvelle photo.
- Si vous souhaitez prendre d'autres photos, cliquez sur **AJOUTER PHOTO COMPLÉMENTAIRE** et nommez-la.

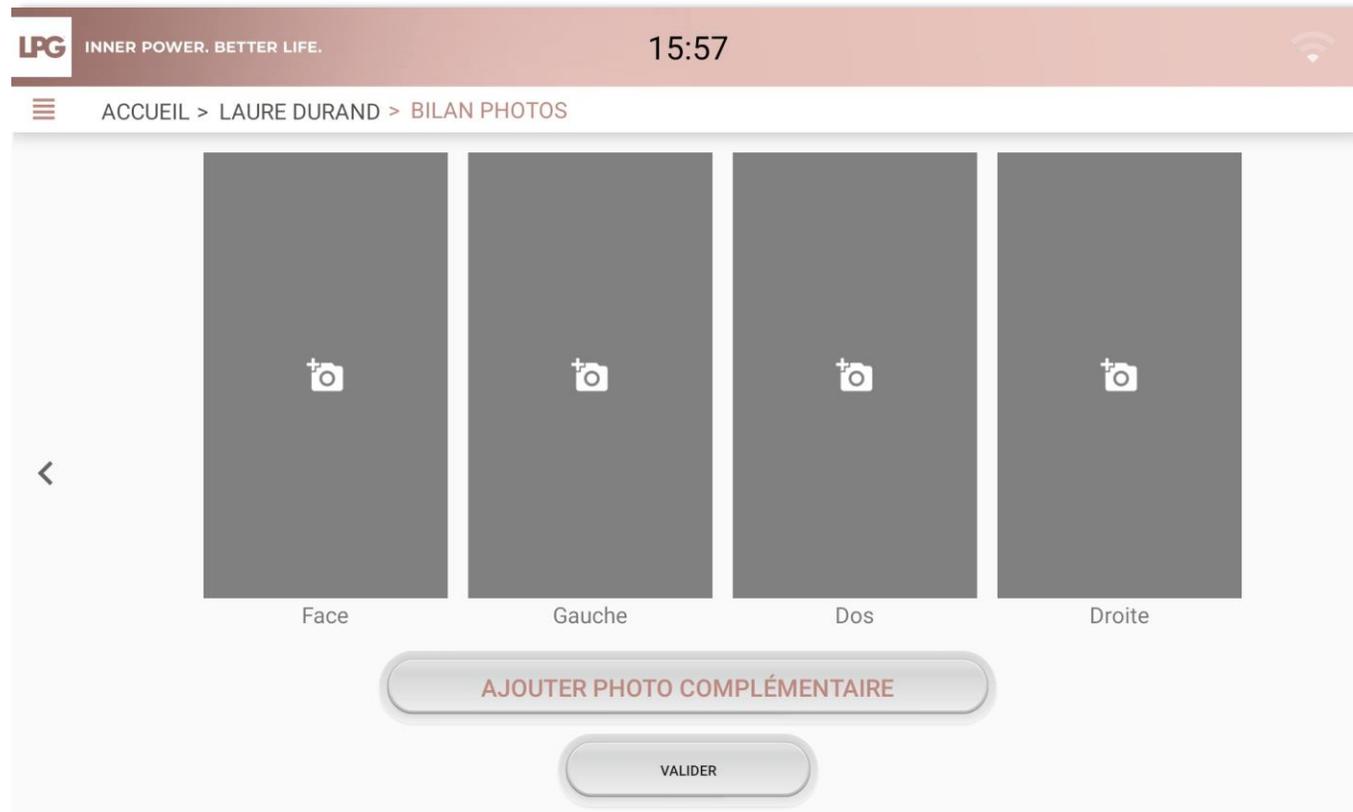




COMPARER DES BILANS PHOTOS



INNER POWER.
BETTER LIFE.


COMPARER UN BILAN PHOTOS CORPS

Pour comparer des bilans photos, cliquez sur  en bas de l'écran.

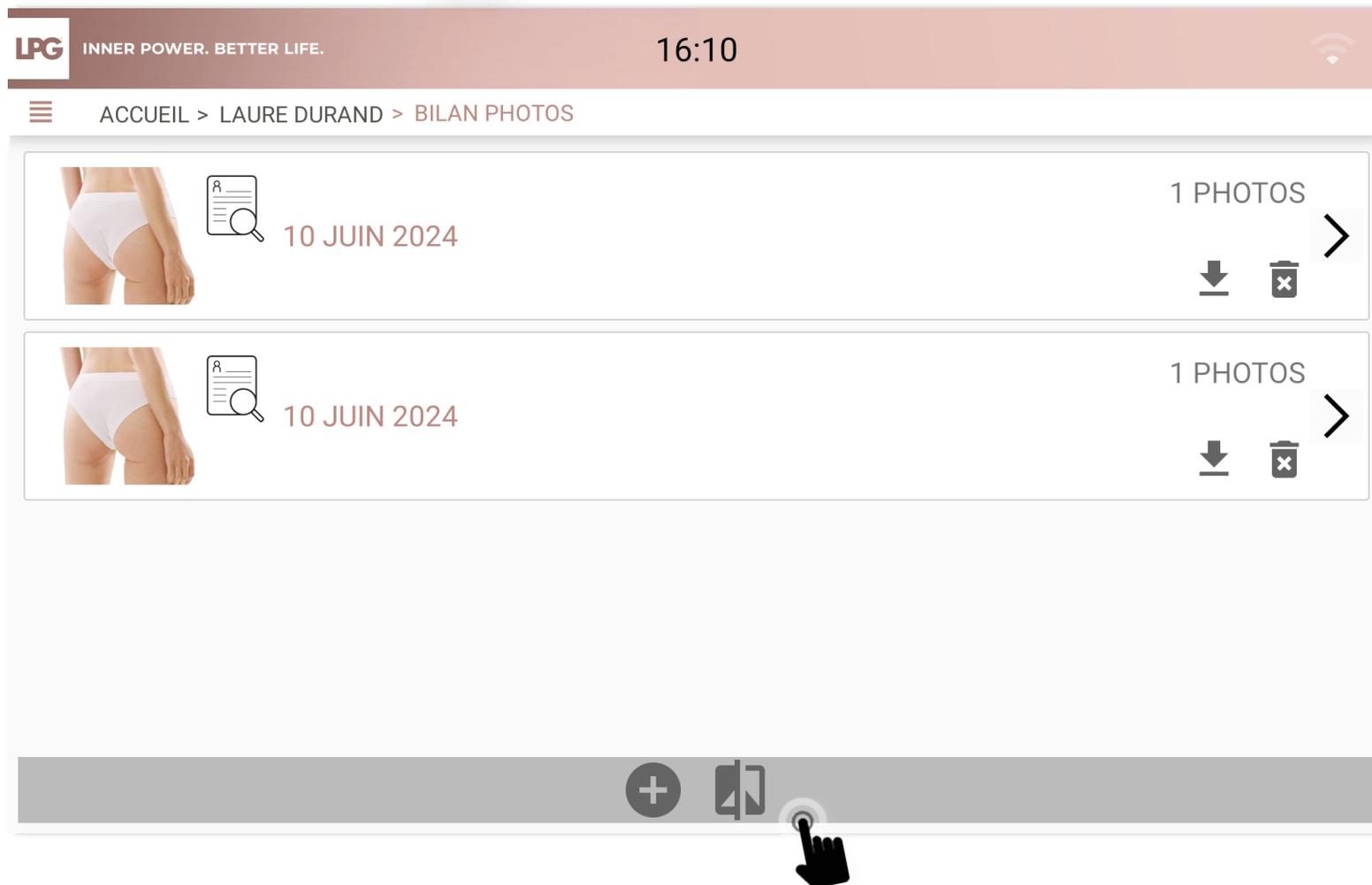

COMPARER UN BILAN PHOTOS CORPS

- Sélectionnez le bilan photos qui vous intéresse à l'aide des flèches.
- Sélectionnez ensuite la photo : face, dos, profil droit, profil gauche.
- Pour sauvegarder la comparaison photos , cliquez sur ↓
- Enfin, nommez votre fichier et enregistrez à l'emplacement que vous souhaitez sur votre tablette

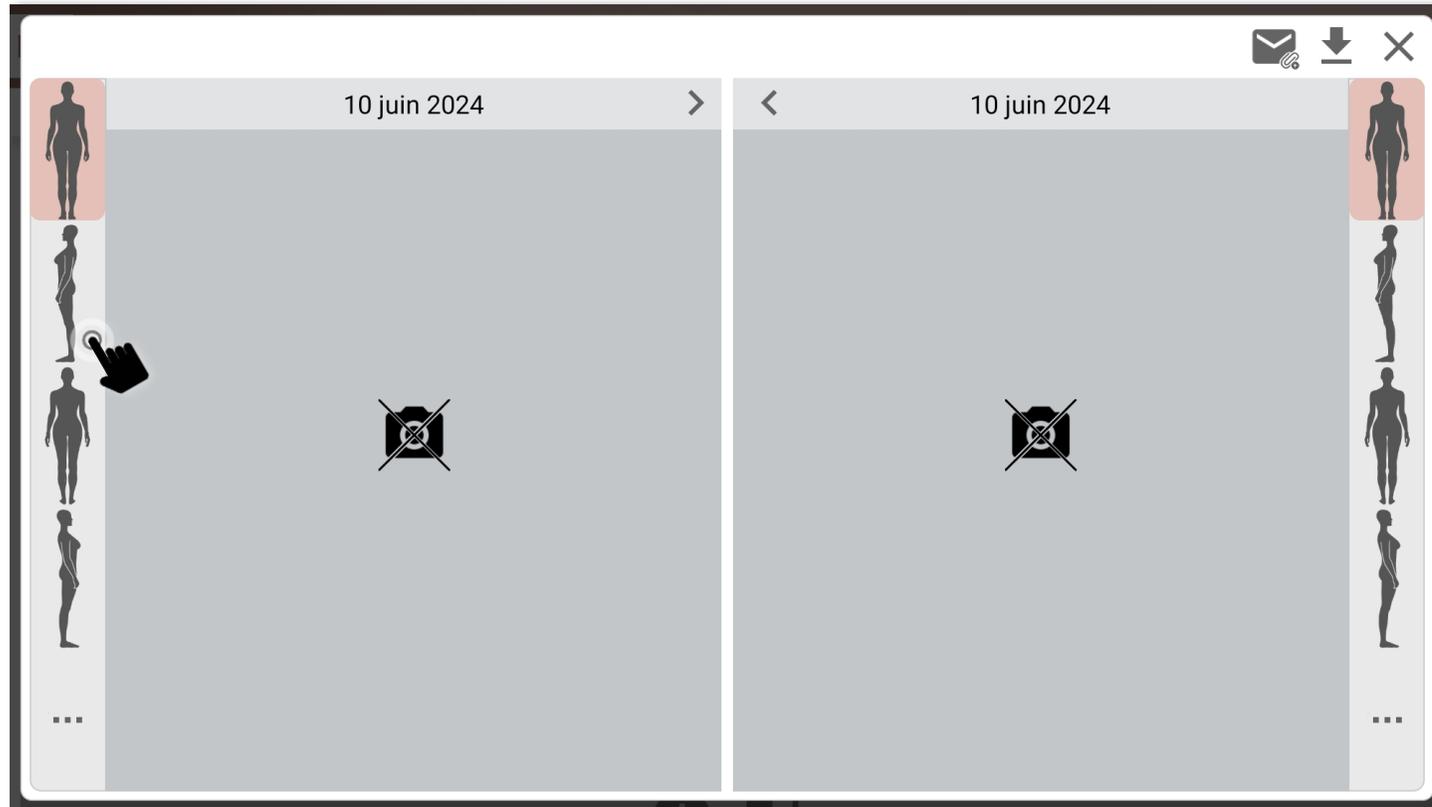




ENVOYER UN PROGRAMME
DE SOINS À SA/SON
CLIENT(E)



INNER POWER.
BETTER LIFE.

ENVOI DU PROGRAMME


- Choisissez le programme concerné et cliquez sur 
- Sélectionnez les cosmétiques et compléments alimentaires à importer dans le document puis cliquez sur **OK**.

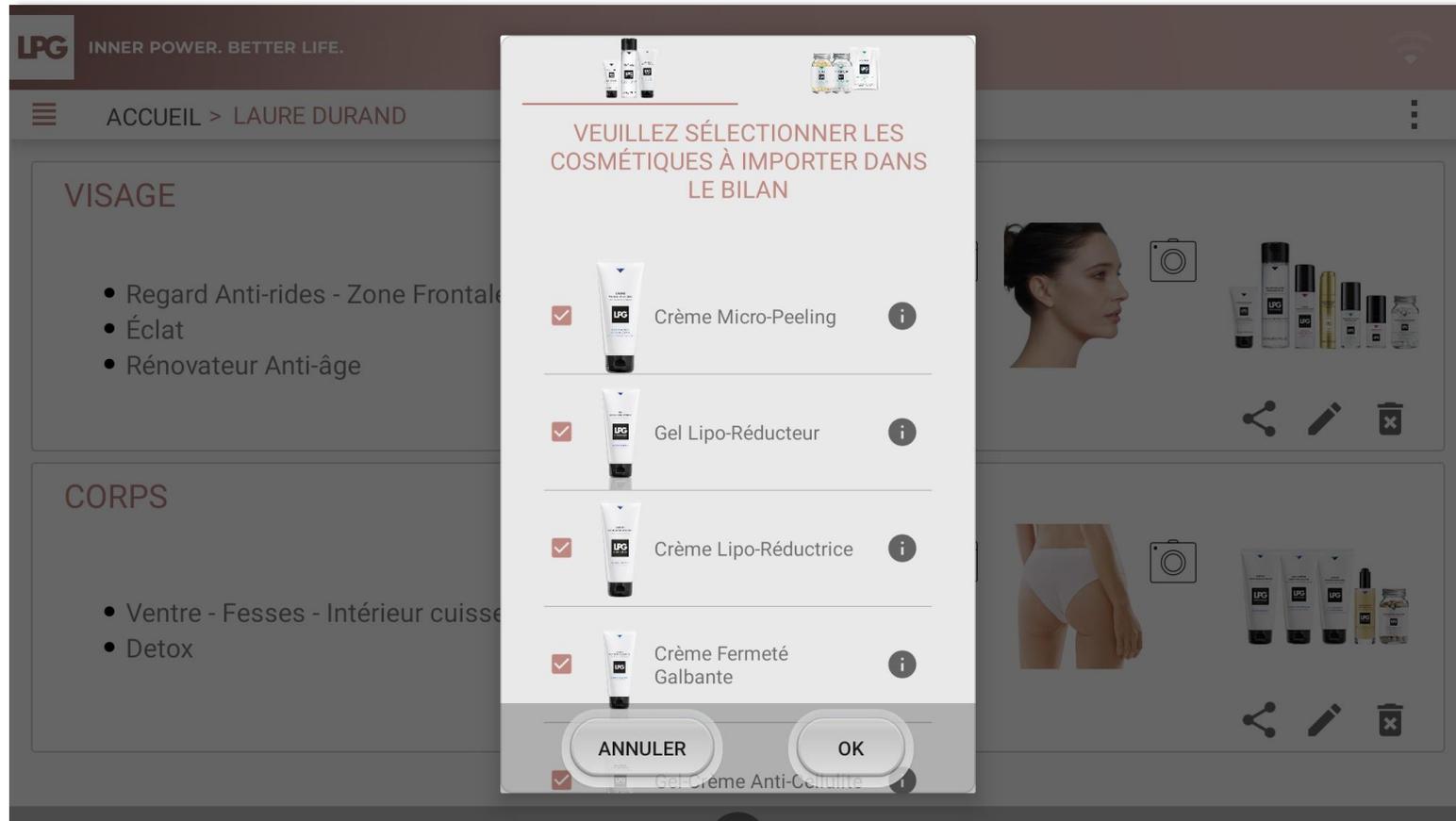

INNER POWER.
BETTER LIFE.

ENVOI DU PROGRAMME

Après avoir configuré votre boîte email, personnalisez le message destiné à votre client(e).
Le programme (document PDF) est automatiquement attaché à votre email. Cliquez ensuite sur **ENVOYER**.

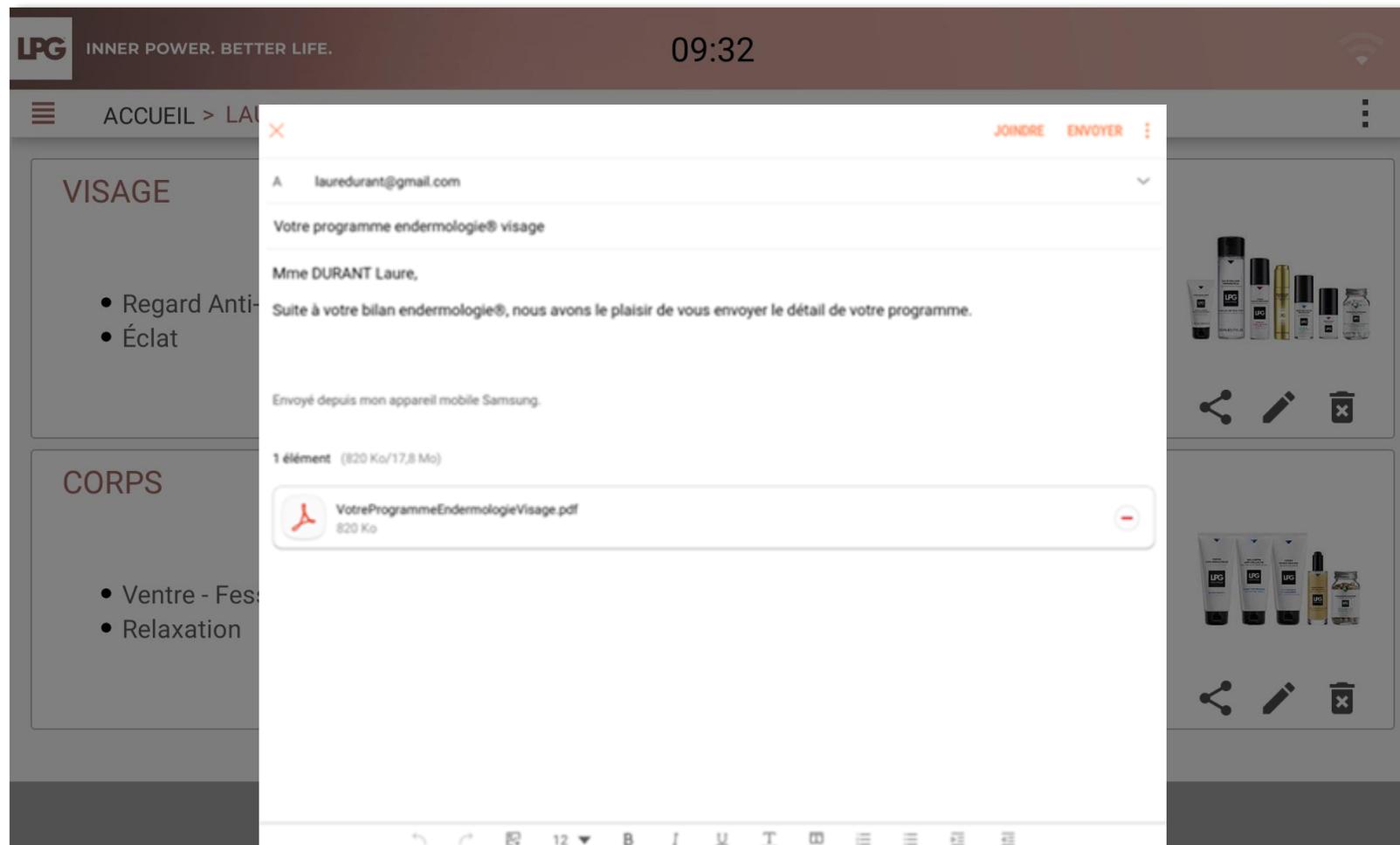

INNER POWER.
BETTER LIFE.



LANCEMENT D'UN
PROGRAMME DE SOINS
SUR VOTRE CELLU M6
ALLIANCE®




INNER POWER.
BETTER LIFE.

LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE SOINS

Après avoir connecté votre tablette à votre CELLU M6® (veuillez-vous munir du guide Quickstart qui vous expliquera la marche à suivre), cliquez sur **SÉANCE PERSONNALISÉE**.


Pour savoir si votre appareil est bien connecté à votre tablette, vérifiez que l'icône suivant s'affiche sur l'écran de votre tablette :

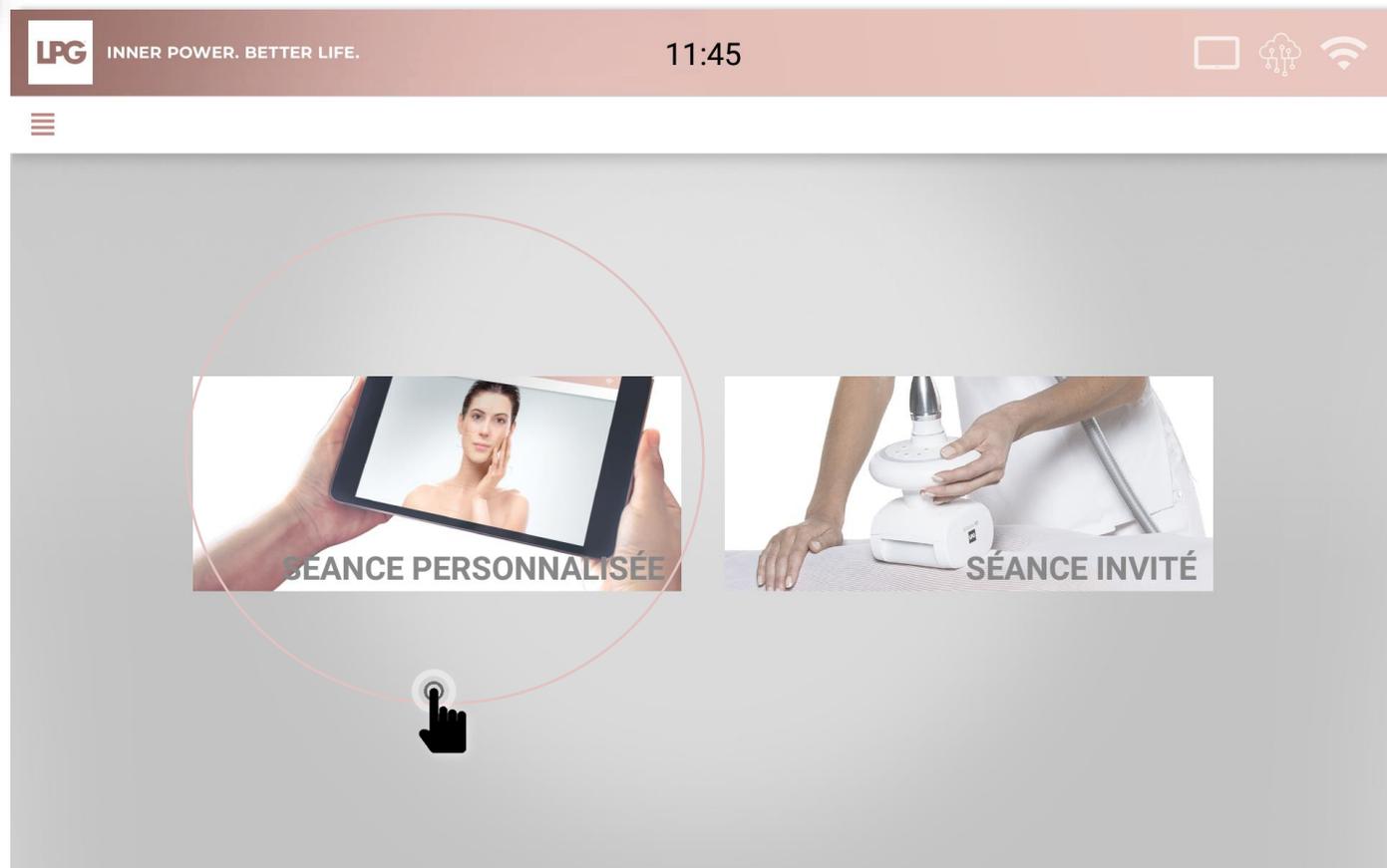

INNER POWER.
BETTER LIFE.

LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE SOINS

Cliquez sur le client concerné dans votre base de données.

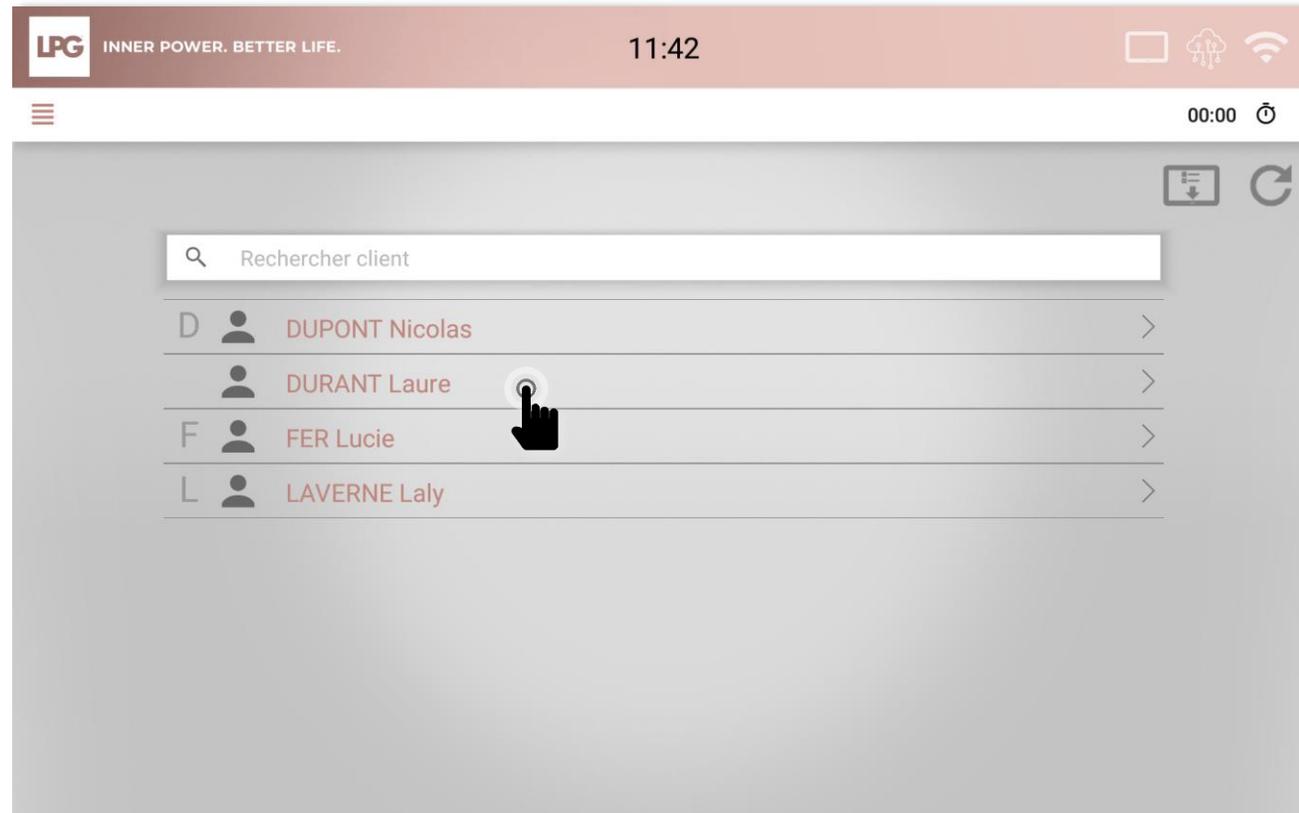

Les programmes des client(e)s peuvent être téléchargés lorsque la tablette est connectée. Ils seront alors accessibles à tout moment. Les résultats seront envoyés dès que la tablette réapparaîtra.

LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE SOINS

Cliquez ensuite sur le programme de soins souhaité.



En cas de perte de connexion, validez manuellement sur votre tablette la séance réalisée et cliquez sur  pour mettre à jour votre CELLU M6 ALLIANCE®.



INNER POWER.
BETTER LIFE.

LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE SOINS

La séance peut démarrer !

LPG INNER POWER. BETTER LIFE. 11:44

LAURE DURANT > ANTI-ÂGE REPULPANT - Nettoyer et préparer la peau 00:00

Etape 1/18 0:21 -29:39

EAU MICELLAIRE PRÉPARATRICE

Appliquer sur l'ensemble du visage et du cou à l'aide de cotons imprégnés.
Bien sécher la peau à l'aide de mouchoirs en papier doux.

LPG endermologie

EAU MICELLAIRE PRÉPARATRICE
PREPARING MICELLAR WATER

LPG endermologie

EAU MICELLAIRE PRÉPARATRICE
PREPARING MICELLAR WATER

LPG endermologie

EAU MICELLAIRE PRÉPARATRICE
PREPARING MICELLAR WATER

DÉMAQUILLE, NETTOIE, HYDRATE
REMOVES MAKEUP, CLEANSES, HYDRATES

Micelles, Sucres, Glycérine
Micelles, Sugars, Glycerin

400 ML e / 13,5 FL. OZ.

400 ML e / 13,5 FL. OZ.

400 ML e / 13,5 FL. OZ.



INNER POWER.
BETTER LIFE.




SÉANCES LIBRES



INNER POWER.
BETTER LIFE.

VISUALISATION DES SÉANCES LIBRES

Pour accéder aux séances libres de vos client(e)s, exécutées via « Séance personnalisée » sur l'écran de votre CELLU M6® ALLIANCE, cliquez sur  puis sur mes « Mes séances libres »

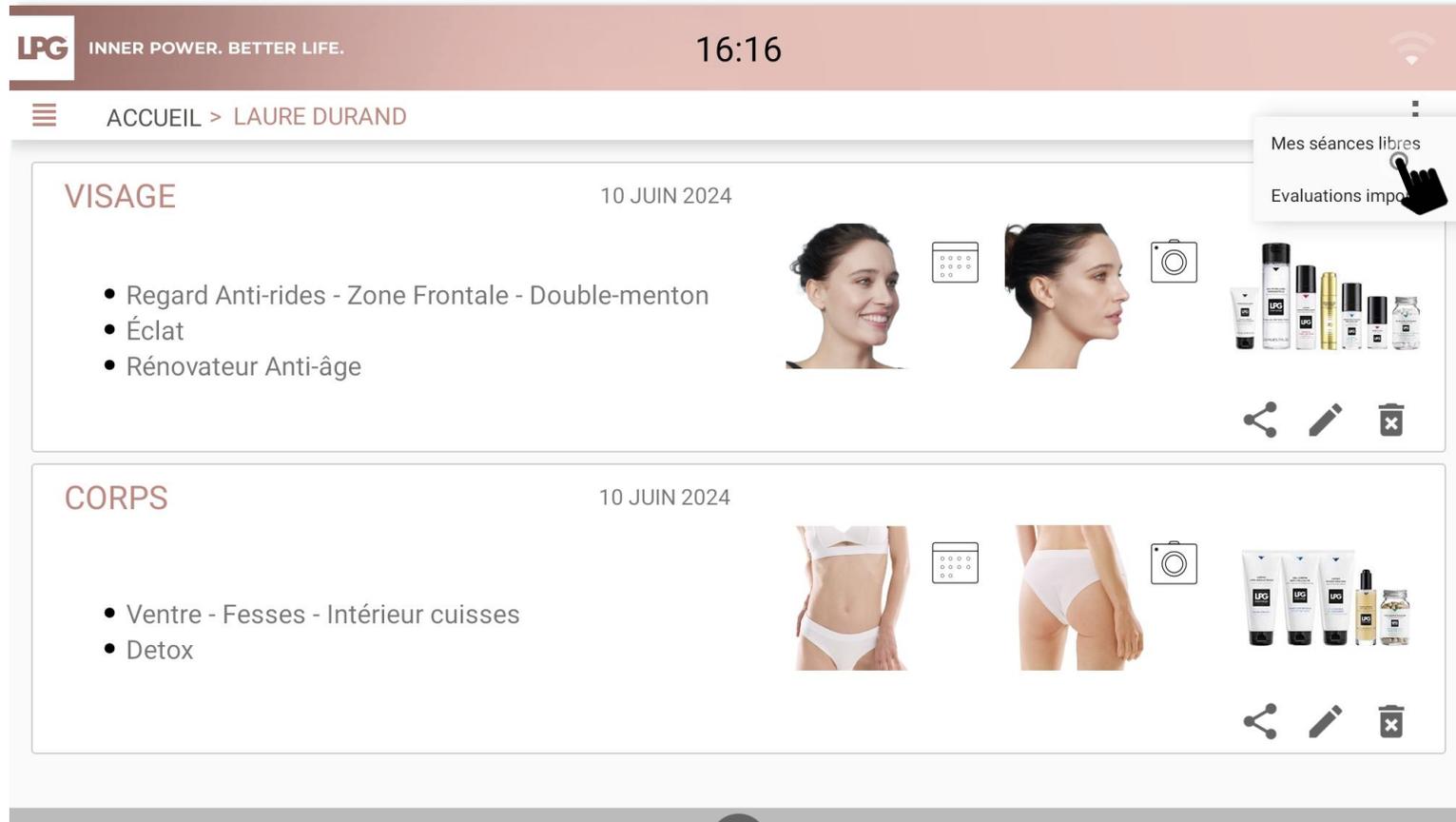

The screenshot displays the LPG mobile application interface. At the top, the LPG logo and tagline "INNER POWER. BETTER LIFE." are visible on the left, and the time "16:16" is centered. Below the header, a navigation bar shows "ACCUEIL > LAURE DURAND". A dropdown menu is open, highlighting "Mes séances libres" with a hand cursor icon. The main content area is divided into two sections:

- VISAGE** (10 JUIN 2024):
 - Regard Anti-rides - Zone Frontale - Double-menton
 - Éclat
 - Rénovateur Anti-âge
- CORPS** (10 JUIN 2024):
 - Ventre - Fesses - Intérieur cuisses
 - Detox

Each session card includes a front and side profile photo of the client, a calendar icon, a camera icon, and a collection of LPG skincare products. At the bottom of each card are icons for sharing, editing, and deleting.



INNER POWER.
BETTER LIFE.



SAUVEGARDE



INNER POWER.
BETTER LIFE.


SAUVEGARDE



Ne sautez pas cette étape ! En cas de problème, vous pourriez perdre l'intégralité de vos données.

Avant de commencer, nous vous recommandons de **sauvegarder votre base de données sur un support externe de votre choix** (ordinateur personnel, carte micro SD disponible en grande surface ou dans les magasins spécialisés...). Par défaut, votre base de données sera stockée sur votre tablette.

Veillez vous rendre dans le menu **CONFIGURATION** de l'application endermoscan (cliquez sur la barre de menu en haut à gauche). Cliquez sur **PARAMÈTRES** puis **BASE DE DONNÉES**.

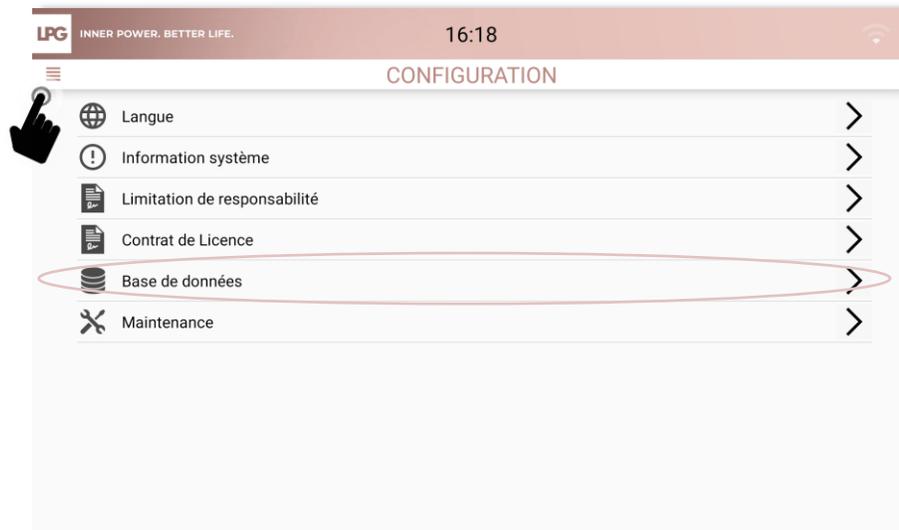

Cliquez sur « **SAUVEGARDER BASE DE DONNÉES** » et choisissez l'emplacement de sauvegarde de vos données sur le support de votre choix : carte micro SD, tablette, ordinateur personnel...



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE

Vous pouvez planifier une sauvegarde automatique de vos données.

Pour cela, cliquez sur **SAUVEGARDE AUTOMATIQUE** puis sur le curseur  pour l'activer.

Choisissez ensuite la périodicité (tous les jours, tous les 5 jours ou tous les 10 jours), l'emplacement de sauvegarde de vos données.

Renseignez ensuite un mot de passe qui protégera l'accès à votre base de données. **Veillez le conserver précieusement car il pourra vous être demandé ultérieurement.** Pour des raisons de confidentialité, LPG SYSTEMS n'a pas accès à votre mot de passe et ne peut vous le demander. **Il est sous votre entière responsabilité.**

Enfin, cliquez sur **OK**.



INNER POWER.
BETTER LIFE.




MISE À JOUR



INNER POWER.
BETTER LIFE.


MISES À JOUR

Lorsqu'une mise à jour est disponible, l'écran suivant apparaît au démarrage de l'application.
Le « **i** » permet de connaître le contenu de cette mise à jour.
Appuyez sur **OK** pour lancer le téléchargement et l'installation.

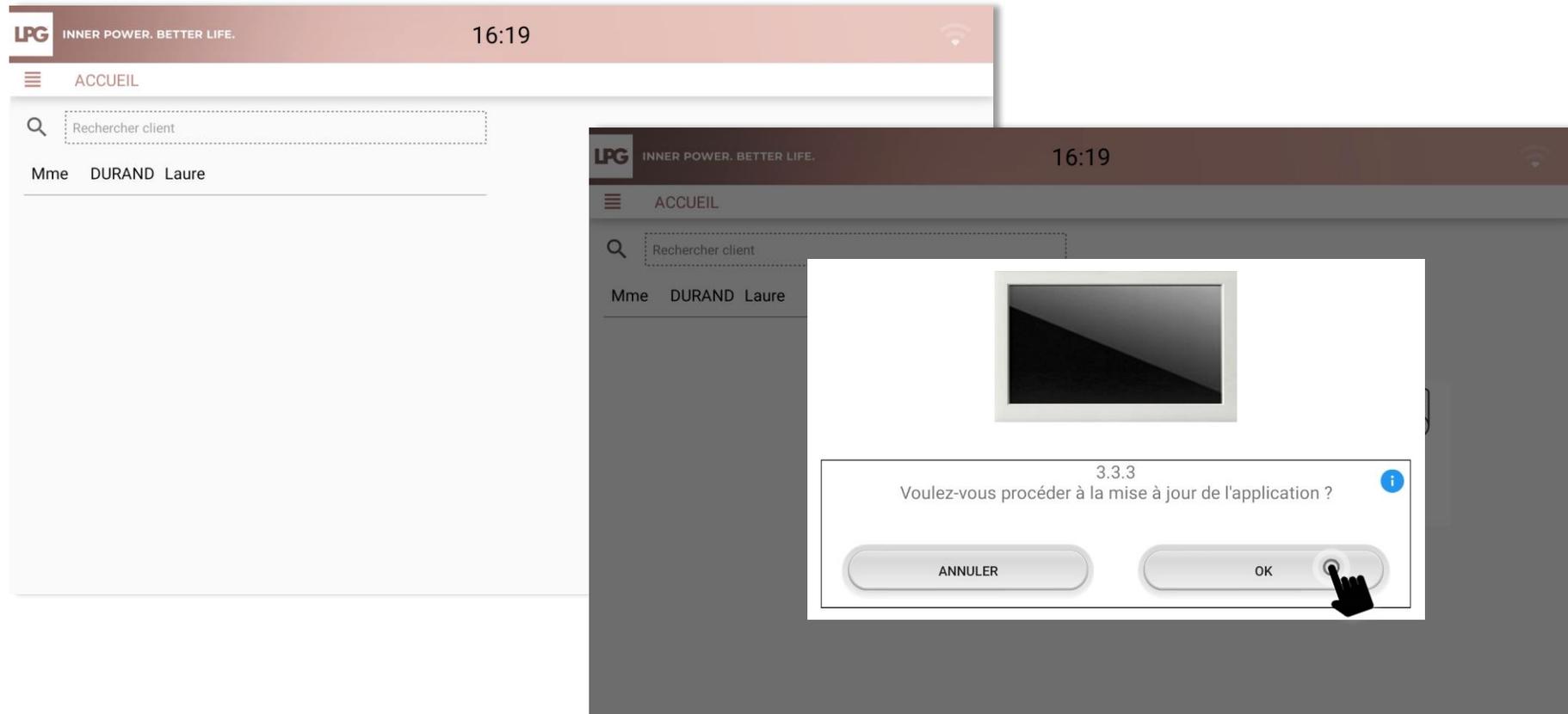

MISES À JOUR

Veillez suivre les instructions qui s'affichent à l'écran et poursuivez en cliquant sur **OK**.

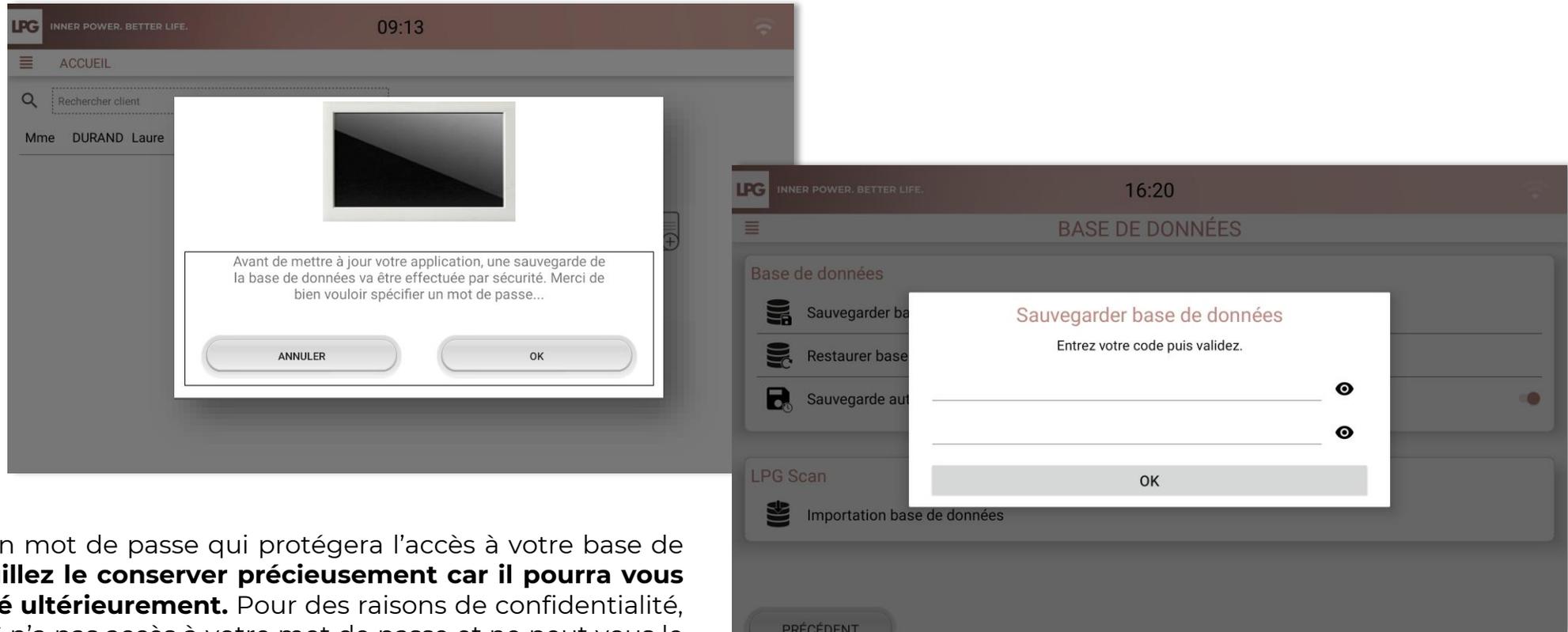

Renseignez un mot de passe qui protégera l'accès à votre base de données. **Veillez le conserver précieusement car il pourra vous être demandé ultérieurement.** Pour des raisons de confidentialité, LPG SYSTEMS n'a pas accès à votre mot de passe et ne peut vous le demander. **Il est sous votre entière responsabilité.**

LPG SYSTEMS ne pourra être tenue responsable d'une perte éventuelle de vos données.




INNER POWER.
BETTER LIFE.

MISES À JOUR

À la fin de la sauvegarde, votre tablette peut afficher ce message.

Cliquez sur **PARAMÈTRES**.

Autorisez l'installation des applications inconnues via le curseur pour pouvoir installer la mise à jour.

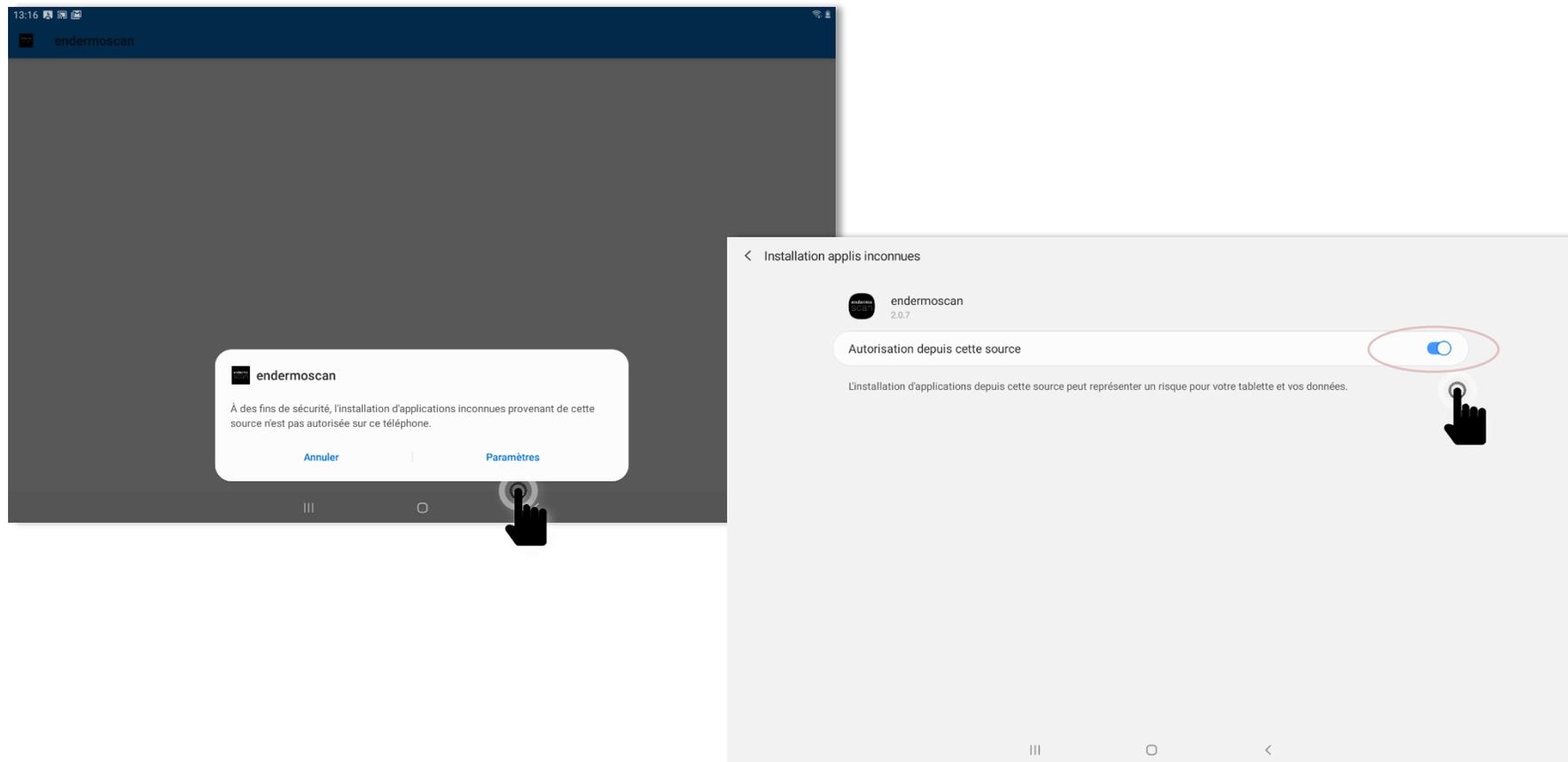

INNER POWER.
BETTER LIFE.



IMPORTATION DES DONNÉES DE VOTRE ANCIENNE TABLETTE LPG® SCAN




INNER POWER.
BETTER LIFE.

IMPORTATION DES DONNÉES LPG® SCAN

Avant l'import, veuillez au préalable sauvegarder votre base de données.

Pour importer les données de votre ancienne tablette LPG® SCAN (fiches clients, photos), veuillez insérer la carte micro SD utilisée dans l'emplacement adapté sur la nouvelle tablette.

Ensuite, veuillez vous rendre dans le menu **CONFIGURATION** de l'application endermoscan (cliquez sur la barre de menu en haut à gauche). Cliquez sur **PARAMÈTRES** puis **BASE DE DONNÉES** puis **IMPORTATION BASE DE DONNÉES**.

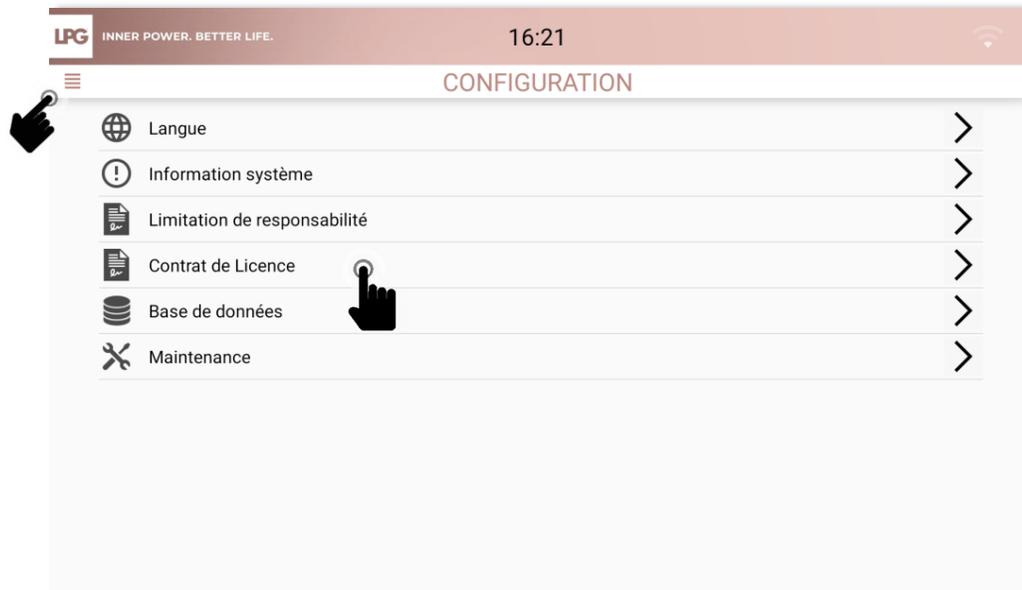

INNER POWER.
BETTER LIFE.



EXPORTATION DES DONNÉES



INNER POWER.
BETTER LIFE.

EXPORTATION DES DONNÉES

Pour accéder aux paramètres de votre tablette, cliquez sur  puis sur **Paramètres**.

La rubrique « **Limitation de responsabilité** » vous sensibilise sur la protection et la sécurité des données clients qui peut être remise en question si vous faites le choix d'exporter ces informations.

Si vous souhaitez exporter ces données, veuillez cocher la fonction « exportation des données clients ».



LPG n'est pas responsable de l'utilisation des données en dehors de son application.