




INNER POWER. BETTER LIFE.

SOMMAIRE

- Démarrer l'application **p 3**
- Créer une fiche client **p 4**
- Réaliser une évaluation et créer un programme de soins Visage **p 10**
- Réaliser un bilan photos **p 27**
- Comparer des bilans photos **p 32**
- Envoyer un programme de soins à sa/son client(e) **p 35**
- Lancement d'un programme de soins sur votre MOBILIFT M6® CONNECT **p 38**
- Séances Libres **p 45**
- Sauvegarde **p 47**
- Mises à jour **p 50**
- Importation des données de votre ancienne tablette LPG® SCAN **p 55**
- Exportation des données **p 57**

DÉMARRER L'APPLICATION

Cliquez sur l'icône **endermoscan** présent sur l'écran de votre tablette pour lancer l'application.

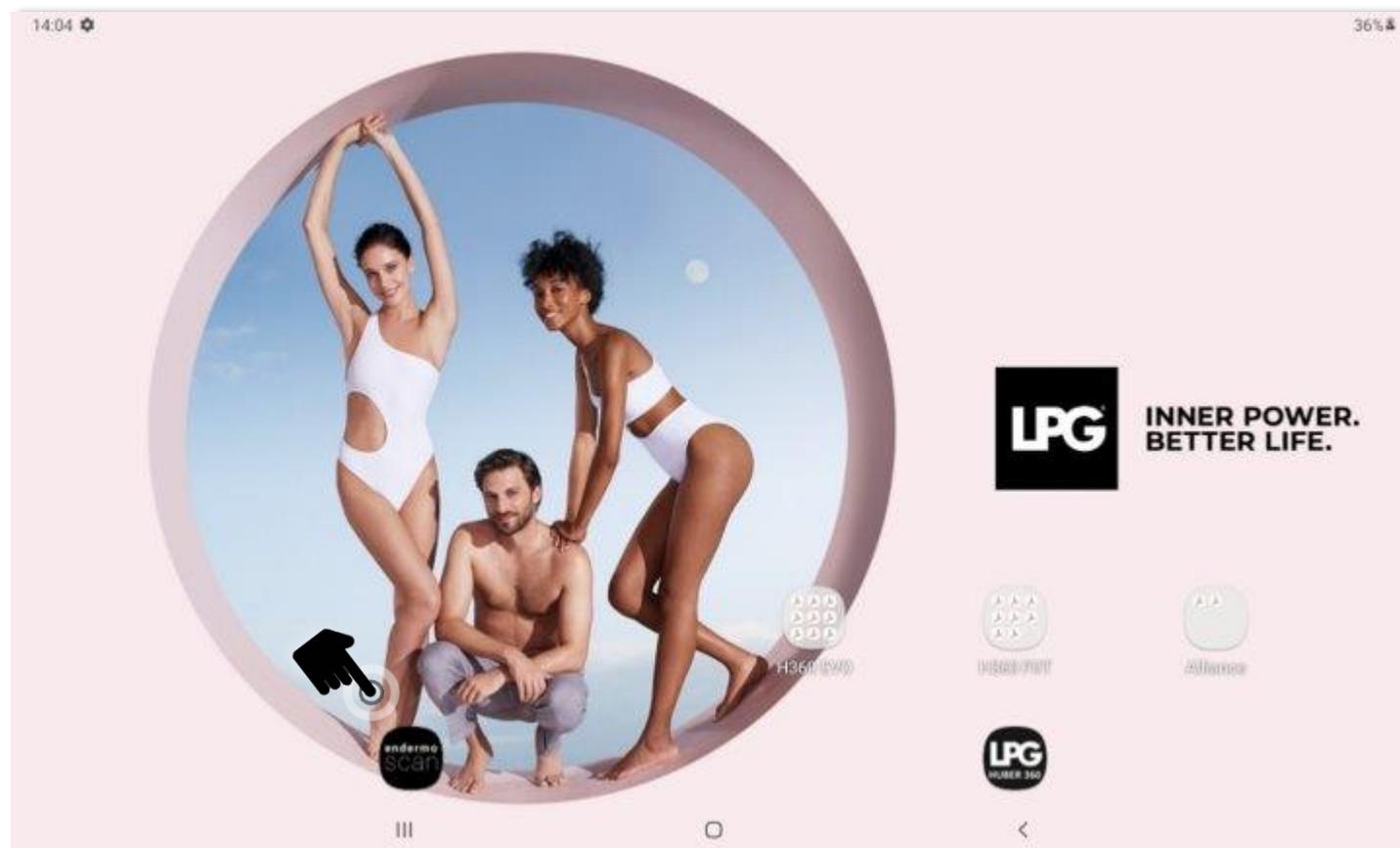




CRÉER UNE FICHE CLIENT



INNER POWER.
BETTER LIFE.

DÉMARRER L'APPLICATION

Renseignez votre identifiant (adresse email personnelle) et votre mot de passe (choisi par vos soins).
En cas de mot de passe oublié, cliquez sur « **Votre compte n'est pas accessible ?** »
ou sur ce lien : <https://password.lpgsystems.net> pour réinitialiser votre mot de passe.

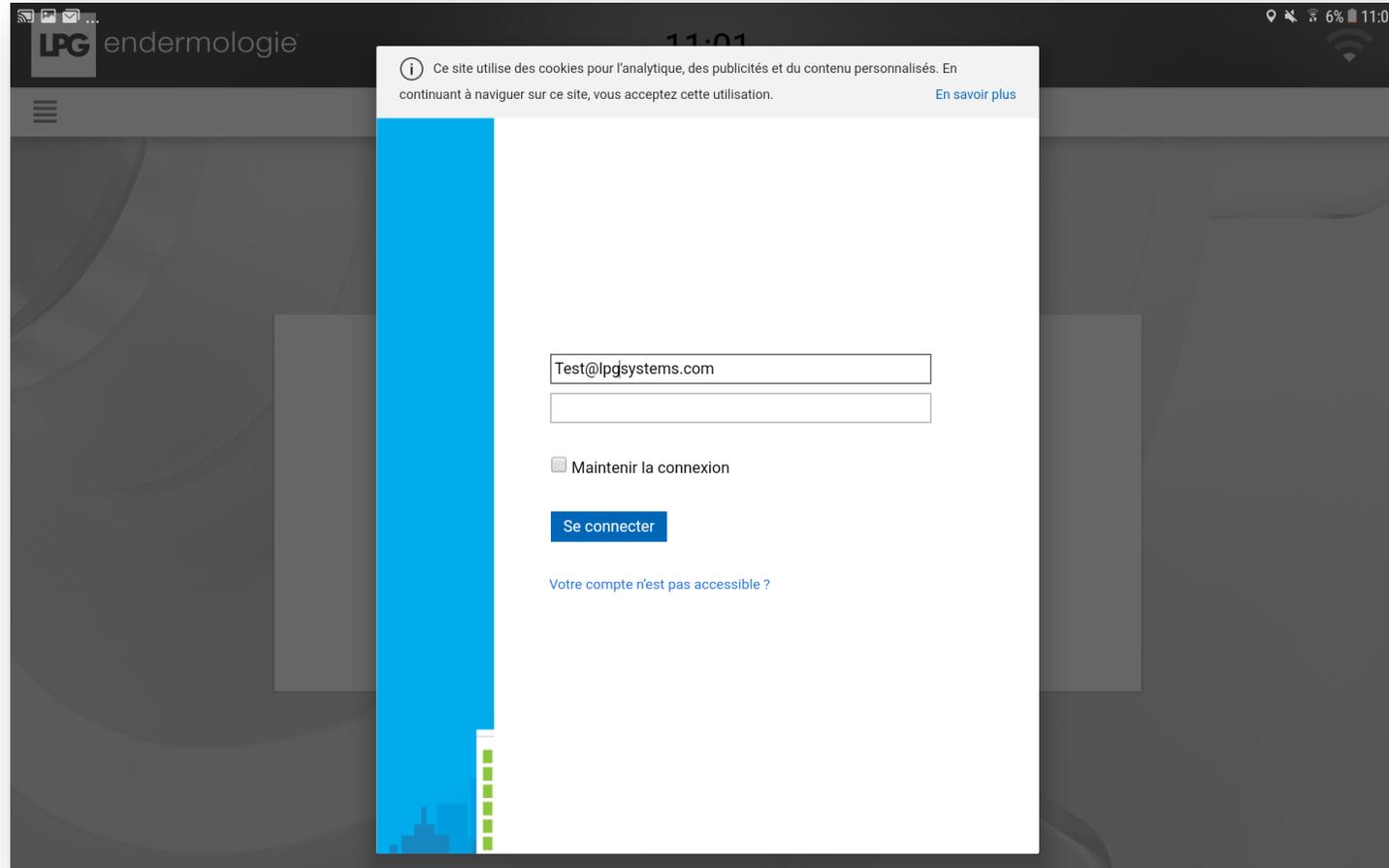


The screenshot displays the mobile application interface for LPG endermologie. At the top, there is a dark header with the LPG logo and the text 'endermologie'. Below the header, a white login form is centered. The form includes an email input field containing 'Test@lpgsystems.com', a password input field, a checkbox labeled 'Maintenir la connexion', and a blue 'Se connecter' button. A blue vertical bar is positioned to the left of the form. Above the form, a grey cookie consent banner reads: 'Ce site utilise des cookies pour l'analytique, des publicités et du contenu personnalisés. En continuant à naviguer sur ce site, vous acceptez cette utilisation.' with a link 'En savoir plus'. Below the form, a blue link reads 'Votre compte n'est pas accessible ?'. The background of the app is dark grey with a subtle pattern.



INNER POWER.
BETTER LIFE.

CRÉER UNE FICHE CLIENT

Une fois l'application lancée, cliquez sur **NOUVEAU CLIENT** sur l'écran d'accueil.

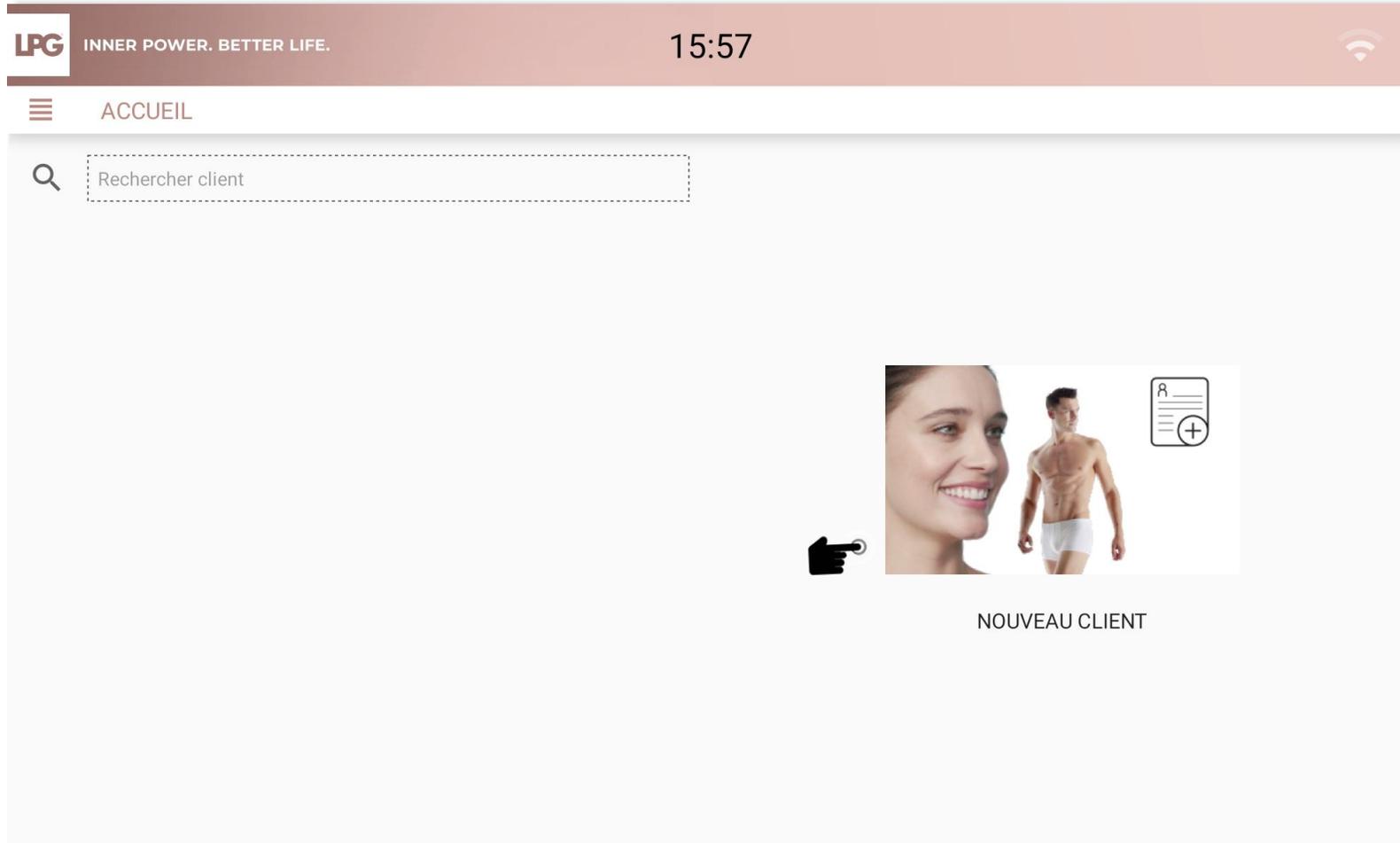

CRÉER UNE FICHE CLIENT

Une fois que vous avez parcouru les contre-indications avec votre client(e), cochez la case « **Les contre-indications aux soins endermologie® ont été abordées lors de l'évaluation** » pour démarrer le renseignement de la fiche.

LPG INNER POWER. BETTER LIFE. 15:58

ACCUEIL > CRÉATION DE COMPTE > CONTRE INDICATIONS

INFORMATIONS SUR LES SOINS ENDERMOLOGIE®

Contre-indications générales strictes :

- Cancer en cours d'évolution (sauf avis médical écrit)
- Traitement anticoagulant
- Maladie du sang
- Maladie en période de poussée inflammatoire
- Infections, éruptions cutanées

Contre-indications endermologie® corps :

- Grossesse (hormis traitement des membres inférieurs)
- Phlébite
- Greffe d'organe
- Insuffisance rénale

Contre-indications endermologie® visage :

- Vitiligo
- Acné inflammatoire et infectieux
- Herpès

Contre-indications locales :


- Couperose
- Varicosités et varices
- Chirurgie des veines (pendant 2 mois)
- Zones opérées en chirurgie esthétique (pendant 6 mois)
- Plaie et lésion cutanée
- Cicatrice récente, hypertrophique ou chéloïde
- Hernies abdominales ou inguinales
- Lipome
- Grains de beauté en relief
- Injections de produit de comblement (pendant 2 semaines)
- Injections de Botox® (pendant 2 semaines)
- Piercing
- Angiome
- Implants sous cutanés
- Fils d'or et fils crantés
- Lésion ostéo-articulaire ou musculaire au stade aigu

En cas de doute, demander un avis médical écrit.

Les contre-indications aux soins endermologie® ont été abordées lors de l'évaluation.

CRÉER UNE FICHE CLIENT

Complétez les informations relatives à votre client(e). Vous avez la possibilité d'ajouter une photo. L'IMC se calcule automatiquement après avoir renseigné la taille et le poids.

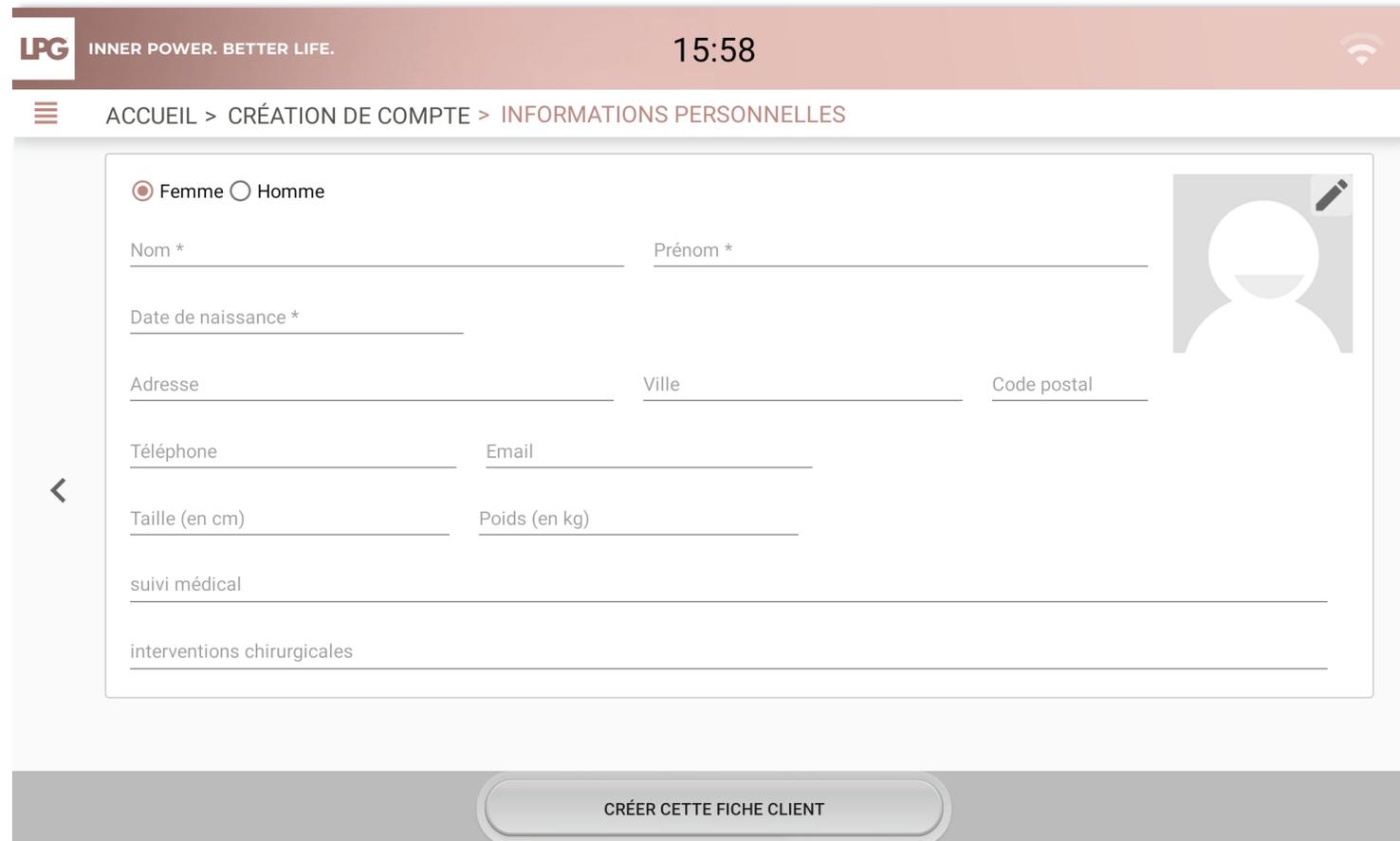


The screenshot shows the LPG mobile application interface for creating a client profile. The top navigation bar is dark red with the LPG logo, the slogan "INNER POWER. BETTER LIFE.", the time "15:58", and a Wi-Fi icon. Below the navigation bar, a breadcrumb trail reads "ACCUEIL > CRÉATION DE COMPTE > INFORMATIONS PERSONNELLES". The main content area is a white form with a light gray border. At the top left of the form, there are radio buttons for "Femme" (selected) and "Homme". To the right is a placeholder for a profile picture with a pencil icon. The form contains several input fields: "Nom *" and "Prénom *" (required), "Date de naissance *", "Adresse", "Ville", "Code postal", "Téléphone", "Email", "Taille (en cm)", "Poids (en kg)", "suivi médical", and "interventions chirurgicales". A back arrow is visible on the left side of the form. At the bottom of the form, there is a large, rounded button labeled "CRÉER CETTE FICHE CLIENT".



INNER POWER.
BETTER LIFE.

CRÉER UNE FICHE CLIENT

- Pour consulter ou modifier une fiche client, cliquez sur le nom de votre client(e) puis cliquez sur 
- Pour rechercher un client dans la base existante, il vous suffit de rentrer son nom dans **RECHERCHER CLIENT**.
- Pour archiver une fiche client, il vous suffit de cliquer sur 

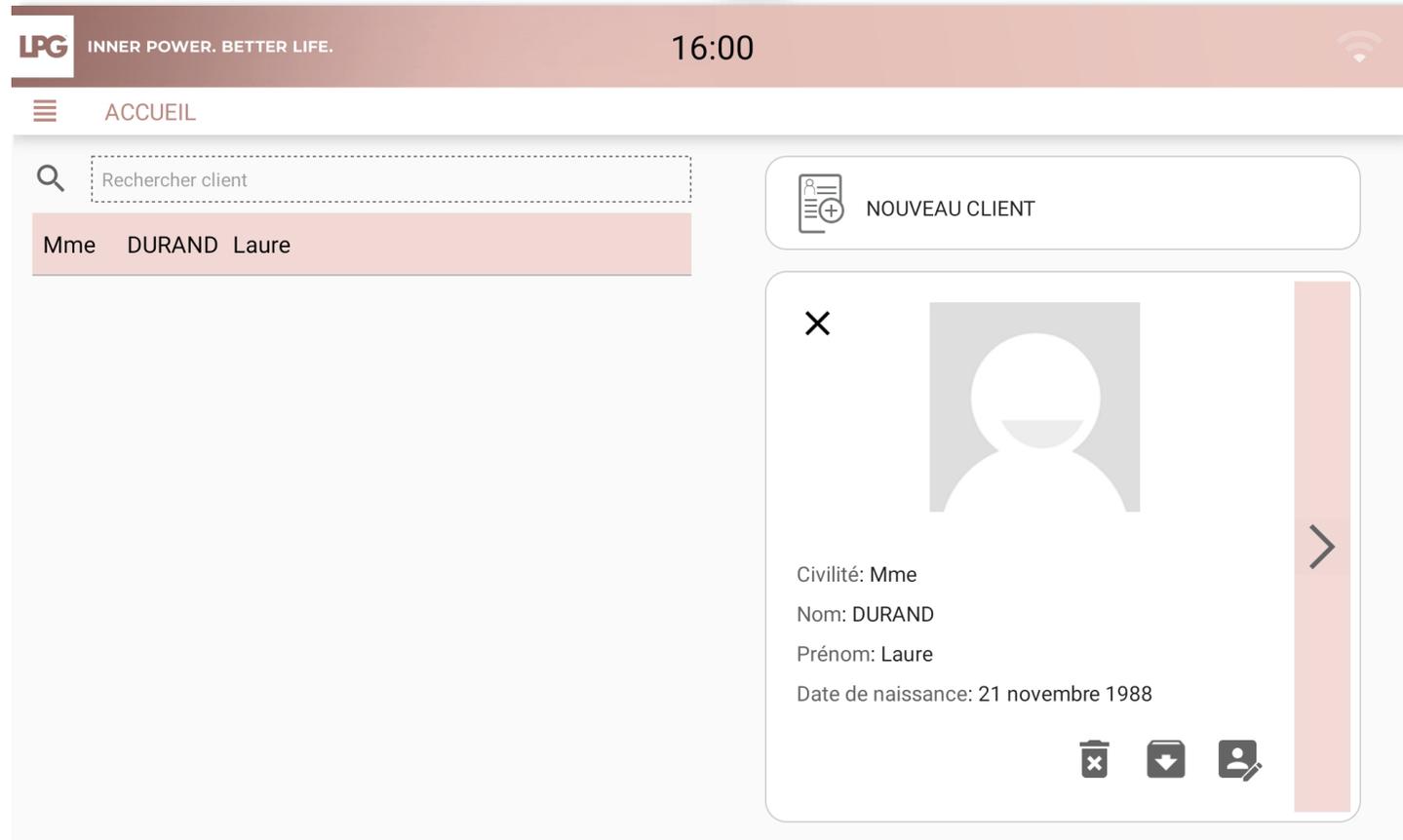




RÉALISER UNE ÉVALUATION ET
CRÉER UN PROGRAMME DE
SOINS **VISAGE**



INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE


Pour réaliser une nouvelle évaluation, cliquez sur  en bas de l'écran.

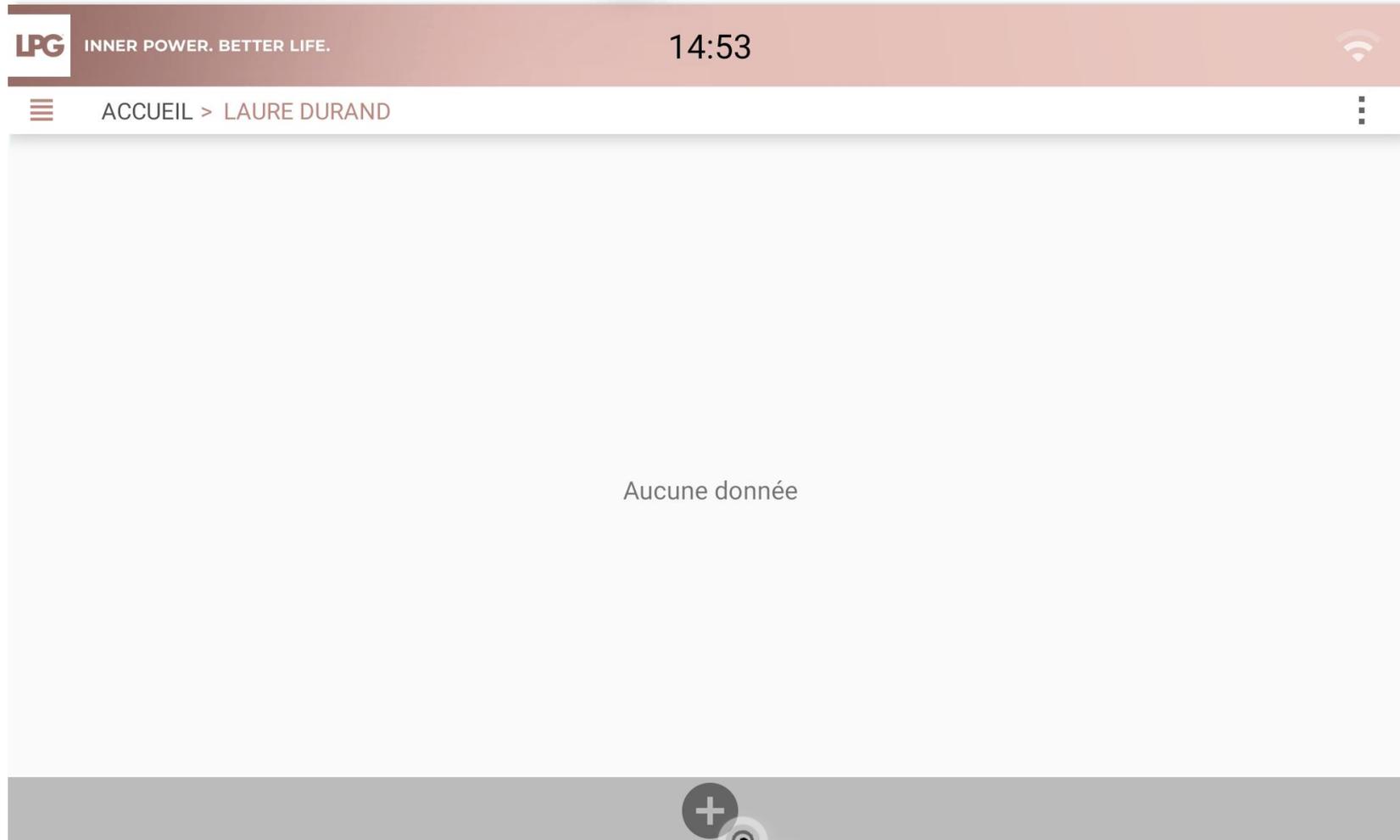

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Pour réaliser une **évaluation visage**, cliquez sur le visage de l'avatar.

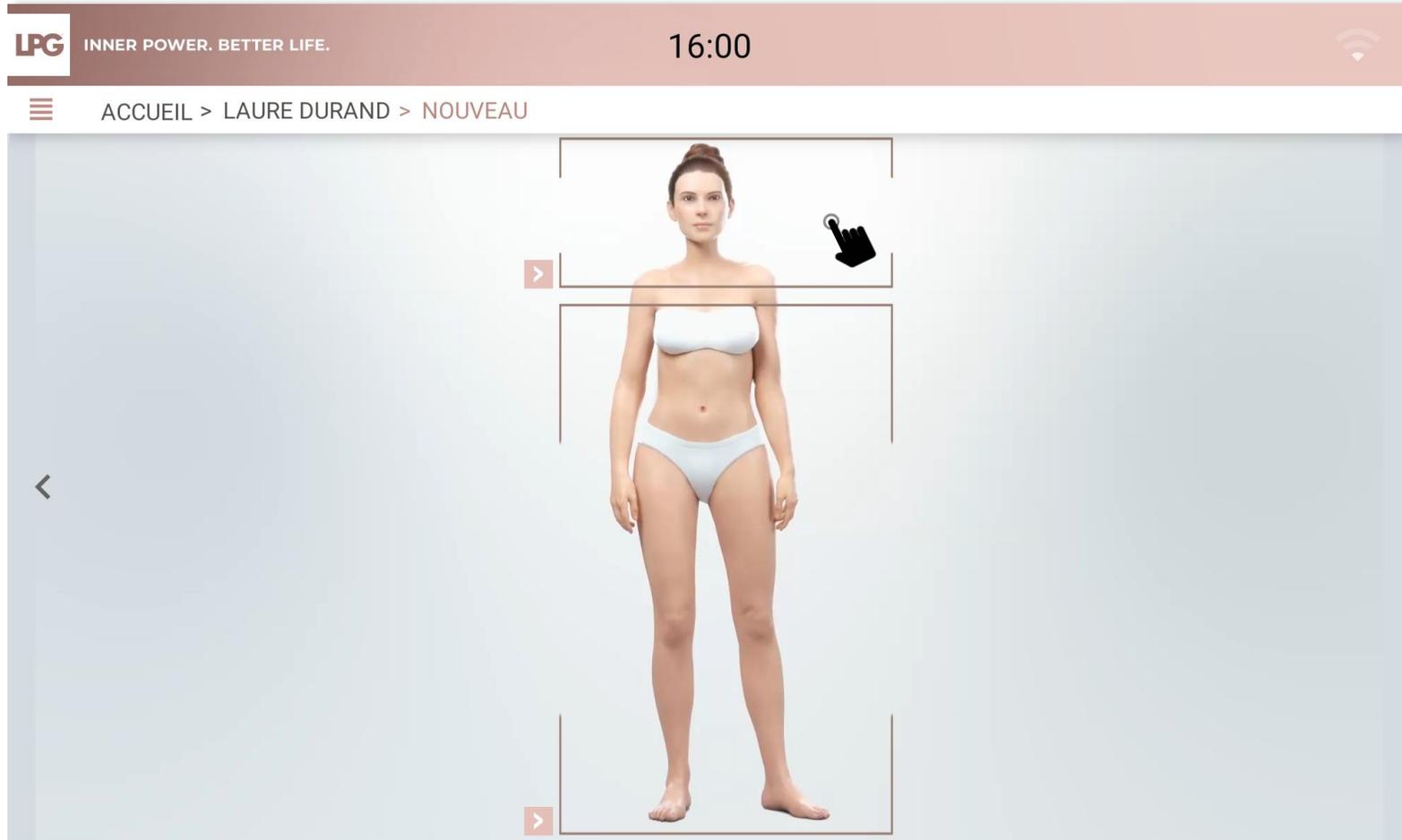

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Renseignez le ou les objectif(s) de votre client(e).


The screenshot shows a mobile application interface with a dark red header. On the left, the LPG logo is followed by the tagline "INNER POWER. BETTER LIFE.". In the center, the time "16:03" is displayed. On the right, there is a Wi-Fi signal icon. Below the header, a navigation bar contains a hamburger menu icon and the breadcrumb "ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU". The main content area is a large white box with a thin border. At the top left of this box is the label "Objectif :". Below it is a large, empty text input field with the placeholder text "Renseignez ici les objectifs désirés". On the left and right sides of the main content area, there are grey vertical bars containing left and right arrow navigation icons, respectively.



INNER POWER.
BETTER LIFE.


RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

- Réalisez trois photos (profil droit, face, profil gauche). Tenez votre tablette en format portrait. La photo ne doit être prise que lorsque les capteurs sont verts. Aidez-vous des repères intégrés pour bien positionner votre client(e). A chaque prise, cliquez sur **ENREGISTRER** ou **ANNULER** si vous souhaitez prendre une nouvelle photo.
- Si vous souhaitez prendre d'autres photos, cliquez sur **AJOUTER PHOTO COMPLÉMENTAIRE** et nommez-la.

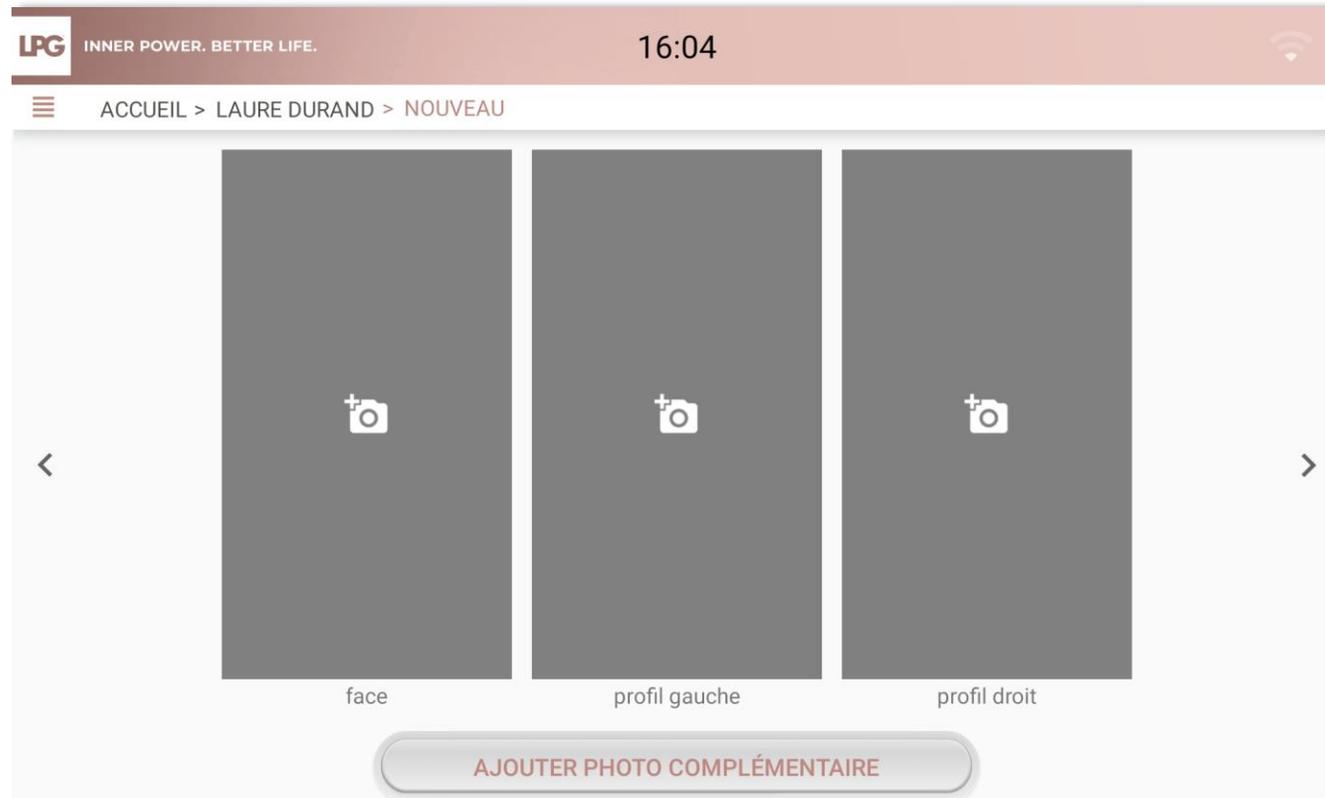

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Sélectionnez le type de vieillissement cutané correspondant.

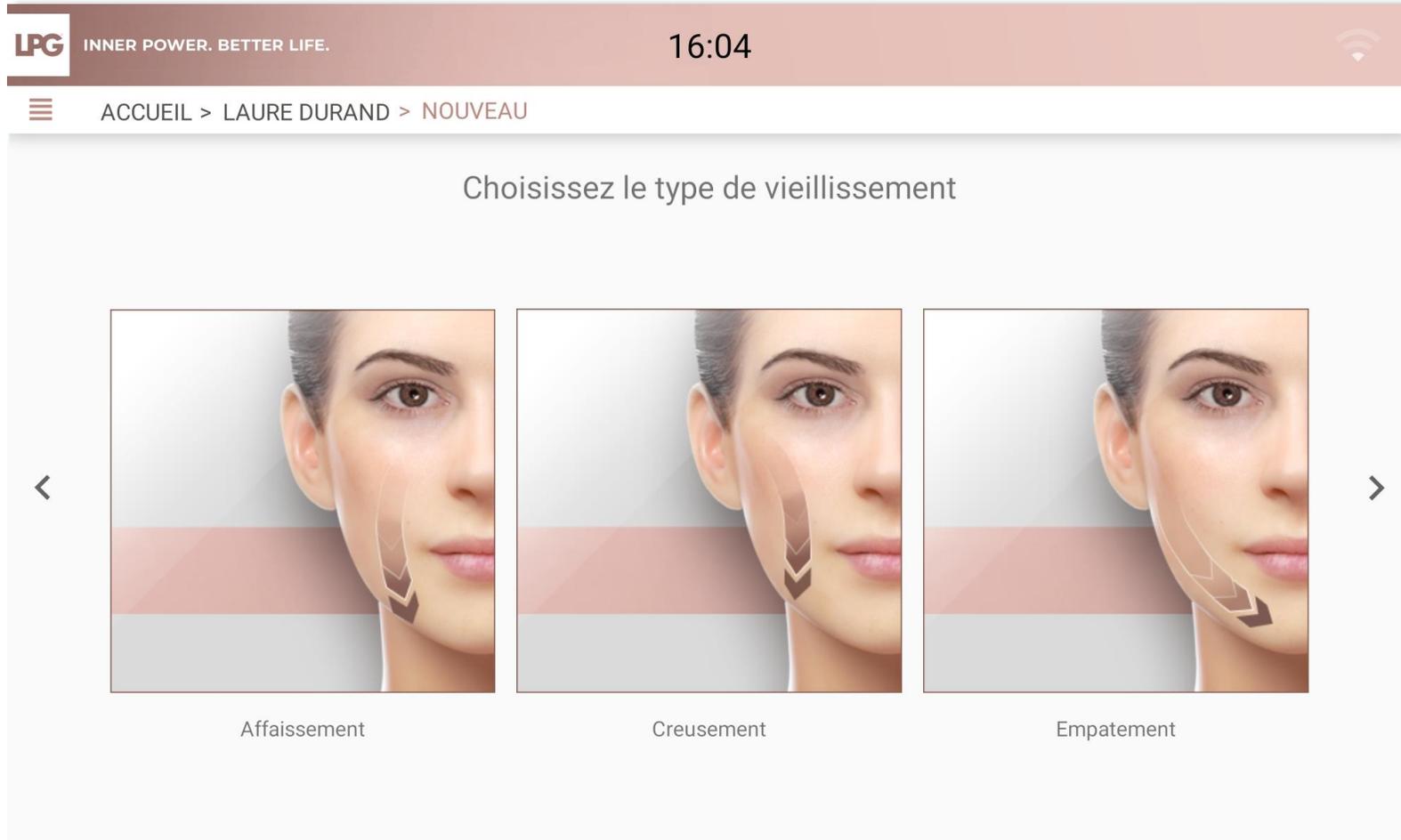

The screenshot shows a mobile application interface for skin aging evaluation. At the top, there is a header bar with the LPG logo and the tagline "INNER POWER. BETTER LIFE." on the left, the time "16:04" in the center, and a Wi-Fi icon on the right. Below the header is a navigation bar with a menu icon and the text "ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU". The main content area is titled "Choisissez le type de vieillissement" and features three side-by-side images of a woman's face. Each image shows a different type of skin aging: "Affaissement" (sagging), "Creusement" (wrinkles), and "Empatement" (swelling). Below each image is a corresponding label. The interface includes left and right navigation arrows.

LPG INNER POWER. BETTER LIFE. 16:04

ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU

Choisissez le type de vieillissement

< >

Affaissement Creusement Empatement




INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Sélectionnez les zones à traiter en priorité.


Pour chaque zone sélectionnée, veuillez choisir une problématique principale.

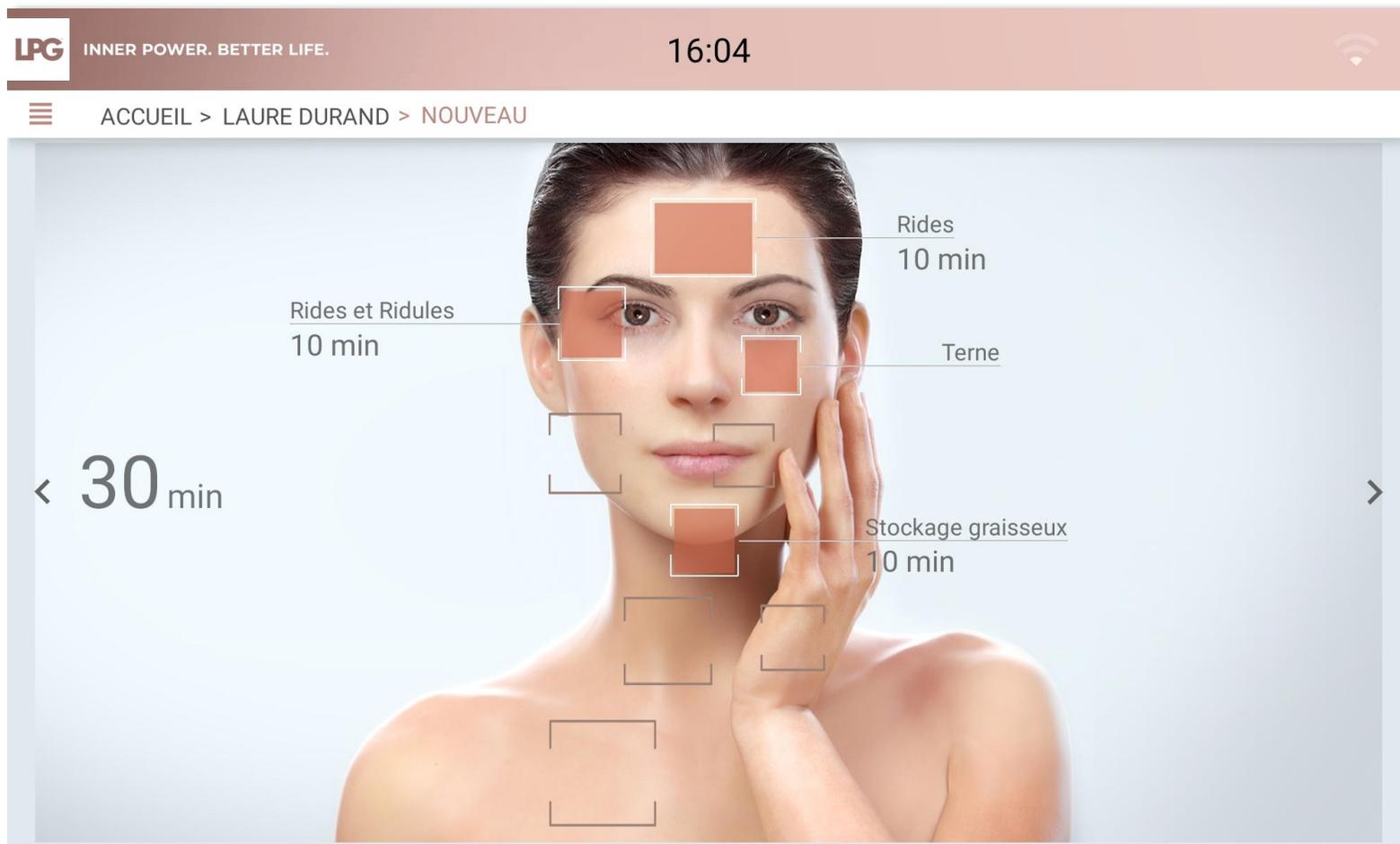

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Déplacez le curseur pour sélectionner le grade correspondant.

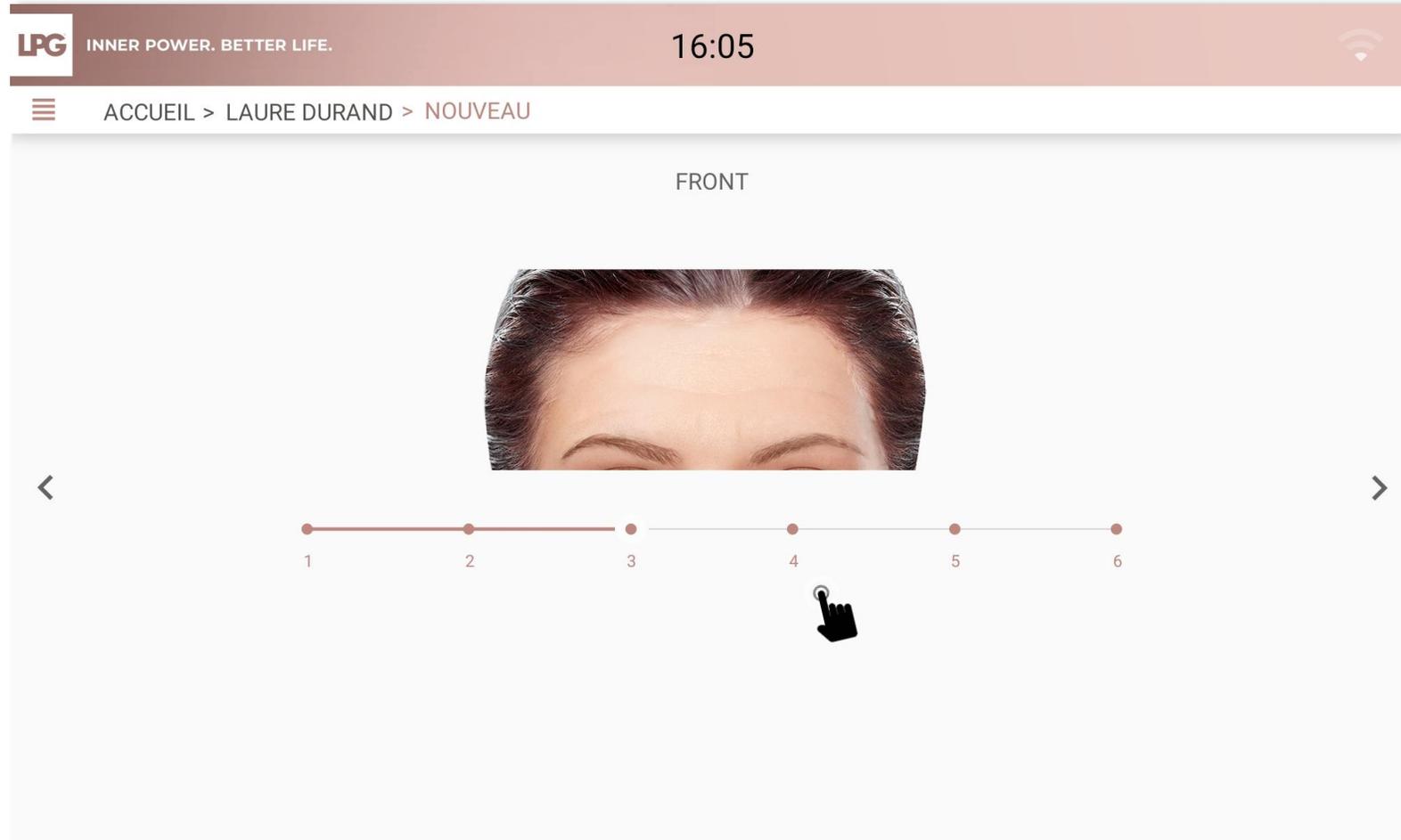


RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Déplacez le curseur pour sélectionner le grade correspondant.



RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Déplacez le curseur pour sélectionner le grade correspondant.

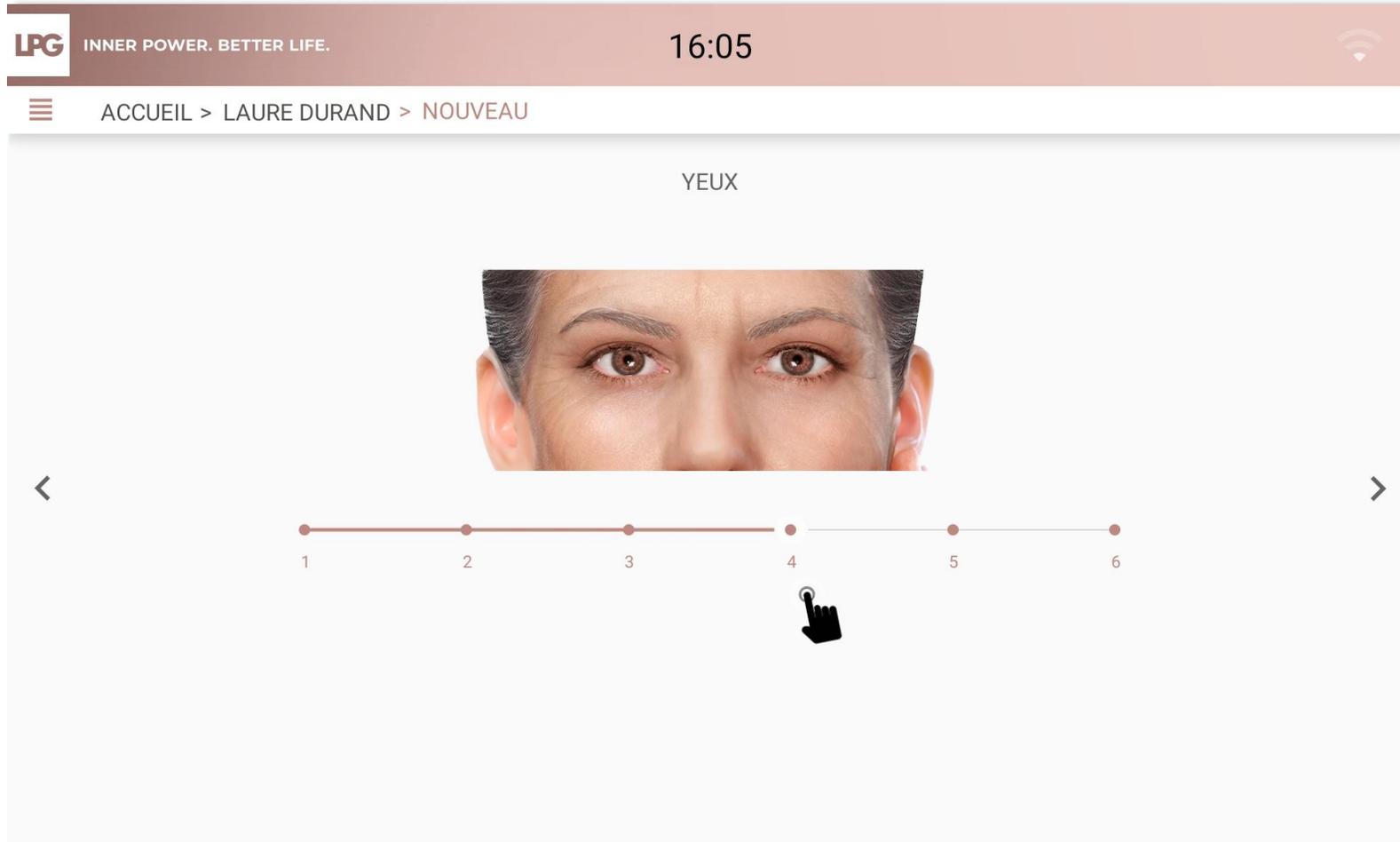

The screenshot shows a mobile application interface for eye evaluation. At the top, there is a status bar with the LPG logo and the slogan "INNER POWER. BETTER LIFE." on the left, the time "16:05" in the center, and a Wi-Fi icon on the right. Below the status bar is a navigation bar with a hamburger menu icon on the left and the text "ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU" in the center. The main content area is titled "YEUX" and features a close-up image of a woman's eyes. Below the image is a horizontal slider with six numbered markers (1 to 6). A hand cursor is positioned over the marker "4", indicating the selected grade. Navigation arrows are visible on the left and right sides of the slider.



INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Sélectionnez le(s) protocole(s) le(s) plus adapté(s) selon les objectifs de votre client(e).

LPG INNER POWER. BETTER LIFE. 16:06

ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU

Soin(s) zone

- Regard Anti-rides
- Zone Frontale
- Double-menton

Soin(s) classique

- Anti-âge Repulpant
- Anti-âge Fermeté
- Éclat
- Anti-âge Affinant

Soin(s) signature

- Sublime Regard & Lèvres
- Hydratation Booster
- Rénovateur Anti-âge

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Evaluation finale et recommandation de protocoles, cosmétiques & endermonutri

- Renseignez le nombre de séances recommandées.
- Cliquez ensuite sur **VALIDER**.

The screenshot displays the LPG mobile application interface. At the top, the LPG logo and the slogan "INNER POWER. BETTER LIFE." are visible on the left, and the time "16:07" is on the right. Below the header, a navigation bar shows "ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU". The main content area is divided into two sections: "MON PROGRAMME" on the left and "MA ROUTINE BEAUTÉ" on the right. The "MON PROGRAMME" section contains three treatment options, each with a list of specific treatments and a "Nombre de séances" field with minus and plus buttons. The "MA ROUTINE BEAUTÉ" section lists various skincare products, each with an information icon. A large "VALIDER" button is positioned at the bottom center, with a hand icon pointing to it.

MON PROGRAMME

Soin(s) zone	
Regard Anti-rides	10 min
Zone Frontale	10 min
Double-menton	10 min
Nombre de séances :	- 6 +
Soin(s) classique	
Éclat	15 min
Nombre de séances :	- 8 +
Soin(s) signature	
Rénovateur Anti-âge	50 min

MA ROUTINE BEAUTÉ

- Eau Micellaire Préparatrice
- Crème Yeux
- Crème Lissante Repulpante
- Gel-Crème Lissant Repulpant
- Soin fermeté affinant
- Sérum Huile-en-eau Réhydratant
- Masque Collagène Post-traitement Visage et Cou
- Baume Yeux

VALIDER

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Le programme de votre client(e) est ensuite enregistré sous le bandeau suivant :

The screenshot shows a mobile application interface for a facial evaluation. At the top, there is a header bar with the LPG logo and the tagline "INNER POWER. BETTER LIFE." on the left, the time "15:04" in the center, and a Wi-Fi signal icon on the right. Below the header, a navigation bar shows a menu icon, the text "ACCUEIL > LAURE DURAND", and a vertical ellipsis menu icon. The main content area is titled "VISAGE" and dated "12 JUIN 2024". It features a list of evaluation points: "• Regard Anti-rides - Zone Frontale - Double-menton", "• Éclat", and "• Rénovateur Anti-âge". To the right of the text are two profile photos of a woman, a calendar icon, a camera icon, and a row of five LPG skincare products. At the bottom right of the main content area are icons for sharing, editing, and deleting. A large plus sign icon is centered at the bottom of the screen.



INNER POWER.
BETTER LIFE.

VISUALISATION DES PROGRAMMES DE VOTRE CLIENT(E)

BILAN PHOTOS


Cette rubrique vous permet de réaliser des bilans photos au cours du programme de votre client(e), de consulter les bilans photos réalisés, de comparer les bilans photos.

MES COSMÉTIQUES

Cette rubrique vous permet de visualiser les cosmétiques associés aux programmes de soins de votre client(e).

MES SÉANCES

Cette rubrique vous permet de visualiser les séances endermologie® visage réalisées (protocole effectué, date). Vous pouvez ainsi suivre précisément le programme de soins de votre client(e).

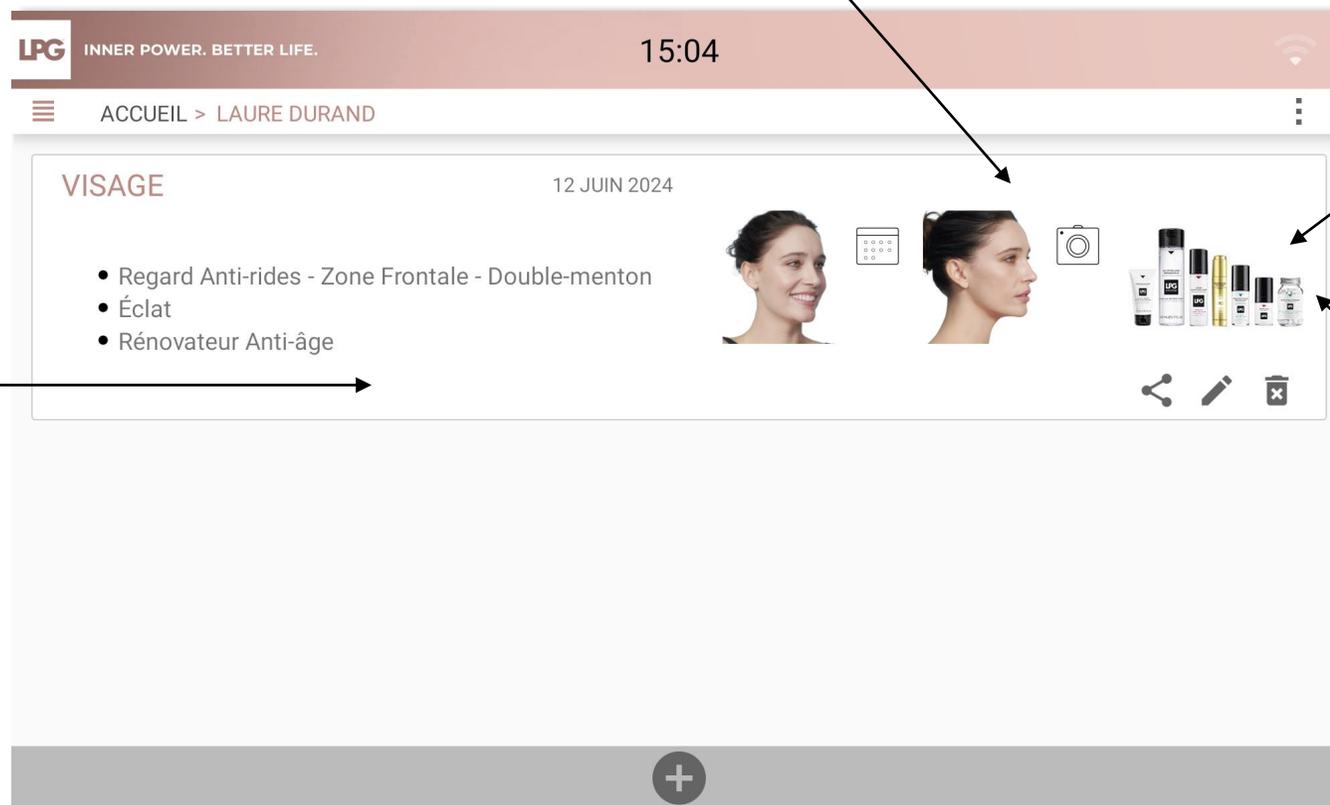

MES ENDERMONUTRI

Cette rubrique vous permet de visualiser les compléments alimentaires associés aux programmes de soins de votre client(e).

CRÉATION NOUVEAU
PROGRAMME VISAGE



INNER POWER.
BETTER LIFE.


VISUALISATION DES SÉANCES

 : Pour valider la séance réalisée en cas de perte de connexion avec votre MOBILIFT M6® CONNECT

 : Pour commenter la séance réalisée (paramètres de traitement utilisés...)

 : Pour supprimer une séance

 : Pour ajouter une séance

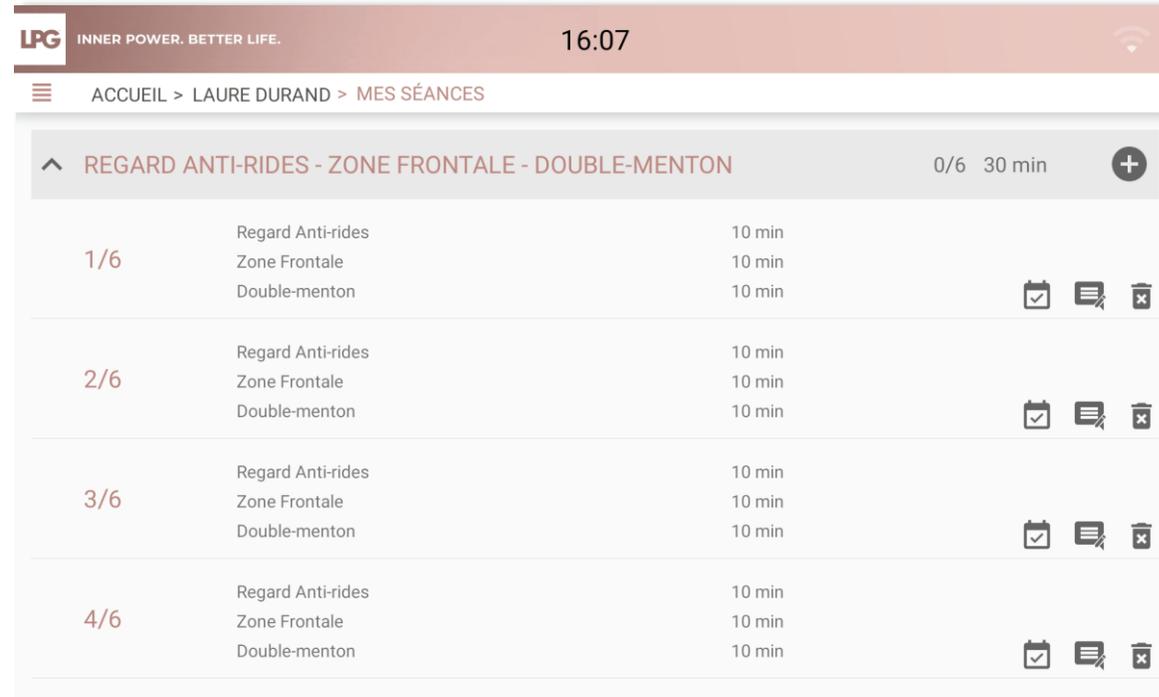

The screenshot shows a mobile application interface for a user named 'LAURE DURAND'. The top status bar displays the time '16:07' and a signal strength indicator. Below the status bar, the navigation path is 'ACCUEIL > LAURE DURAND > MES SÉANCES'. The main content area shows a session titled 'REGARD ANTI-RIDES - ZONE FRONTALE - DOUBLE-MENTON' with a progress indicator '0/6' and a duration of '30 min'. The session is divided into four rows, each representing a sub-session. Each row contains the sub-session number (1/6, 2/6, 3/6, 4/6), the sub-session name, and the duration (10 min). To the right of each row are three icons: a calendar icon, a comments icon, and a trash icon.

Progress	Sub-session Name	Duration	Calendar	Comments	Trash
1/6	Regard Anti-rides Zone Frontale Double-menton	10 min 10 min 10 min			
2/6	Regard Anti-rides Zone Frontale Double-menton	10 min 10 min 10 min			
3/6	Regard Anti-rides Zone Frontale Double-menton	10 min 10 min 10 min			
4/6	Regard Anti-rides Zone Frontale Double-menton	10 min 10 min 10 min			



INNER POWER.
BETTER LIFE.

VISUALISATION DES COSMÉTIQUES

Pour chaque programme de soin, retrouvez les cosmétiques à associer et à recommander à votre client(e).

The screenshot displays the LPG mobile application interface. At the top, the header includes the LPG logo, the slogan "INNER POWER. BETTER LIFE.", the time "16:08", and a Wi-Fi signal icon. Below the header, a breadcrumb trail reads "ACCUEIL > LAURE DURAND > MA ROUTINE BEAUTÉ". The main content area is split into two columns. The left column features a category "REGARD ANTI-RIDES - ZONE FRONTALE - DOUBLE-MENTON" with an upward arrow icon. Underneath, five product items are listed, each with a small image and text: "EAU MICELLAIRE PRÉPARATRICE" (highlighted in a light orange box), "CRÈME YEUX", "CRÈME LISSANTE REPULPANTE", "GEL-CRÈME LISSANT REPULPANT", and "SOIN FERMETÉ AFFINANT". The right column is dedicated to the selected product, "EAU MICELLAIRE PRÉPARATRICE", featuring a larger product image, a list of benefits: "• Démaquille et nettoie les impuretés" and "• Hydrate et apaise", and usage instructions: "Imbibez un coton et nettoyez le visage, les yeux et le cou, matin et soir. Séchez la peau délicatement sans rincer."



INNER POWER.
BETTER LIFE.

VISUALISATION DES ENDERMONUTRI

Pour chaque programme de soin, retrouvez les compléments alimentaires à associer et à recommander à votre client(e).

The screenshot shows the LPG mobile application interface. At the top, the LPG logo and tagline 'INNER POWER. BETTER LIFE.' are on the left, the time '15:56' is in the center, and a Wi-Fi icon is on the right. Below the header, a navigation bar shows 'ACCUEIL > LAURE DURAND > MA ROUTINE BEAUTÉ'. The main content area is split into two columns. The left column is a vertical list of product categories: 'REGARD ANTI-RIDES - DOUBLE-MENTON - COU', 'BOOSTER DE VITALITÉ' (highlighted in a pink box), 'ACIDE HYALURONIQUE', 'COLLAGÈNE', 'OMÉGA', and 'HYDRATATION ECLAT'. The right column features a large heading 'BOOSTER DE VITALITÉ' above a product image of a jar of capsules. To the right of the image is a bulleted list of benefits: 'Augmente les performances physiques et mentales', 'Détoxifie le corps', and 'Booste les défenses naturelles'. Below the image and list, the usage instructions are provided: '2 gélules par jour. À consommer de préférence le matin et avant 15 heures pour éviter toute difficulté d'endormissement. Pour des résultats optimaux, suivez ce traitement pendant au moins 2 mois d'affilée. Cure réalisable 2 à 3 fois par an ou à chaque début de cure minceur.'



INNER POWER.
BETTER LIFE.





RÉALISER UN BILAN PHOTOS



INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UN BILAN PHOTOS

Après avoir cliqué sur la vignette concernée, cliquez sur  en bas de l'écran pour réaliser un nouveau bilan photos. Les photos prises lors de l'évaluation initiale apparaissent automatiquement à cet emplacement.

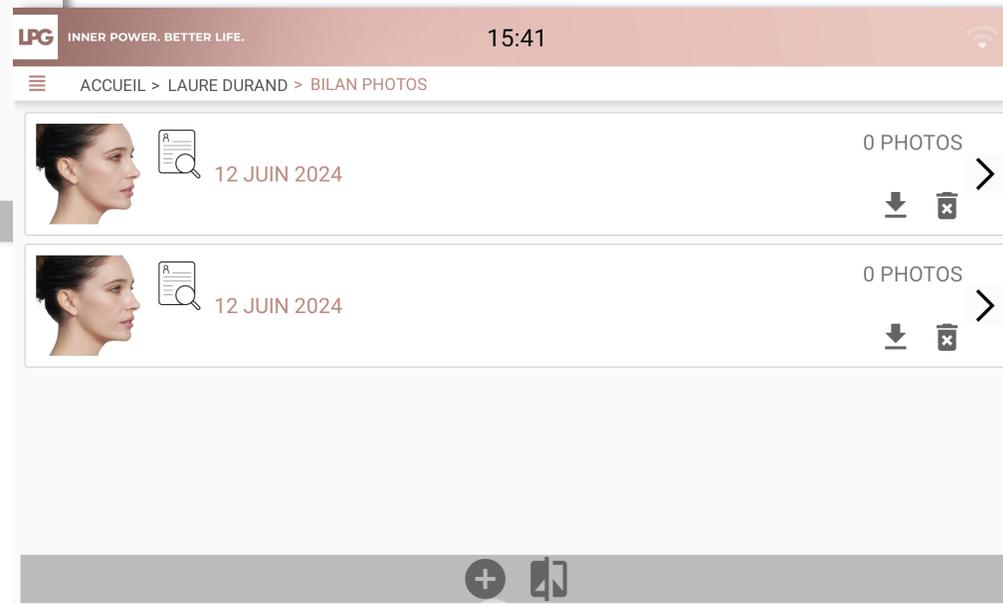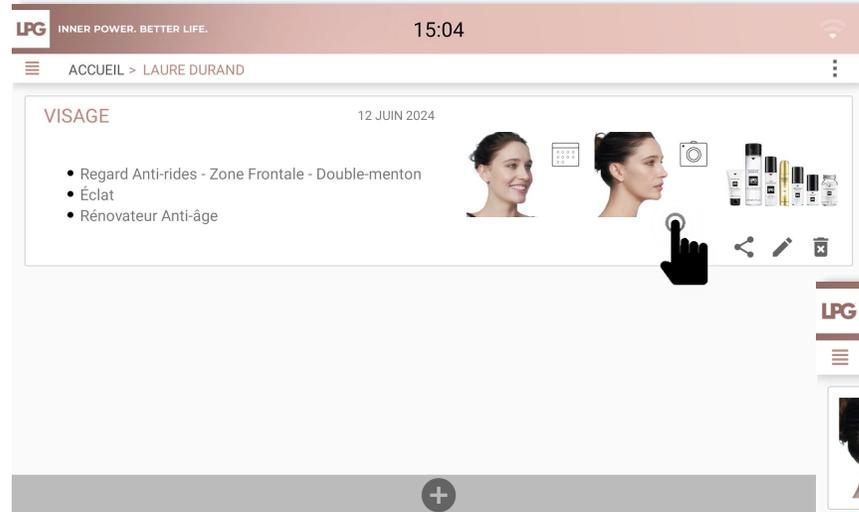

 : Suppression du bilan photos

 : Sauvegarde du bilan photos sur votre tablette



INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UN BILAN PHOTOS

Les objectifs de l'évaluation initiale sont volontairement affichés (rappel).

Vous êtes libre d'ajouter les commentaires que vous souhaitez (nombre de séances effectuées, résultats constatés...)


The screenshot shows a mobile application interface with a dark red header. The header contains the LPG logo and the slogan 'INNER POWER. BETTER LIFE.' on the left, the time '16:09' in the center, and a Wi-Fi signal icon on the right. Below the header is a navigation bar with a hamburger menu icon on the left and the breadcrumb text 'ACCUEIL > LAURE DURAND > BILAN PHOTOS'. The main content area is a light gray rectangle containing two text input fields. The first field is labeled 'Objectif :'. The second field is larger and contains the placeholder text 'Ajouter votre commentaire ici'. On the left and right sides of this second field, there are small black arrow icons pointing left and right respectively.



INNER POWER.
BETTER LIFE.


RÉALISER UN BILAN PHOTOS

- Réalisez trois photos (profil droit, face, profil gauche). Tenez votre tablette en format portrait. La photo ne doit être prise que lorsque les capteurs sont verts. Aidez-vous des repères intégrés pour bien positionner votre client(e). A chaque prise, cliquez sur **ENREGISTRER** ou **ANNULER** si vous souhaitez prendre une nouvelle photo.
- Si vous souhaitez prendre d'autres photos, cliquez sur **AJOUTER PHOTO COMPLÉMENTAIRE** et nommez-la.

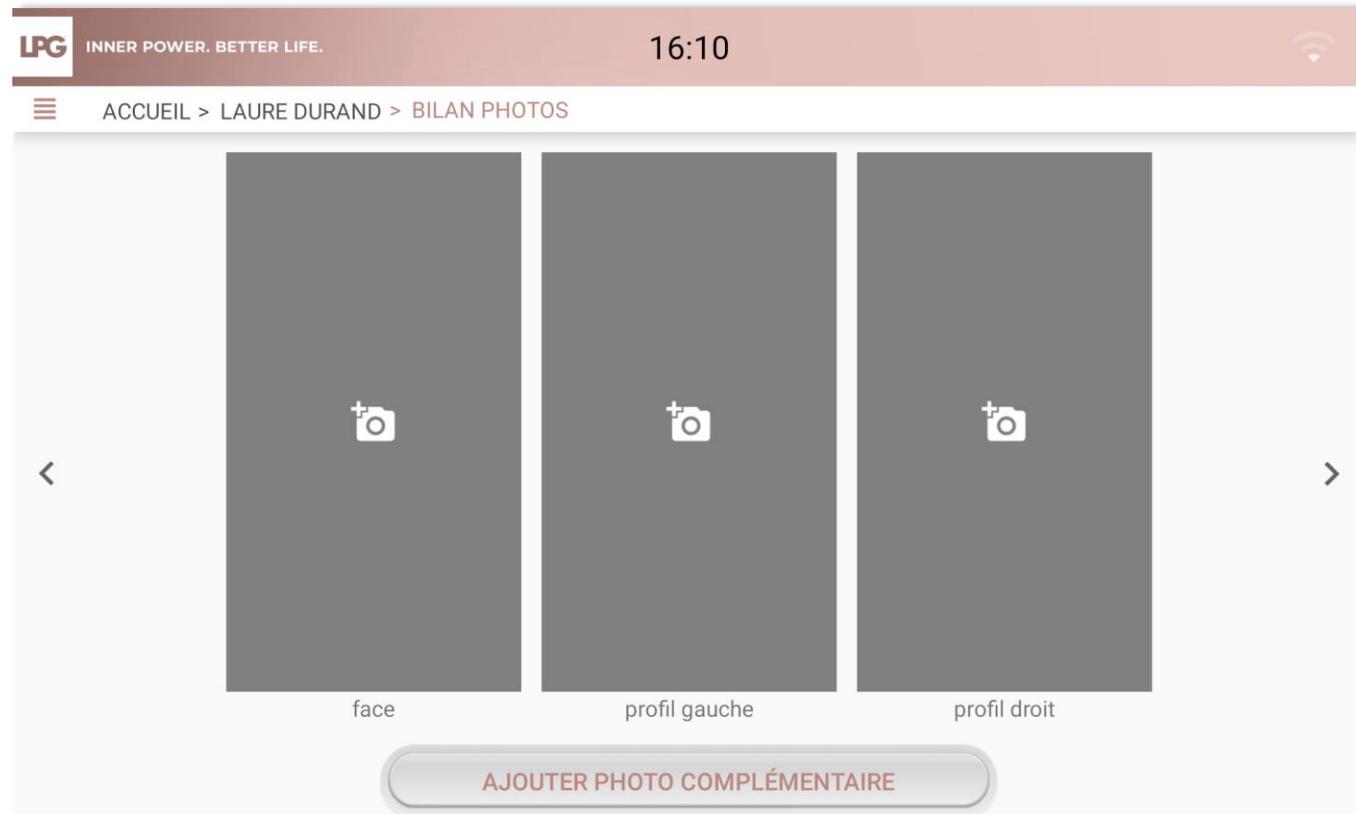

RÉALISER UN BILAN PHOTOS

Déplacez le curseur pour sélectionner le grade correspondant et ainsi noter les évolutions par rapport à l'évaluation initiale.

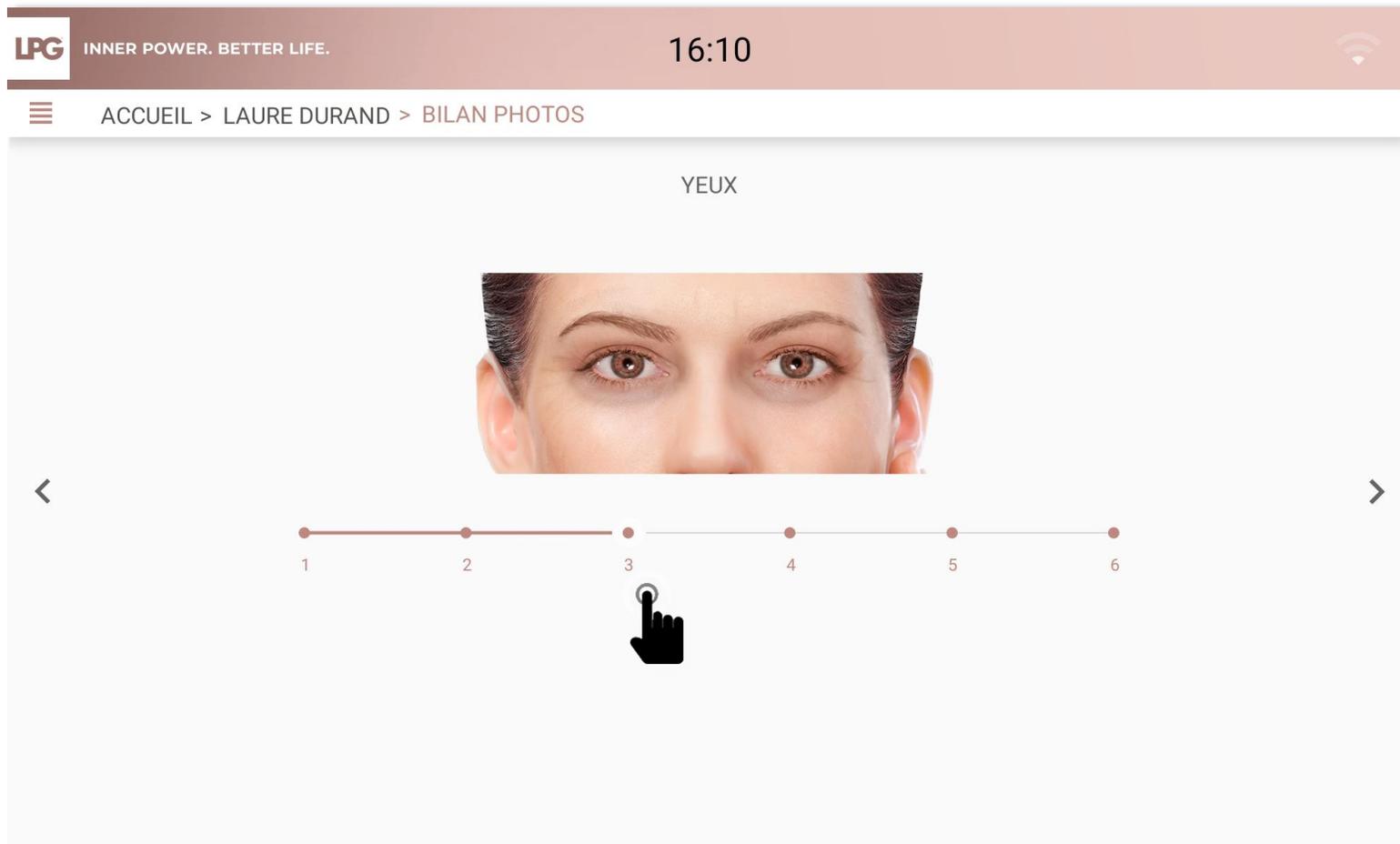




COMPARER DES BILANS PHOTOS



INNER POWER.
BETTER LIFE.

COMPARER UN BILAN PHOTOS


Pour comparer des bilans photos, cliquez sur  en bas de l'écran.

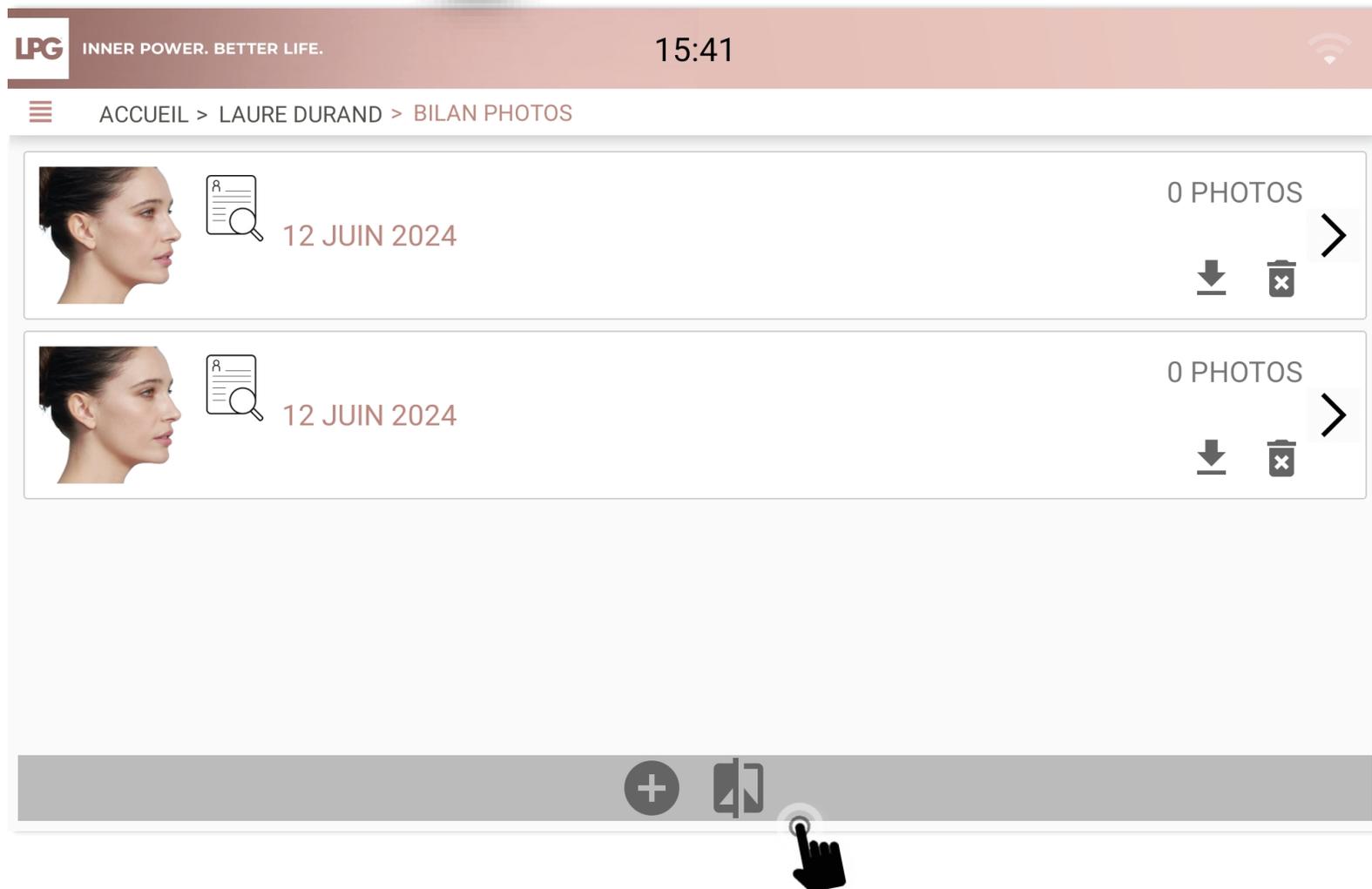

INNER POWER.
BETTER LIFE.

COMPARER UN BILAN PHOTOS

- Sélectionnez le bilan photos qui vous intéresse à l'aide des flèches.
- Sélectionnez ensuite la photo : face, dos, profil droit, profil gauche.
- Pour sauvegarder la comparaison photos, cliquez sur 
- Enfin, nommez votre fichier et enregistrez à l'emplacement que vous souhaitez sur votre tablette

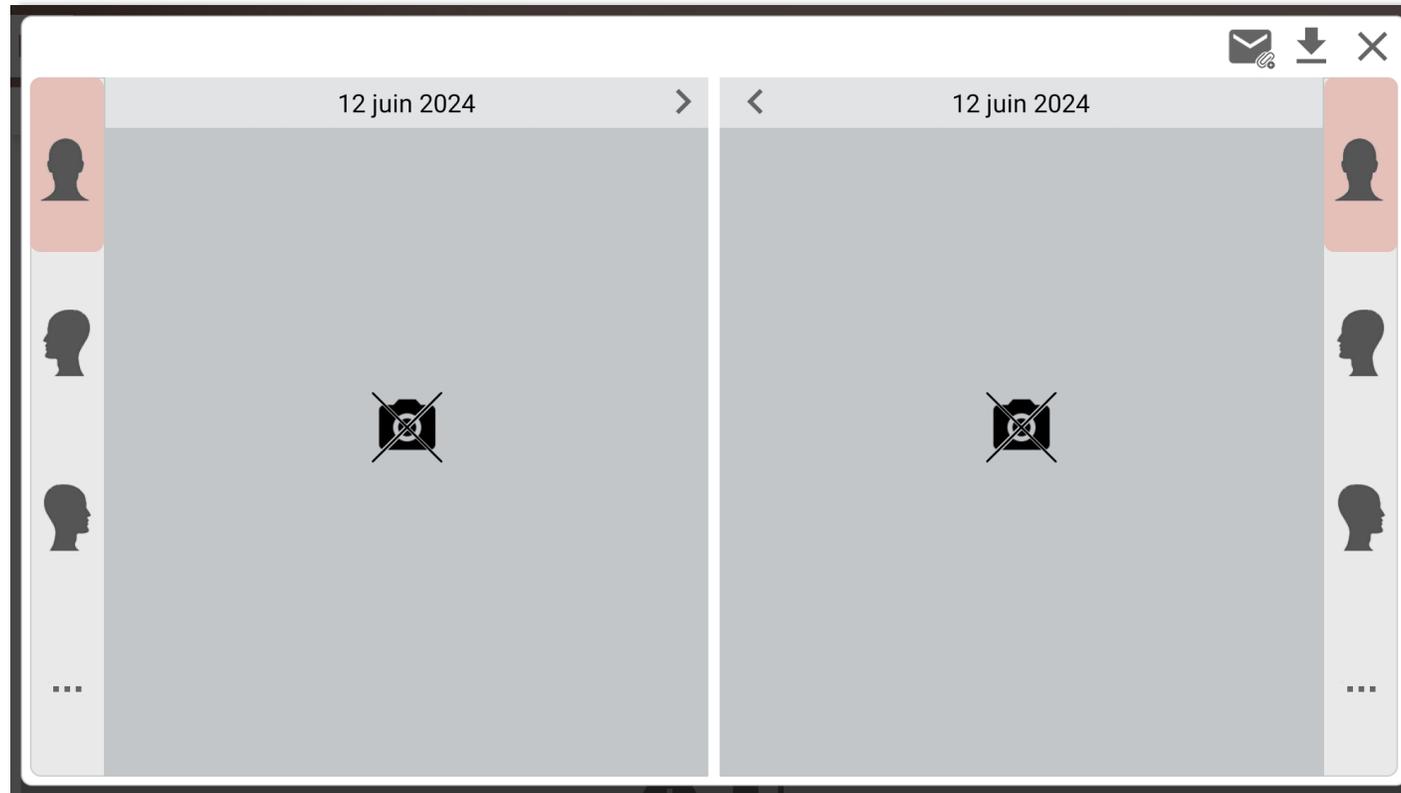




ENVOYER UN PROGRAMME
DE SOINS À SA/SON
CLIENT(E)



INNER POWER.
BETTER LIFE.


ENVOI DU PROGRAMME

- Choisissez le programme concerné et cliquez sur 
- Sélectionnez les cosmétiques endermologie® et compléments alimentaires à importer dans le document puis cliquez sur **OK**.

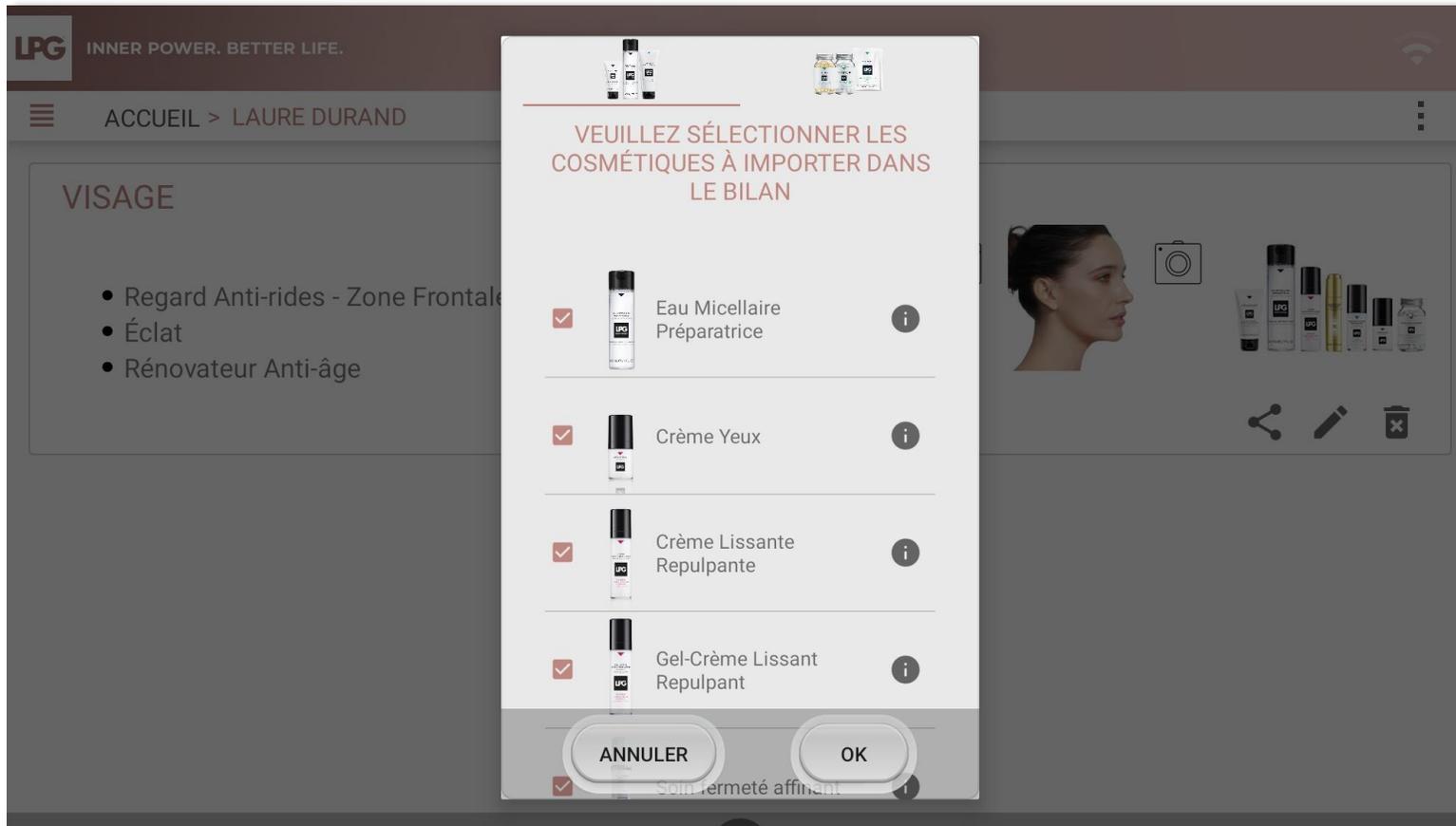

ENVOI DU PROGRAMME

Après avoir configuré votre boîte email, personnalisez le message destiné à votre client(e).
Le programme (document PDF) est automatiquement attaché à votre email.
Cliquez ensuite sur **ENVOYER**.

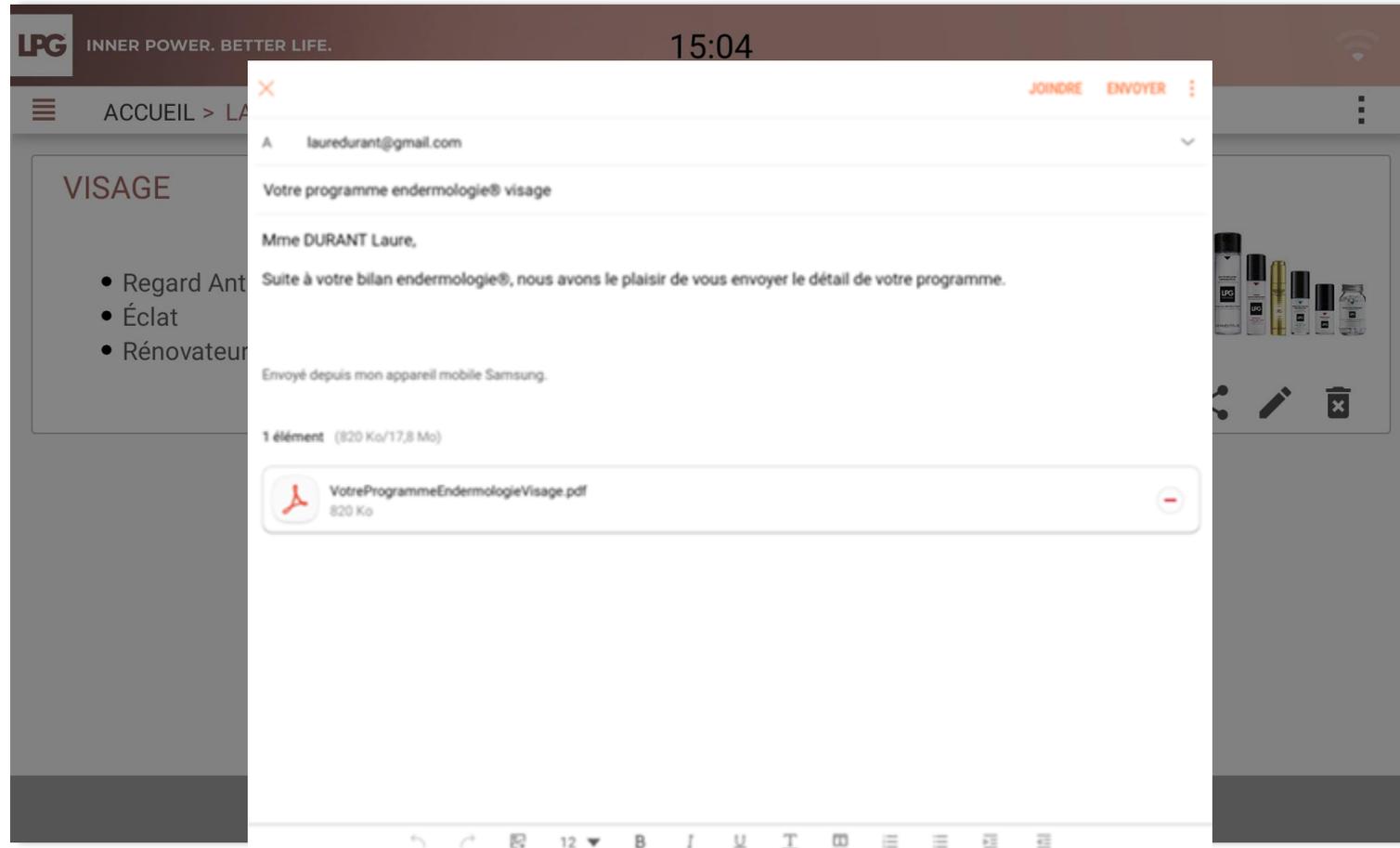

INNER POWER.
BETTER LIFE.


LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE SOINS SUR VOTRE MOBILIFT M6[®] CONNECT



INNER POWER.
BETTER LIFE.

LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE SOINS

Pour connecter votre tablette à votre MOBILIFT M6® CONNECT, allez dans le menu **CONFIGURATION**  de votre appareil puis cliquez sur **TABLETTE**.

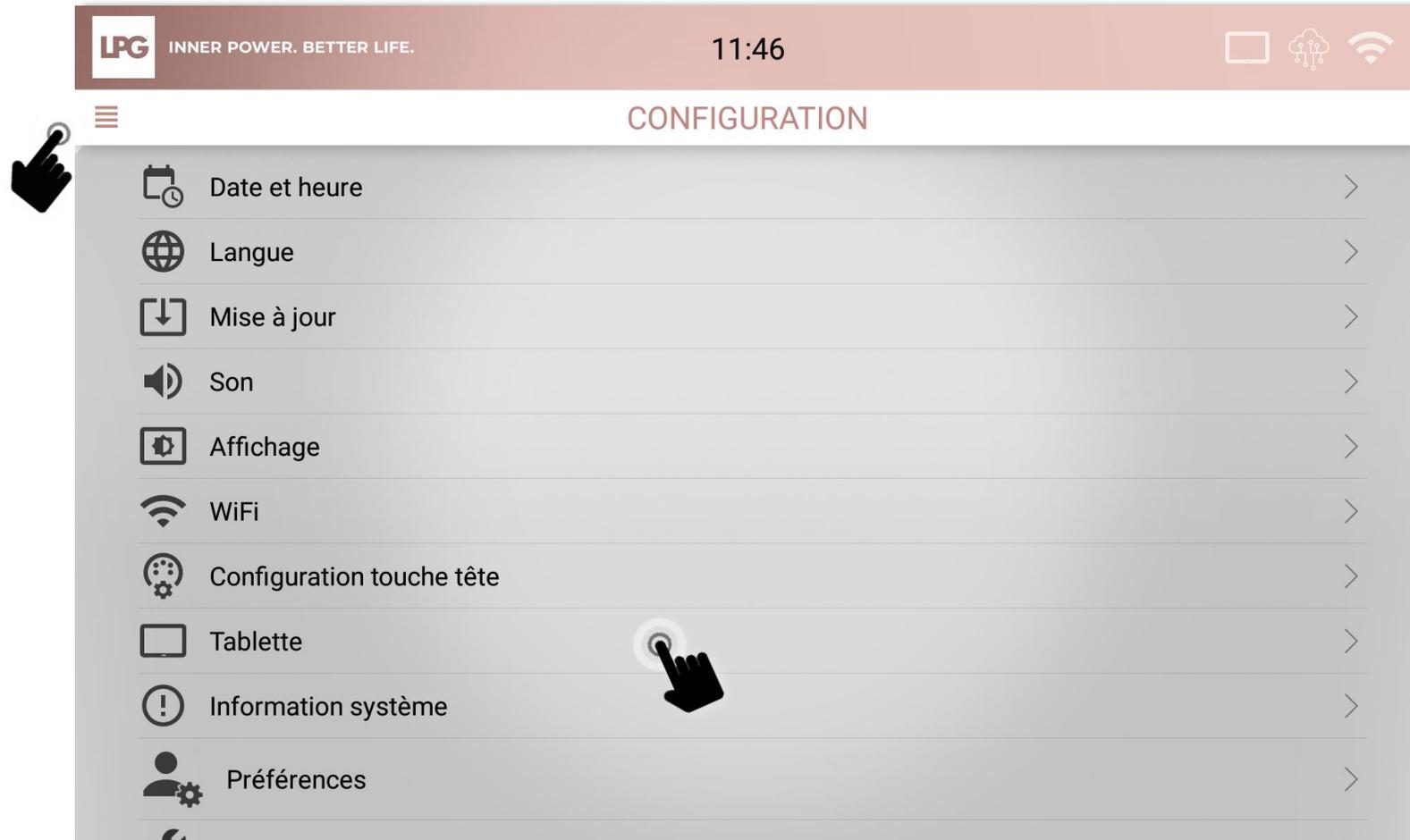

LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE SOINS


L'affichage ci-dessous ainsi que l'icône « tablette » en haut à droite de l'écran  vous indique que votre tablette et votre appareil sont bien connectés.



INNER POWER.
BETTER LIFE.

LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE SOINS


Après avoir connecté votre tablette à votre MOBILIFT M6® CONNECT, cliquez sur **SÉANCE PERSONNALISÉE**.

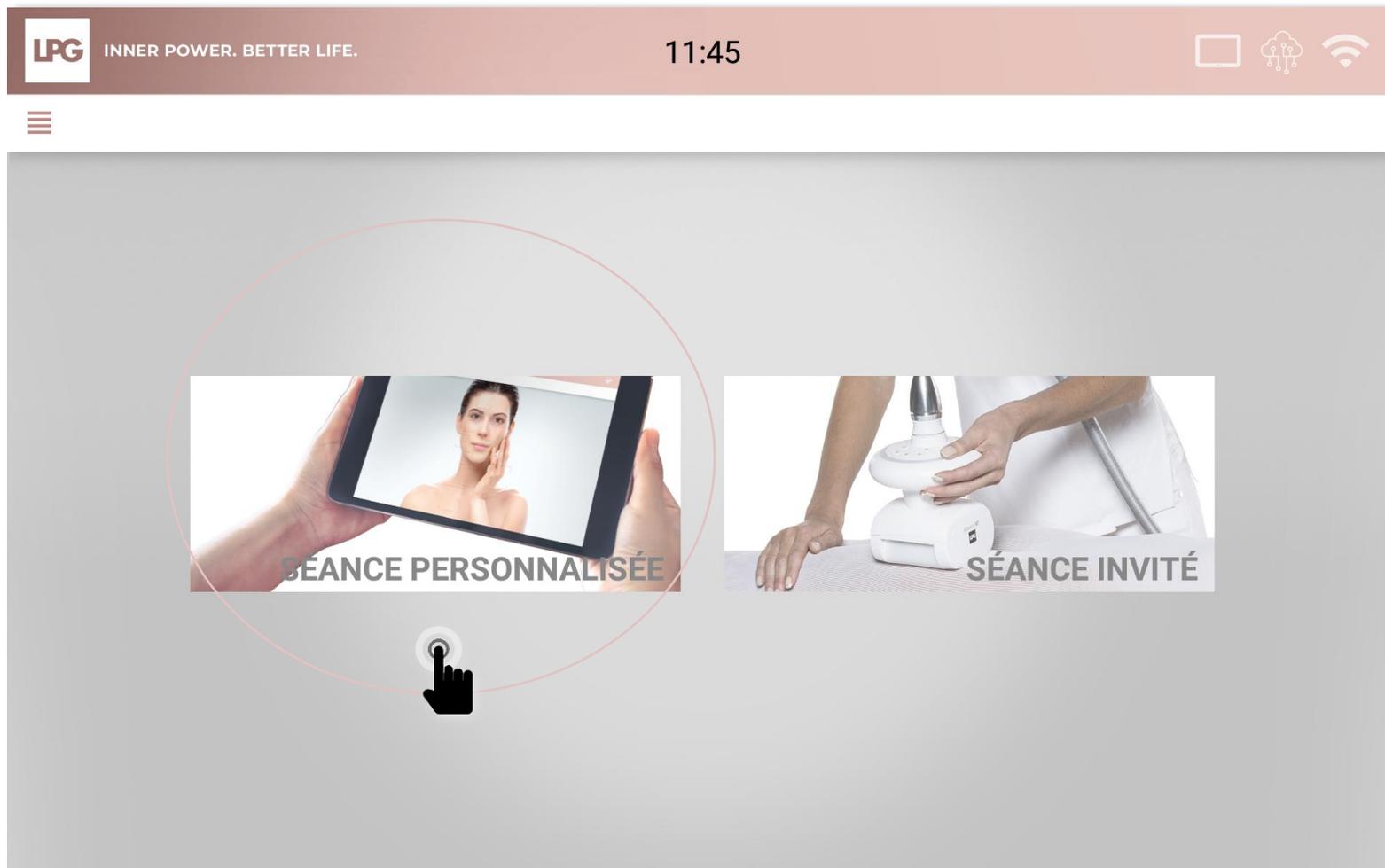

INNER POWER.
BETTER LIFE.

LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE SOINS

Cliquez sur le client concerné dans votre base de données.

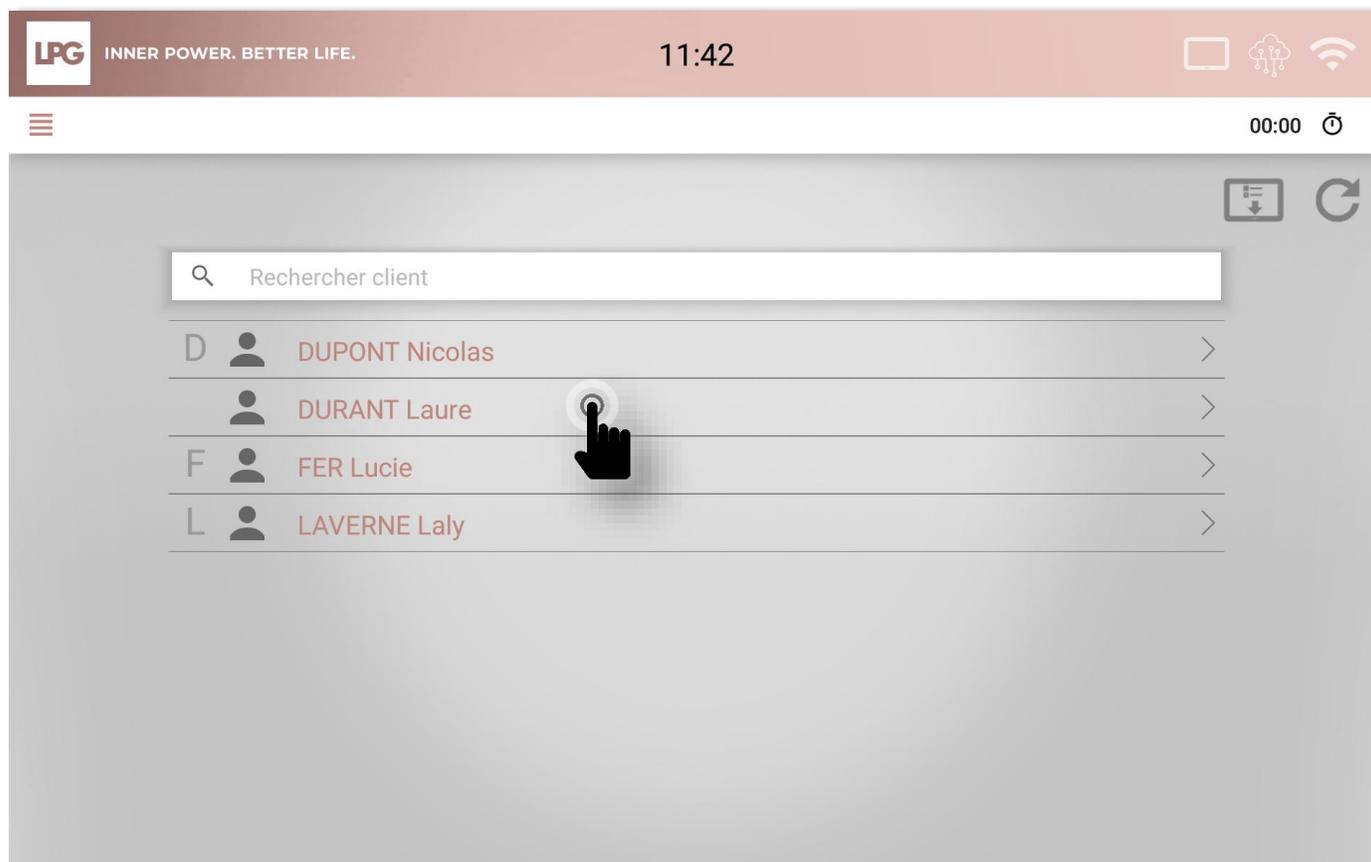

Les programmes des client(e)s peuvent être téléchargés lorsque la tablette est connectée. Ils seront alors accessibles à tout moment. Les résultats seront envoyés dès que la tablette réapparaîtra.



INNER POWER.
BETTER LIFE.

LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE SOINS

Cliquez ensuite sur le programme de soins souhaité.



En cas de perte de connexion, validez manuellement sur votre tablette la séance réalisée et cliquez sur  pour mettre à jour votre MOBILIFT M6® CONNECT.



INNER POWER.
BETTER LIFE.

LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE SOINS

La séance peut démarrer !

LPG INNER POWER. BETTER LIFE. 11:44

LAURE DURANT > ANTI-ÂGE REPULPANT - Nettoyer et préparer la peau 00:00

Etape 1/18 0:21 -29:39

EAU MICELLAIRE PRÉPARATRICE
Appliquer sur l'ensemble du visage et du cou à l'aide de cotons imprégnés.
Bien sécher la peau à l'aide de mouchoirs en papier doux.



EAU MICELLAIRE PRÉPARATRICE
PREPARING MICELLAR WATER
LPG
endermologie
DÉMAQUILLE,
NETTOIE, HYDRATE
REMOVES MAKEUP,
CLEANSES, HYDRATES
Micelles, Sucres, Glycérine
400 ML e / 13,5 FL. OZ.




SÉANCES LIBRES



INNER POWER.
BETTER LIFE.

VISUALISATION DES SÉANCES LIBRES

Pour accéder aux séances libres de vos client(e)s, exécutées via « Séance personnalisée » sur l'écran de votre MOBILIFT M6® CONNECT, cliquez sur  puis sur mes « **Mes séances libres** ».

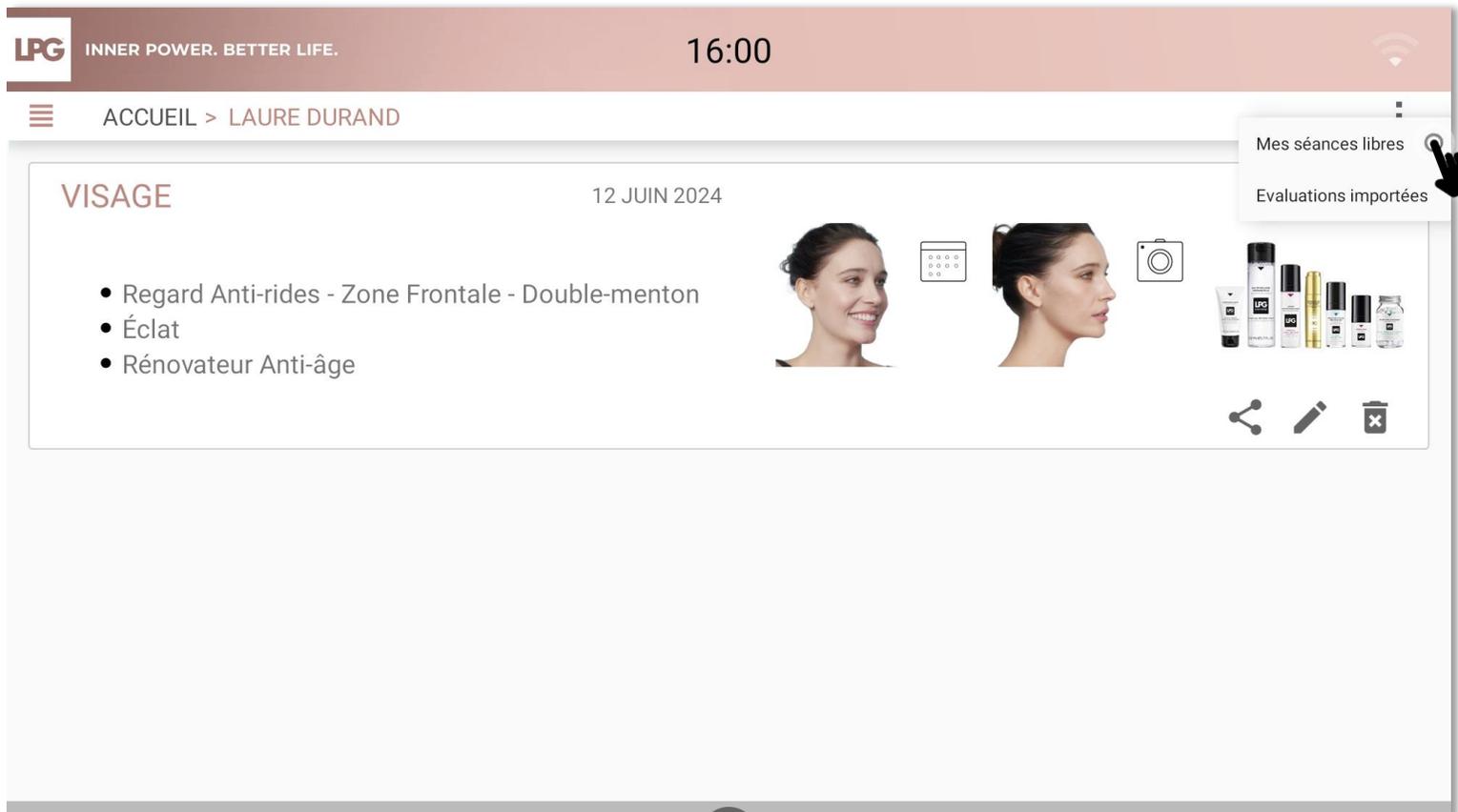

Une séance libre est une séance réalisée en dehors d'un programme de soin.



INNER POWER.
BETTER LIFE.



SAUVEGARDE



INNER POWER.
BETTER LIFE.

SAUVEGARDE





Ne sautez pas cette étape ! En cas de problème, vous pourriez perdre l'intégralité de vos données.

Avant de commencer, nous vous recommandons de **sauvegarder votre base de données sur un support externe de votre choix** (ordinateur personnel, carte micro SD disponible en grande surface ou dans les magasins spécialisés...).

Par défaut, votre base de données sera stockée sur votre tablette.

Veillez vous rendre dans le menu **CONFIGURATION** de l'application endermoscan (cliquez sur la barre de menu en haut à gauche). Cliquez sur **PARAMÈTRES** puis **BASE DE DONNÉES**.

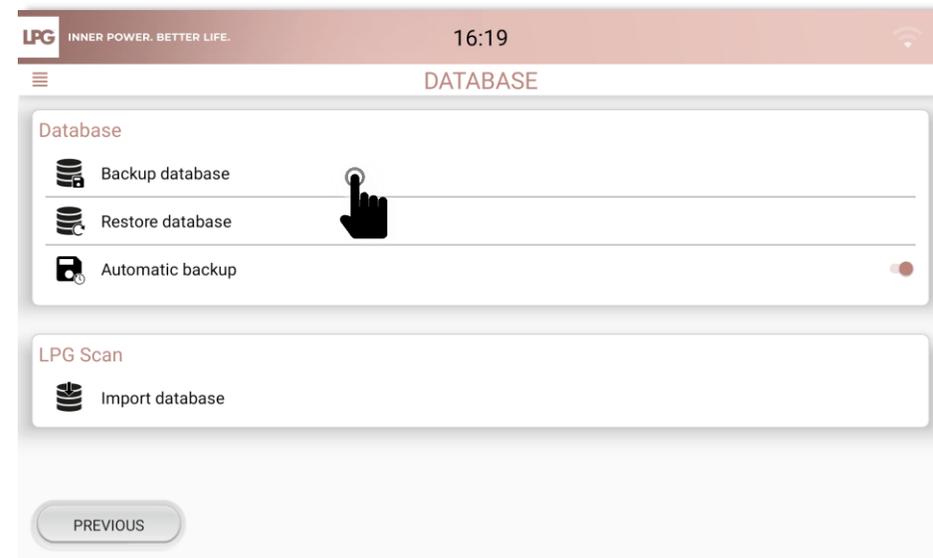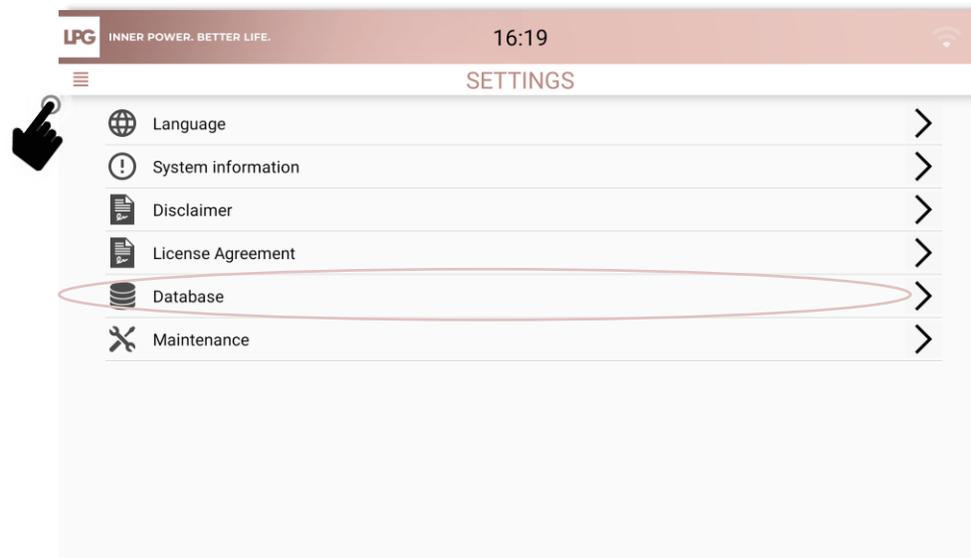

Cliquez sur « **SAUVEGARDER BASE DE DONNÉES** » et choisissez l'emplacement de sauvegarde de vos données sur le support de votre choix : carte micro SD, tablette, ordinateur personnel...



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

SAUVEGARDE AUTOMATIQUE

Vous pouvez planifier une sauvegarde automatique de vos données.
Pour cela, cliquez sur **SAUVEGARDE AUTOMATIQUE** puis sur le curseur  pour l'activer.

Choisissez ensuite la périodicité (tous les jours, tous les 5 jours ou tous les 10 jours), l'emplacement de sauvegarde de vos données.

Renseignez ensuite un mot de passe qui protégera l'accès à votre base de données. **Veillez le conserver précieusement car il pourra vous être demandé ultérieurement.** Pour des raisons de confidentialité, LPG SYSTEMS n'a pas accès à votre mot de passe et ne peut vous le demander. **Il est sous votre entière responsabilité.**

Enfin, cliquez sur **OK**.



INNER POWER.
BETTER LIFE.




MISES À JOUR



INNER POWER.
BETTER LIFE.


MISES À JOUR

Lorsqu'une mise à jour est disponible, l'écran suivant apparaît au démarrage de l'application.
Le « **i** » permet de connaître le contenu de cette mise à jour.
Appuyez sur **OK** pour lancer le téléchargement et l'installation.

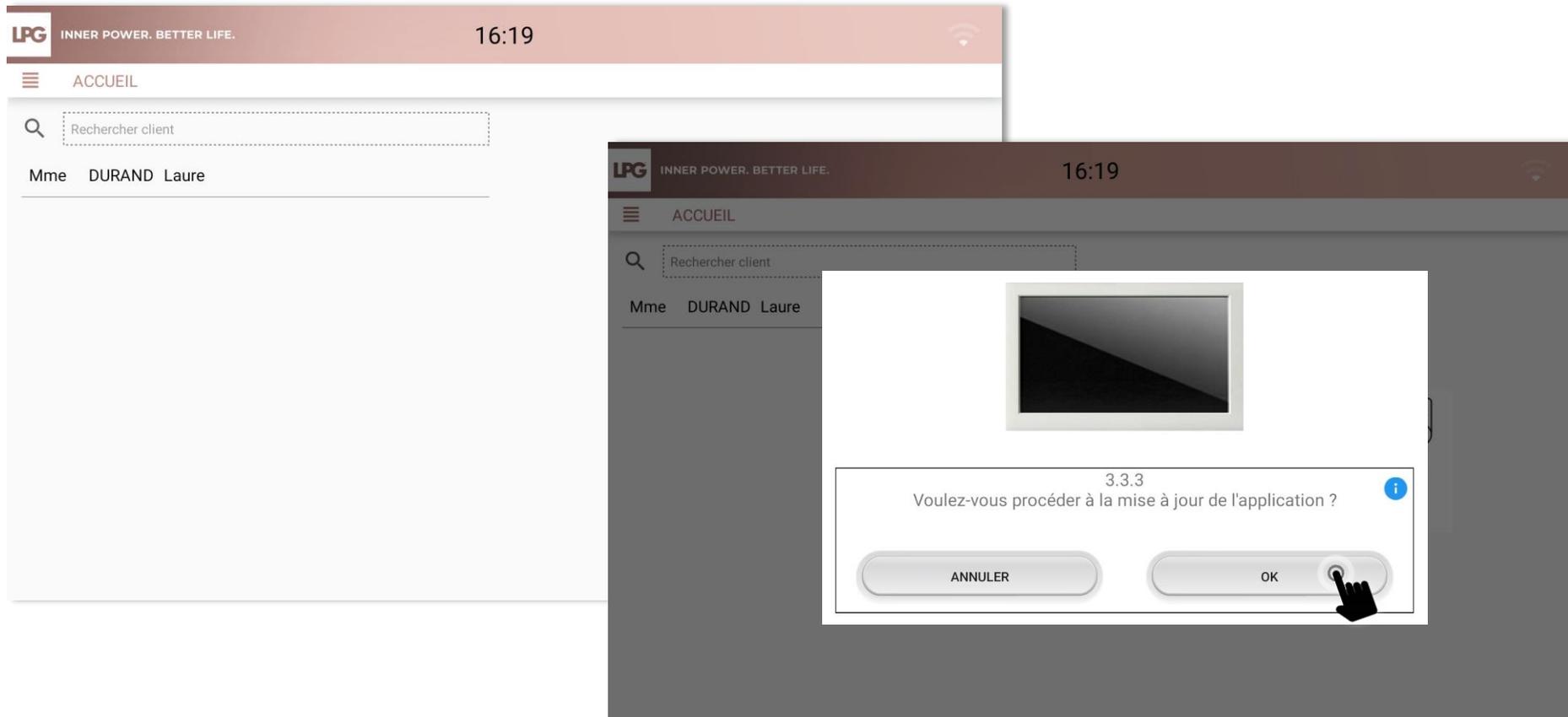

MISES À JOUR

Veillez suivre les instructions qui s'affichent à l'écran et poursuivez en cliquant sur **OK**.

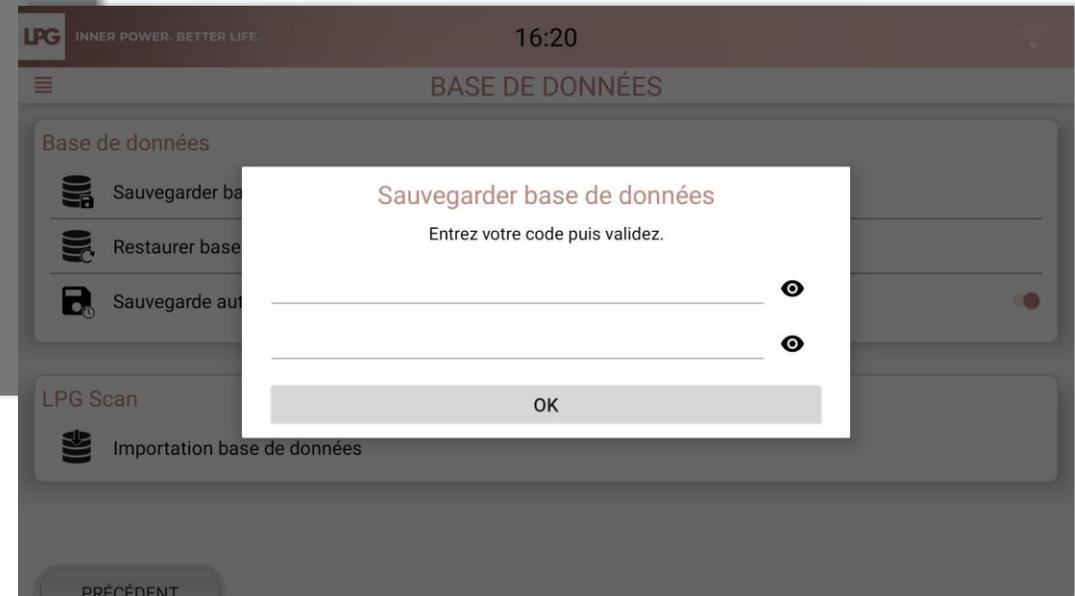

Renseignez un mot de passe qui protégera l'accès à votre base de données. **Veillez le conserver précieusement car il pourra vous être demandé ultérieurement.** Pour des raisons de confidentialité, LPG SYSTEMS n'a pas accès à votre mot de passe et ne peut vous le demander. **Il est sous votre entière responsabilité.**

LPG SYSTEMS ne pourra être tenue responsable d'une perte éventuelle de vos données.




INNER POWER.
BETTER LIFE.

MISES À JOUR

À la fin de la sauvegarde, votre tablette peut afficher ce message.

Cliquez sur **PARAMÈTRES**.



Autorisez l'installation des applications inconnues via le curseur pour pouvoir installer la mise à jour.

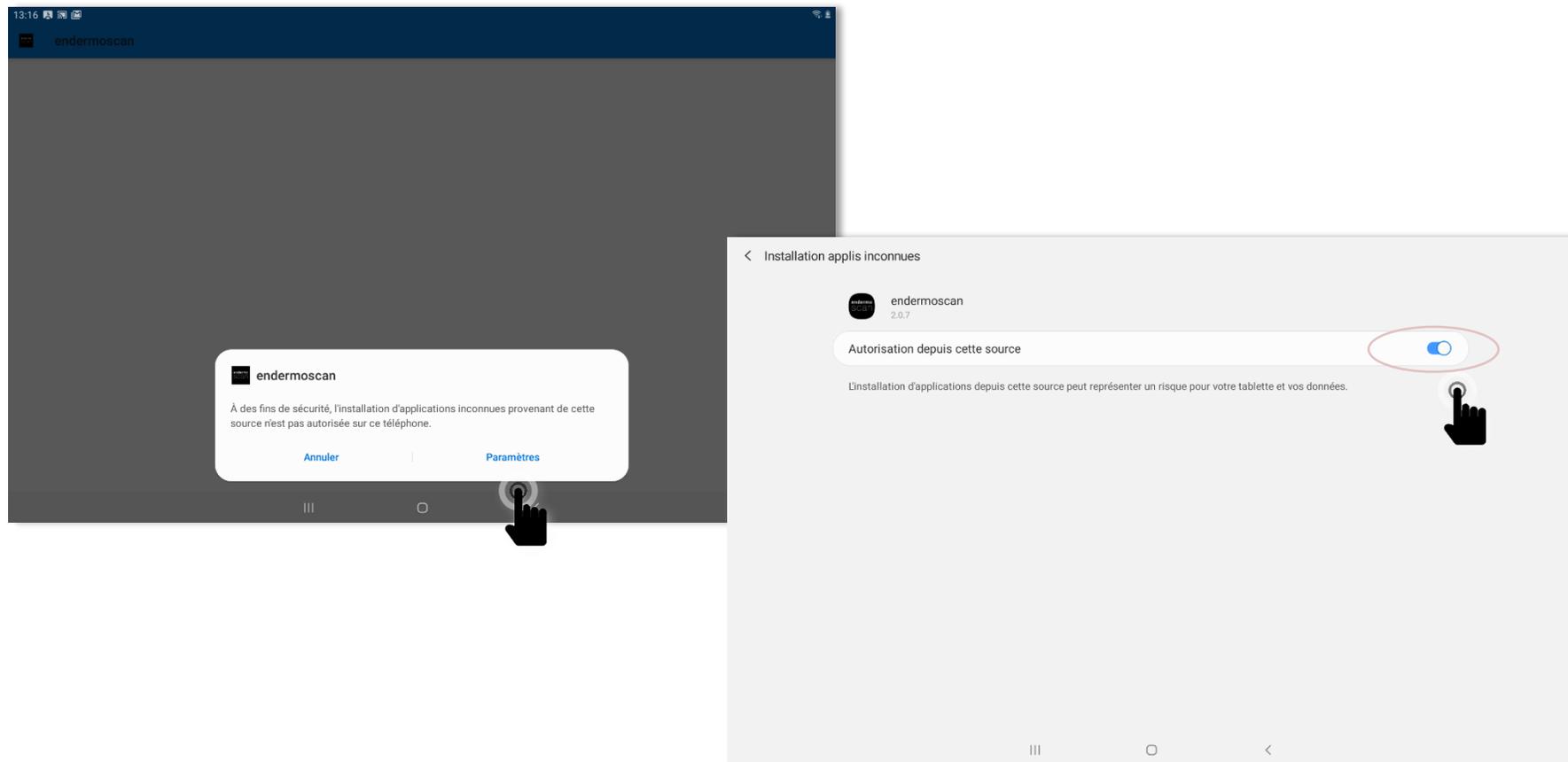

INNER POWER.
BETTER LIFE.

MISES À JOUR

Cliquez ensuite sur **INSTALLER** pour bénéficier de la nouvelle mise à jour.

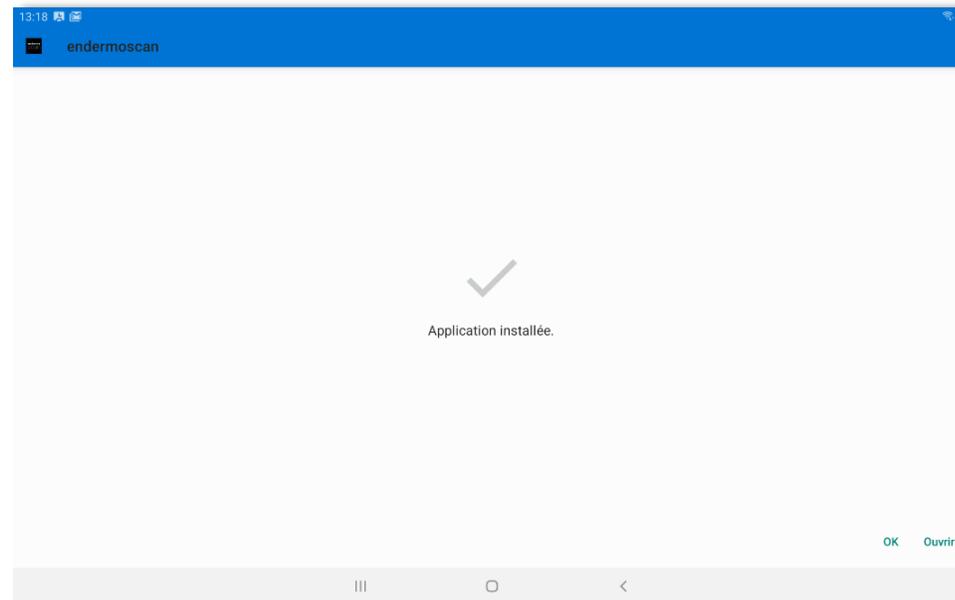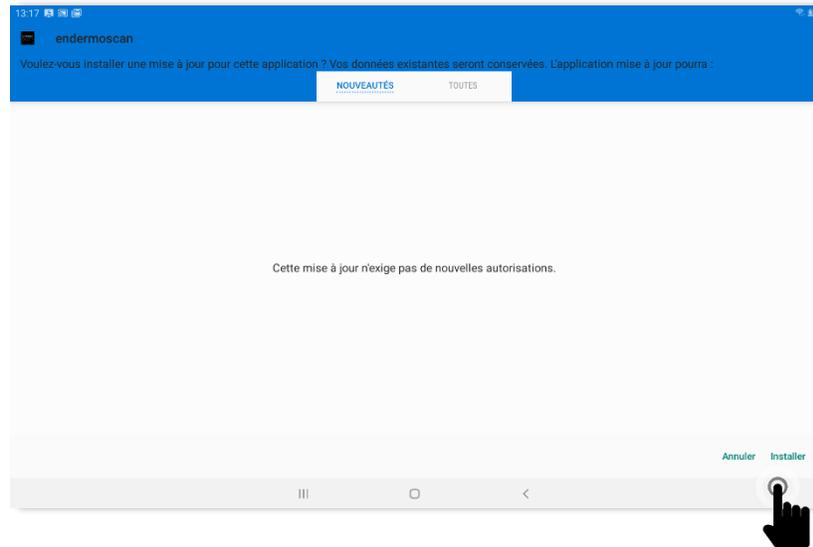

INNER POWER.
BETTER LIFE.



IMPORTATION DES
DONNÉES DE VOTRE
ANCIENNE TABLETTE
LPG® SCAN




INNER POWER.
BETTER LIFE.

IMPORTATION DES DONNÉES LPG® SCAN

Avant l'import, veuillez au préalable sauvegarder votre base de données.

Pour importer les données de votre ancienne tablette LPG® SCAN (fiches clients, photos), veuillez insérer la carte micro SD utilisée dans l'emplacement adapté sur la nouvelle tablette.

Ensuite, veuillez vous rendre dans le menu **CONFIGURATION** de l'application endermoscan (cliquez sur la barre de menu en haut à gauche). Cliquez sur **PARAMÈTRES** puis **BASE DE DONNÉES** puis **IMPORTATION BASE DE DONNÉES**.

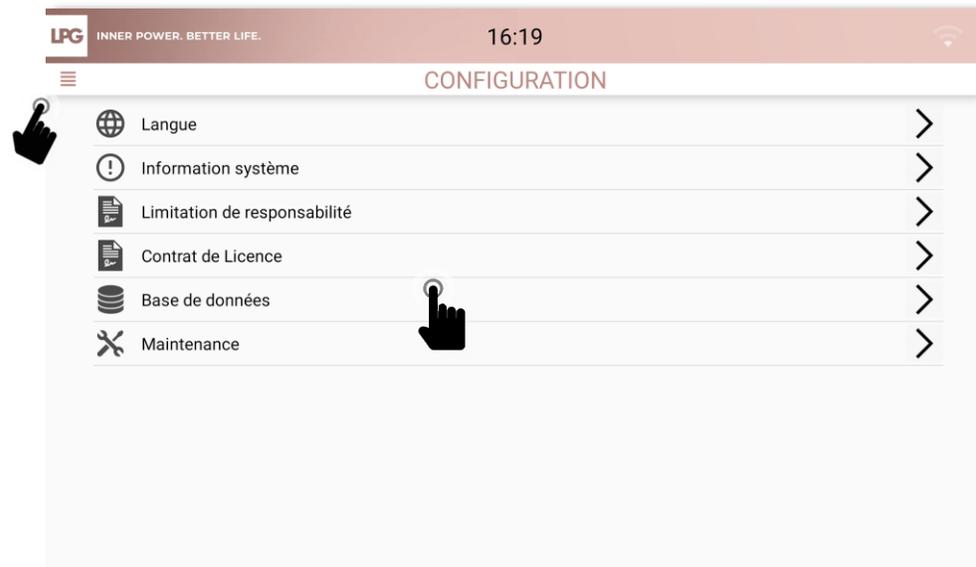

INNER POWER.
BETTER LIFE.




EXPORTATION DES DONNÉES



INNER POWER.
BETTER LIFE.

EXPORTATION DES DONNÉES

Pour accéder aux paramètres de votre tablette, cliquez sur  puis sur **Paramètres**.
La rubrique « **Limitation de responsabilité** » vous sensibilise sur la protection et la sécurité des données clients qui peut être remise en question si vous faites le choix d'exporter ces informations.
Si vous souhaitez exporter ces données, veuillez cocher la fonction « exportation des données clients ».

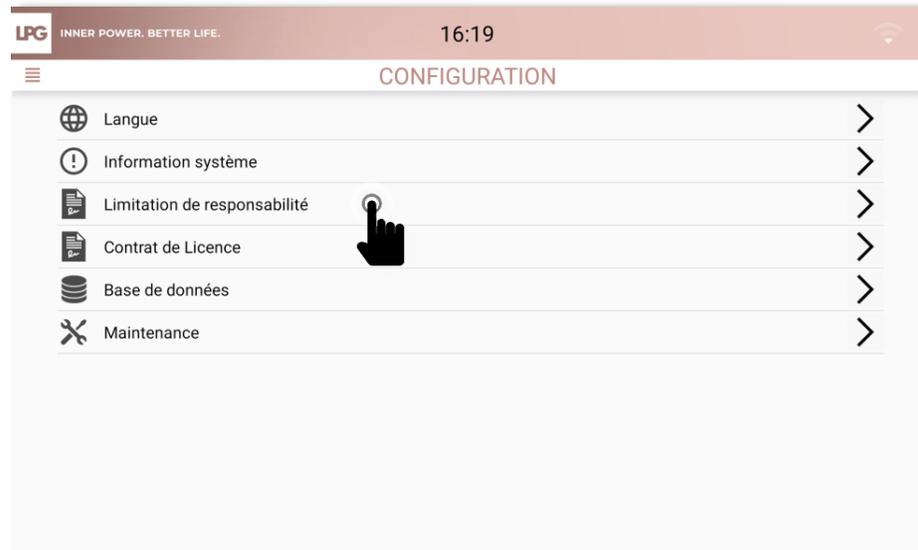

LPG n'est pas responsable de l'utilisation des données en dehors de son application.



INNER POWER.
BETTER LIFE.