



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

SOMMAIRE


- Démarrer l'application **p 3**
- Créer une fiche client **p 4**
- Réaliser une évaluation et créer un programme de soins corps **p 9**
- Réaliser une évaluation et créer un programme de soins visage **p 19**
- Réaliser un bilan photos **p 36**
- Comparer des bilans photos **p 44**
- Envoyer un programme de soins à sa/son client(e) **p 47**
- Lancement d'un programme de soins sur votre CELLU M6® ALLIANCE **p 50**
- Séances Libres **p 55**
- Sauvegarde **p 57**
- Mises à jour **p 60**
- Importation des données de votre ancienne tablette LPG® SCAN **p 64**
- Exportation des données **P 66**



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

DÉMARRER L'APPLICATION

Cliquez sur l'icône **endermoscan** présent sur l'écran de votre tablette pour lancer l'application.

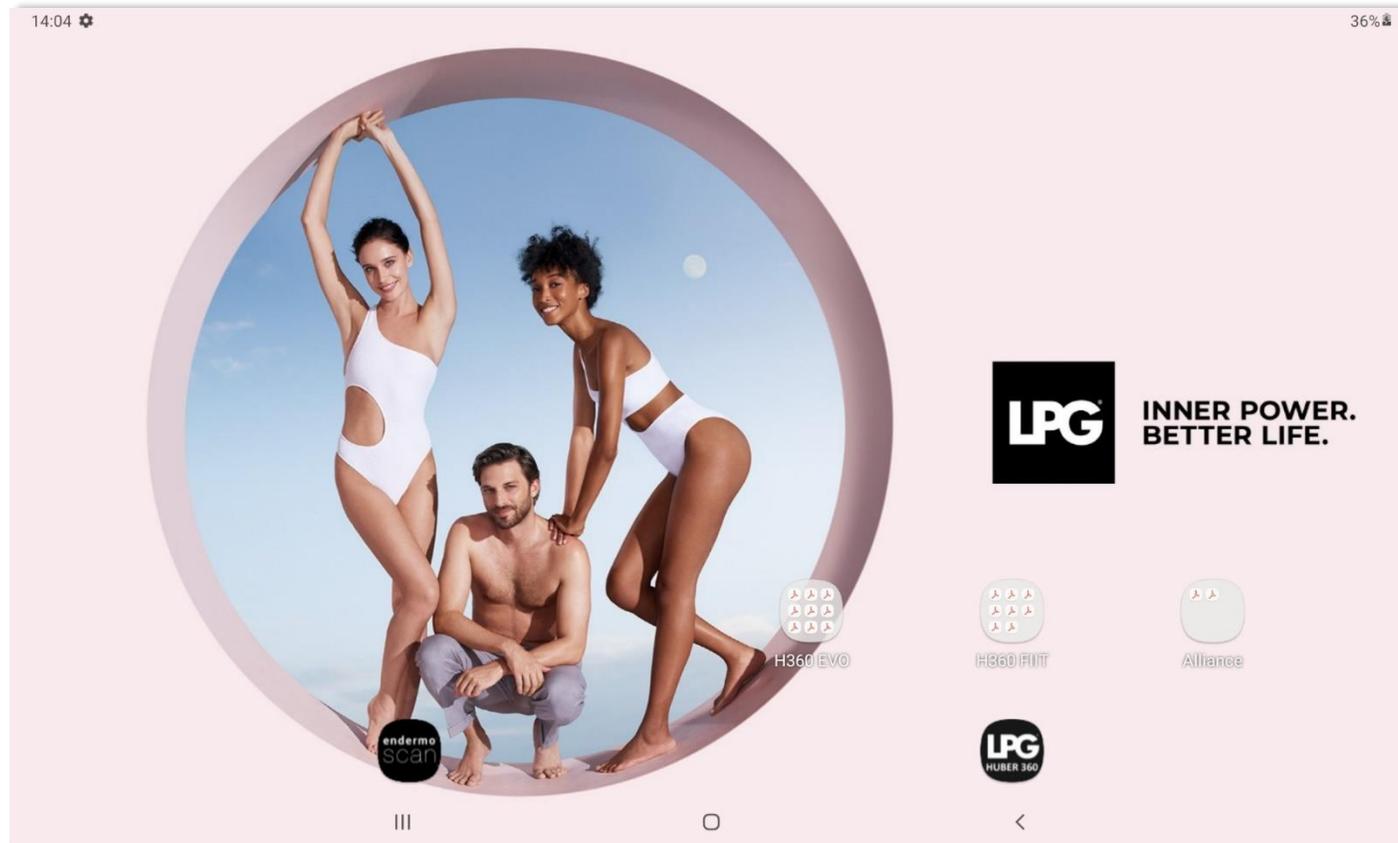




CRÉER UNE FICHE CLIENT



INNER POWER.
BETTER LIFE.


CRÉER UNE FICHE CLIENT

Cliquez sur l'icône **endermoscan** présent sur l'écran de votre tablette pour lancer l'application.

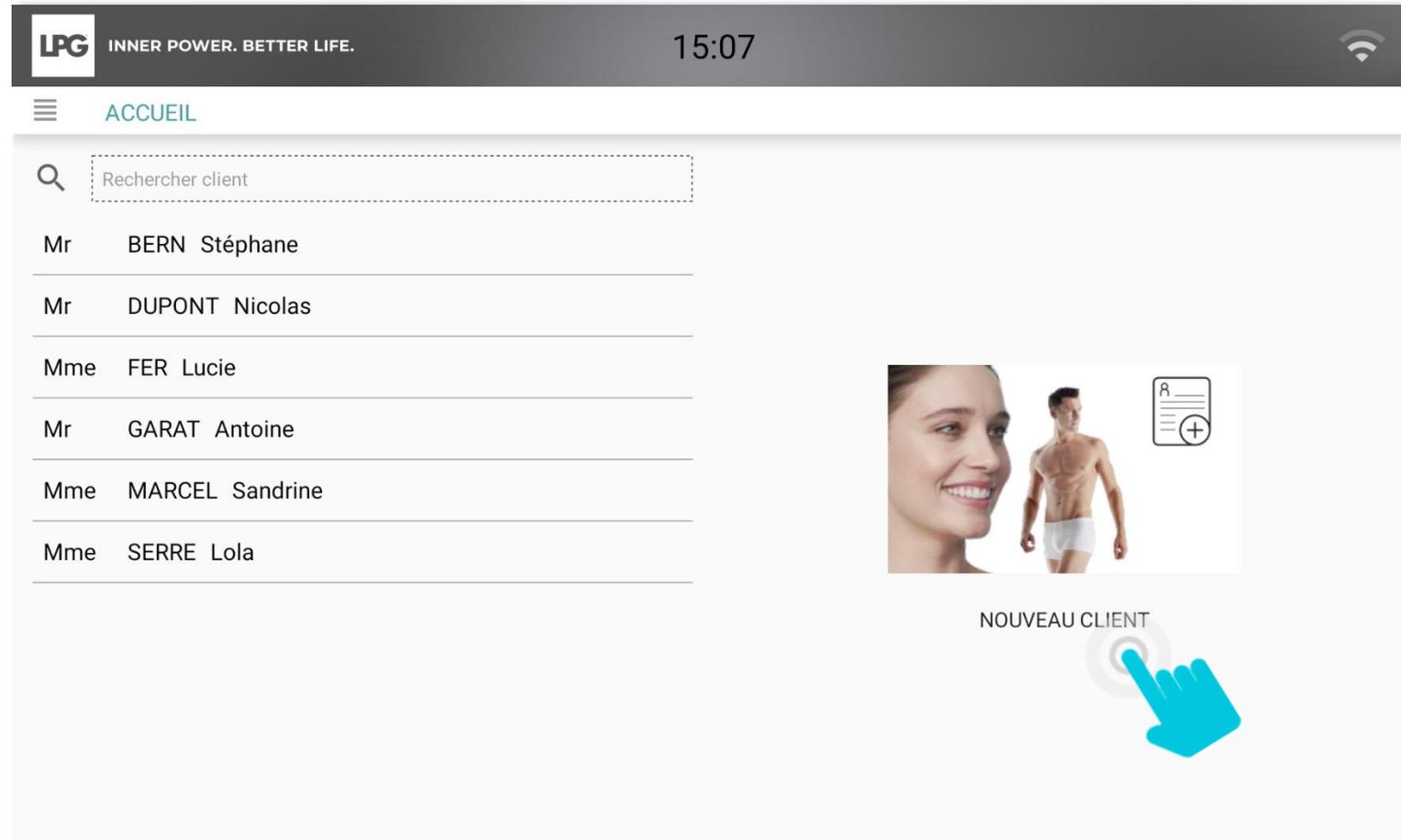

CRÉER UNE FICHE CLIENT

Une fois que vous avez parcouru les contre-indications avec votre client(e), cochez la case « **Les contre-indications aux soins endermologie® ont été abordées lors de l'évaluation** » pour démarrer le renseignement de la fiche.

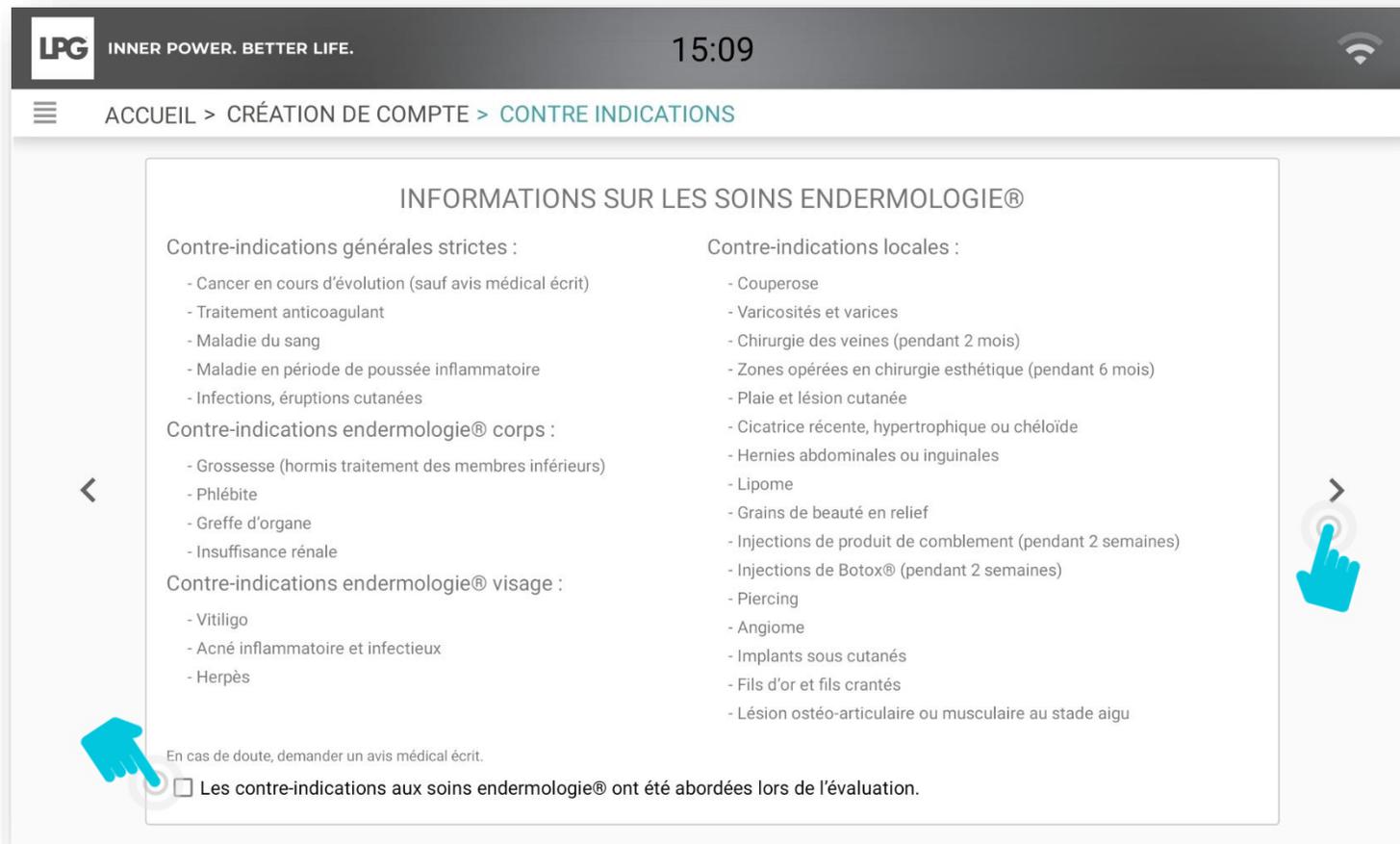

LPG INNER POWER. BETTER LIFE. 15:09

ACCUEIL > CRÉATION DE COMPTE > CONTRE INDICATIONS

INFORMATIONS SUR LES SOINS ENDERMOLOGIE®

Contre-indications générales strictes : <ul style="list-style-type: none">- Cancer en cours d'évolution (sauf avis médical écrit)- Traitement anticoagulant- Maladie du sang- Maladie en période de poussée inflammatoire- Infections, éruptions cutanées	Contre-indications locales : <ul style="list-style-type: none">- Couperose- Varicosités et varices- Chirurgie des veines (pendant 2 mois)- Zones opérées en chirurgie esthétique (pendant 6 mois)- Plaie et lésion cutanée- Cicatrice récente, hypertrophique ou chéloïde- Hernies abdominales ou inguinales- Lipome- Grains de beauté en relief- Injections de produit de comblement (pendant 2 semaines)- Injections de Botox® (pendant 2 semaines)- Piercing- Angiome- Implants sous cutanés- Fils d'or et fils crantés- Lésion ostéo-articulaire ou musculaire au stade aigu
Contre-indications endermologie® corps : <ul style="list-style-type: none">- Grossesse (hormis traitement des membres inférieurs)- Phlébite- Greffe d'organe- Insuffisance rénale	
Contre-indications endermologie® visage : <ul style="list-style-type: none">- Vitiligo- Acné inflammatoire et infectieux- Herpès	

En cas de doute, demander un avis médical écrit.


Les contre-indications aux soins endermologie® ont été abordées lors de l'évaluation.

CRÉER UNE FICHE CLIENT

Complétez les informations relatives à votre client(e).

Vous avez la possibilité d'ajouter une photo.

L'IMC se calcule automatiquement après avoir renseigné la taille et le poids.

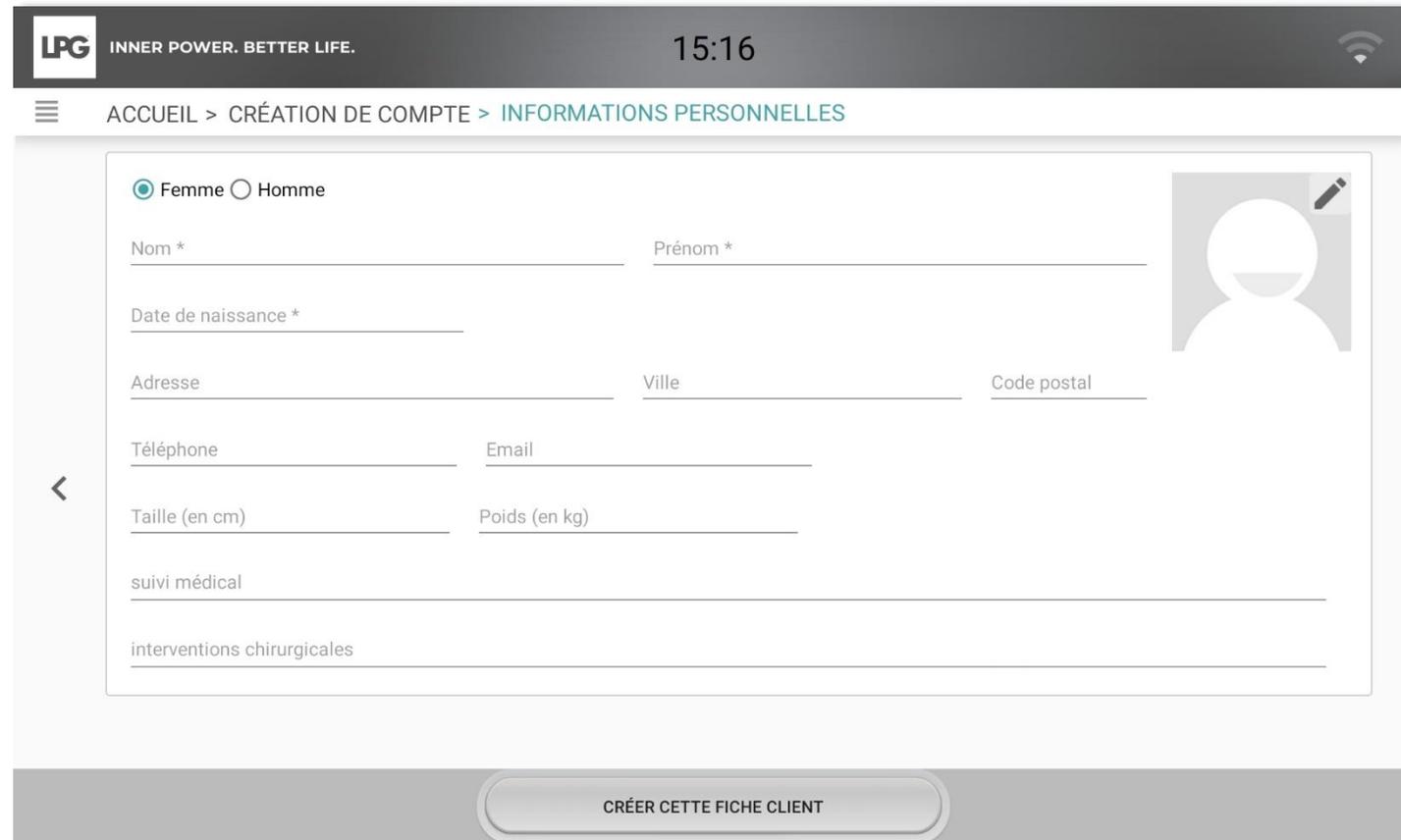


The screenshot shows the LPG mobile application interface for creating a client profile. The top bar displays the LPG logo, the slogan "INNER POWER. BETTER LIFE.", the time "15:16", and a Wi-Fi signal icon. Below the top bar, a navigation breadcrumb reads "ACCUEIL > CRÉATION DE COMPTE > INFORMATIONS PERSONNELLES". The main form area includes a gender selection with "Femme" selected and "Homme" as an option. There are input fields for "Nom *", "Prénom *", "Date de naissance *", "Adresse", "Ville", "Code postal", "Téléphone", "Email", "Taille (en cm)", and "Poids (en kg)". There are also text areas for "suivi médical" and "interventions chirurgicales". A profile picture placeholder with a pencil icon is located on the right side of the form. A back arrow is visible on the left side of the form. At the bottom of the screen, there is a button labeled "CRÉER CETTE FICHE CLIENT".




INNER POWER.
BETTER LIFE.

CRÉER UNE FICHE CLIENT

Pour consulter ou modifier une fiche client, cliquez sur le nom de votre client(e) puis cliquez sur .
Pour rechercher un client dans la base existante, il vous suffit de rentrer son nom dans **RECHERCHER CLIENT**.
Pour archiver une fiche client, il vous suffit de cliquer sur .
Pour supprimer une fiche client, il vous suffit de cliquer sur .

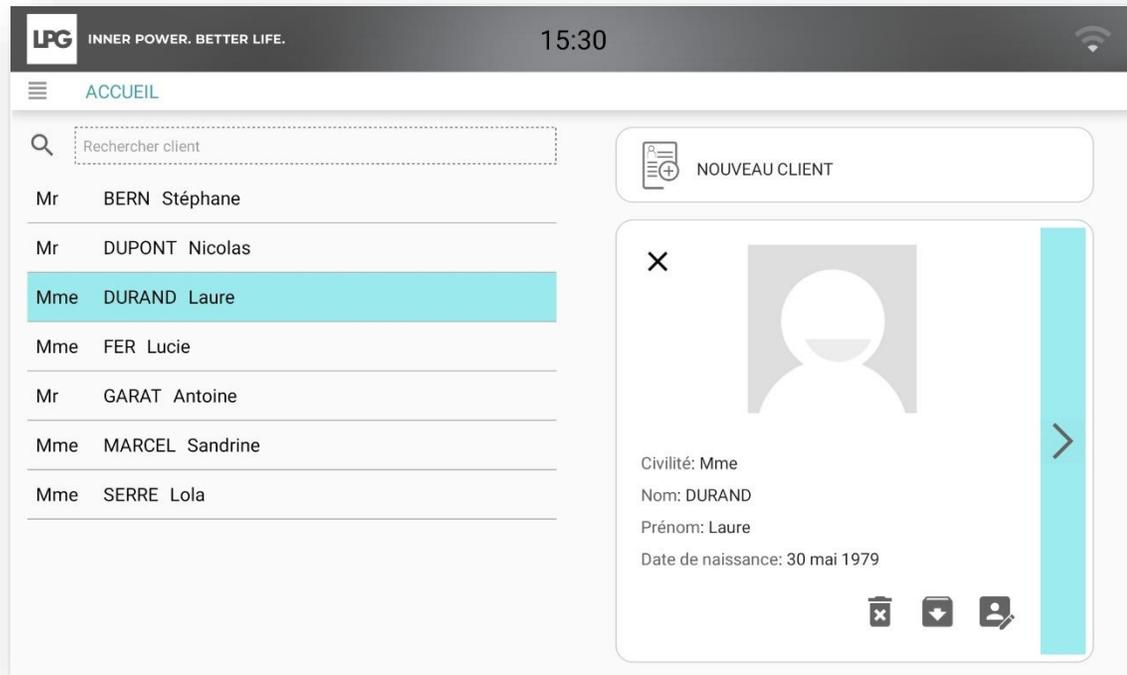

The screenshot shows the 'ACCUEIL' (Home) screen of the LPG application. At the top, the logo 'LPG INNER POWER. BETTER LIFE.' and the time '15:30' are visible. A search bar labeled 'Rechercher client' is present. Below it, a list of clients is displayed, with 'Mme DURAND Laure' highlighted in blue. To the right, a 'NOUVEAU CLIENT' button is visible. A detailed view of the selected client is shown, including a profile picture placeholder, a close button (X), and fields for 'Civilité: Mme', 'Nom: DURAND', 'Prénom: Laure', and 'Date de naissance: 30 mai 1979'. At the bottom of this view are icons for delete, archive, and edit.

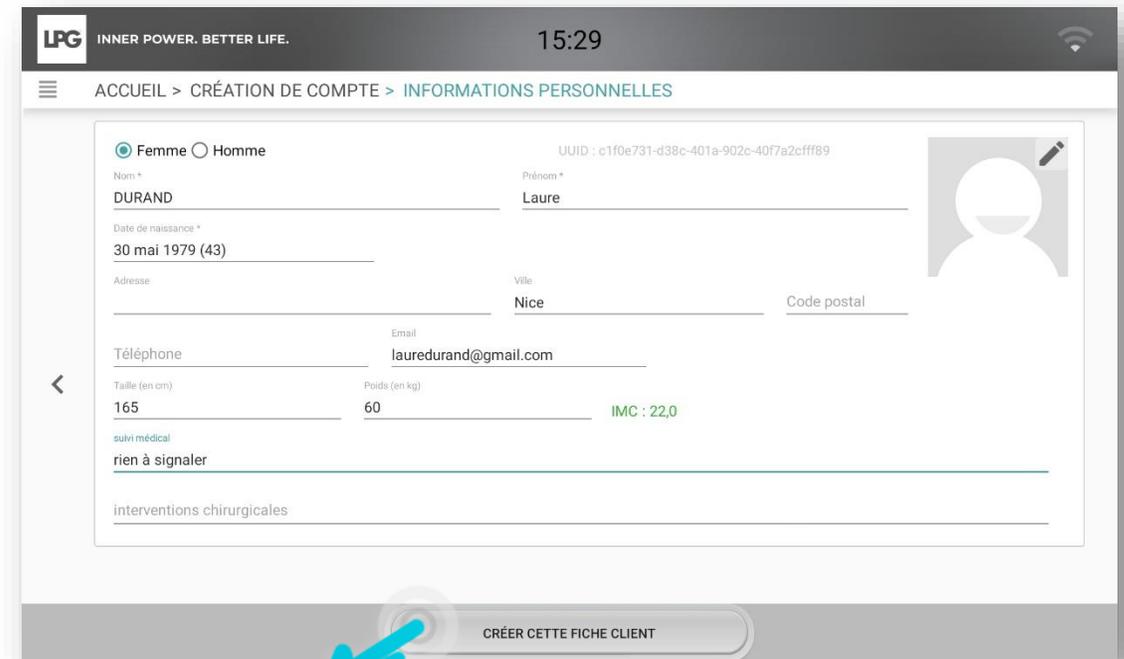

The screenshot shows the 'INFORMATIONS PERSONNELLES' (Personal Information) form for creating a new client. The top bar shows 'LPG INNER POWER. BETTER LIFE.' and the time '15:29'. The navigation path is 'ACCUEIL > CRÉATION DE COMPTE > INFORMATIONS PERSONNELLES'. The form includes fields for gender (Femme selected), name (DURAND), first name (Laure), date of birth (30 mai 1979), address (Nice), and email (lauredurand@gmail.com). It also displays physical characteristics: height (165 cm), weight (60 kg), and BMI (22,0). There are sections for 'suivi médical' (medical follow-up) with 'rien à signaler' (nothing to report) and 'interventions chirurgicales' (surgical interventions). A blue hand icon points to the 'CRÉER CETTE FICHE CLIENT' button at the bottom.




RÉALISER UNE ÉVALUATION
& CRÉER UN PROGRAMME
DE SOINS
- CORPS -

LPG

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS

Une fois la fiche client créée, choisissez de réaliser une **évaluation corps** en cliquant sur la zone concernée.

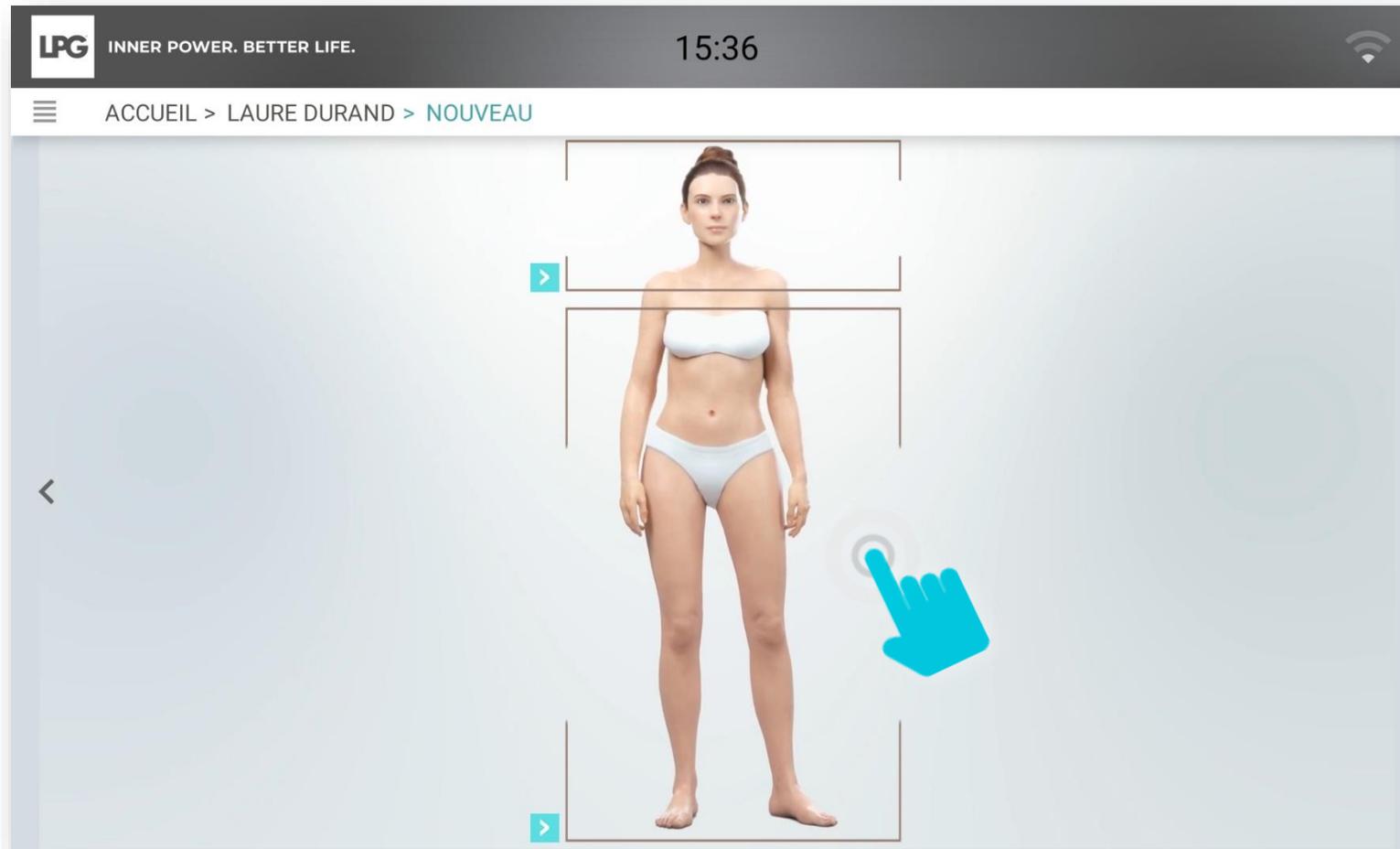

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS

Il est important de sensibiliser votre client(e) sur les différents leviers de réussite d'un programme endermologie®.

LPG INNER POWER. BETTER LIFE. 15:38

ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU

LE TRIO GAGNANT

Les résultats dépendront de sa capacité à combiner les soins endermologie® à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière.

UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

- 5 fruits et légumes par jour, protéines, féculents et produits variés à chaque repas, limitation des aliments gras, salés, sucrés.
- Il est recommandé de boire régulièrement pour maintenir une bonne hydratation du corps (idéalement en dehors des repas).


UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE

- L'équivalent d'au moins 30 minutes de marche par jour est recommandé.
- Pour des résultats sur le déstockage, il est conseillé de pratiquer une activité physique après la séance endermologie® corps.

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS

Il est important de sensibiliser votre client(e) sur les différents leviers de réussite d'un programme endermologie®.

(A savoir : Les résultats d'un programme peuvent varier en fonction de la stabilité hormonale)

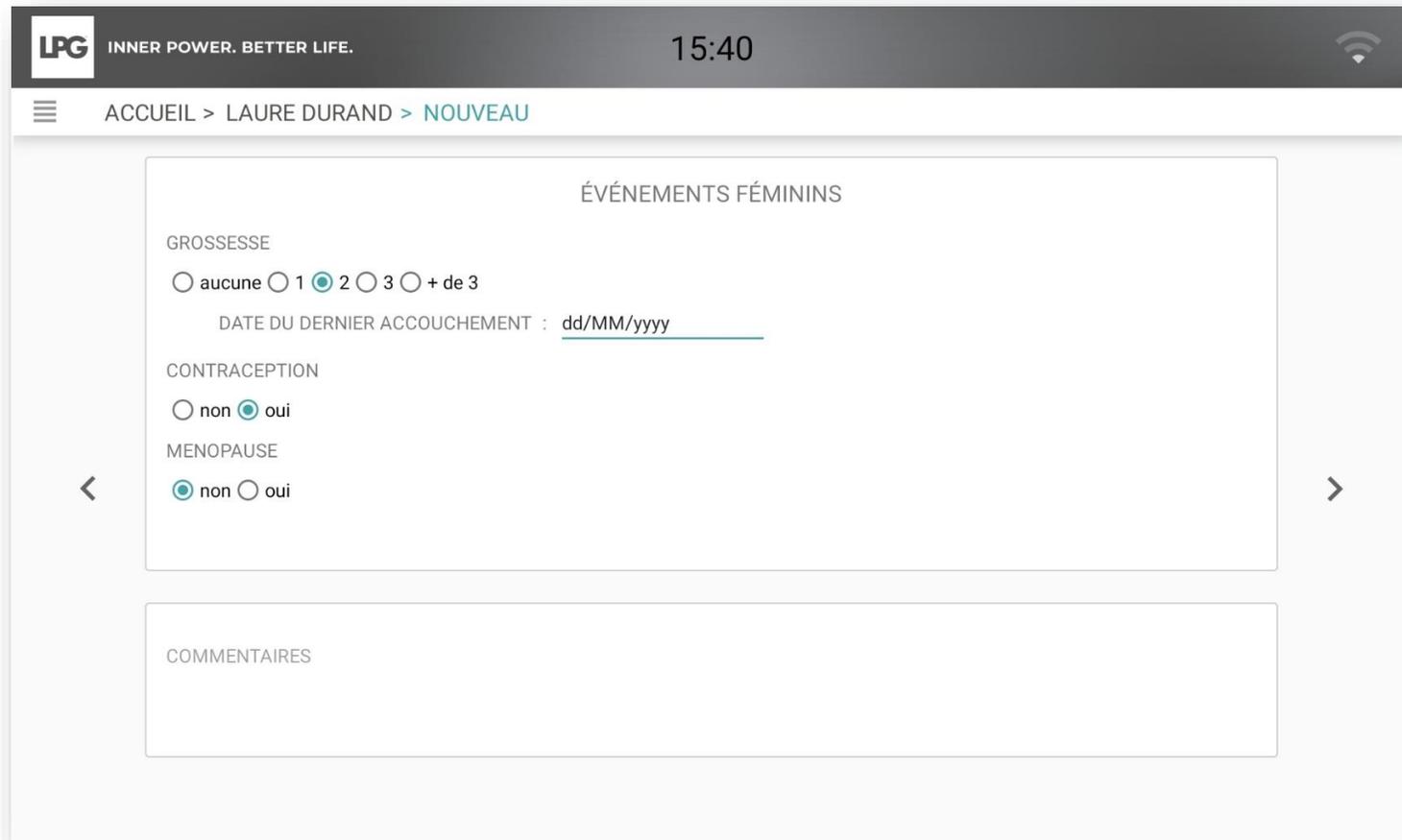


The screenshot shows a mobile application interface for a body evaluation form. At the top, there is a dark header with the LPG logo and the tagline "INNER POWER. BETTER LIFE." on the left, the time "15:40" in the center, and a Wi-Fi icon on the right. Below the header, a breadcrumb trail reads "ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU". The main content area is titled "ÉVÉNEMENTS FÉMININS" and contains three sections: "GROSSESSE" with radio buttons for "aucune", "1", "2", "3", and "+ de 3" (where "2" is selected), a date input field for "DATE DU DERNIER ACCOUCHEMENT" with the placeholder "dd/MM/yyyy"; "CONTRACEPTION" with radio buttons for "non" and "oui" (where "oui" is selected); and "MENOPAUSE" with radio buttons for "non" and "oui" (where "non" is selected). Navigation arrows are visible on the left and right sides of the form. Below the form is a "COMMENTAIRES" section with a text input field.



INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS


- Renseignez le ou les objectif(s) de votre client(e)
- Sélectionnez le type de soin souhaité selon les objectifs de votre client(e) :
 - MINCEUR (*Soins endermologie® ID*)
 - BIEN-ÊTRE (*Les soins bien-être ne nécessitent pas une évaluation*)

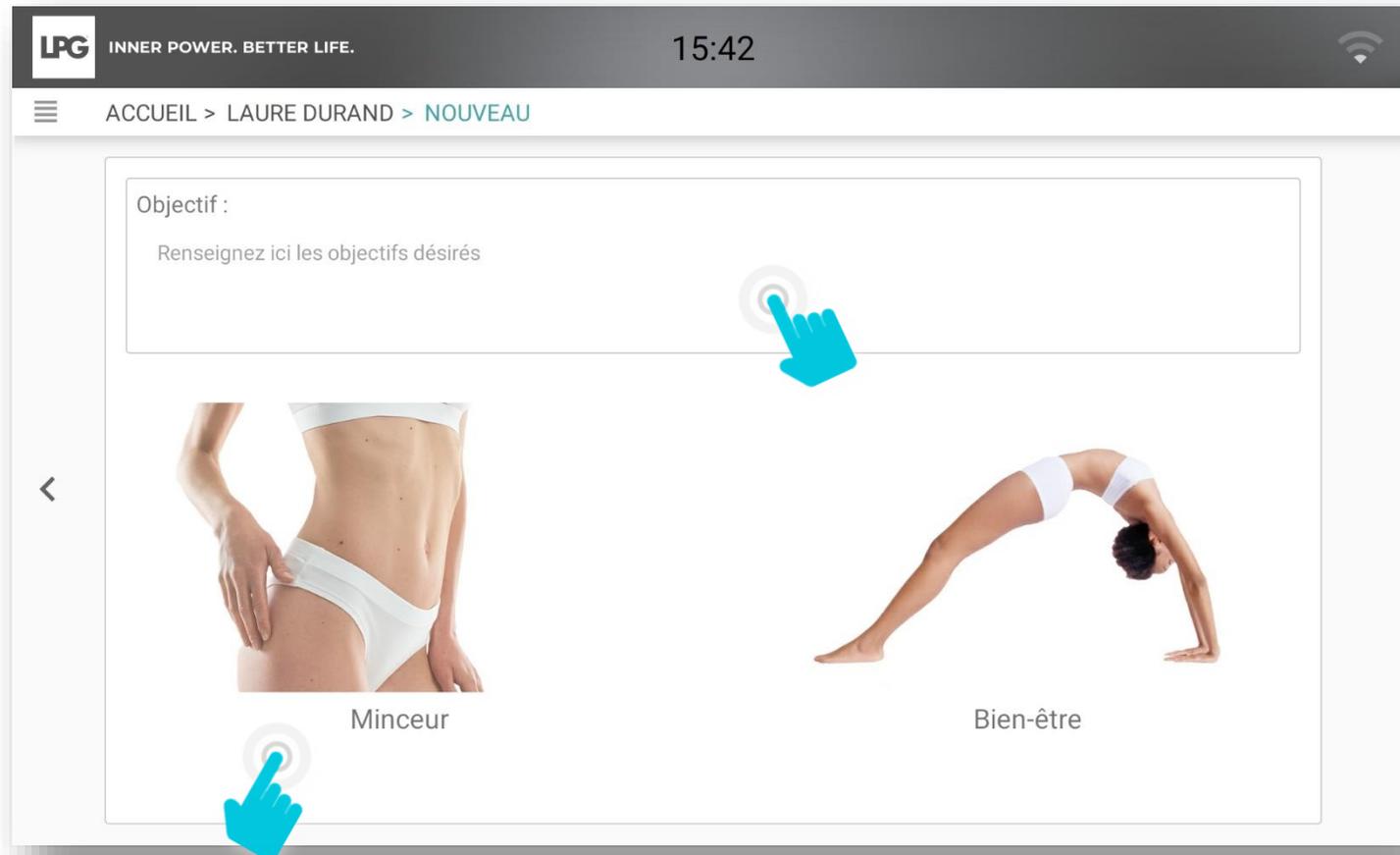

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS

MINCEUR

- Réalisez 4 photos (face, profil droit, profil gauche, dos). Tenez votre tablette en format portrait. La photo ne doit être prise que lorsque les capteurs sont verts. Aidez-vous des repères intégrés pour bien positionner votre client(e). A chaque prise, cliquez sur **ENREGISTRER** ou **ANNULER** si vous souhaitez prendre une nouvelle photo.
- Si vous souhaitez prendre d'autres photos, cliquez sur **AJOUTER PHOTO COMPLÉMENTAIRE** et nommez-la.

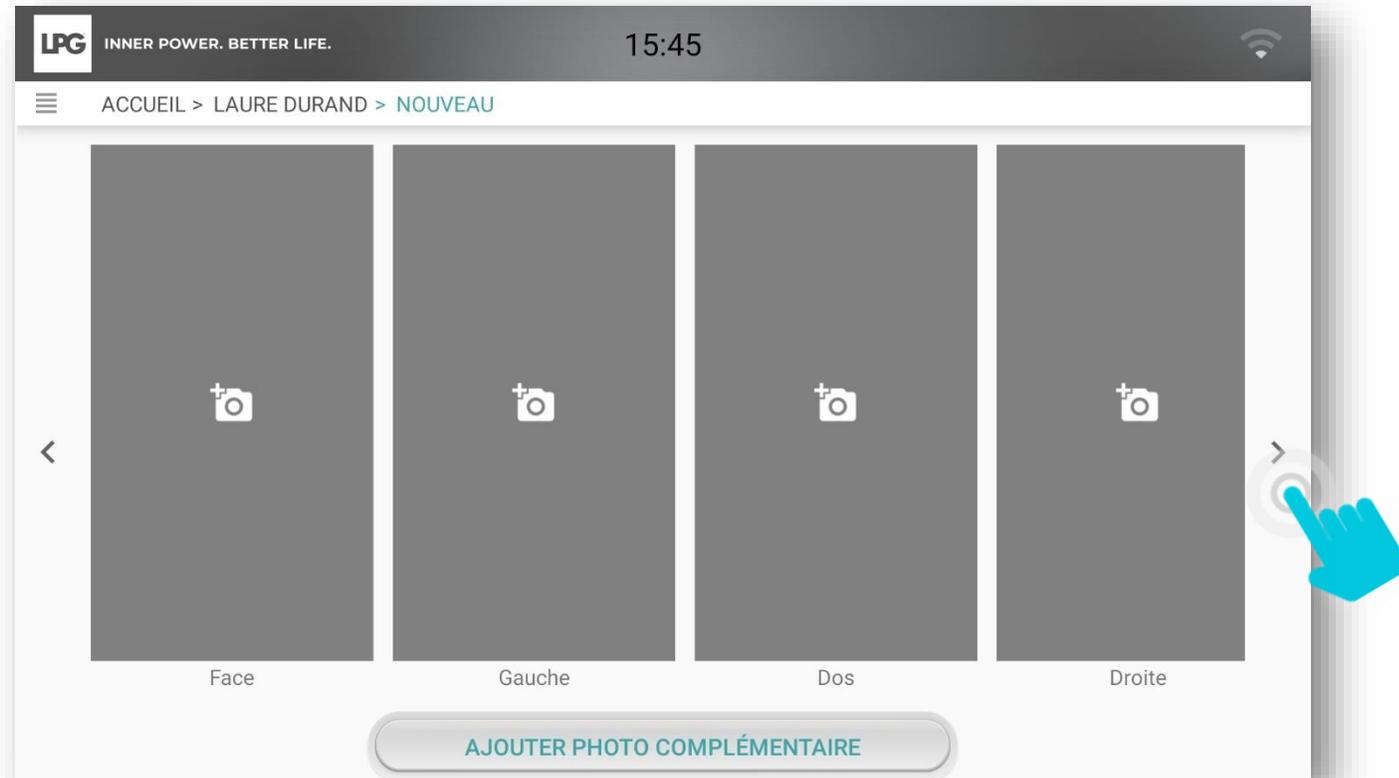

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS

Questionnaire rétention d'eau


A remplir si votre cliente est concernée par cette problématique pour déterminer le programme de soins le plus adapté à ses besoins.

The screenshot shows a mobile application interface for a client named Laure Durand. The top bar displays the LPG logo, the slogan "INNER POWER. BETTER LIFE.", the time 15:47, and a Wi-Fi icon. Below the bar, a navigation path reads "ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU". The main content area is titled "Questionnaire rétention d'eau" and contains five questions with checkboxes for answers. The questions are:

- 1 - Votre cellulite est présente :
 - de façon diffuse
 - sur une seule région
- 2 - Votre poids peut-il varier de 1kg à 3kg en moins de 48h ?
 - oui
 - non
- 3 - Comment ressentez-vous vos jambes ?
 - lourdes et douloureuses uniquement en fin de journée
 - gonflées dès le matin et cela s'accroît en fin de journée
 - gonflées uniquement en période prémenstruelle
 - pas de problème au niveau des jambes
- 4 - Décrivez vos chevilles :
 - elles sont gonflées après une station assise prolongée (voyage en avion par exemple)
 - elles sont tout le temps gonflées avec œdème autour des malléoles
 - rien de particulier au niveau de mes chevilles
- 5 - Avez-vous en ce moment ?
 - les pieds et les mains gonflés ?
 - les jambes en forme de poteau ?
 - constaté une prise de volume variable d'une semaine à l'autre ?
 - un traitement médical à base de cortisone ?

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS

- Sélectionner les zones que vous souhaitez cibler en cliquant dessus.
- Sélectionner ensuite le type de tissu (souple, dense, fibreux) correspondant à chaque zone sélectionnée.
- Ajustez le temps correspondant à chaque zone. Le temps maximal est de 40 min.

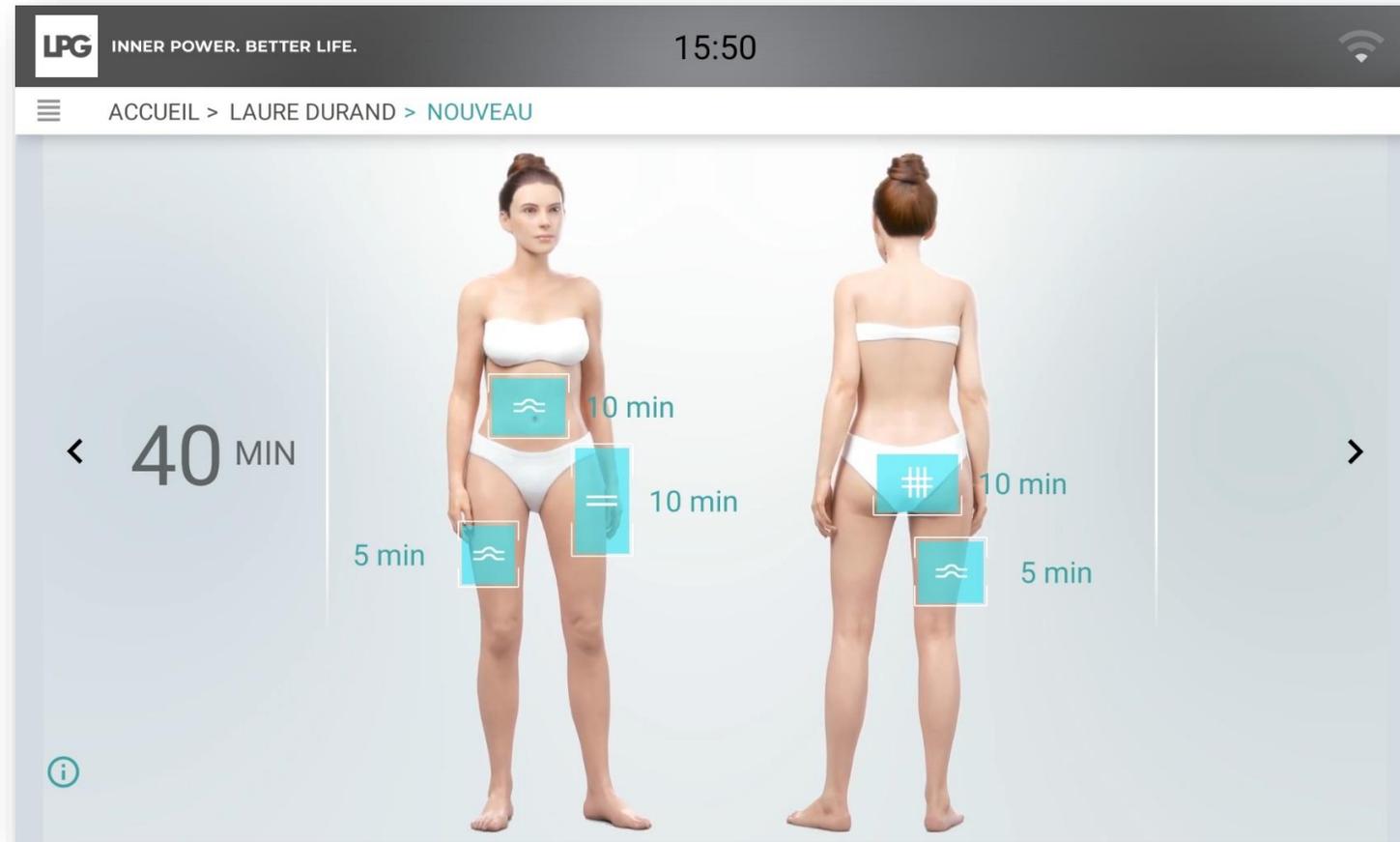

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS

Protocoles endermologie® recommandés

Les soins endermologie ID précédemment sélectionnés sont automatiquement cochés.

Selon les objectifs de votre client(e), vous avez la possibilité d'ajouter un soin bien-être parmi la liste proposée.

Protocoles endermologie® recommandés

Soin(s) endermologie® ID

- Ventre
- Fesses
- Culotte de cheval
- Cuisses arrière
- Cuisses avant

Soin(s) spécifique(s)

- Jeune maman


Soin(s) bien-être

- Relaxation
- Detox

RÉALISER UNE ÉVALUATION CORPS

Evaluation finale et recommandation de protocoles & cosmétiques

- Renseignez le nombre de séances recommandées.
- Pour valider l'évaluation et la création du programme, cliquez sur **VALIDER**.
- Le programme de votre client(e) est ensuite enregistré sous le bandeau ci-dessous.

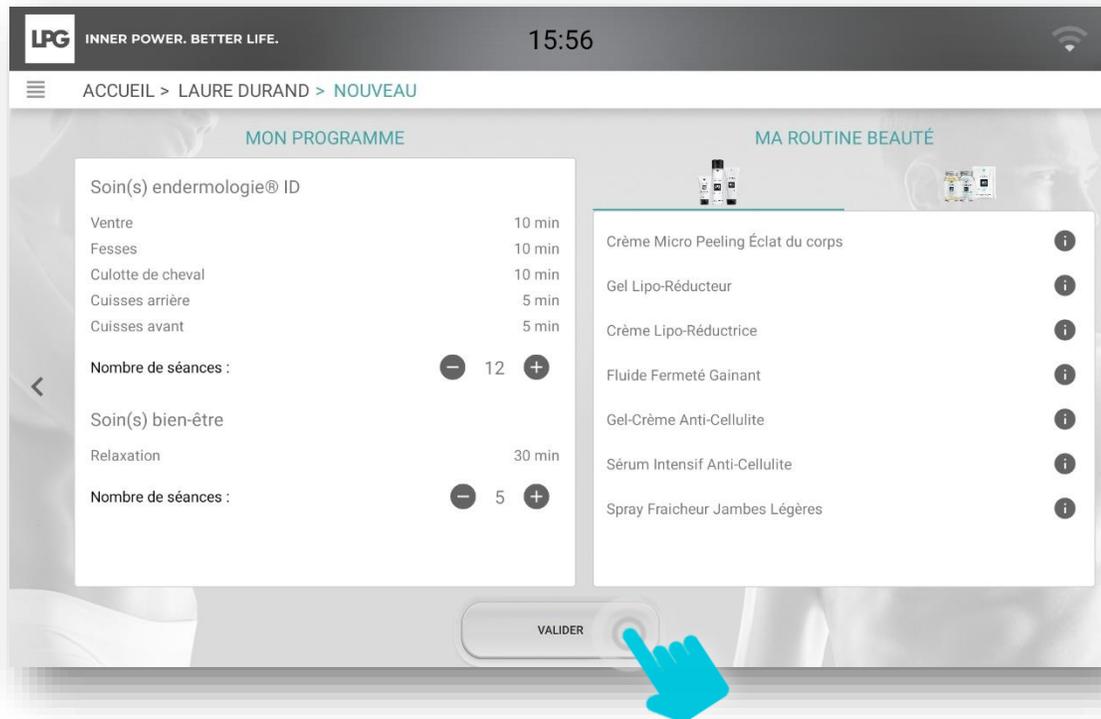




RÉALISER UNE ÉVALUATION
& CRÉER UN PROGRAMME
DE SOINS
- VISAGE -

LPG

INNER POWER.
BETTER LIFE.


RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Pour réaliser une nouvelle évaluation, cliquez sur  en bas de l'écran.

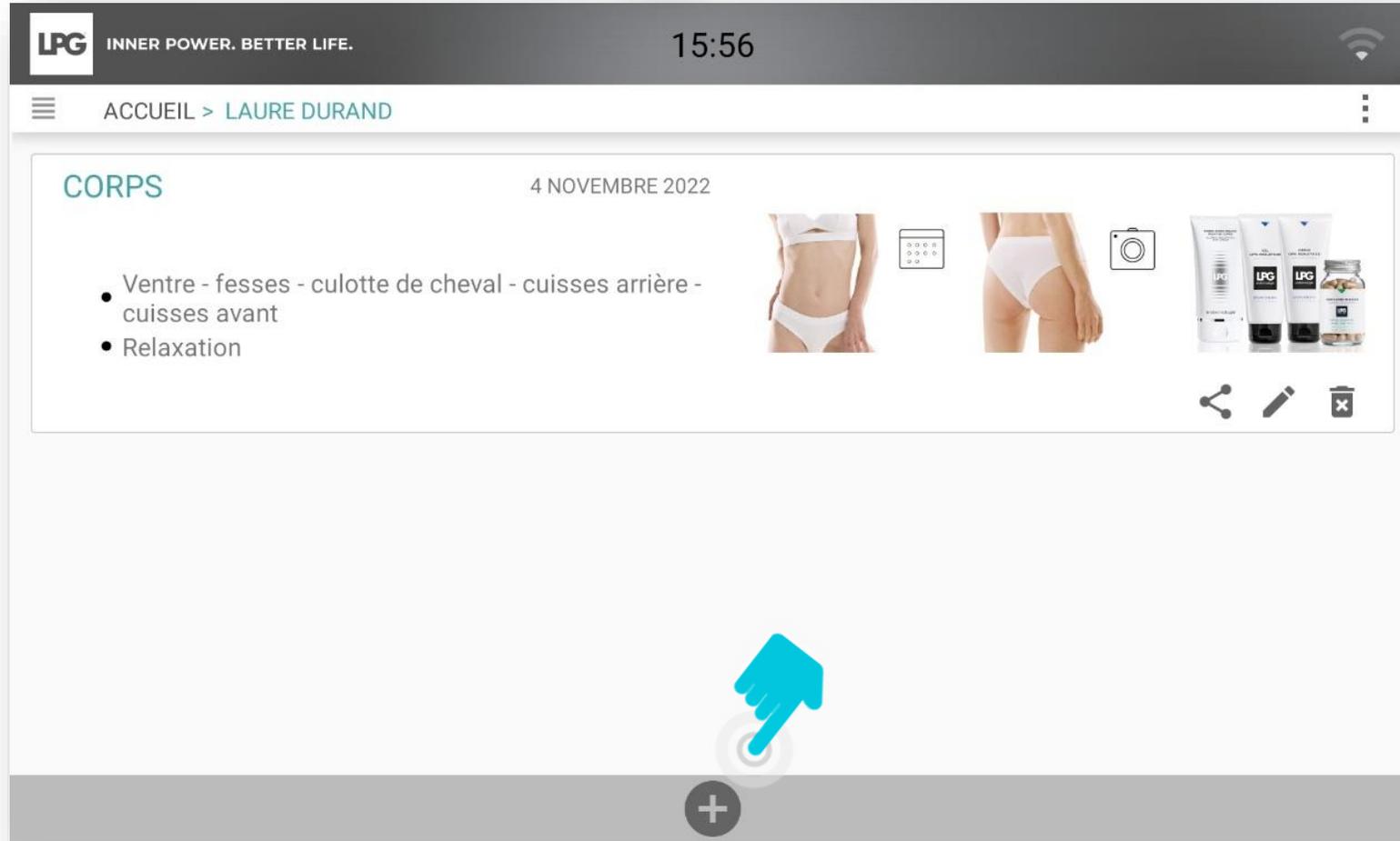

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Pour réaliser une **évaluation visage**, cliquez sur le visage de l'avatar.

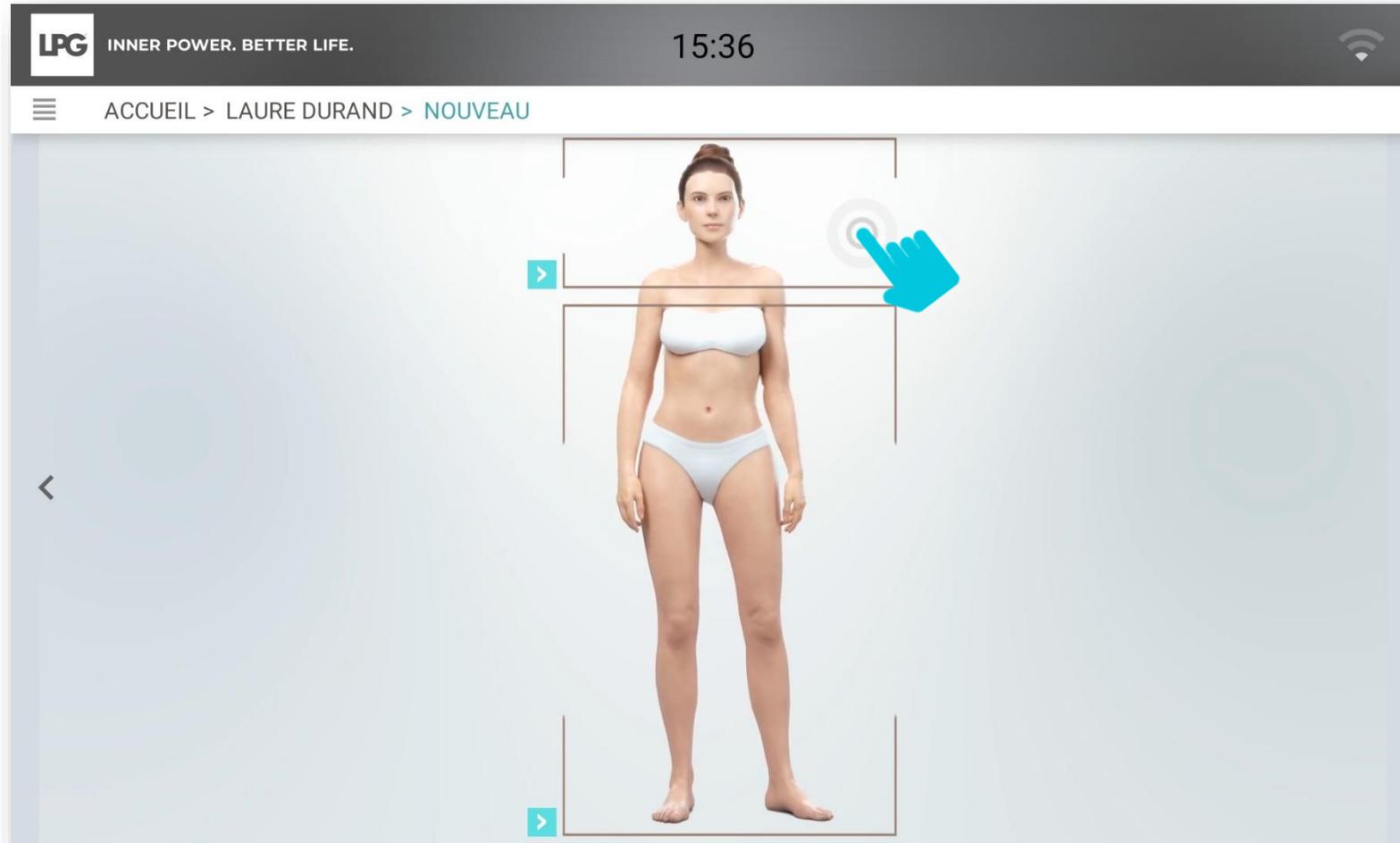

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Renseignez le ou les objectif(s) de votre client(e).


The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a dark grey header with the LPG logo and the text "INNER POWER. BETTER LIFE." on the left, the time "16:08" in the center, and a Wi-Fi icon on the right. Below the header is a white navigation bar with a hamburger menu icon on the left and the text "ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU" in the center. The main content area is a large white box with a thin border. Inside this box, the text "Objectif :" is followed by a large, empty text input field. Below the input field, the text "Renseignez ici les objectifs désirés" is displayed. On the left and right sides of the main content area, there are grey vertical bars with white left and right arrow navigation icons, respectively.



INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE


- Réalisez trois photos (profil droit, face, profil gauche). Tenez votre tablette en format portrait. La photo ne doit être prise que lorsque les capteurs sont verts. Aidez-vous des repères intégrés pour bien positionner votre client(e). A chaque prise, cliquez sur **ENREGISTRER** ou **ANNULER** si vous souhaitez prendre une nouvelle photo.
- Si vous souhaitez prendre d'autres photos, cliquez sur **AJOUTER PHOTO COMPLÉMENTAIRE** et nommez-la.

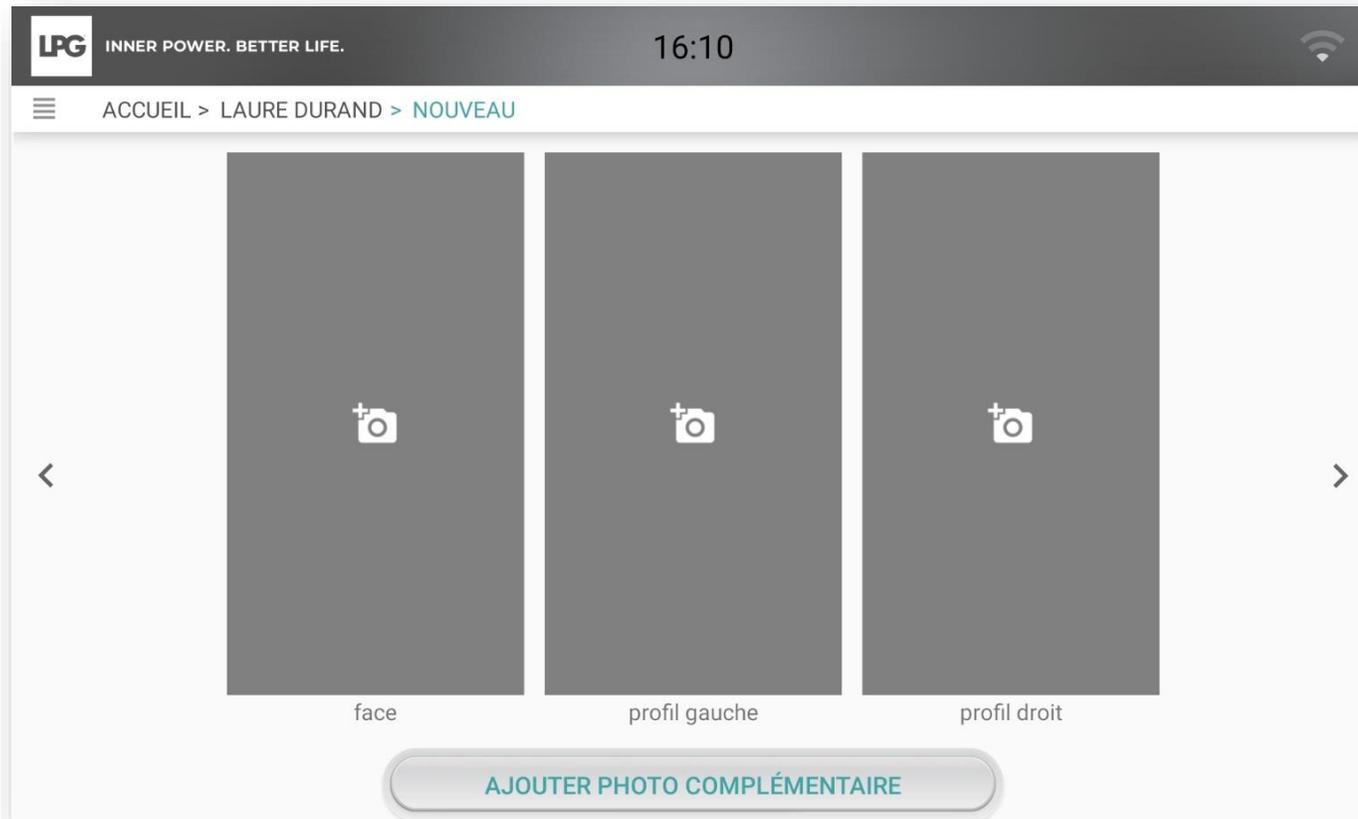

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Sélectionnez le type de vieillissement cutané correspondant.

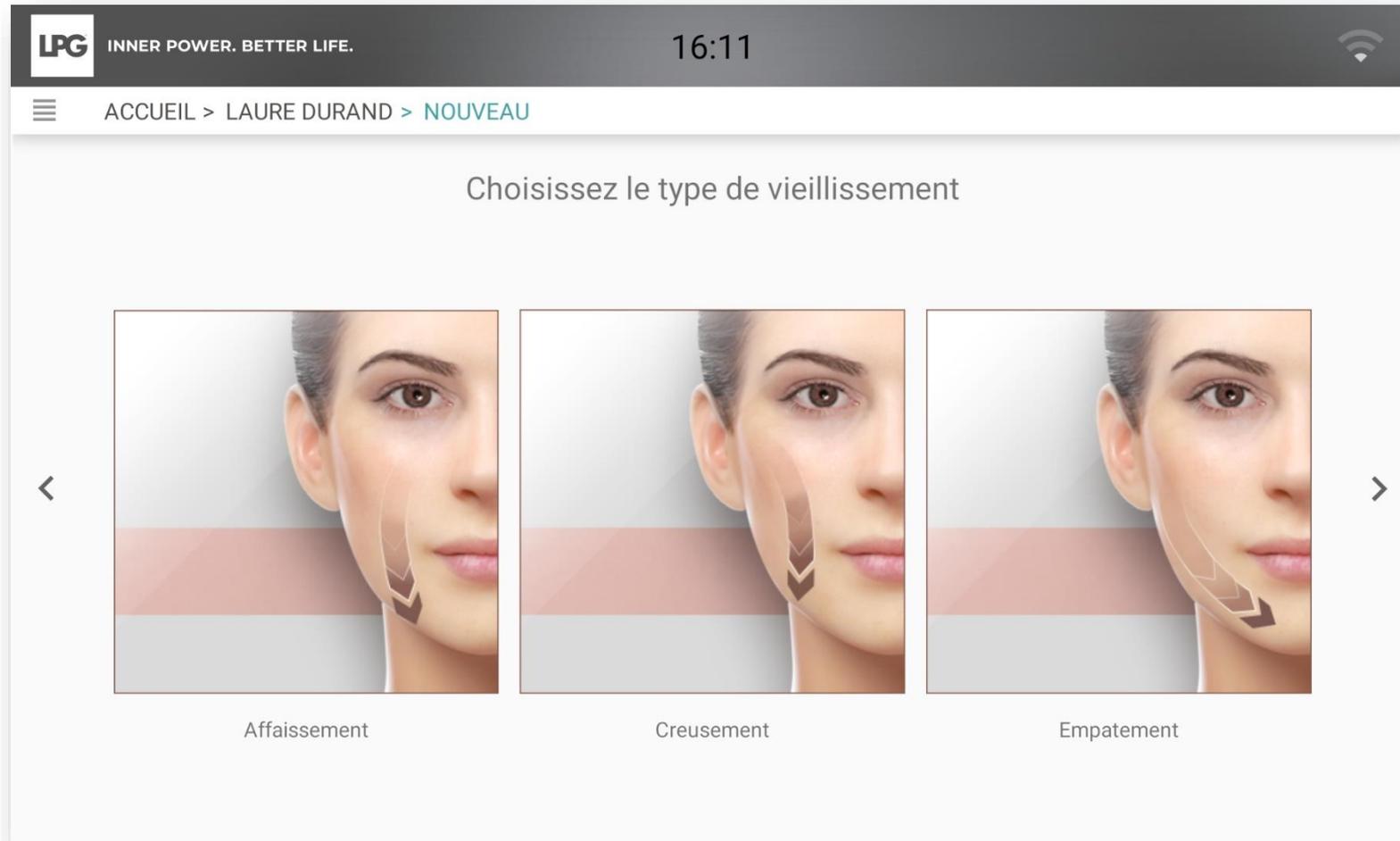

The screenshot shows a mobile application interface for skin aging evaluation. At the top, there is a dark grey header with the LPG logo and the tagline "INNER POWER. BETTER LIFE." on the left, the time "16:11" in the center, and a Wi-Fi icon on the right. Below the header is a white navigation bar with a menu icon and the text "ACCUEIL > LAURE DURAND > NOUVEAU". The main content area has a light grey background with the text "Choisissez le type de vieillissement" centered. Below this text are three square images of a woman's face, each showing a different skin aging sign: "Affaissement" (sagging), "Creusement" (wrinkles), and "Empatement" (swelling). Each image has a red horizontal bar at the bottom and a brown arrow pointing to the specific aging sign. Navigation arrows are visible on the left and right sides of the images.

Choisissez le type de vieillissement

Affaissement


Creusement

Empatement

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Sélectionnez 4 zones à traiter en priorité.


Pour chaque zone sélectionnée, veuillez choisir une problématique principale.

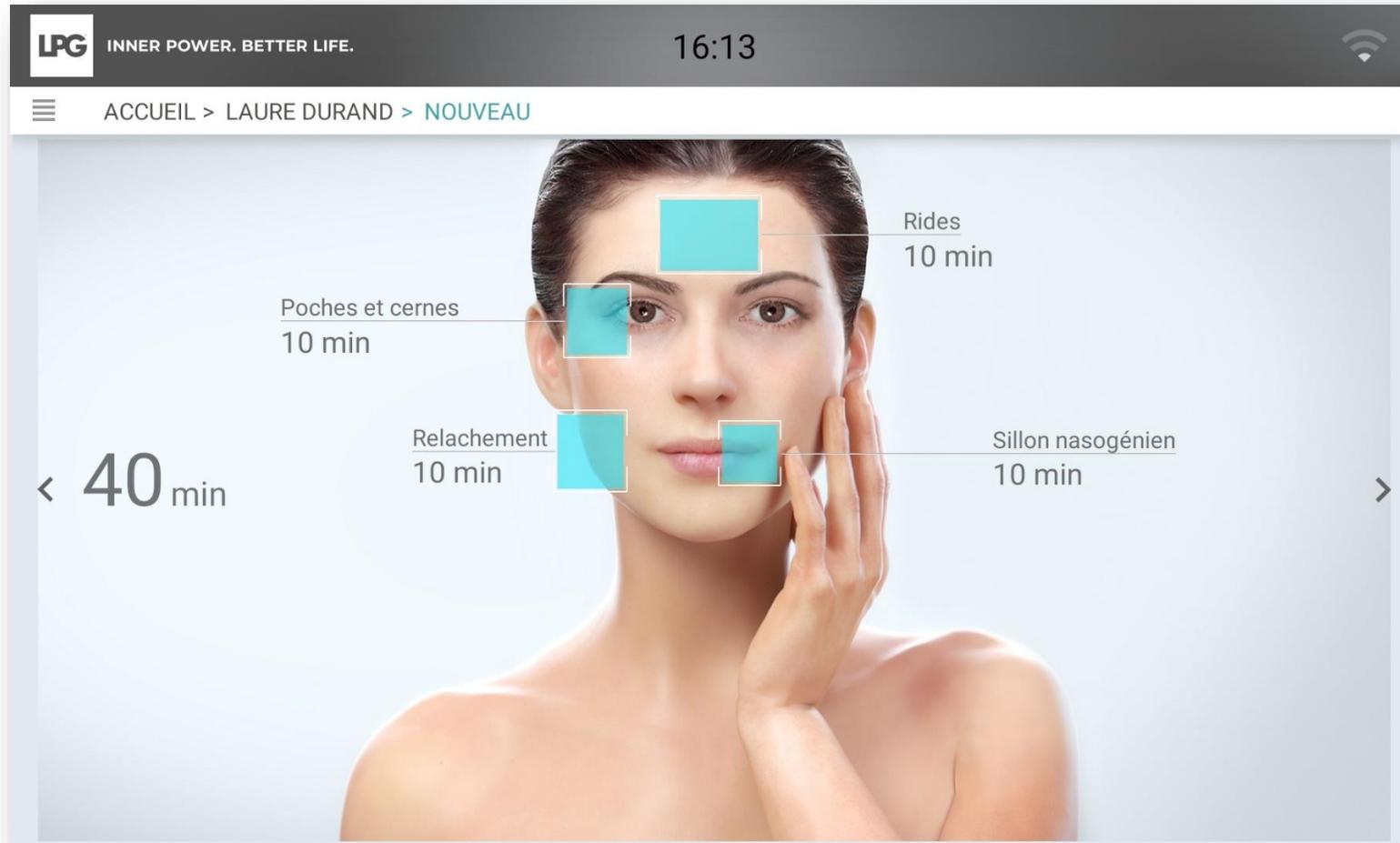

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE


Déplacez le curseur pour sélectionner le grade correspondant.

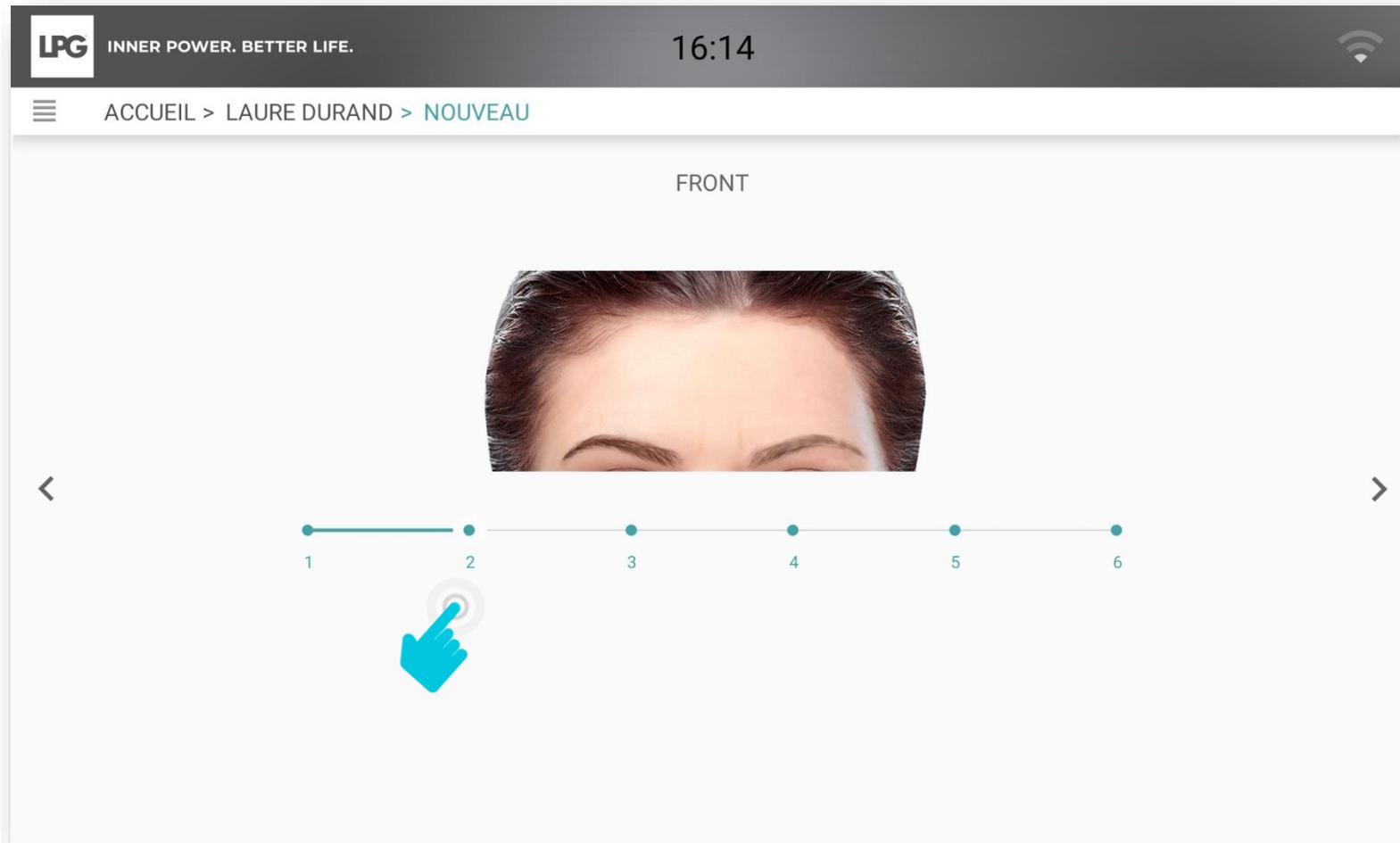

INNER POWER.
BETTER LIFE.


RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Déplacez le curseur pour sélectionner le grade correspondant.

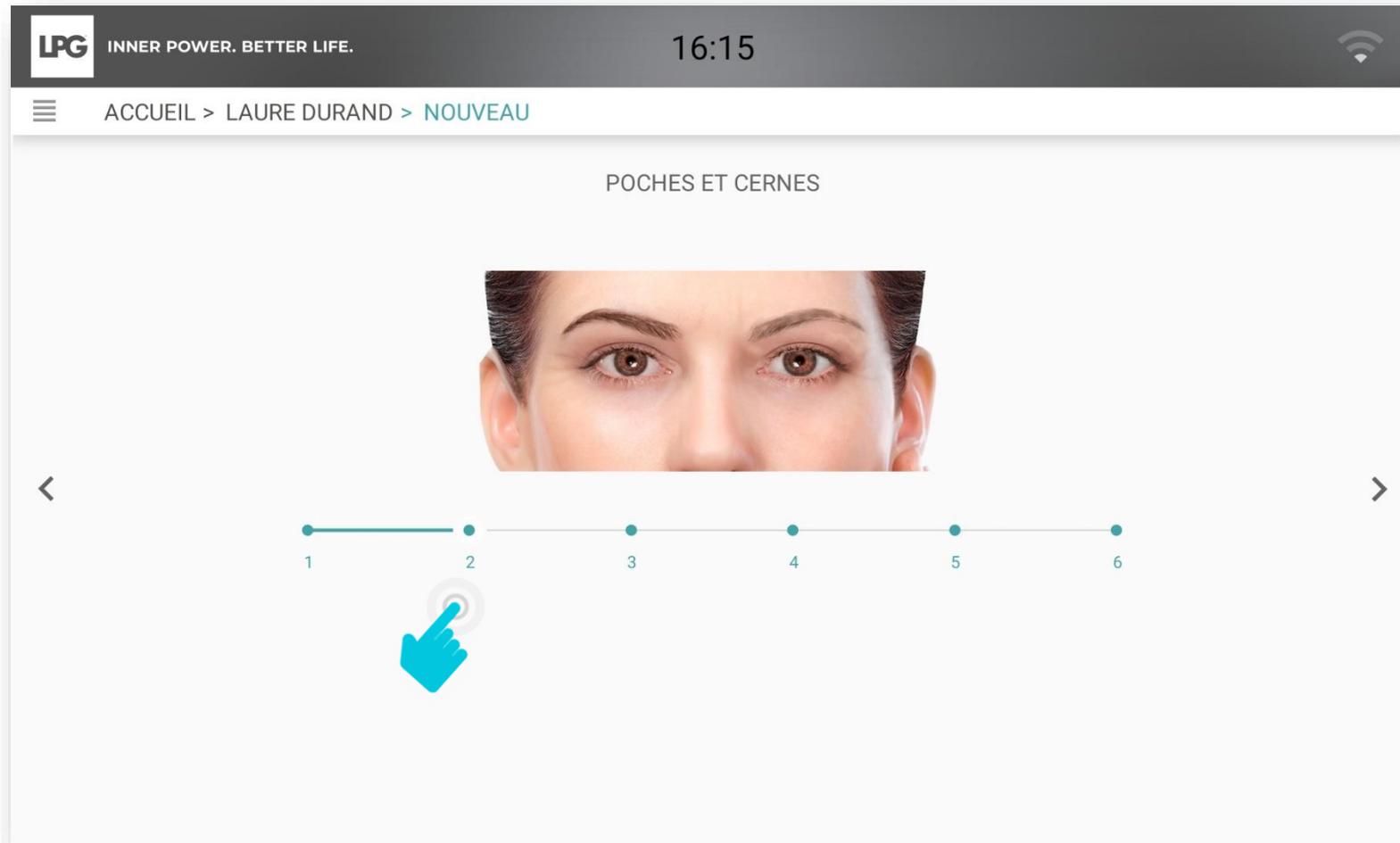

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE


Déplacez le curseur pour sélectionner le grade correspondant.

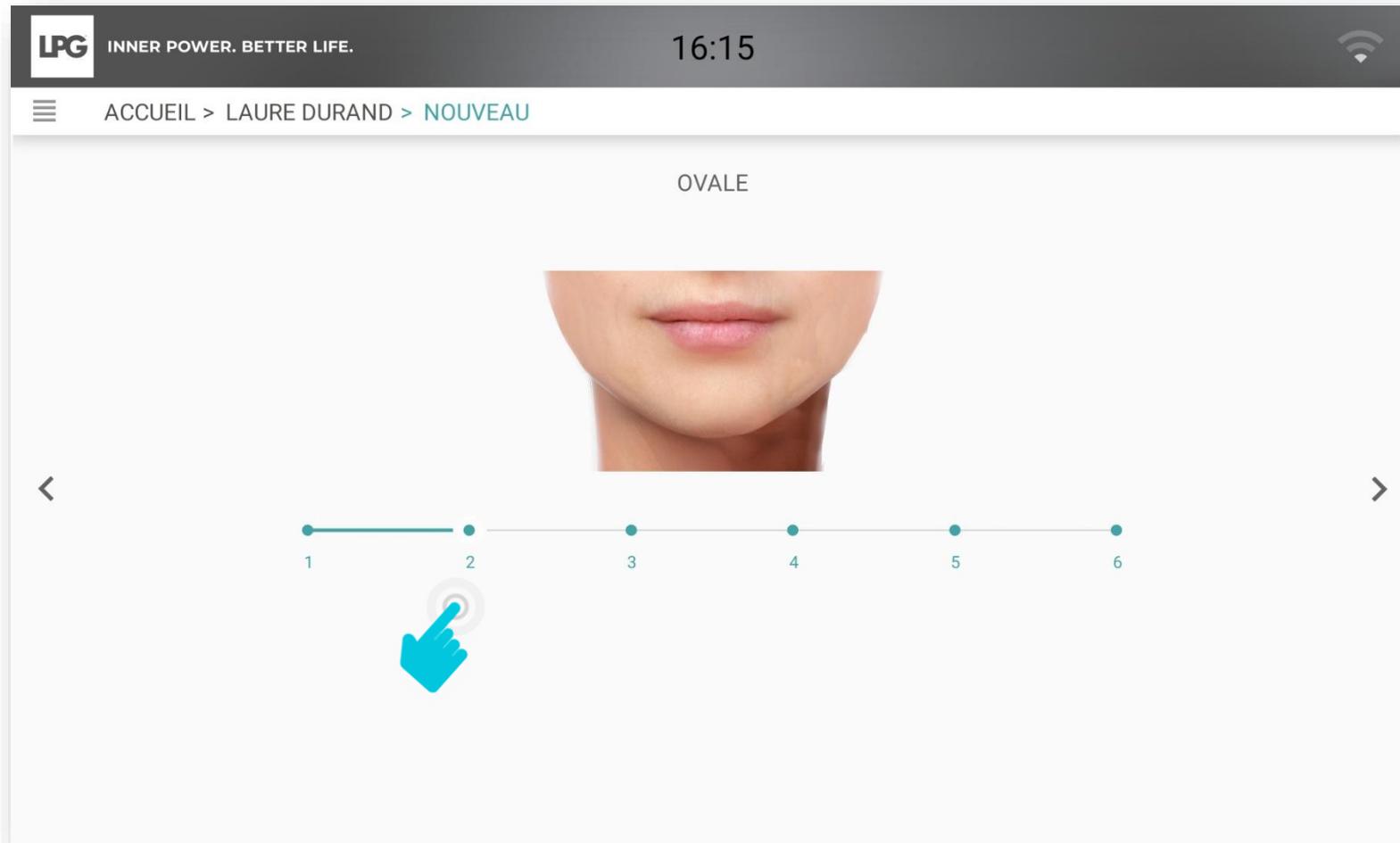

INNER POWER.
BETTER LIFE.


RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Déplacez le curseur pour sélectionner le grade correspondant.

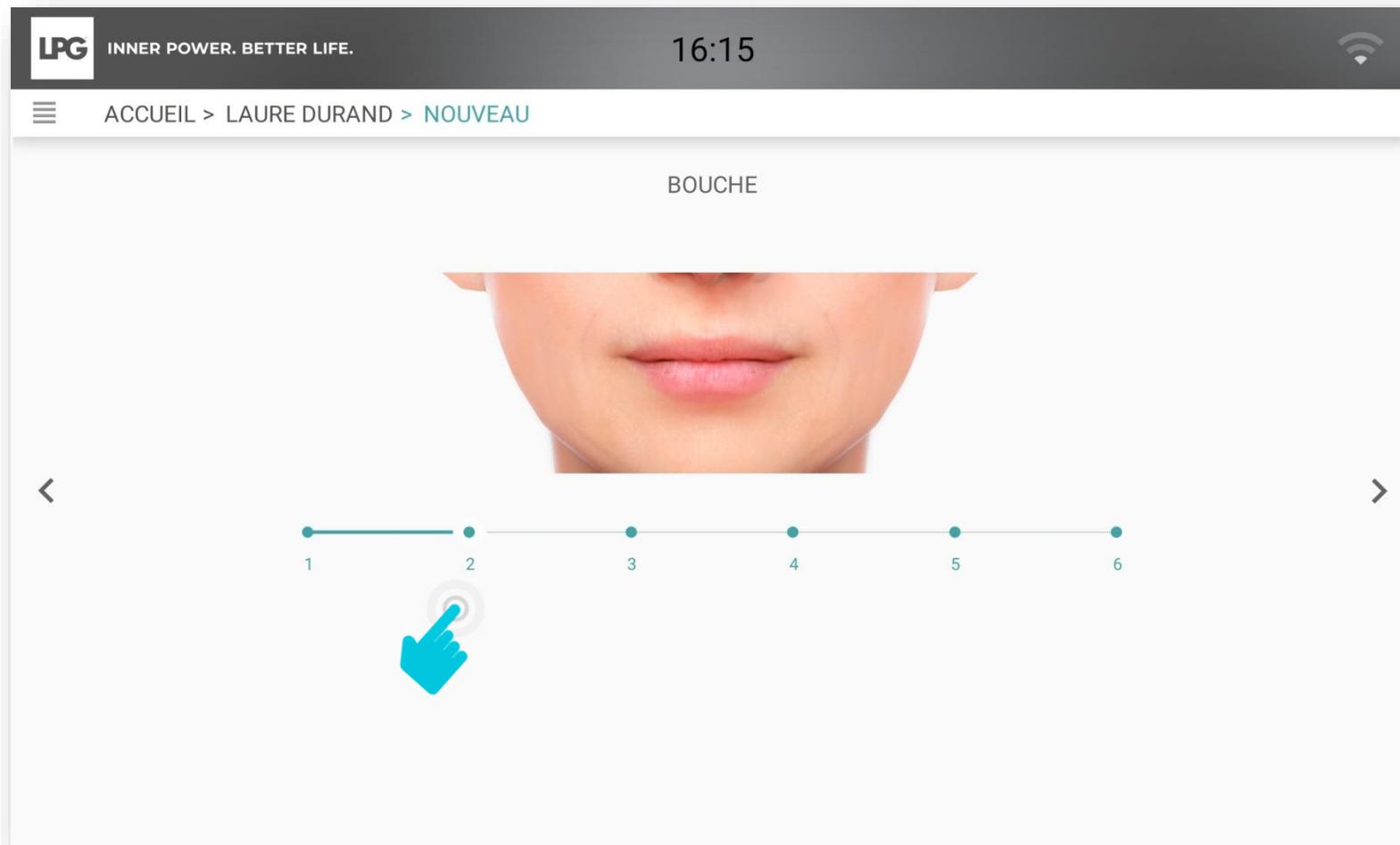

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE



Sélectionnez le(s) protocole(s) le(s) plus adapté(s) selon les objectifs de votre client(e).

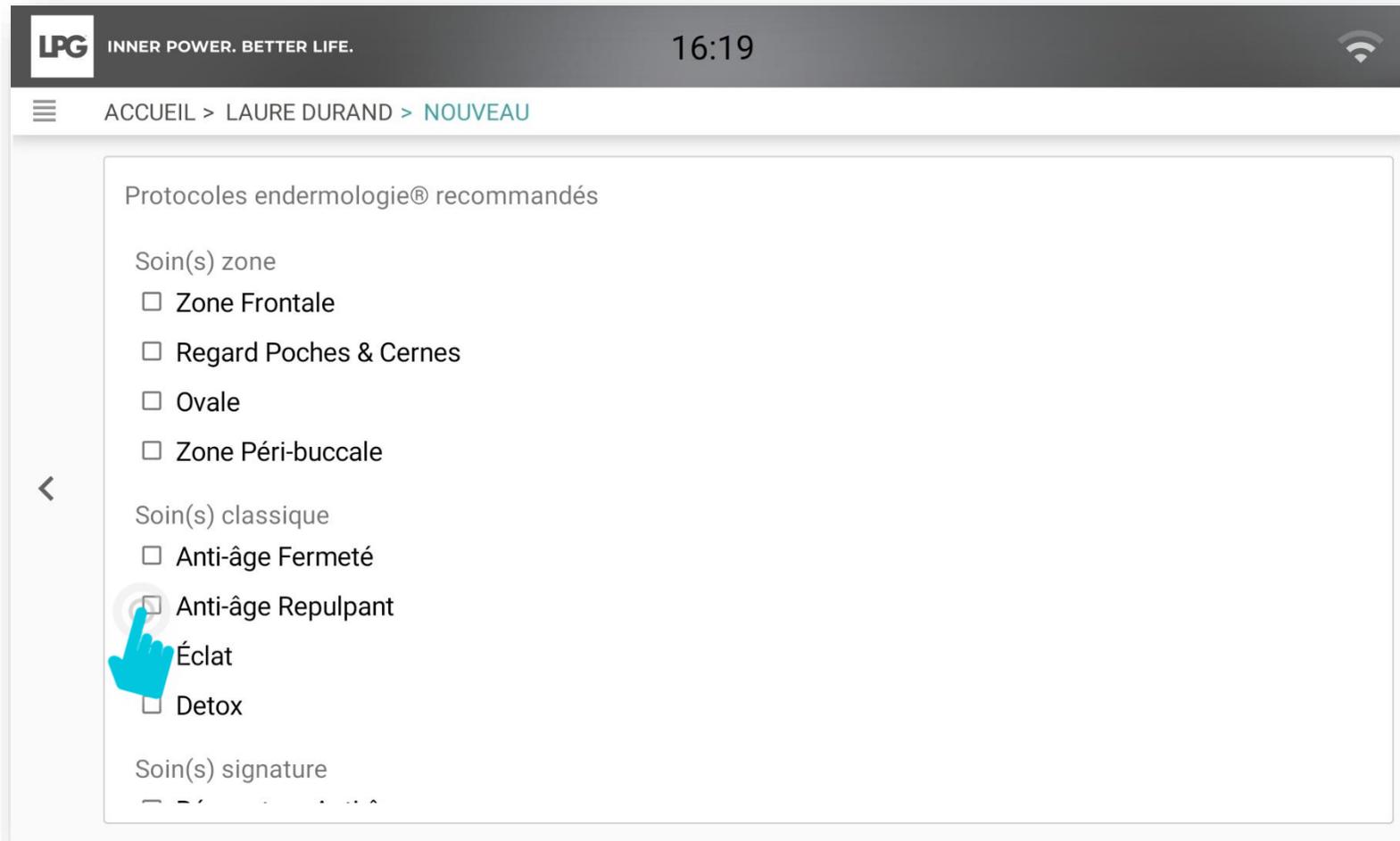

RÉALISER UNE ÉVALUATION VISAGE

Evaluation finale et recommandation de protocoles, cosmétiques et endermonutri

- Renseignez le nombre de séances recommandées.
- Cliquez ensuite sur **VALIDER**.
- Le programme de votre client(e) est ensuite enregistré sous le bandeau ci-dessous.

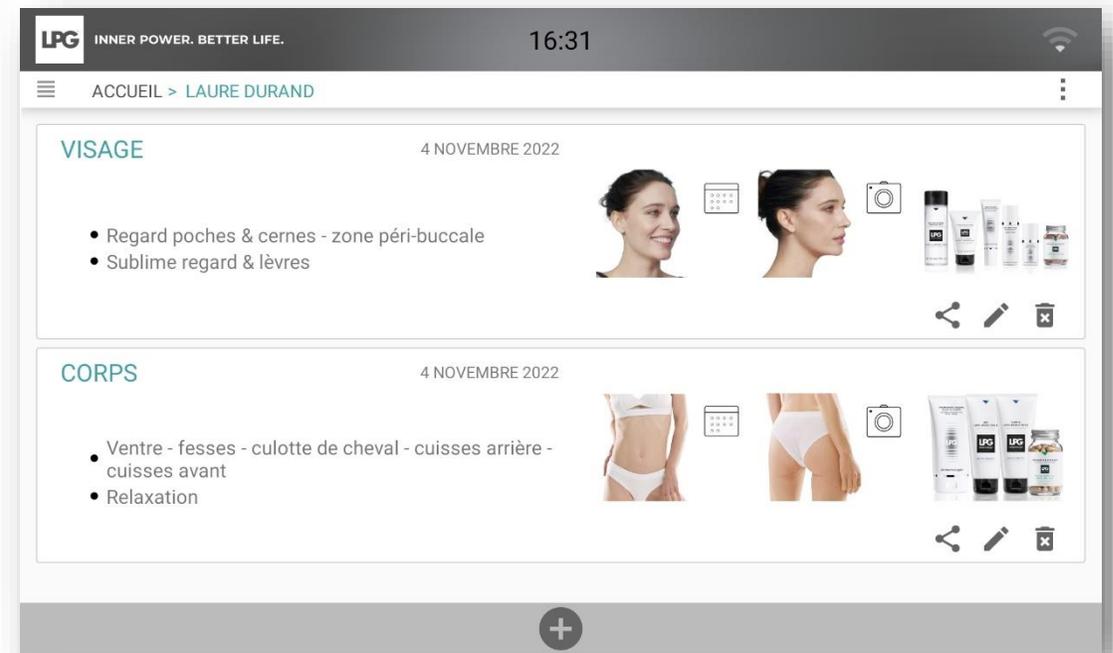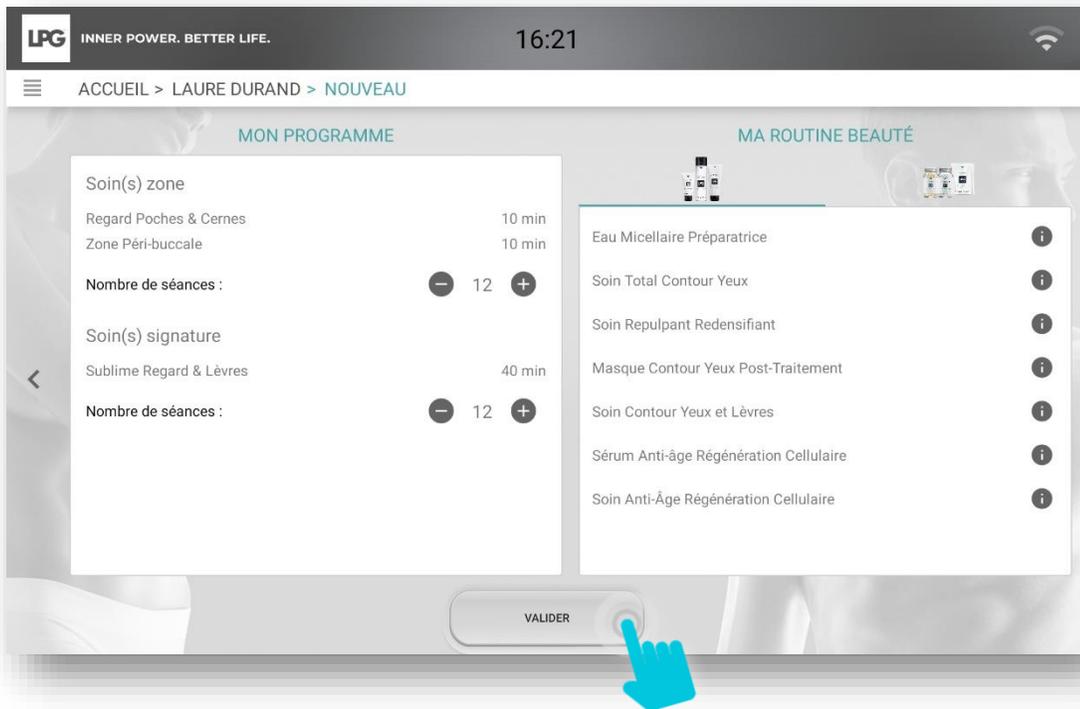

VISUALISATION DES PROGRAMMES DE VOTRE CLIENT(E)

MES SÉANCES

Cette rubrique vous permet de visualiser les séances endermologie® corps ou visage réalisées (protocole effectué, date). Vous pouvez ainsi suivre précisément le programme de soins de votre client(e).

BILAN PHOTOS

Cette rubrique vous permet de réaliser des bilans photos au cours du programme de votre client(e), de consulter les bilans photos réalisés, de comparer les bilans photos.

MES COSMÉTIQUES

Cette rubrique vous permet de visualiser les cosmétiques associés aux programmes de soins de votre client(e).

MES ENDERMONUTRI

Cette rubrique vous permet de visualiser les compléments alimentaires associés aux programmes de soins de votre client(e).

Liste des programmes

Date de l'évaluation initiale

The screenshot shows the LPG mobile application interface. At the top, there is a header with the LPG logo, the slogan "INNER POWER. BETTER LIFE.", the time "16:31", and a navigation bar with "ACCUEIL > LAURE DURAND". Below the header, there are two program cards. The first card is for "VISAGE" dated "4 NOVEMBRE 2022". It features a list of treatments: "Regard poches & cernes - zone péri-buccale" and "Sublime regard & lèvres". It includes two photos of a woman's face (front and profile), a calendar icon, a camera icon, and a set of cosmetic products. The second card is for "CORPS" dated "4 NOVEMBRE 2022". It features a list of treatments: "Ventre - fesses - culotte de cheval - cuisses arrière - cuisses avant" and "Relaxation". It includes two photos of a woman's body (front and side), a calendar icon, a camera icon, and a set of LPG products. At the bottom of the screen, there is a grey bar with a plus sign icon and three action icons: a share icon, a pencil icon, and a trash icon.

Création nouveau programme de soins (corps ou visage)

Envoi du programme par email à votre client(e)

Modification du programme de votre client(e)

Suppression du programme de votre client(e)

VISUALISATION DES SÉANCES



: Pour valider la séance réalisée en cas de perte de connexion avec votre CELLU M6® ALLIANCE



: Pour commenter la séance réalisée (paramètres de traitement utilisés...)



: Pour supprimer une séance



: Pour ajouter une séance

The screenshot shows the LPG app interface. At the top, there's a header with the LPG logo and the slogan 'INNER POWER. BETTER LIFE.' The time is 16:49. Below the header, there's a navigation bar with 'ACCUEIL > LAURE DURAND > MES SÉANCES'. The main content area shows a list of sessions. The first session is expanded, showing a list of treatments with their durations. The session is labeled '1/12' and has a total duration of 40 minutes. The treatments are: 'Ventre - souple' (10 min), 'Fesses - Fibreux' (10 min), 'Culotte de cheval - dense' (10 min), 'Cuisses arrière - souple' (5 min), and 'Cuisses avant - souple' (5 min). There are icons for validation, comments, and deletion for each session.

Séance	Traitement	Durée
1/12	Ventre - souple	10 min
	Fesses - Fibreux	10 min
	Culotte de cheval - dense	10 min
	Cuisses arrière - souple	5 min
	Cuisses avant - souple	5 min
2/12	Ventre - souple	10 min
	Fesses - Fibreux	10 min
	Culotte de cheval - dense	10 min
	Cuisses arrière - souple	5 min
	Cuisses avant - souple	5 min
3/12	Ventre - souple	10 min
	Fesses - Fibreux	10 min
	Culotte de cheval - dense	10 min
	Cuisses arrière - souple	5 min

EN MODE EXPERT

*Possibilité de sauvegarder les paramètres de traitement utilisés pour les séances suivantes.

*Possibilité de sauvegarder le temps passé sur chaque étape.

VISUALISATION DES COSMÉTIQUES

Pour chaque programme de soin, retrouvez les cosmétiques à associer et à recommander à votre client(e).

The screenshot displays the LPG mobile application interface. At the top, the header includes the LPG logo, the slogan "INNER POWER. BETTER LIFE.", the time "10:40", and a Wi-Fi signal icon. Below the header, a navigation bar shows the path "ACCUEIL > LAURE DURAND > MA ROUTINE BEAUTÉ". The main content area is divided into two columns. The left column features a category "REGARD POCHES & CERNES - ZONE PÉRI-BUCCALE" with an upward arrow. Underneath, four product items are listed: "EAU MICELLAIRE PRÉPARATRICE" (highlighted with a teal background), "BAUME YEUX", "CRÈME LISSANTE REPULPANTE", and "GEL-CRÈME LISSANT REPULPANT". At the bottom of this list is an "ANTI-ÂGE REPULPANT" category with a downward arrow. The right column is dedicated to the selected product, "EAU MICELLAIRE PRÉPARATRICE", featuring a product image, a list of benefits, and usage instructions. The benefits listed are: "Démaquille et nettoie les impuretés" and "Hydrate et apaise". The usage instructions state: "Imbibez un coton et nettoyez le visage, les yeux et le cou, matin et soir. Séchez la peau délicatement sans rincer."



INNER POWER.
BETTER LIFE.

VISUALISATION DES ENDERMONUTRI

Pour chaque programme de soin, retrouvez les compléments alimentaires à associer et à recommander à votre client(e).

The screenshot shows the LPG mobile application interface. At the top, the LPG logo and tagline 'INNER POWER. BETTER LIFE.' are on the left, the time '15:25' is in the center, and a Wi-Fi icon is on the right. Below the header, a breadcrumb trail reads 'ACCUEIL > LAURE DURAND > MA ROUTINE BEAUTÉ'. The main content area is divided into two columns. The left column is a vertical list of product categories: 'REGARD ANTI-RIDES - DOUBLE-MENTON - COU', 'BOOSTER DE VITALITÉ' (highlighted in a teal box), 'ACIDE HYALURONIQUE', 'COLLAGÈNE', 'OMÉGA', and 'HYDRATATION ECLAT'. The right column features the 'BOOSTER DE VITALITÉ' product details, including a product image, a list of benefits, and usage instructions.

LPG INNER POWER. BETTER LIFE. 15:25

ACCUEIL > LAURE DURAND > MA ROUTINE BEAUTÉ

REGARD ANTI-RIDES -
DOUBLE-MENTON - COU

BOOSTER DE VITALITÉ

ACIDE HYALURONIQUE

COLLAGÈNE

OMÉGA

HYDRATATION ECLAT

BOOSTER DE VITALITÉ

- Augmente les performances physiques et mentales
- Détoxifie le corps
- Booste les défenses naturelles

2 gélules par jour.
À consommer de préférence le matin et avant 15 heures pour éviter toute difficulté d'endormissement.
Pour des résultats optimaux, suivez ce traitement pendant au moins 2 mois d'affilée. Cure réalisable 2 à 3 fois par an ou à chaque début de cure minceur.




RÉALISER UN BILAN PHOTOS

LPG

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UN BILAN PHOTOS VISAGE

Après avoir cliqué sur la vignette concernée, cliquez sur  en bas de l'écran pour réaliser un nouveau bilan photos. Les photos prises lors de l'évaluation initiale apparaissent automatiquement à cet emplacement.

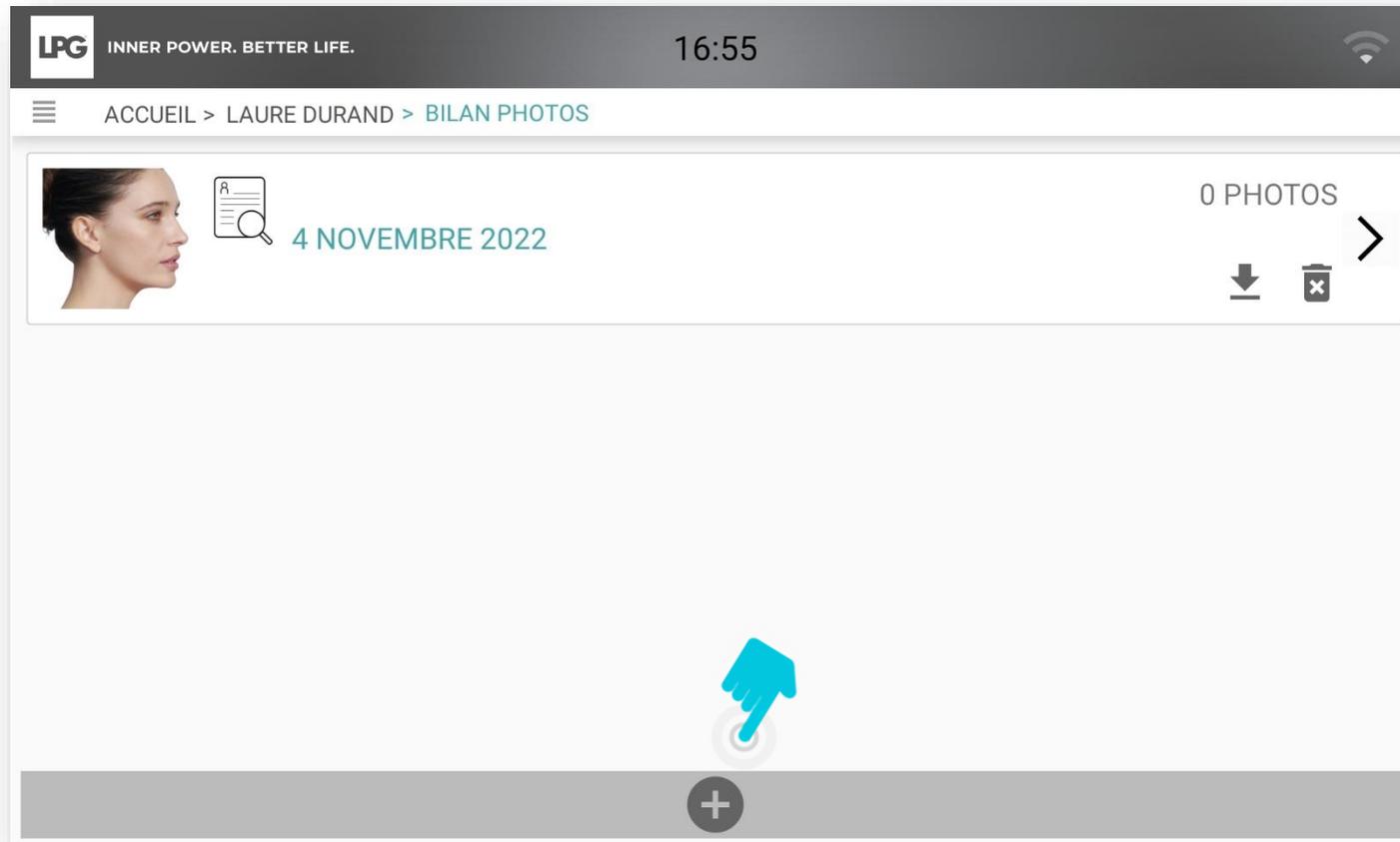

 : Sauvegarde du bilan photos sur votre tablette

 : Suppression du bilan photos



INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UN BILAN PHOTOS VISAGE


Les objectifs de l'évaluation initiale sont volontairement affichés (rappel).

Vous êtes libre d'ajouter les commentaires que vous souhaitez (nombre de séances effectuées, résultats constatés...)

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a dark header with the LPG logo and the slogan 'INNER POWER. BETTER LIFE.' on the left, the time '17:02' in the center, and a Wi-Fi icon on the right. Below the header is a breadcrumb trail: 'ACCUEIL > LAURE DURAND > BILAN PHOTOS'. The main content area contains two text input fields. The first field is labeled 'Objectif :'. The second field is larger and labeled 'Ajouter votre commentaire ici'. There are left and right arrow navigation icons on the sides of the comment field.

RÉALISER UN BILAN PHOTOS VISAGE


- Réalisez trois photos (profil droit, face, profil gauche). Tenez votre tablette en format portrait. La photo ne doit être prise que lorsque les capteurs sont verts. Aidez-vous des repères intégrés pour bien positionner votre client(e). A chaque prise, cliquez sur **ENREGISTRER** ou **ANNULER** si vous souhaitez prendre une nouvelle photo.
- Si vous souhaitez prendre d'autres photos, cliquez sur **AJOUTER PHOTO COMPLÉMENTAIRE**.

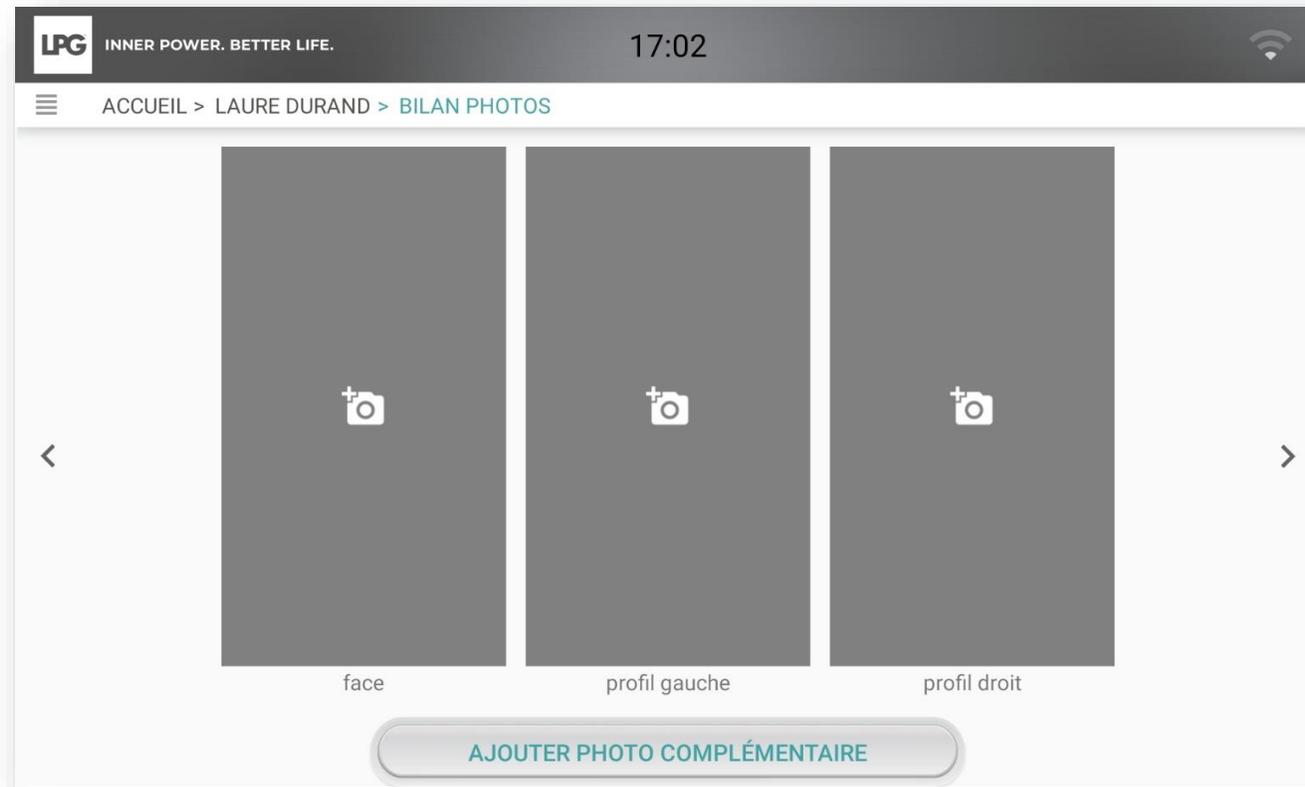

INNER POWER.
BETTER LIFE.

RÉALISER UN BILAN PHOTOS VISAGE


Déplacez le curseur pour sélectionner le grade correspondant et ainsi noter les évolutions par rapport à l'évaluation initiale.

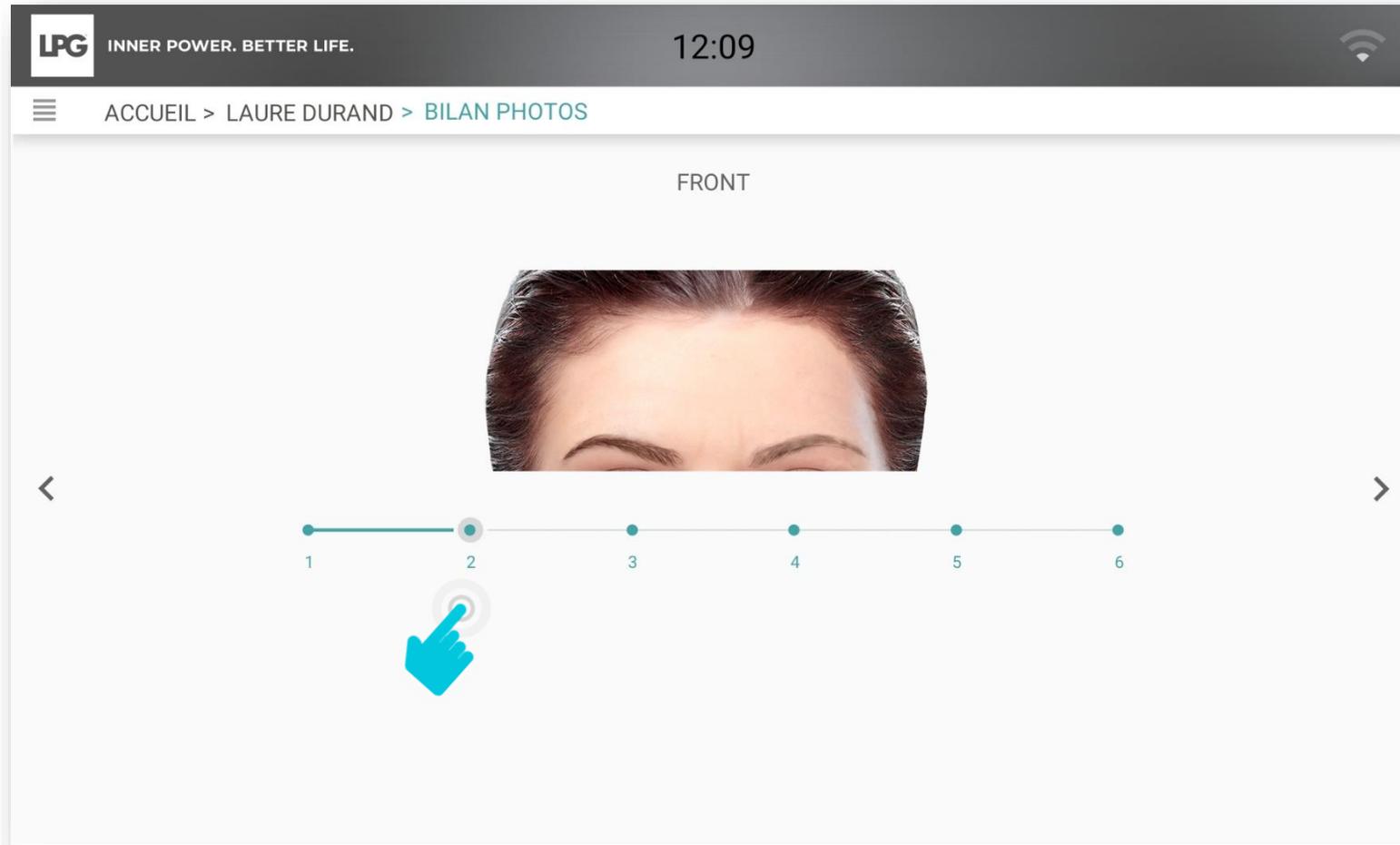

INNER POWER.
BETTER LIFE.


RÉALISER UN BILAN PHOTOS VISAGE

Déplacez le curseur pour sélectionner le grade correspondant et ainsi noter les évolutions par rapport à l'évaluation initiale.

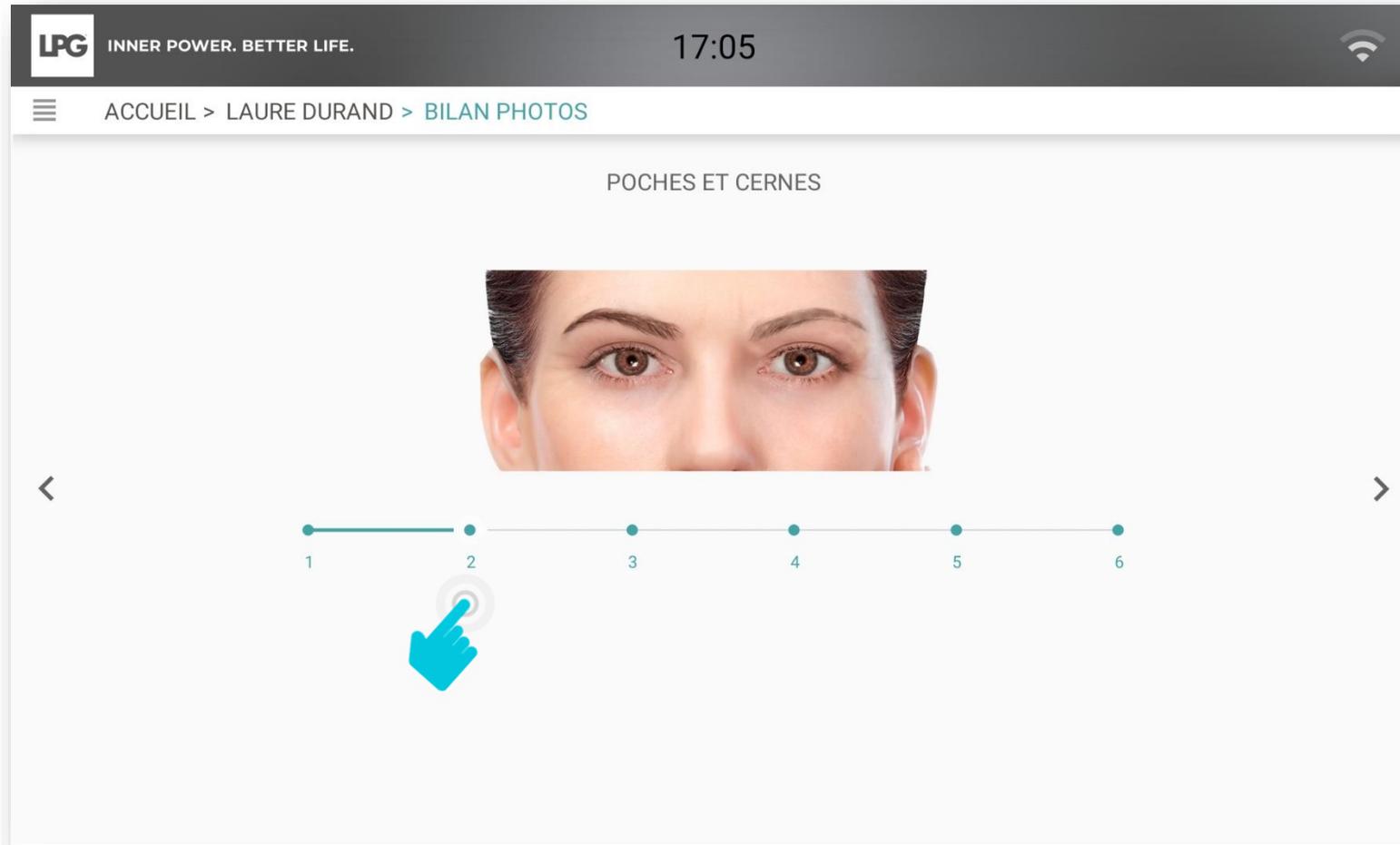


RÉALISER UN BILAN PHOTOS VISAGE


Déplacez le curseur pour sélectionner le grade correspondant et ainsi noter les évolutions par rapport à l'évaluation initiale.

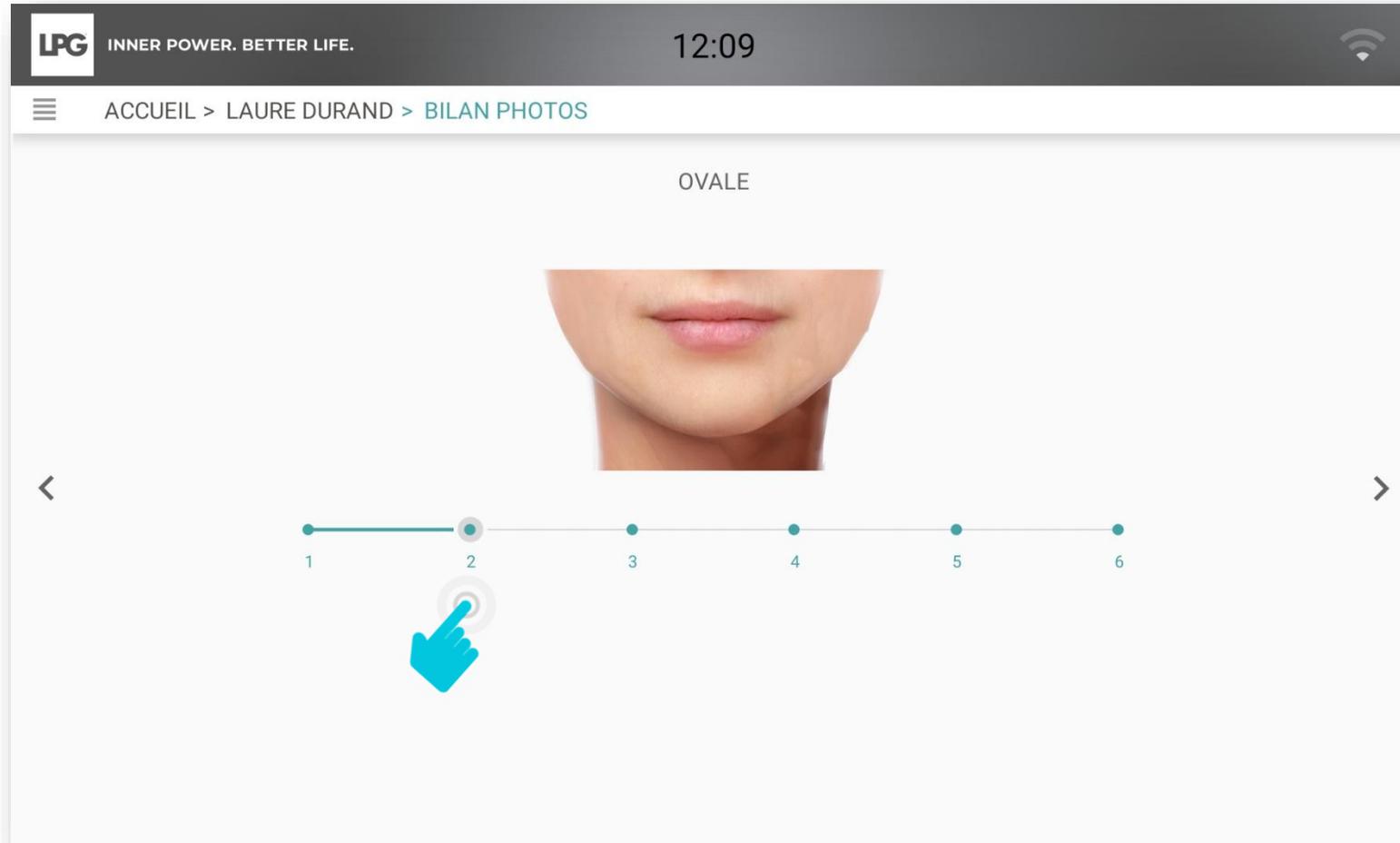

RÉALISER UN BILAN PHOTOS VISAGE

Déplacez le curseur pour sélectionner le grade correspondant et ainsi noter les évolutions par rapport à l'évaluation initiale.

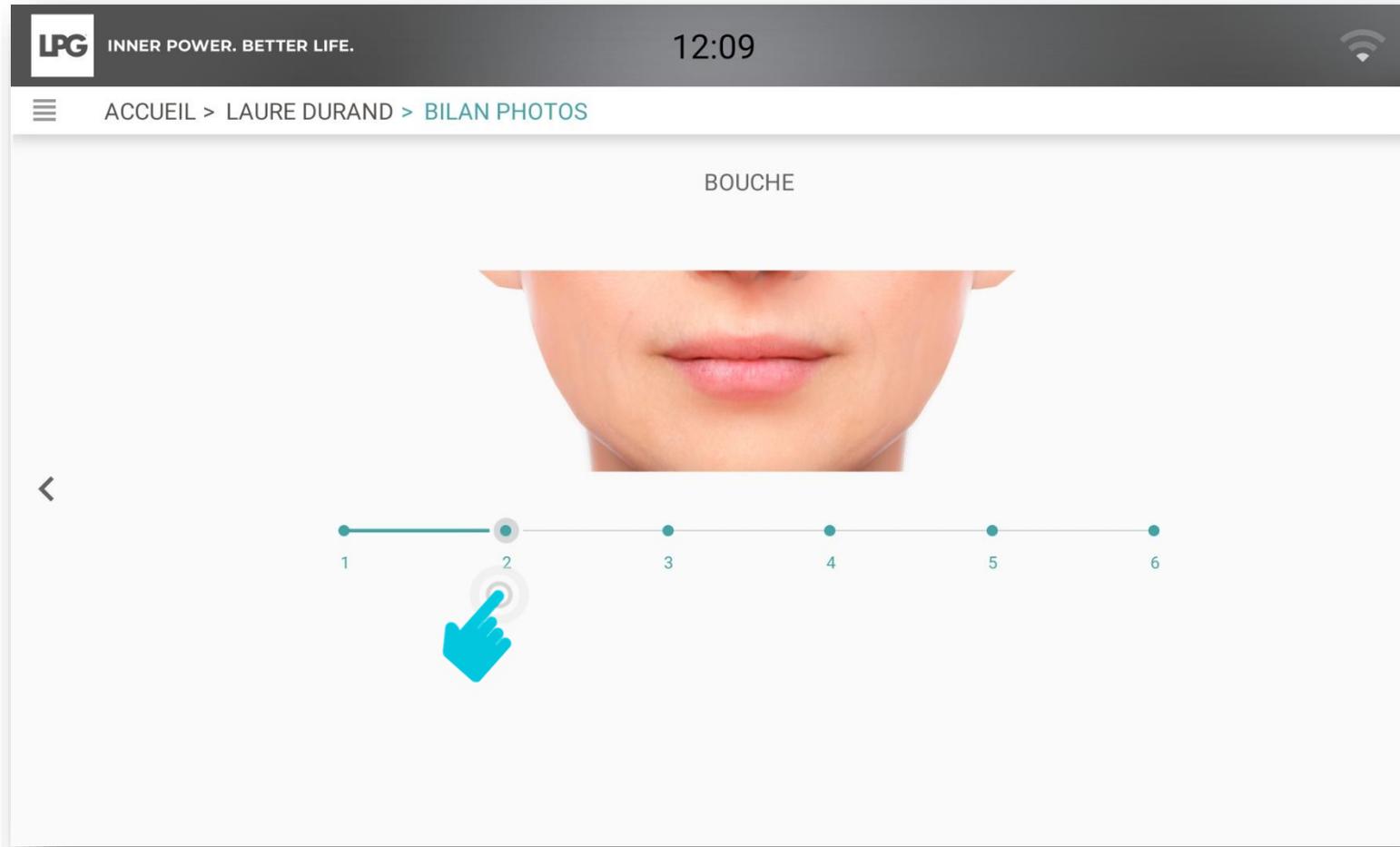

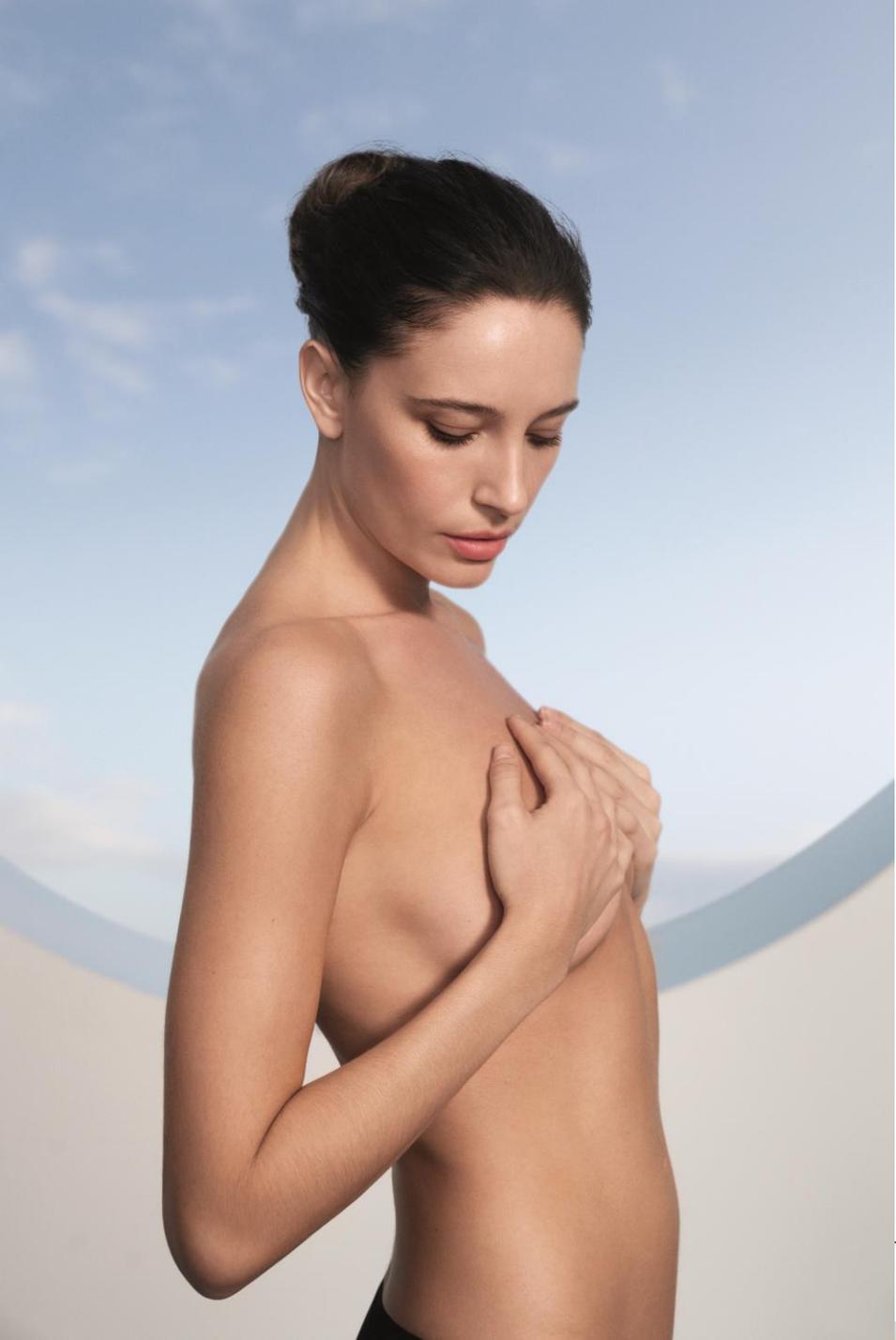


COMPARER DES BILANS PHOTOS



INNER POWER.
BETTER LIFE.

COMPARER UN BILAN PHOTOS VISAGE

Pour comparer des bilans photos, cliquez sur  en bas de l'écran.

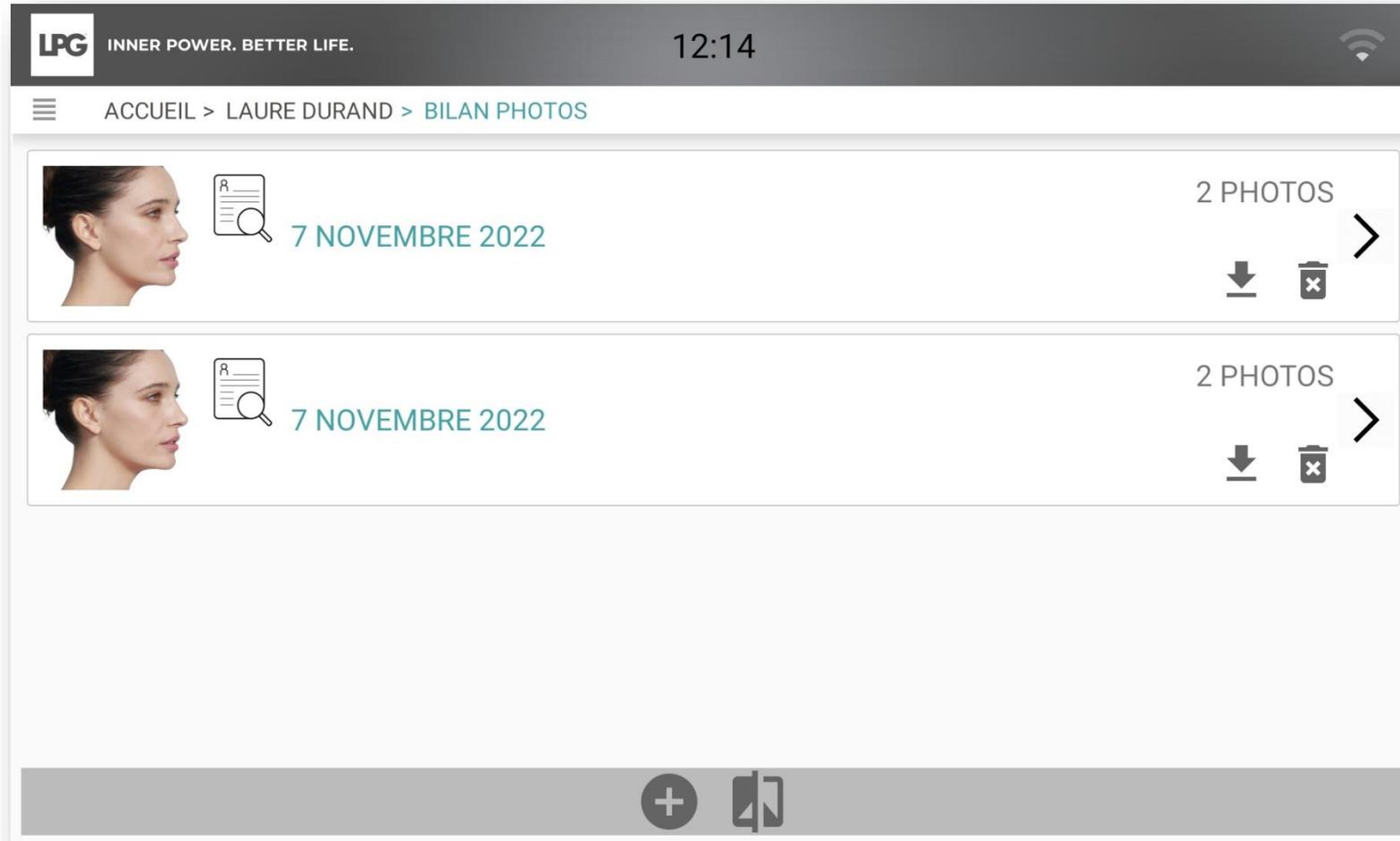

INNER POWER.
BETTER LIFE.


COMPARER UN BILAN PHOTOS VISAGE

Sélectionnez le bilan photos qui vous intéresse à la date des flèches.

Sélectionnez ensuite la photo : face, dos, profil droit, profil gauche.

Pour sauvegarder la comparaison photos, cliquez sur ↓

Enfin, nommez votre fichier et enregistrez à l'emplacement que vous souhaitez sur votre tablette.

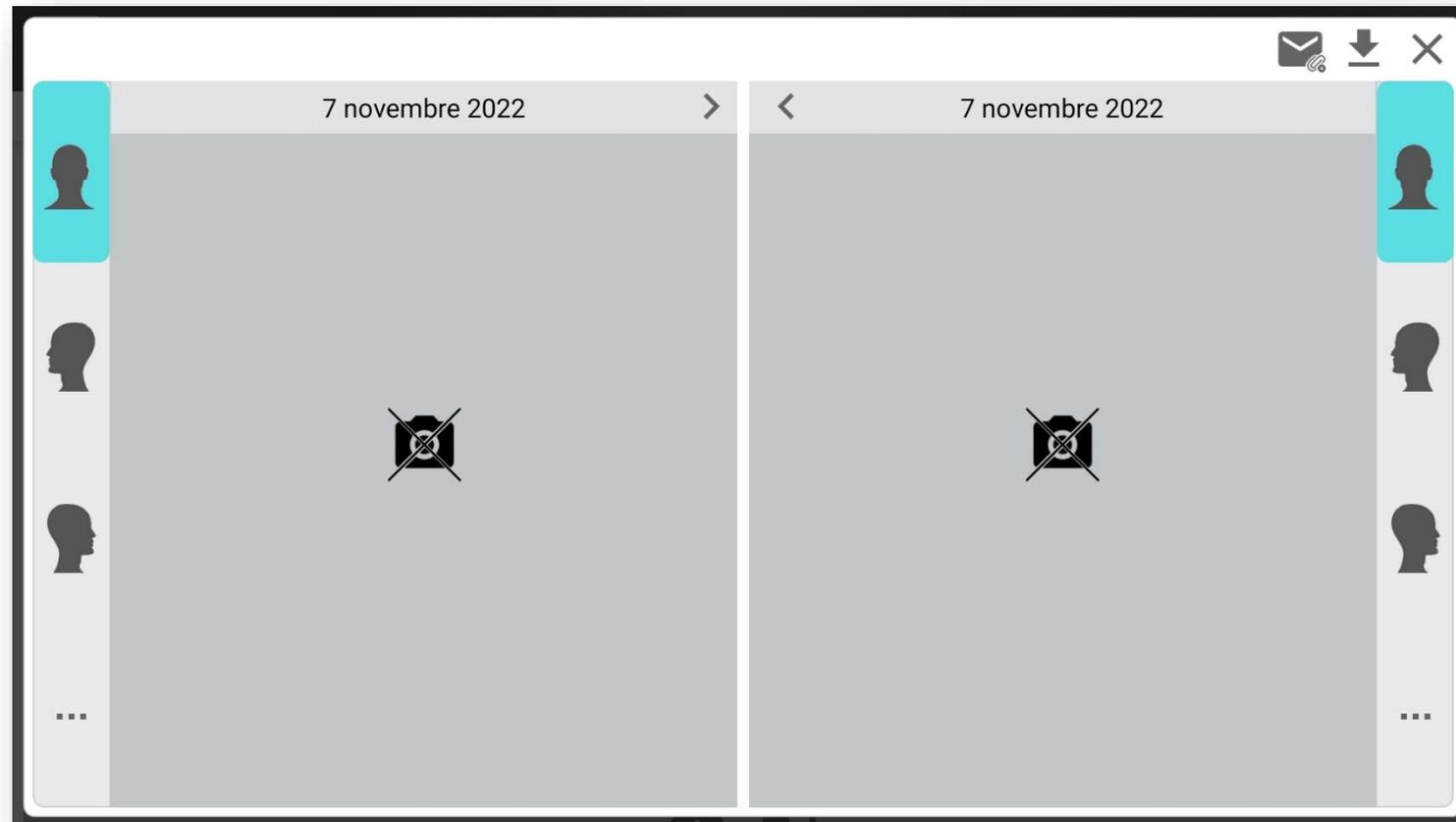

INNER POWER.
BETTER LIFE.




ENVOYER UN PROGRAMME DE SOINS À SA/SON CLIENT(E)



INNER POWER.
BETTER LIFE.

ENVOI DU PROGRAMME

- Choisissez le programme concerné et cliquez sur 
- Sélectionnez les cosmétiques et compléments alimentaires à importer dans le document puis cliquez sur **OK**.

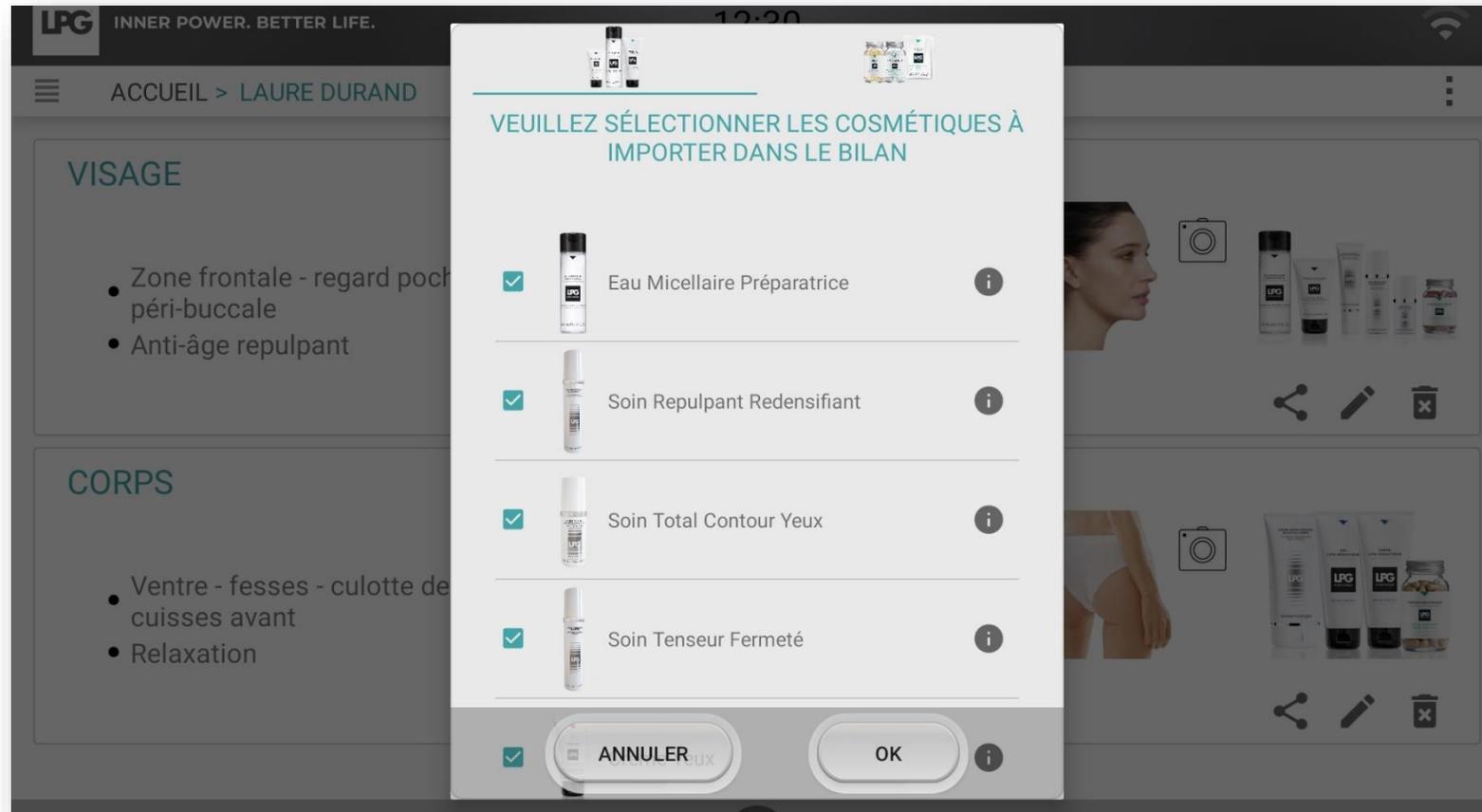

INNER POWER.
BETTER LIFE.

ENVOI DU PROGRAMME

Après avoir configuré votre boîte email, personnalisez le message destiné à votre client(e). Le programme (document PDF) est automatiquement attaché à votre email. Cliquez ensuite sur **ENVOYER**.



INNER POWER.
BETTER LIFE.



LANCEMENT D'UN
PROGRAMME DE SOINS
SUR VOTRE
CELLU M6® ALLIANCE


LPG

INNER POWER.
BETTER LIFE.

LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE SOINS

Après avoir connecté votre tablette à votre CELLU M6® (veuillez-vous munir du guide Quickstart qui vous expliquera la marche à suivre), cliquez sur **SÉANCE PERSONNALISÉE**.


Pour savoir si votre appareil est bien connecté à votre tablette, vérifiez que l'icône suivant s'affiche sur l'écran de votre tablette :

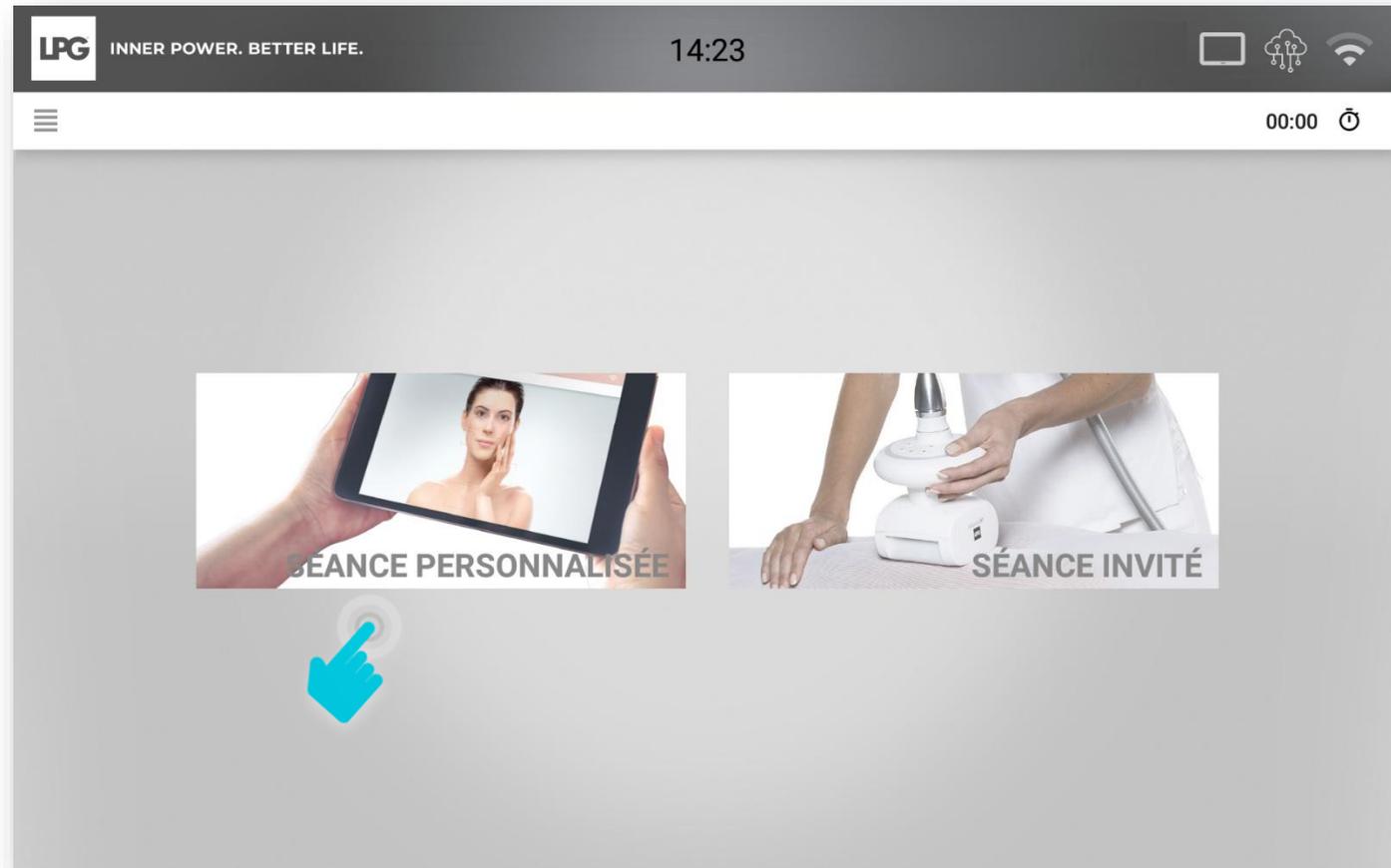

INNER POWER.
BETTER LIFE.

LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE SOINS

Cliquez sur le client concerné dans votre base de données.

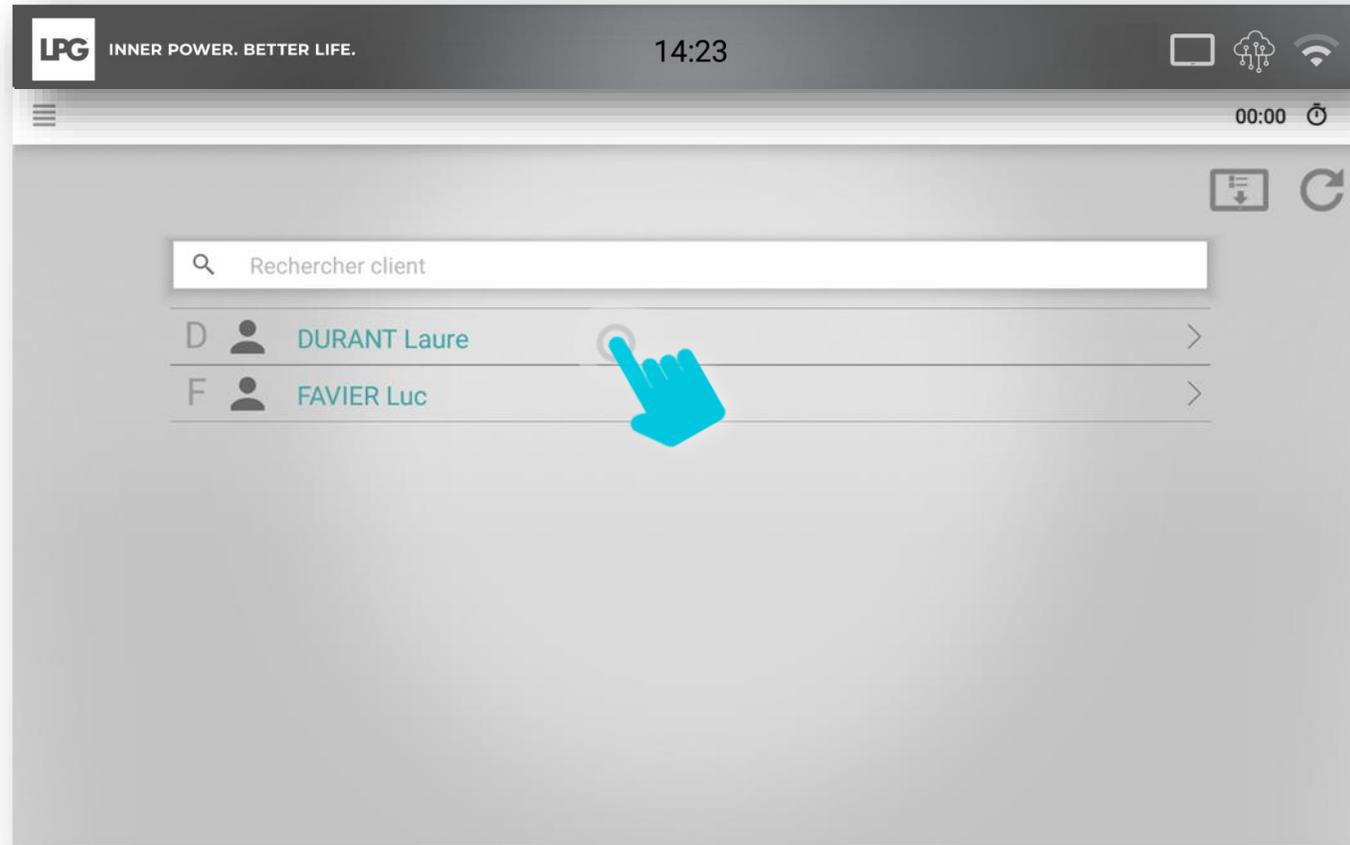

Les programmes des client(e)s peuvent être téléchargés lorsque la tablette est connectée. Ils seront alors accessibles à tout moment. Les résultats seront envoyés dès que la tablette réapparaîtra.



INNER POWER.
BETTER LIFE.

LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE SOINS

Cliquez ensuite sur le programme de soins souhaité.



En cas de perte de connexion, validez manuellement sur votre tablette la séance réalisée et cliquez sur  pour mettre à jour votre CELLU M6® ALLIANCE.



INNER POWER.
BETTER LIFE.

LANCEMENT D'UN PROGRAMME DE SOINS

La séance peut démarrer !

LPG INNER POWER. BETTER LIFE. 15:37

LAURE DURANT > VENTRE - FESSES - CULOTTE DE CHEVAL > VENTRE > DENSE 00:00

Etape 1/22 0:06 -9:54

CRÈME MICRO-PEELING

Avant de mettre l'endermowear™ LPG®, appliquer ce soin sur l'ensemble du corps en effleurages ascendants jusqu'à pénétration complète du produit. Insister sur les zones à vergetures.



The image shows three white bottles of LPG skincare products. The two bottles in the foreground are 'CRÈME MICRO-PEELING RESURFACING CREAM' with 400 ML / 13.5 FL. OZ. The bottle in the background is 'PRÉPARATEUR DE SOIN CORPS SKINCARE BODY PREPARE' with 400 ML / 13.5 FL. OZ. All bottles feature the LPG logo and the text 'endermostim' and 'AHA, Antioxydants, Vitamines'. A large right-pointing arrow is visible on the right side of the product image.





SÉANCES LIBRES



INNER POWER.
BETTER LIFE.

VISUALISATION DES SÉANCES LIBRES

Pour accéder aux séances libres de vos client(e)s, exécutées via « Séance personnalisée » sur l'écran de votre CELLU M6® ALLIANCE, cliquez sur  puis sur mes « Mes séances libres »

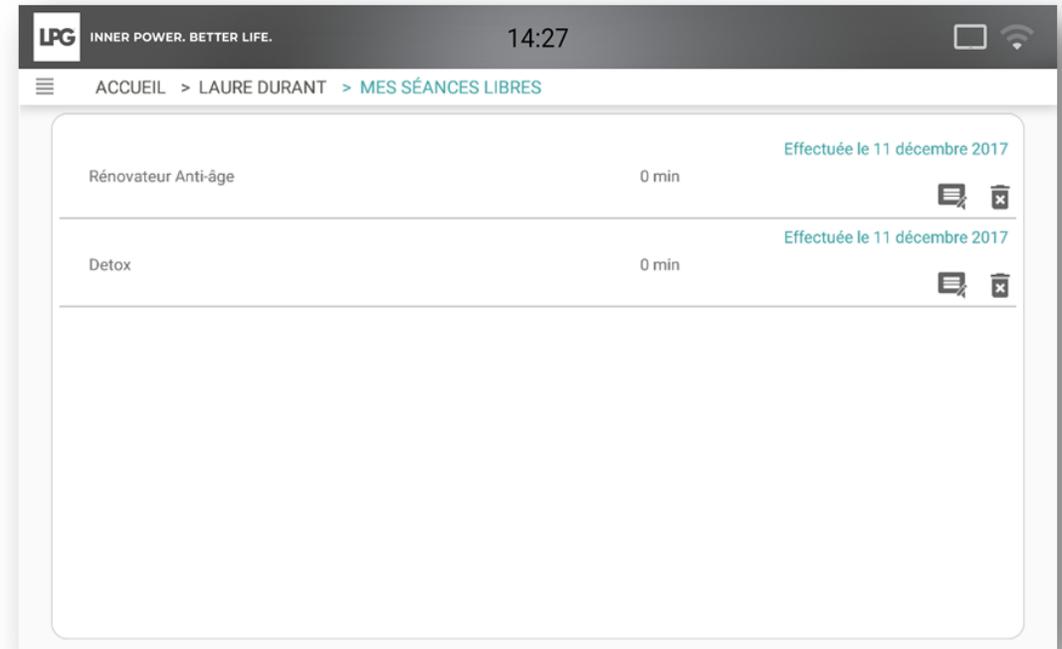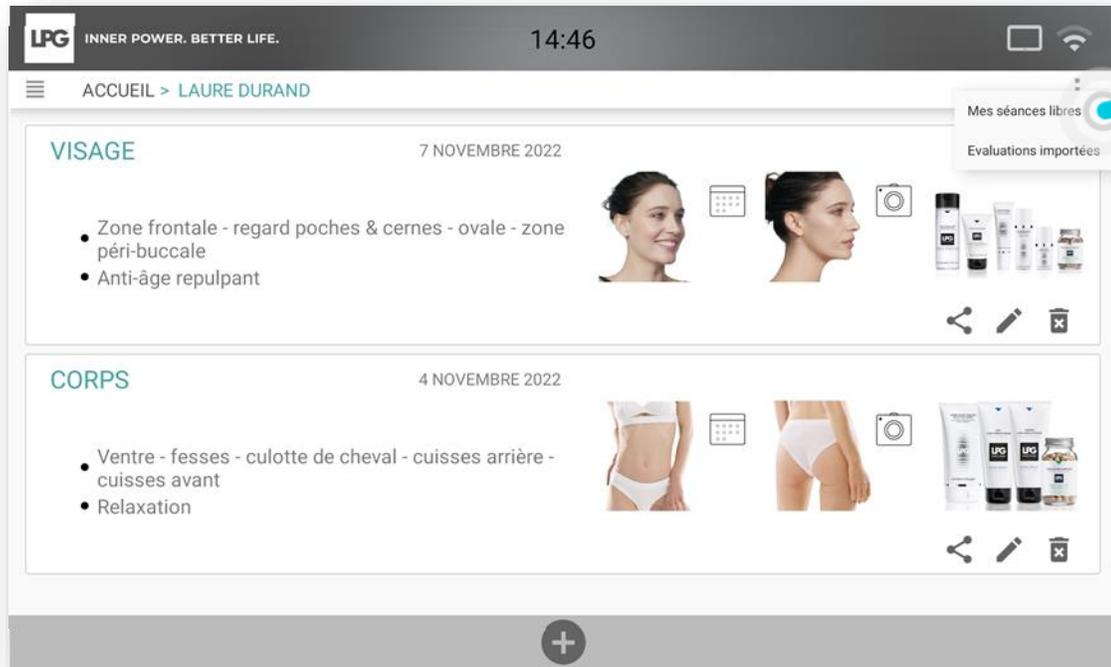



SAUVEGARDE

LPG

**INNER POWER.
BETTER LIFE.**

SAUVEGARDE




Ne sautez pas cette étape ! En cas de problème, vous pourriez perdre l'intégralité de vos données.

Avant de commencer, nous vous recommandons de **sauvegarder votre base de données sur un support externe de votre choix** (ordinateur personnel, carte micro SD disponible en grande surface ou dans les magasins spécialisés...).

Par défaut, votre base de données sera stockée sur votre tablette.

Veillez vous rendre dans le menu **CONFIGURATION** de l'application endermoscan (cliquez sur la barre de menu en haut à gauche). Cliquez sur **PARAMÈTRES** puis **BASE DE DONNÉES**.

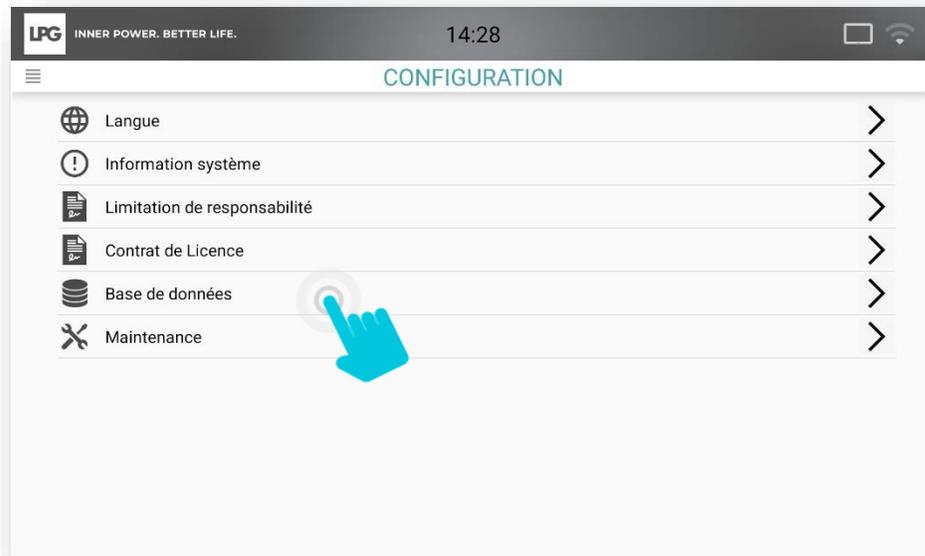

Cliquez sur « **SAUVEGARDER BASE DE DONNÉES** » et choisissez l'emplacement de sauvegarde de vos données sur le support de votre choix : carte micro SD, tablette, ordinateur personnel...



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**


SAUVEGARDE AUTOMATIQUE

Vous pouvez planifier une sauvegarde automatique de vos données.
Pour cela, cliquez sur **SAUVEGARDE AUTOMATIQUE** puis sur le curseur  pour l'activer.

Choisissez ensuite la périodicité (tous les jours, tous les 5 jours ou tous les 10 jours), l'emplacement de sauvegarde de vos données.

Renseignez ensuite un mot de passe qui protégera l'accès à votre base de données. **Veillez le conserver précieusement car il pourra vous être demandé ultérieurement.** Pour des raisons de confidentialité, LPG SYSTEMS n'a pas accès à votre mot de passe et ne peut vous le demander. **Il est sous votre entière responsabilité.**

Enfin, cliquez sur **OK**.

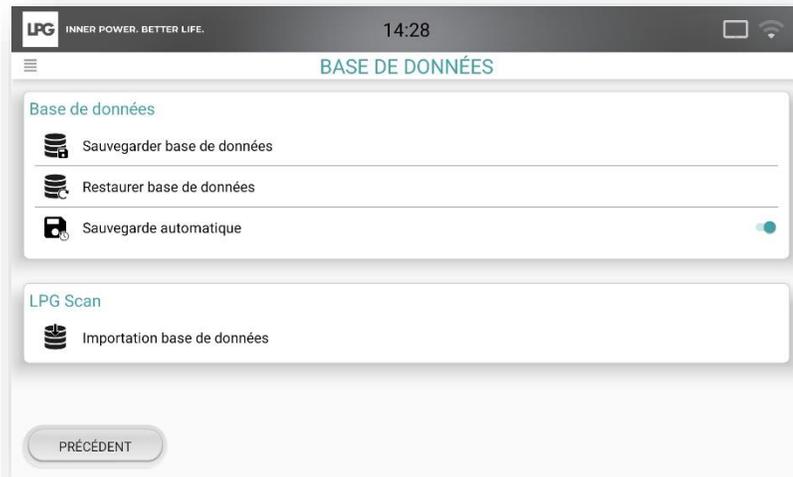

INNER POWER.
BETTER LIFE.




MISE À JOUR



INNER POWER.
BETTER LIFE.

MISES A JOUR


Lorsqu'une mise à jour est disponible, l'écran suivant apparaît au démarrage de l'application.
Le « **i** » permet de connaître le contenu de cette mise à jour.
Appuyez sur **OK** pour lancer le téléchargement et l'installation.

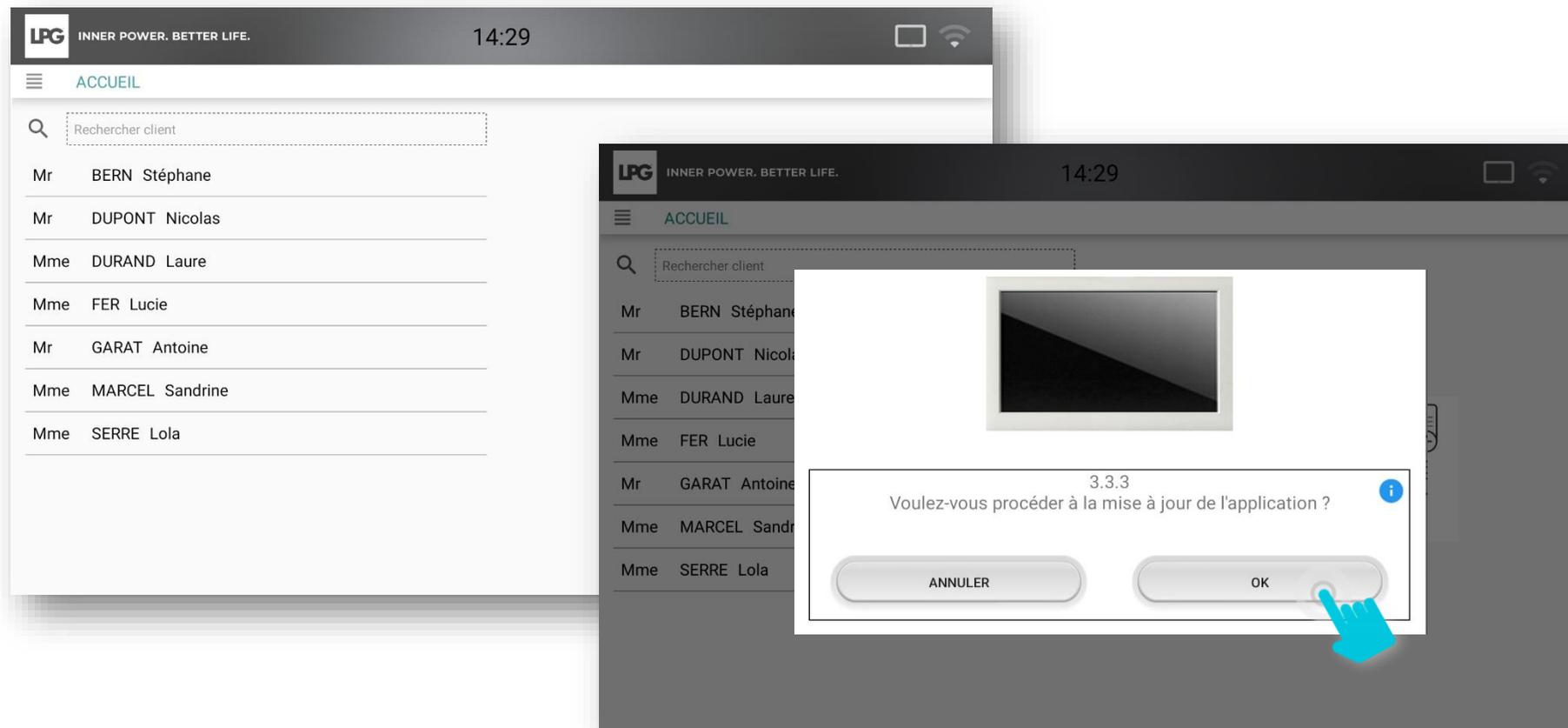

INNER POWER.
BETTER LIFE.

MISES A JOUR

Veillez suivre les instructions qui s'affichent à l'écran et poursuivez en cliquant sur **OK**.

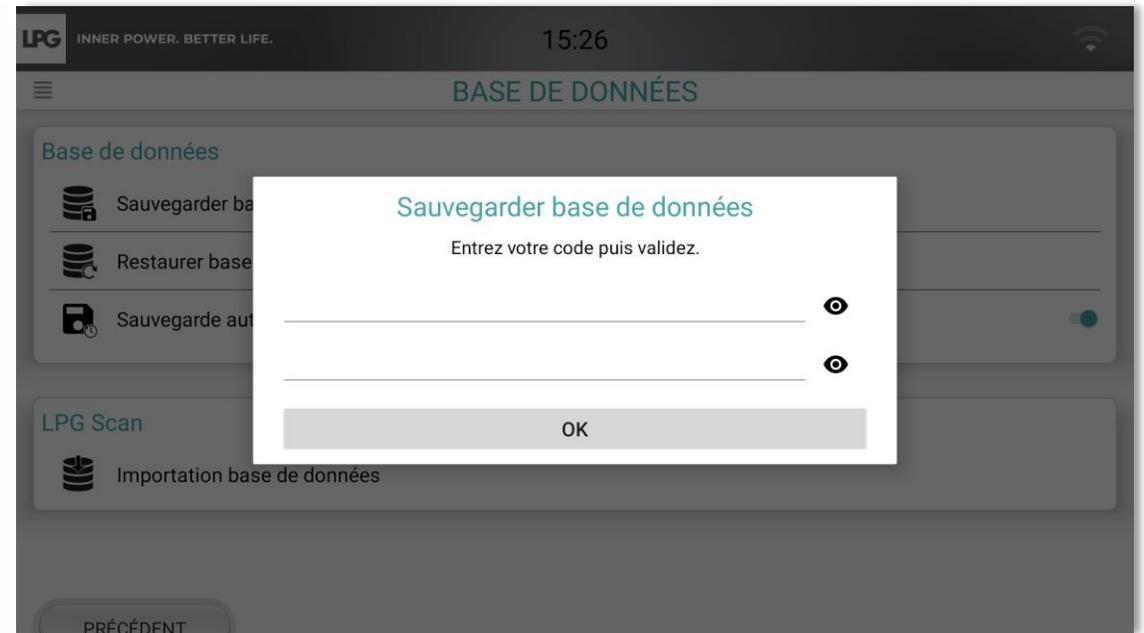

Renseignez un mot de passe qui protégera l'accès à votre base de données. **Veillez le conserver précieusement car il pourra vous être demandé ultérieurement.** Pour des raisons de confidentialité, LPG SYSTEMS n'a pas accès à votre mot de passe et ne peut vous le demander. **Il est sous votre entière responsabilité.**

LPG SYSTEMS ne pourra être tenue responsable d'une perte éventuelle de vos données.





INNER POWER.
BETTER LIFE.

MISES A JOUR

A la fin de la sauvegarde, votre tablette peut afficher ce message.

Cliquez sur **PARAMÈTRES**.

Autorisez l'installation des applications inconnues via le curseur pour pouvoir installer la mise à jour

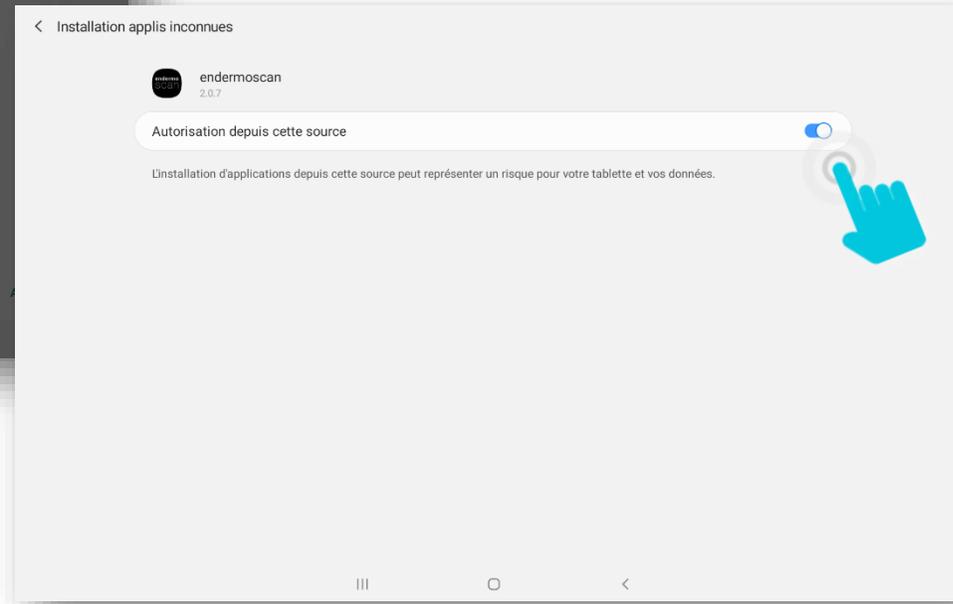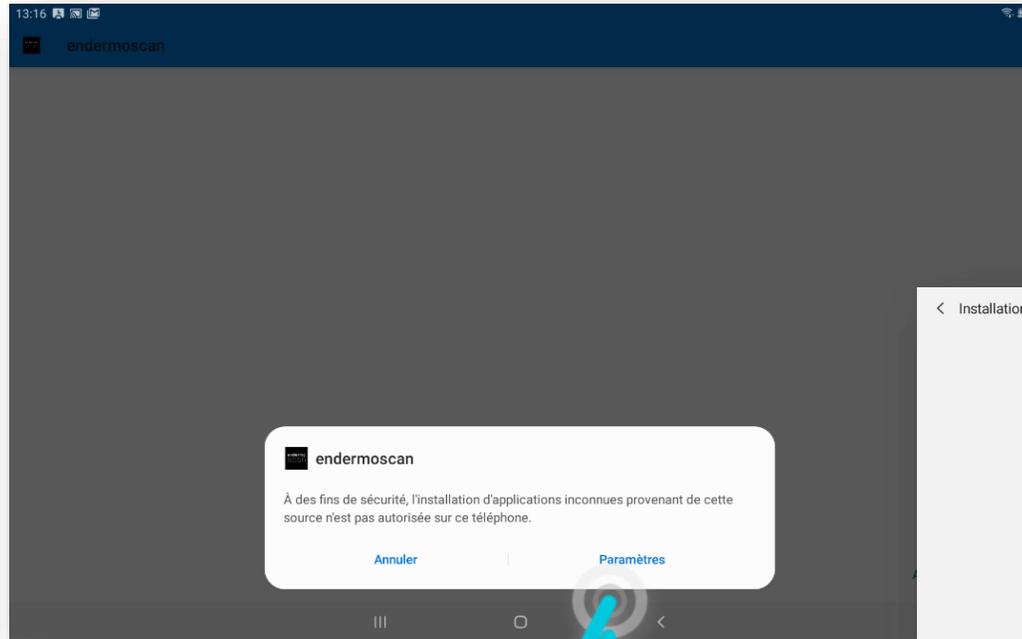

INNER POWER.
BETTER LIFE.



IMPORTATION DES DONNÉES DE VOTRE ANCIENNE TABLETTE LPG® SCAN

LPG


INNER POWER.
BETTER LIFE.

IMPORTATION DES DONNÉES LPG® SCAN

Avant l'import, veuillez au préalable sauvegarder votre base de données.

Pour importer les données de votre ancienne tablette LPG® SCAN (fiches clients, photos), veuillez insérer la carte micro SD utilisée dans l'emplacement adapté sur la nouvelle tablette.

Ensuite, veuillez vous rendre dans le menu **CONFIGURATION** de l'application endermoscan (cliquez sur la barre de menu en haut à gauche). Cliquez sur **PARAMÈTRES** puis **BASE DE DONNÉES** puis **IMPORTATION BASE DE DONNÉES**.

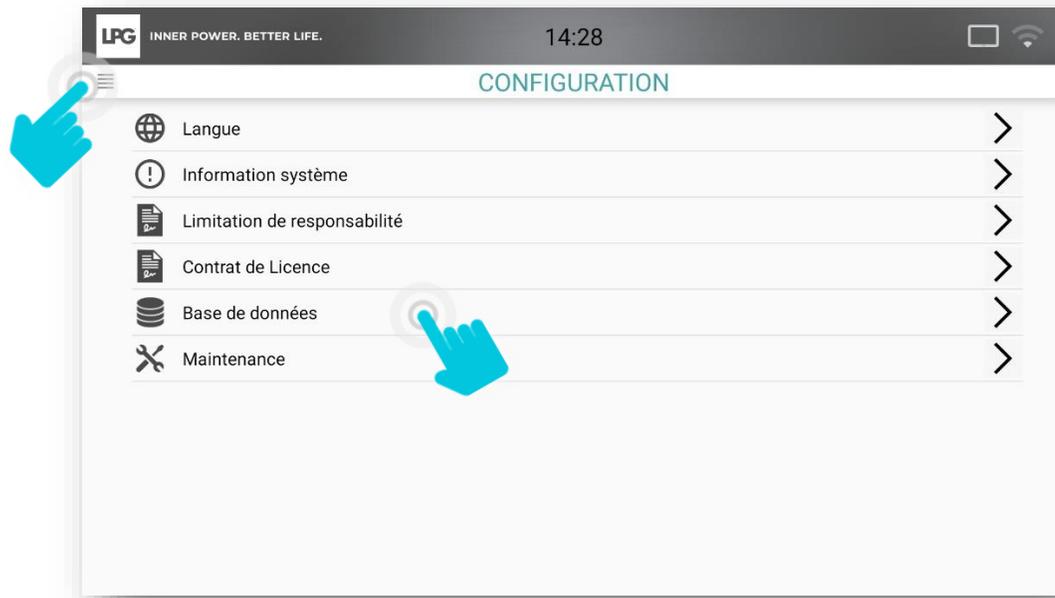



EXPORTATION DES DONNÉES





INNER POWER.
BETTER LIFE.

EXPORTATION DES DONNÉES

Pour accéder aux paramètres de votre tablette, cliquez sur  puis sur **Paramètres**.

La rubrique « **Limitation de responsabilité** » vous sensibilise sur la protection et la sécurité des données clients qui peut être remise en question si vous faites le choix d'exporter ces informations.

Si vous souhaitez exporter ces données, veuillez cocher la fonction « exportation des données clients ».

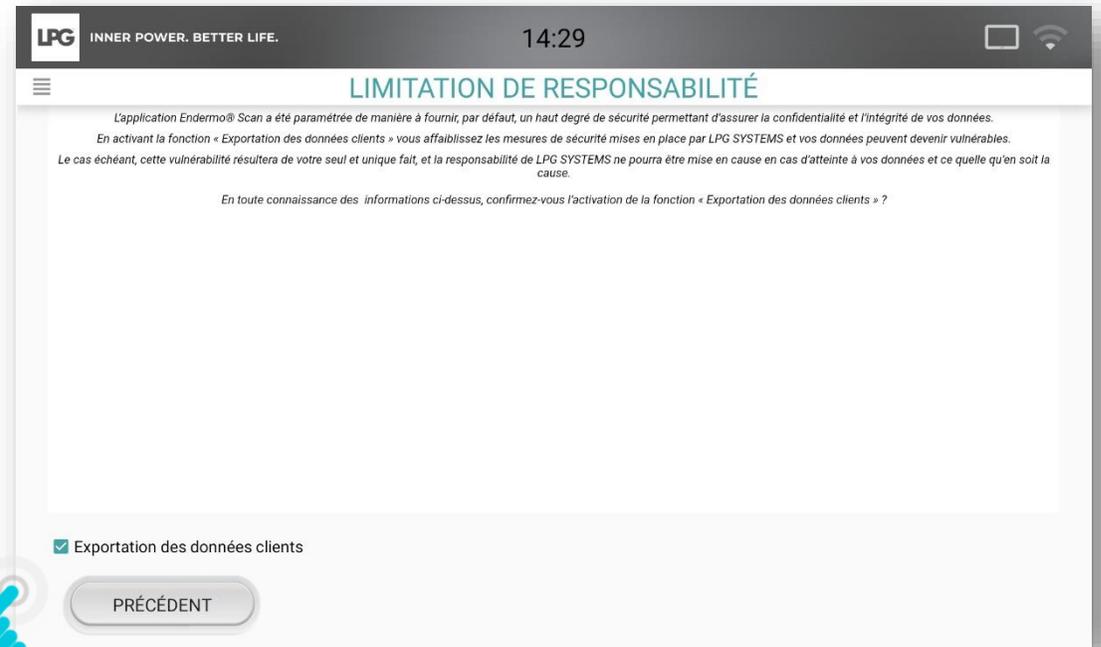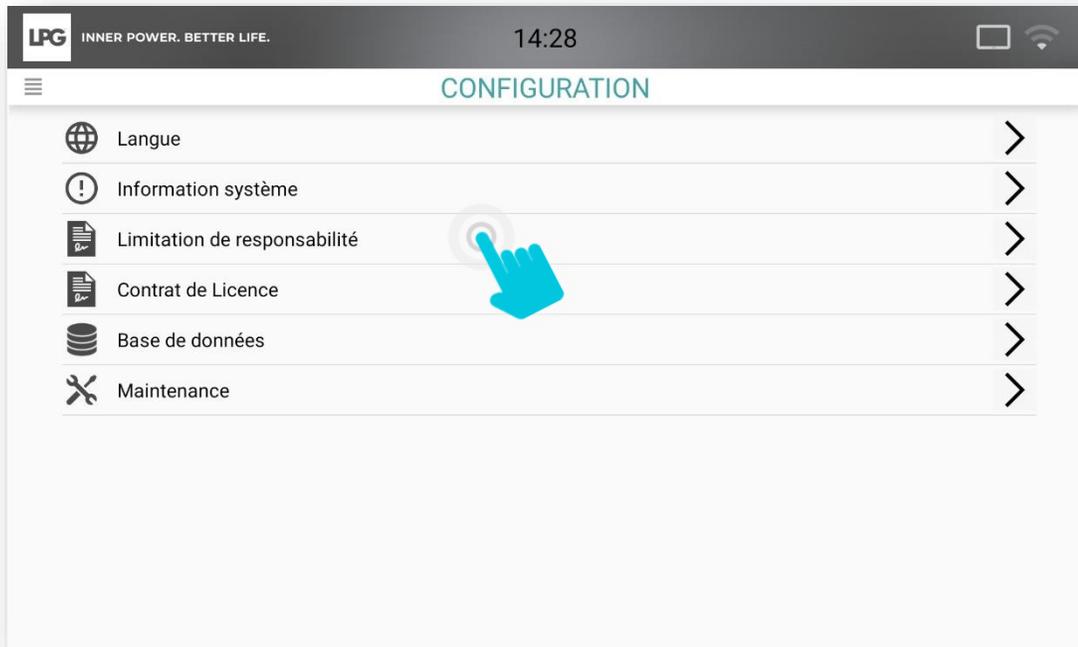

LPG n'est pas responsable de l'utilisation des données en dehors de son application.



**INNER POWER.
BETTER LIFE.**