



Gedeponeerd model

GEBRUIKERSGIDS

mobilift M6[®] *Beauty*

**Gelieve deze gids integraal te lezen
alvorens uw toestel te gebruiken.**

© LPG Systems 2024. LPG, Endermolift en Mobilift M6[®] zijn gedeponeerde merken van LPG.
Reproductie, zelfs gedeeltelijk, is formeel verboden.

GU 1303-NL_ind B1
Uitgave van 01/24



Gefeliciteerd met de aankoop van uw Mobilift M6® *Beauty*, een model dat het resultaat is van vele jaren ervaring op het vlak van het ontwerp en de productie van toestellen voor cutane en subcutane verzorging. De technische perfectie en de betrouwbaarheid waarmee u zo meteen zal kennismaken, maakten van LPG Systems dé leader op dit domein. In deze gebruikersgids vindt u de beschrijving van de werking van het toestel, de instructies voor het periodieke basisonderhoud en enkele veiligheidsvoorschriften.

Wij herinneren u eraan dat uw toestel is bedoeld voor de behandeling van bindweefsel. Enkel een professional mag het toestel gebruiken. Hij moet vooraf Een basisopleiding door LPG Systems of een erkend verdeler, als u buiten Frankrijk woont, hebben gevolgd.

We herinneren er aan dat voor het gebruik van uw toestel een opleiding is vereist. U kan deze specifieke gebruikersopleiding volgen bij LPG Benelux of bij een erkende verdeler indien u niet in Frankrijk woont. Indien u ook maar de minste twijfel hebt over de werking of het onderhoud van uw toestel, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Klantendienst van LPG Benelux:

Tel.: +32 (0)2 332 2585

OPGELET

Om nog beter in te spelen op de noden en verwachtingen van haar klanten, is LPG Systems steeds op zoek naar verbeteringen aan het concept en de kwaliteit van haar producten. Daarom zijn enkele, kleine verschillen mogelijk tussen uw toestel en het toestel dat in deze gids wordt beschreven.

→ INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Een Mobilift M6® *Beauty* toestel
- Een Ergolift-kop
- Twee kamers Ergolift (Ergolift 10 et Ergolift 20)
- Een onderhoudsetui
- Een gebruikersgids
- Een communicatieset

OPGELET

Bewaar de bijsluiter die bij de verpakking zit.

De producent van het toestel behoudt zich het recht voor de technische specificaties van het product te wijzigen zonder voorafgaandelijke berichtgeving. Reproductie, zelfs gedeeltelijk, is strikt verboden.

De illustraties in deze gebruikersgids zijn niet bindend.

→ INHOUDSTAFEL

1.	BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL	4
2.	BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSCOMMANDO'SS	6
3.	GEBRUIKSTIPS	7
4.	ONDERHOUD	10
5.	ERGOLIFT-KOP	16
6.	WERKINGSSTOORNISSEN	19
7.	TECHNISCHE SPECIFICATIES	20
8.	WAARBORG	21
	ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDENE	22
	GARANTIEACTIVERING.....	24


→ MOBILIFT M6® BEAUTY



⚠ OPGELET

Het toestel werkt enkel indien het is aangesloten op het net via de voedingskabel en indien de stroomschakelaar groen oplicht. Bij het opstarten van uw apparaat dient u enkele seconden te wachten voor dat er informatie op uw scherm verschijnt.

→ MOBILIFT M6® BEAUTY (VERVOLG)

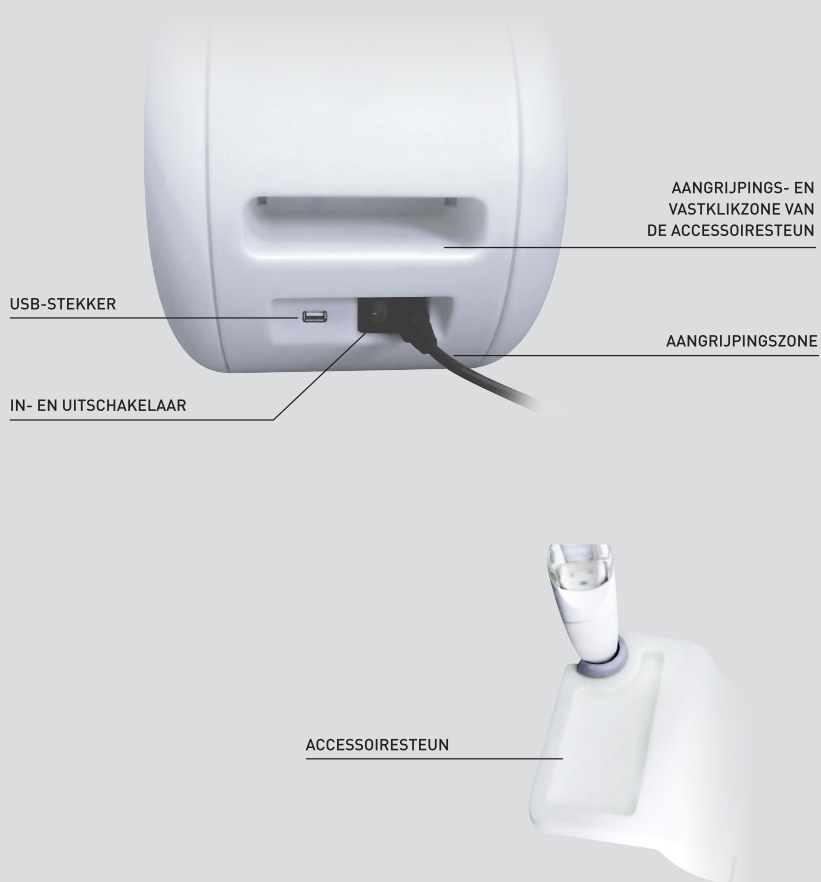

→ BEDIENINGSSCHERM



INFORMATIE OVER DE BEHANDELING

VOORZIJDE TOETSGEDEELTE

INSTELLING BEHANDELINGS-PARAMETERS

→ ERGOLIFT-KOP

ERGOLIFT-KOP

ERGOLIFT-KOP

KLEP



→ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Het spreekt vanzelf dat men steeds de veiligheidsvoorschriften moet nakomen bij het gebruik van elektrische apparaten, inclusief het volgende : alle instructies lezen alvorens het apparaat te gebruiken.

GEVAAR - OM HET RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE MINIMALISEREN :

- Steeds het apparaat uitschakelen en het netsnoer uit de netspanning te trekken alvorens het apparaat te reinigen.

Steeds nagaan of op het signalitisch plaatje of de aangegeven netspanning overeenstemt met uw netspanning.

- Het apparaat dient te worden verbonden met de netspanning door middel van het bijgeleverde netsnoer¹. De netspanning dient te voldoen aan de elektrische normen. Geen enkele netspanningadapter mag worden gebruikt met het toestel.

→ WAARSCHUWING

- OM HET RISICO TOT VERBRANDINGEN, BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF VERWONDINGEN OP EEN PERSOON TE MINIMALISEREN :

- Een apparaat mag nooit zonder bewaking worden gelaten indien het is aangesloten
- Indien het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt of bij het vervangen van stukken steeds het stopcontact uit de netspanning halen.
- Het apparaat niet zonder bewaking laten indien het wordt gebruikt voor of in de nabijheid van kinderen of minder valide personen. Het apparaat nooit gebruiken voor andere doeleinden dan degenen die door LPG Systems zijn voorgeschreven. Geen wisselstukken gebruiken die niet door LPG Systems zijn aanbevolen.
- Het apparaat nooit gebruiken indien de netsnoerkabel of stopcontact beschadigd of vochtigheid vertoont. Neem contact op met de Klantendienst van LPG Systems om herstellingen uit te voeren.
- Verplaats nooit het toestel door aan het netsnoer te trekken.
- Ontrol steeds volledig het netsnoer en hou het netsnoer weg van warmtebronnen.
- Gebruik het toestel nooit indien de verluchtingsgaten verstopt zijn. Hou het apparaat en de verluchtingsgaten stofvrij.
- Nooit het apparaat doen vallen of een vreemd voorwerp in een opening steken. Geen voorwerpen of vloeistoffen opzuigen, dit beschadigt het apparaat.
- Het toestel niet gebruiken op een oneffen of bestofte grond, noch in een vochtige omgeving.
- Het toestel niet gebruiken in de nabijheid van een spuitbus of zuurstof.
- Vooraleer het stopcontact uit te trekken dient u het apparaat uit te schakelen.

OPGELET

¹Europe VIIG-H05VVF3G0,75-C13; Italy I/3/16-H05VVF3G0,75-C13; Switzerland 12G-H05VVF3G0,75-C13; UK BS13/13-H05VVF3G0,75-C13; Japan 498GJ-VCTF3X1,25-C13; USA, Canada, Mexico N5/15-SJT3X18AWG-C13

→ GEBRUIKSTIPS

OPGELET: BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Uw toestel is bedoeld voor gebruik op een gave en gezonde huid. Vóór gebruik van het toestel is het belangrijk om de volgende gebruiksvoorzorgsmaatregelen en de contra-indicaties te lezen en te volgen:

- Nooit de klant en het netsnoer of connectiekabels tegelijkertijd aanraken.
- Gebruik nooit de gemotoriseerde koppen rechtstreek op de hoofdhuid.
- Gebruik uitsluitend de behandelkoppen die met uw apparaat en door LPG worden aangeleverd.
- LPG SYSTEMS verworpt elke verantwoordelijkheid indien het apparaat niet conform wordt gebruikt.
- De gebruiker moet waakzaam zijn over het gevoel van de behandelde persoon.
- De gebruiker moet zich steeds verzekeren dat hij/zij ten opzichte van de te behandelen zone de goede parameters heeft ingesteld (kracht, sequentie, differentieel...)
- Gebruik geen USB- en ethernet-aansluitingen tijdens de behandeling
- Laat het toestel niet buiten de aangeduide omgevingslimieten werken (zie technische specificaties)

→ ELECTROMAGNETISCHE VEREENIGBAARHEID

- De Mobilift M6 Beauty maakt enkel gebruik van RF energie voor zijn interne functies. Bijgevolg zijn de RF stralingen zeer zwak en is de kans op storingen op andere in de nabijheid elektronische apparaten zeer gering.
- De Mobilift M6 Beauty kan in elke instelling worden gebruikt, inclusief in huiselijke omgeving en plaatsen aangesloten op laagspanning.
- De Mobilift M6 Beauty dient te worden geplaatst op een houten, betonnen of keramische vloer. Indien de vloer synthetische materialen inhoudt dient de relatieve vochtigheidsgraad minstens 30 % te zijn.
- De Mobilift M6 Beauty dient aan een netspanning te worden aangesloten waarvan de kwaliteit overeenstemt met de omgeving van een handelspand of ziekenhuis.
- Indien de gebruiker van de Mobilift M6 Beauty eist dat er een continuïteit is in de werking tijdens storingen op het elektrisch netwerk dan is het aanbevolen de toevoer van elektriciteit te voorzien vanaf een storingloze bron of een batterij.
- Draagbare en mobiele RF communicatietoestellen gebruikt u best niet in de directe nabijheid van de Mobilift M6 Beauty, inclusief de bekabeling.
- Interferenties kunnen zich voordoen in de nabijheid van apparaten die volgend label dragen:



→ CONTRA-INDICATIES


- Geen open wonden, ogen, ruimtes tussen holtes, slijmvliezen, geslachtsdelen of tepels verzorgen.
- Verzorg geen klanten met een infectueuze pathologie, een progressieve tumor, flebitis, een wonde of een geïnfecteerde zone.
- Verzorg geen klanten met huidkanker, een tumor of andere kankerletsel. Vraag in geval van een tumorvoorgeschiedenis en een remissie advies aan de behandelende arts.
- Verzorg geen ontstoken of gezwollen zones of littekens na een recente chirurgische ingreep zonder medisch advies en zonder opleiding voor de LPG-techniek in het betreffende domein.
- Verzorg geen personen met stoornissen in de bloedsomloop zonder voorafgaand advies van de behandelende arts.
- Verzorg geen patiënten met een onverklaarbare en aanhoudende pijn zonder medisch advies en zonder opleiding voor de LPG-techniek in het betreffende domein.
- Verzorg geen patiënten na een invasieve medische behandeling zonder advies van de behandelende arts of chirurg en zonder opleiding voor de LPG-techniek in het betreffende domein.
- Deze lijst is niet volledig. Vraag in geval van twijfel systematisch het advies van de behandelende arts.
- Als de patiënt pijn ondervindt, moet u de verzorging onmiddellijk stopzetten en een arts raadplegen.
- Dit toestel mag niet worden gebruikt op huiduitslag, herpes, ontstoken of geïnfecteerde acne of vitiligo.
- Omwille van mogelijke interferenties is het belangrijk dat de professional zich ervan verzekert dat de klant geen persoonlijk medisch instrument zoals een pacemaker draagt. Als dit wel het geval is, moet men navraag doen naar het desbetreffende instrument om te controleren of de eventuele interferenties het gebruik van dat apparaat niet zal verstoren.
- Om het risico op kneuzingen te vermijden, moet u zorgvuldig te werk gaan bij het bepalen van het gevoeligheidsniveau van de klant en mag u geen klanten behandelen die bloedverduunners nemen.
- Voor een meer gedetailleerde lijst met indicaties en contra-indicatis van de ENDERMOLIFT-TECHNIEK kunt u de opleidingshandboeken raadplegen.

OPGELET

Dit toestel bevat programma's die erop gericht zijn de gebruiker te helpen bij het verkrijgen van de verwachte optimale resultaten in functie van elk behandeld geval. Deze resultaten bieden echter geen garantie op slagen. Het welslagen van de verzorging hangt immers af van de morfologie, de fysiologie en het eetgedrag van iedere cliënte.

→ IDENTIFICATIEPLAATJE

Uw toestel kan geïdentificeerd worden dankzij een serienummer dat op het identificatieplaatje staat. Dit duidt ook de spanning van de voeding van het toestel aan. Wanneer u de Klantendienst van LPG Benelux contacteert voor een technisch probleem, gelieve dan het serienummer van uw Mobilift M6 Beauty door te geven.

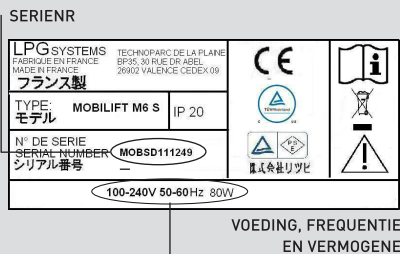

Dit serienummer geeft informatie over het jaar en de maand waarin uw toestel gemaakt werd. De letter geeft het bouwjaar aan:
Z = 2009, A = 2010, B = 2011...
De 2 laatste cijfers geven de productiemaand aan:
01 = januari; 02 = februari; 03 = maart ...Dit

 Dit pictogram geeft aan dat het toestel op de markt werd gebracht na 13 augustus 2006. Conform de richtlijn 2002/96/EG mag het toestel niet met het klassieke huishoudafval worden weggeworpen. Als het toestel is versleten, moet u het naar het geschikte selectief verzamelpunt brengen of het terug naar uw verdeler brengen. Het moet worden afgevoerd door een geschikte selectieve ophaling. Hiermee levert u een bijdrage tot het milieu, en draagt u zo bij tot het behoud van natuurlijke grondstoffen en de bescherming van de volksgezondheid.

 Dit pictogram geeft aan dat bepaalde specifieke waarschuwingen of voorzorgen in verband met dit toestel niet vermeld staan op het etiket.

 Dit pictogram geeft aan dat u «de gebruikshandleiding moet raadplegen».

 Dit pictogram betekent dat het beschermt tegen slechte weersomstandigheden moet worden opgeslagen.

 Dit pictogram geeft de temperatuurlimieten aan.

 Dit pictogram geeft de relatieve vochtigheidslimiet aan.

 Dit symbool betekent "gevaarlijke netstroom".

→ OPGELET

Het signalitisch plaatje van uw apparaat kan evolueren. Degene die is goedgekeurd is hetgene dat bevestigd is op uw apparaat.

→ REINIGING VAN HET TOESTEL

Het is aangeraden uw toestel zo vaak mogelijk schoon te maken, niet alleen om hygiënische en esthetische redenen maar ook omdat de reiniging ertoe bijdraagt het toestel in goede staat te houden en zijn levensduur te verlengen.

Met behulp van een vochtige doek reinigt u de volgende delen:

- Alle deksels aan de buitenkant.
- De slangen.
- De voedingskabel.

Met een doek die u in een beetje alcoholvrij huishoudproduct gedompeld hebt, reinigt u de volgende delen:

- Controlescherm en klavier.


OPGELET

Bijtende producten zoals aceton, trichloorethyleen of alcohol van 90 ° zijn verboden.


→ VERVANGING VAN HET FILTERPATROON

Uw apparaat beschikt over een filterpatroon die ook instaat voor de efficiëntie en de levensduur van uw apparaat.

U dient deze filter te vervangen van zodra volgend bericht op het scherm tevoorschijn komt :

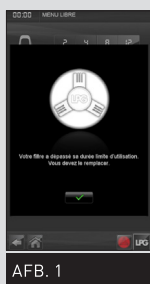

WAARSCHUWINGSBERICHT

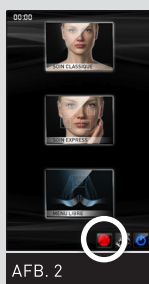


ICOON DAT AANGEeft DAT UW FILTER DIENT VERVANGEN TE WORDEN

U dient dan naar het menu « filters vervangen » te gaan en de volgende stappen te volgen :

Kies het menu onderhoud door op volgende afbeelding te drukken (Afb. 3).


Kies het menu "filter" door op volgende toets te drukken (Afb. 4). Het scherm "filter vervangen" geeft u aan welke filter u dient te vervangen : (Afb. 5).

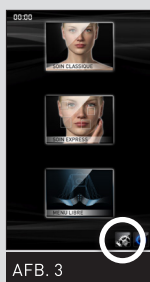

AFB. 3



AFB. 4

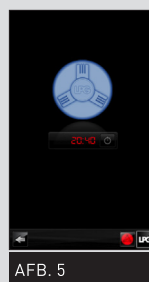

AFB. 5

→ VERVANGEN VAN PATRONEN (VERVOLG)

Vervang het filterpatroon door een nieuw exemplaar. (Afb.6)

Wanneer u de filters heeft vervangen dient u de teller te initialiseren door op volgende toets te drukken (Afb. 7).



AFB. 6




AFB. 7

→ INSTRUCTIE OM DE SLANG AAN TE SLUITEN

Om de slang aan te sluiten, moet u als volgt te werk gaan:

- Om de koppen op de leiding aan te sluiten moet deze zijn vergrendeld (Afb.1).
- U moet ze vervolgens zo plaatsen dat de aansluiting in de behuizing past (Afb.2).
- Vervolgens drukt u deze aan tot u een «klik» hoort.

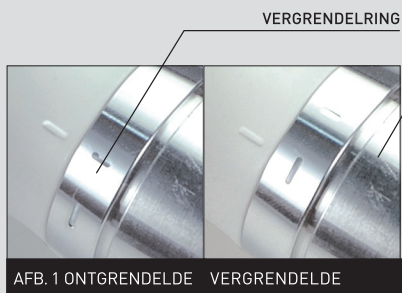

AFB. 1 ONTGRENDELDE VERGRENDELDE

AFSLUITRING DECORRING

PEN VAN DE SLANG



AFB. 2


⚠ OPGELET

Gebruik uw toestel nooit zonder filterpatroon.

Plaats het toestel buiten spanning vooraleer u het filterpatroon vervangt.

→ INSTRUCTIE OM DE SLANG LOS TE KOPPELEN


- **Om de slang los te koppelen**, moet u omgekeerd te werk gaan: Ontgrendel de aansluiting door te draaien aan de afsluitering (afb. 3) Til de afsluitering op en trek de slang er voorzichtig uit door te trekken aan de witte ring (afb. 4).

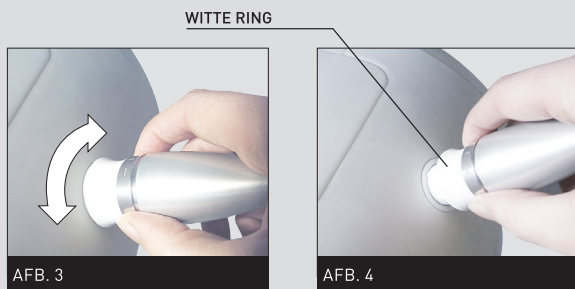

→ TRANSPORT/VERPLAATSING

Bij het transport van uw Mobilift M6® Beauty is het aangeraden:

- Om de accessoiresteun te verwijderen (afb. 1)
- Om hem te dragen aan de daarvoor voorziene handgrepen (afb. 2).

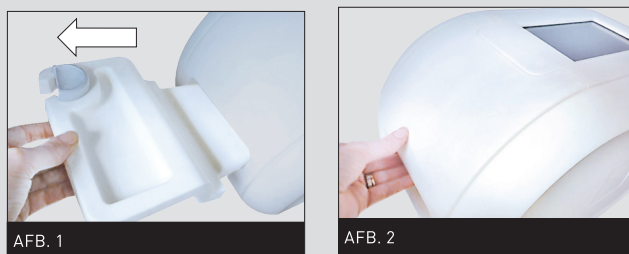

⚠ OPGELET

Draag het toestel nooit aan de accessoiresteun

→ VERVANGEN VAN DE NETSNOER

Indien de voedingskabels beschadigd zijn dient u de klantendienst van LPG BENELUX te verwittigen en deze te vervangen.

Klantendienst LPG BENELUX:

Humaniteitslaan 235
1620 Drogenbos
België


Tel.: + 32 (0)2 332 25 85


→ ONDERHOUDSFICHE

- Vervanging van de kleppen: als de kleppen niet langer een correcte behandeling van de huid mogelijk maken, moeten ze worden vervangen. Ze moeten ongeveer om de 20 behandelingen worden vervangen.
- Voor persoonlijk gebruik van de patiënt wordt er bij de verkoop een Kit Endermolift aangeboden.


DATUM	AANTAL UREN	UITGEVOERDE OPERATIES

→ BESCHRIJVING VAN DE ERGOLIFT-KOP

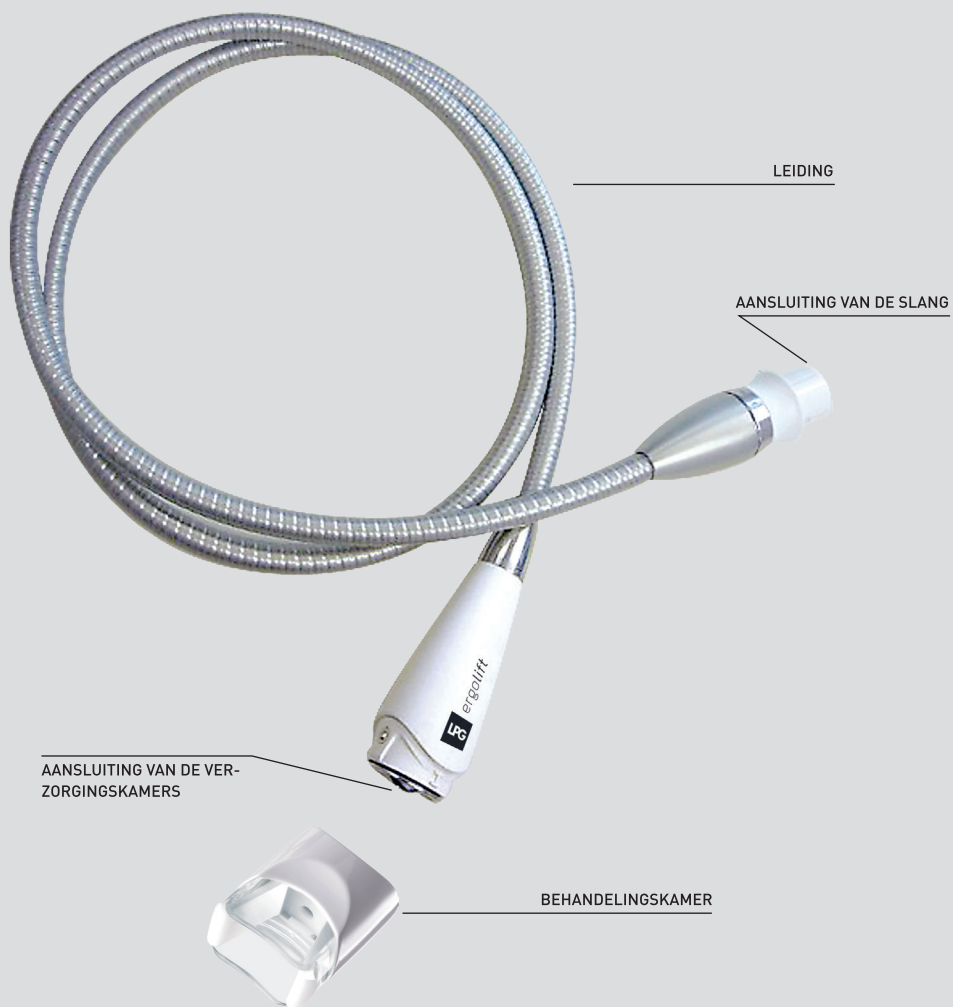

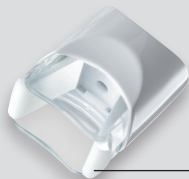
→ **BESCHRIJVING VAN DE BEHANDELINGSKAMERS**

Ergolift 20
Behandelingskamer
Ergolift 20 met
afneembare klep

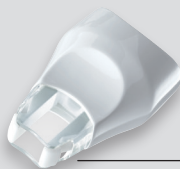

Ergolift 10
Behandelingskamer
Ergolift 10 met
afneembare klep

Enkel de behandelingskamers Ergolift 20 en Ergolift 10 mogen verbonden zijn met de Ergolift-kop. De aansluiting/loskoppeling gebeurt door een simpele duw- of trekbeweging.

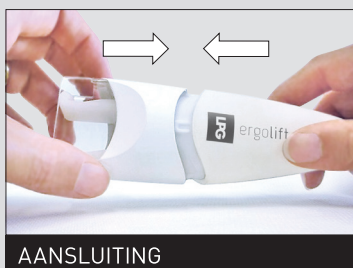

→ REINIGEN VAN DE ERGOLIFT-KOP EN DE BEHANDELINGSKAMERS

Om hygiënische redenen moeten deze behandelingskoppen na elk gebruik worden gereinigd met behulp van schoonmaakdoekjes die in een antiseptische, bacteriëndodende en schimmeldodende oplossing zijn gedrenkt*.
Een bijzondere aandacht moet in acht worden genomen over de netheid van de stukken die rechtstreek contact hebben met de klant.


Reinig de klep en de behandelingskamer altijd voor gebruik.

Na elk gebruik:

1. Koppel de behandelingskamer los van de Ergolift-kop **(Afb.1)**
2. Klepjes uithalen met gebruik van het hulpstukje **(Afb.2)**
3. De behandelruimte, klepjes en hulpstukje reinigen met hieronder beschreven doekjes gedurende minstens 1 minuut. **(Afb.3)**
4. Klepjes opnieuw inbrengen met het hulpstukje **(Afb.4)**



→ REINIGEN VAN DE ERGOLIFT-KOP EN DE BEHANDELINGSKAMERS (VERVOLG)

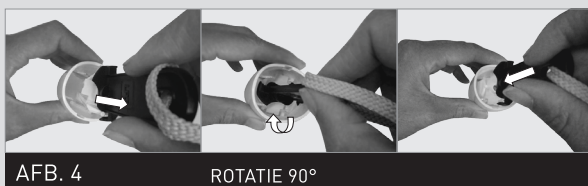

➤ OPGELET

Het is verboden om bijtende middelen zoals aceton, trichloorethyleen of alcohol van 90°, schuursponzen, ultrasonore trillingen of een UV-lamp te gebruiken. Alle gereinigde en/of gedesinfecteerde koppen moeten in de opberglade worden gelegd om verwarring te vermijden.

→ EEN KLEIN PROBLEEM! WAT MOET U DOEN?

Indien uw toestel niet normaal functioneert, is het aan te raden - voordat u een beroep doet op de Klantendienst van LPG Benelux, de volgende gegevens te controleren:

- Is het toestel aangesloten op het elektriciteitsnet?
- Krijgt het stopcontact waarop het toestel is aangesloten stroom?
- Staat de schakelaar op 'aan'?
- Zijn de zekeringen van het toestel in werking?
- De slang is goed aangesloten?
- Zijn de slangen niet verstopt?
- Zijn de behandelingskamer en de kleppen correct gemonteerd?

Als u al deze controles hebt uitgevoerd en het toestel toch niet normaal werkt, neem dan contact op met de Klantendienst van LPG Benelux of met de dichtstbijzijnde erkende verdeler. U vermeldt het model van uw toestel, het serienummer en het aantal werkingsuren (zie krijgen tot de uurtellers).

Klantendienst LPG BENELUX :

Humaniteitslaan 235
1620 Drogenbos
België

Tel. : + 32 (0)2 332 25 85

→ ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Afmetingen :L x l x h : 65 x 26 x 31 cm
Netto gewicht : 10,5 kg
Maximum toegelaten tegendruk:35 kPa (350 mbar)
Afkoeling : Door mechanische ventilatie via pomp
Veiligheidsindex :IP 20
Soort elektrische bescherming : 1
Werkingstemperatuur: +10°C tot +30°C
Température de stockage :-20°C tot +70°C
Elektrische kenmerken : 100-240V 50/60Hz 80VA

Omgevingskenmerken :

Omgevingstemperatuur : + 10 tot + 30 °C in normale werking.

Relatieve omgevingsvochtigheid:..... 30 tot 75 % zonder condensatie.

Atmosferische druk: geen noemenswaardige invloed van de omgevingsomstandigheden in werking.

Max. hoogte:2500 m

Toestel uitgerust met gepatenteerde behandelingskoppen en een aangebracht deel van het type BF.

Toestel bestemd voor voortdurende werking.

Mobilift M6 Beauty is voorzien van de  markering conform de normen en toepasselijke richtlijnen in het kader van de Machinerichtlijn 2004/108/EEG en de Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EEG.

→ ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

U hebt zojuist een apparaat gekocht dat wordt verdeeld door LPG Systems of door een erkende distributeur van LPG Systems. Het is de verantwoordelijkheid van de koper/gebruiker om zich bij de plaatselijke autoriteiten te informeren over de voorwaarden en de vakbekwaamheden die vereist zijn om dit apparaat te gebruiken.

Door de aanschaf van dit apparaat accepteert de koper/professionele gebruiker van rechtswege deze algemene garantievoorwaarden. Indien het apparaat werd verkocht door een door LPG Systems erkende distributeur, zal de koper/gebruiker zich kunnen beroepen op de algemene garantievoorwaarden van de leverancier. Deze voorwaarden mogen onder geen enkel beding de verplichtingen krachtens de onderhavige garantie vergroten. Deze garantie is slechts van kracht en geldig als de garantiebon naar behoren wordt ingevuld en binnen de 15 dagen na levering van het apparaat naar LPG Systems werd teruggestuurd, ongeacht in welk land. Onvolledig ingevulde garantiebonnen zullen worden geweigerd.

Dit apparaat is tegen elke constructiefout of materiaalfout gegarandeerd. De garantieduur is gelijk aan de kortste van de volgende twee termijnen: een (1) jaar OF tweeduizend (2 000) gebruikersuren te rekenen vanaf de factuurdatum. Tijdens deze

periode verplichten wij ons er gratis toe om elk door ons als defect erkend onderdeel zo snel mogelijk te vervangen of repareren. De koper kan echter niet de vervanging van het volledige apparaat eisen. Verplaatsings- en verblijfskosten van de monteurs, alsook de eventuele transportkosten heen en terug van het apparaat en/of van de reserveonderdelen in het servicecentrum na verkoop zijn niet inbegrepen in deze garantie.

Vervangingen en reparaties die door de garantie worden gedekt en die mogelijk al dan niet een immobilisatie van het apparaat veroorzaken, zullen onder geen enkele voorwaarde de duur van de garantieperiode verlengen. De vervangen onderdelen worden eigendom van LPG Systems of de erkende distributeur. Er zal geen schadevergoeding worden toegekend voor het niet kunnen beschikken over het apparaat tijdens reparatie. De koper/gebruiker verplicht zich ertoe om ons de nodige tijd en middelen te geven om over te gaan tot het repareren en leveren van reserveonderdelen. Indien hij zich hier niet aan houdt, zullen wij niet langer verplicht zijn hem garantie te verstrekken. De rechtbanken binnen het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van LPG Systems zijn als enige bevoegd in geval van geschillen en dit in weerwil van elke clause van toewijzing van een andere jurisdictie vermeld op elk document dat het tegendeel bepaalt.

→ ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN (VERVOLG)

De garantie is bovendien uitgesloten indien:

- Het apparaat wordt beschadigd bij het transport. Het apparaat en/of de reserveonderdelen worden vervoerd voor risico van de ontvanger. Deze dient te controleren of het apparaat in goede staat verkeert alvorens de levering in ontvangst te nemen en zonodig zijn klachten mee te delen aan de vervoerder in de vorm en binnen de termijnen die gelden in het land van levering.
- De regels voor installatie en gebruik niet worden toegepast en/of bij gebrek aan onderhoud van het apparaat en/of wanneer de filterpatronen niet worden gereinigd en/of het apparaat op een defecte elektrische lijn wordt aangesloten of indien er geen aansluiting op de aarding wordt gebruikt of indien er een andere spanning wordt gebruikt dan deze die wordt aangegeven op het apparaat.
- Als een apparaat binnen de garantietermijn wordt doorverkocht, gaat de garantie voor de overblijvende duur over op de nieuwe eigenaar op voorwaarde:
 - i) dat hem de originele factuur wordt overgedragen;
 - ii) dat de oorspronkelijke verkoper op de hoogte wordt gesteld van de overdracht.
- Het aanbrengen van wijzigingen aan het apparaat, de montage van accessoires of de demontage van het apparaat.
- Er gebruik wordt gemaakt van en/of er werkzaamheden worden uitgevoerd aan het apparaat die niet zijn vermeld in deze gebruikershandleiding van LPG Systems door de koper/gebruiker en/of een niet door LPG Systems erkende derde partij.
- Er ongeschikte verbruiksartikelen, reserveonderdelen, componenten of niet door LPG Systems geleverde onderdelen worden gebruikt.
- Het apparaat verstopt raakt door het aanzuigen van vreemde voorwerpen.
- Er sprake is van normale slijtage van een of meerdere onderdelen van het apparaat die het resultaat is van normaal gebruik.
- Het apparaat wordt beschadigd door vallen, stoten, blikseminslag, overmacht, waterschade of natuurrampen.

→ UITSLUITING VAN GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Indien de algemene garantievoorwaarden tijdens de garantieperiode en na de vervaldatum niet worden nageleefd, is dit mogelijk een reden voor vrijstelling van de aansprakelijkheid van LPG Systems in geval van schade die te wijten is aan de geleverde producten.

LPG Systems kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade, ongeacht de aard, en voor geleden verliezen, ongeacht de aard (financieel, commercieel, imago, enz.), die met name het directe of indirecte gevolg zouden zijn van de onjuiste werking en/of een niet-conform gebruik van het apparaat.

In ieder geval, indien wordt vastgesteld dat LPG Systems wegens het verkochte apparaat en/of de geleverde prestaties verantwoordelijkheid draagt, kan het maximumbedrag van de schadevergoeding en de interesten waartoe zij zou kunnen worden veroordeeld niet hoger zijn dan de prijs die de koper heeft betaald voor het apparaat en/of de geleverde prestatie.

→ ACTIVERING VAN DE GARANTIE

U kunt uw garantie online invoegen via :

<http://warranty.lpgsystems.com>

→ INVULLEN EN TERUGSTUREN NAAR LPG SYSTEMS



Naam:

Adres:

Land:

Tel.:

Email:

Type vestiging:

Beroep:

Type toestel **Mobilift M6 Beauty**

Serienummer:

Datum:

De persoonlijke gegevens op dit formulier zijn bestemd voor het bedrijf LPG Systems, dat verantwoordelijk is voor de verwerking, om te kunnen zorgen voor het klantenbeheer en meer bepaald voor een dienst-na-verkoop en de garantie. De aangifte van de informatie met een sterretje is noodzakelijk om dit formulier in aanmerking te kunnen nemen. Conform de aangepaste Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheid, ook wel de wet op «Informatica en Vrijheden» genaamd, hebt u het recht op toegang, wijziging en schrapping van uw persoonlijke gegevens. U kunt van dit recht gebruikmaken door LPG Systems op het volgende adres te contacteren: LPG SYSTEMS – 30, rue Dr Abel - Technoparc de la Plaine – 26000 VALENCE (FRANKRIJK).

OPGELET

Af te scheuren luik om garantie te verkrijgen. Verplicht binnen de 15 dagen na de ingebruikneming terug te sturen naar:

LPG SYSTEMS S.A. - Technoparc de la Plaine
30, rue du docteur Abel - CS 90035 - 26902 VALENCE Cedex 9 - France



MAATSCHAPPELIJKE ZETEL LPG SYSTEMS S.A.S

TECHNOPARC DE LA PLAINE
30, RUE DU DR. ABEL - CS 90035 - 26902 VALENCE CEDEX 09 - FRANKRIJK
TEL.: +33 (0)4 75 78 69 00 - FAX: +33 (0)4 75 42 80 85

INTERNATIONAL/MARKETING

ECOLUCIOLES – BAT A
955 RTE DES LUCIOLES - BP 243 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS - FRANKRIJK
TEL.: +33 (0)4 92 38 39 00 - FAX: +33 (0)4 92 96 09 65

