



GUIDE D'UTILISATION

Pack Endermologie® visage

Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce guide avant d'utiliser votre appareil.

© LPG Systems 2024. LPG, Endermolift et Mobilift® M6 sont des marques exploitées et/ou enregistrées et/ou déposées par LPG Systems. Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite.

Vous venez d'acquérir un pack Endermologie® visage. La tête Ergolift et ses chambres de soin contenues dans ce pack sont prévues pour être connectées aux appareils LPG, Cellu M6 Integral et Cellu M6 Endermolab. Ce document contient la description du fonctionnement, et les instructions pour l'entretien de base à effectuer périodiquement sur votre tête Ergolift.

Nous vous rappelons que votre appareil est destiné au soin du tissu conjonctif. Il doit être utilisé uniquement par un professionnel qui aura préalablement assisté à la formation constructeur dispensée par LPG Systems ou un distributeur agréé si vous résidez hors de France.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous reporter au guide d'utilisation de votre appareil. Dans le moindre doute concernant son fonctionnement ou son entretien, n'hésitez pas à contacter le Service Client LPG Systems :


Service Client LPG Systems

N° Azur 0810 786 900

(Prix d'appel local, France uniquement)

Ou le +33 (0)4 75 78 69 89


→ DESCRIPTION DE LA TÊTE ERGOLIFT

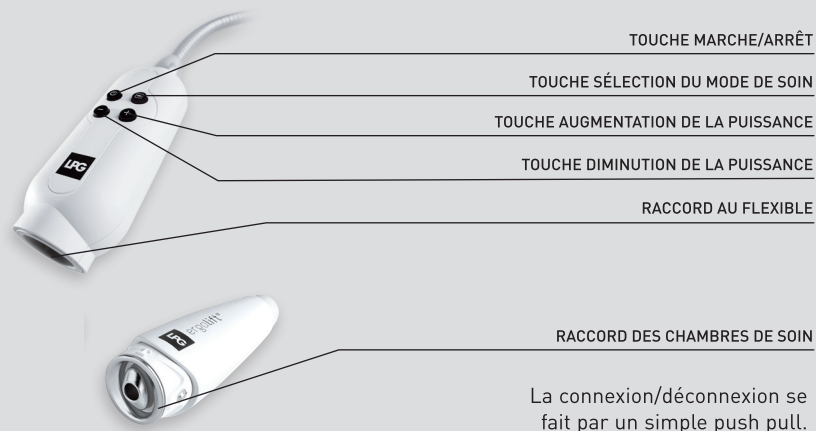

→ DESCRIPTION DES CHAMBRES DE SOIN




Clapet Lift 20
Chambre de soin
Lift 20 à clapet
démontable

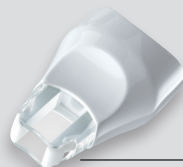

Clapet Lift 10
Chambre de soin
Lift 10 à clapet
démontable

Seules les chambres de soin Lift 20 et Lift 10 peuvent être connectées à la tête Ergolift. La connexion/déconnexion se fait par un simple push pull.

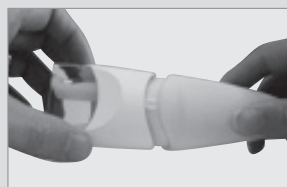

→ NETTOYAGE DE LA TÊTE ERGOLIFT ET DES CHAMBRES DE SOIN



ENTRETIEN

Pour des raisons d'hygiène, le nettoyage des têtes de soin est à effectuer avant et après chaque utilisation, têtes déconnectées de l'appareil, à l'aide de lingettes imprégnées d'une solution bactéricide et fongicide. Une attention particulière doit être portée sur la propreté des parties en contact avec le client.

NETTOYAGE DE LA TÊTE ERGOLIFT ET DES CHAMBRES DE SOIN

Avant chaque utilisation, nettoyer le clapet et la chambre de soin. Après chaque utilisation :

1. Déconnecter la chambre de soin de l'adaptateur
 2. Sortir les clapets
 3. Nettoyer méticuleusement la chambre de soin et le clapet pendant au moins 1 minute avec des lingettes LPG imprégnées d'une solution bactéricide et fongicide.
- A usage personnel du client, un Kit Endermologie visage est proposé à la vente, valable pour un programme d'environ 20 séances.

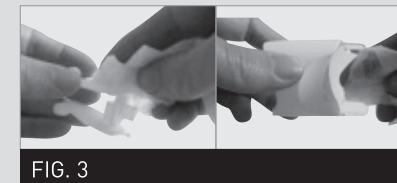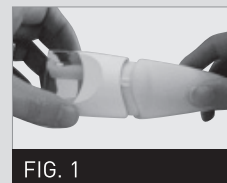

DESINFECTION DES CHAMBRES DE SOIN

La tête Ergolift est prévue pour être utilisée directement sur la peau. Dans le cadre d'application spécifique, la désinfection s'impose après chaque utilisation :

1. Appliquer la procédure de nettoyage décrite ci-dessus
2. Tremper le clapet et la chambre de soin dans une solution désinfectante pendant 12 minutes à 20°C en suivant les recommandations indiquées sur l'emballage du produit désinfectant.
3. Rincer soigneusement le clapet et la chambre de soin à l'eau stérile ou potable pendant au moins 1 minute en utilisant un grand volume d'eau (environ 8 litres d'eau). Répéter l'opération 2 fois, pour un total de 3 rinçages.
4. Sécher la chambre de soin et le clapet
5. Déposer la chambre de soin et le clapet dans le tiroir de rangement préalablement nettoyé à l'aide de lingettes LPG.

⚠ ATTENTION

Proscrire les produits agressifs tels que l'acétone, le trichloroéthylène ou l'alcool à 90°, les éponges abrasives ainsi que l'utilisation d'ultra sons ou de lampe à UV. Toutes têtes nettoyées et/ou désinfectées devraient être déposées dans le tiroir de rangement pour éviter toutes confusions. Utiliser une solution désinfectante contenant le principe actif ortho-phthalaldéhyde (OPA) Avant d'utiliser la solution désinfectante, il est recommandé de lire et suivre les recommandations, contre-indications et mise en garde liés à ce produit. Reportez vous à la notice d'utilisation de cette solution.



SIÈGE SOCIAL LPG SYSTEMS S.A.S

TECHNOPARC DE LA PLAINE

30, RUE DU DR. ABEL - CS 900 35 - 26902 VALENCE CEDEX 09 - FRANCE

TEL.: +33 (0)4 75 78 69 00 - FAX: +33 (0)4 75 42 80 85

INTERNATIONAL/MARKETING

ECOLUCIOLES – BAT A

955 RTE DES LUCIOLES - BP 243 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS - FRANCE

TEL.: +33 (0)4 92 38 39 00 - FAX: +33 (0)4 92 96 09 65

