



ANWENDUNGSHANDBUCH

Pack Endermolift

**Bitte lesen Sie das ganze Handbuch aufmerksam durch,
bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen.**

© LPG Systems 2024. LPG, Endermolift und Mobilift® M6 sind eingetragene Marken von LPG.
Jede auch teilweise Reproduktion ist strengsten untersagt.



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Endermolift Pack. Der Behandlungskopf Ergolift und seine Behandlungskammern in dieser Packung sind dafür bestimmt an die Geräte Cellu M6 Integral oder Cellu M6 Endermolab angeschlossen zu werden. Dieses Dokument beinhaltet die Beschreibung der Funktionsweise sowie Pflegeanweisung für die regelmässige Grundpflege Ihrer Ergolifts.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihr Gerät speziell für die Behandlung des Bindegewebes bestimmt ist. Es ist ausschließlich durch eine Fachperson zu bedienen, welche zuvor an der von LPG Systems oder, falls Sie außerhalb Frankreichs wohnen, von einer autorisierten Vertriebsfirma erteilten Hersteller-Schulung teilgenommen hat.

Für alle weiteren Informationen schauen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes nach. Beim geringsten Zweifel hinsichtlich der Funktionsweise oder der Wartung Ihres Geräts wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Ihrem Händler.


→ BESCHREIBUNG DES ERGOLIFT-AUFSATZES



→ BESCHREIBUNG DER BEHANDLUNGSKAMMERN




Ventil TML 20
Behandlungskammer
TML 20 mit
abnehmbarem Ventil

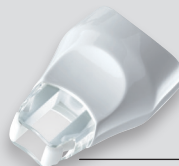

Ventil TML 10
Behandlungskammer
TML 10 mit
abnehmbarem Ventil

Nur die Behandlungskammern TML20 und TML10 können an den Ergolift-Aufsatz angeschlossen werden. Der Anschluss bzw. das Trennen der Verbindung erfolgen einfach durch Einstecken/Abziehen.

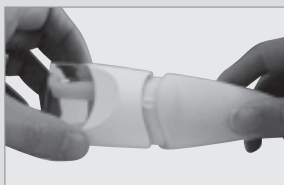

→ REINIGUNG DES ERGOLIFT-AUFSATZES UND DER BEHANDLUNGSKAMMERN

WARTUNG

Aus Hygienegründen sollte die Reinigung der Behandlungsköpfe vor und nach jeder Anwendung mit vom Gerät getrennten Köpfen erfolgen, und zwar mit einem mit einer antiseptischen, bakteriziden und fungiziden Lösung getränkten Tuch.

Dabei sollte besonders auf die Partien mit Körperkontakt geachtet werden.

REINIGUNG DES BEHANDLUNGSKOPFES ERGOLIFT UND DER BEHANDLUNGSKAMMER

Ventil und Behandlungskammer müssen vor jedem Gebrauch gereinigt werden. Nach jeder Verwendung:

1. Behandlungskammer vom Adapter trennen
2. Ventile herausnehmen
3. Behandlungskammer und Ventil mindestens 1 Minute lang sorgfältig reinigen. Dazu LPG-Feuchttücher verwenden, die mit einem Bakterizid und einem Fungizid getränkt sind. Zum persönlichen Gebrauch der behandelten Personen ist ein Endermolift-Set für ein Programm mit ca. 20 Sitzungen erhältlich.



ABB. 1



ABB. 2

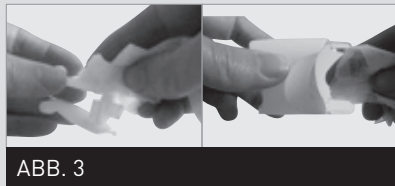


ABB. 3

DESINFEKTION DER BEHANDLUNGSKAMMERN

Der Ergolift-Aufsatz ist zur Verwendung direkt auf der Haut vorgesehen. Bei speziellen Anwendungen ist eine Desinfektion nach jedem Einsatz erforderlich:

1. Es gilt das oben beschriebene Reinigungsverfahren.
Ventil und Behandlungskammer 12 Minuten lang in eine Desinfektionslösung mit einer Temperatur von 20°C tauchen und die Empfehlungen auf der Verpackung der Desinfektionslösung einhalten.
2. Ventil und Behandlungskammer mindestens 1 Minute lang sorgfältig mit sterilem Wasser oder Trinkwasser abwaschen und dazu eine große Wassermenge (ca. 8 Liter) verwenden. Diesen Vorgang 2 Mal wiederholen, den Spülvorgang insgesamt 3 Mal.
3. Behandlungskammer und Ventil trocknen.
4. Behandlungskammer und Ventil im zuvor mit LPG-Feuchttüchern gereinigten Schubkasten ablegen.

⚠ ACHTUNG

Alle gereinigten und/oder desinfizierten Aufsätze müssen im entsprechenden Schubkasten abgelegt werden, um Verwechslungen zu vermeiden. Es muss eine Desinfektionslösung mit dem Wirkstoff Ortho-Phthalaldehyd (OPA) verwendet werden. Es wird empfohlen, vor Gebrauch der Desinfektionslösung die Empfehlungen, Gegenanzeigen und Sicherheitshinweise für das Produkt zu lesen. Siehe Gebrauchsanweisung der Desinfektionslösung. Nutzen Sie eine Desinfektionslösung auf Basis Aktiv Ortho-phthalaldehyd (OPA). Bevor Sie die Desinfektionslösung ist es Empfohlen den Anweisungen und Kontraindikationen auf der Verpackung oder dem Beipackzettel zu lesen. Bewahren Sie den Beipackzettel der Lösung auf.



HEADQUARTERS LPG SYSTEMS S.A.S

TECHNOPARC DE LA PLAINE
30, RUE DU DR. ABEL - CS 900 35 - 26902 VALENCE CEDEX 09 - FRANCE
TEL.: +33 (0)4 75 78 69 00 - FAX: +33 (0)4 75 42 80 85

INTERNATIONAL/MARKETING

ECOLUCIOLES – BAT A
955 RTE DES LUCIOLES - BP 243 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS - FRANCE
TEL.: +33 (0)4 92 38 39 00 - FAX: +33 (0)4 92 96 09 65

